


Maxi Twin


Forflytning fra stol

1

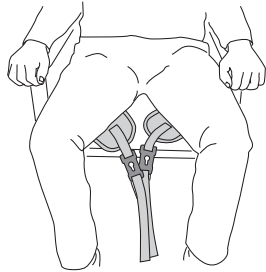

Plasser seilet rundt pasienten slik at det dekker korsryggen og hodestøtten dekker bakhodet. Trekk i hver bendel og plasser den under hvert lår.


2

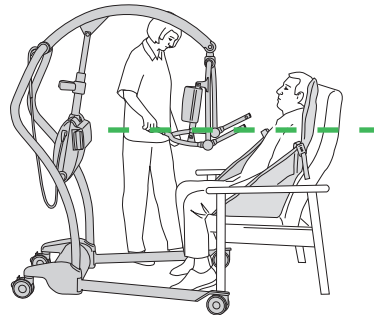


Plasser heisen foran pasienten. Åpne om nødvendig understellsbena. Juster løftebøylen til skulderhøyde.

3

Løkkeseil

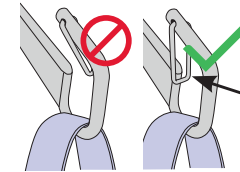


Seil med klemmer

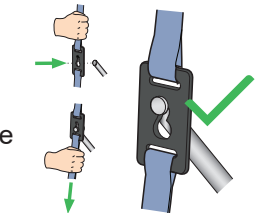

Låsehake lukket

Fest seilets festeklemmer eller løkker til de riktige punktene på løftebøylen.

4

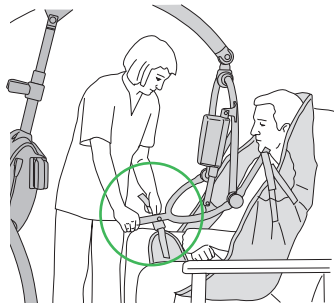

For heiser med DPS-løftebøyle Trykk ned posisjoneringshåndtaket og fest klemmene på benremmene.

5



Risiko for å falle



Risiko for å bli sittende fast

Pass på at bremsen ikke er innkoblet. Pass på at seilet er festet før du løfter pasienten.




Bruk håndkontrollen til å heve pasienten. Juster posisjoneringshåndtaket til pasienten er tilbakelemt i seilet.

Fortsett med trinnene på neste side

Forflytning fra stol (forts.)

6

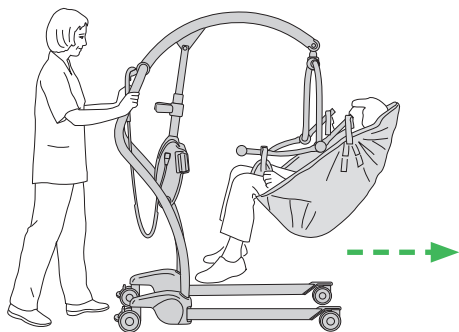


Lukk understellsbena og flytt pasienten.

7



Senk pasienten og juster posisjoneringshåndtaket så vedkommende befinner seg i en god stilling.


8

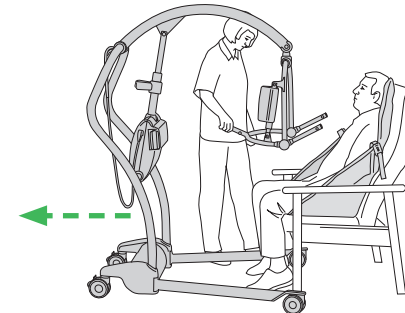

Løsne seilet fra løftebøylen.
Fjern heisen og forsikre deg om at pasientens føtter og kropp går klar av heisen.
Ta av seilet.

Forflytning fra sengen

1

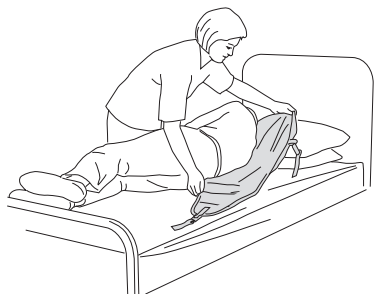


Rull pasienten mot deg. Brett seilet dobbelt og plasser det bak pasientens rygg.

2



Plasser seilet slik at pasienten rulles tilbake midt på seilet.

3

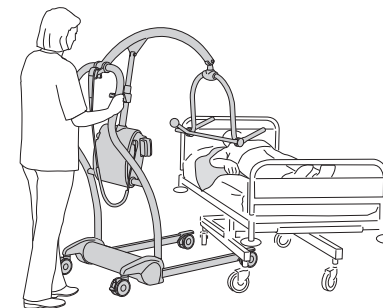


Nærm deg sengen med den åpne siden av løftebøylen mot pasientens bryst.

Fortsett med trinnene på neste side

Forflytning fra sengen (forts.)


4

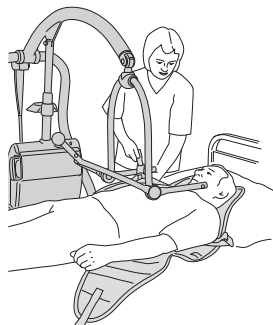

Plasser løftebøylen like over pasienten. Vipp løftebøylen til skulderfestekrokene kan festes til seilet.


5

Løkkeseil

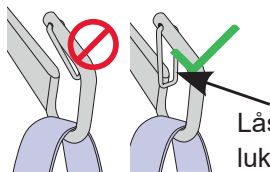

Låsehake lukket

Seil med klemmer

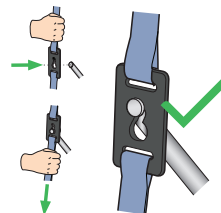

Fest seilets festeklemmer eller løkker til de riktige punktene på løftebøylen.

6



For heiser med DPS-løftebøyle: Leggstykkene må føres under låret. Trykk ned posisjoneringshåndtaket og fest klemmene på benremmene.


7



Risiko for å falle




Risiko for å bli sittende fast

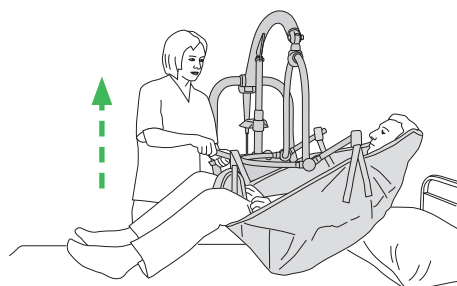

Pass på at bremsen ikke er innkoblet. Pass på at seilet er festet før du løfter pasienten.


Løft pasienten ved hjelp av håndkontrollen, og juster til en komfortabel stilling. Flytt pasienten

8

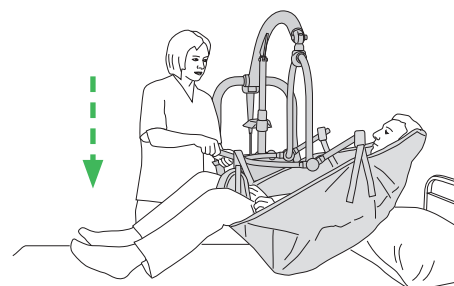

Ved retur til en seng: Bruk seilets løftehåndtak til å plassere pasienten over sengen. Ikke dra i seilet. Bruk håndkontrollen til å senke pasienten ned.

9

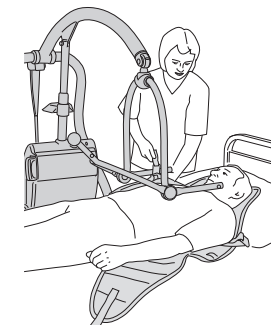

Løsne seilet fra løftebøylen. Fjern heisen og forsikre deg om at pasientens føtter og kropp går klar av heisen. Ta av seilet.