

Bruksanvisning

Trek T900



Innhold

Innledning	3
Levering.....	3
Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt	3
Før du bruker Trek Tandemsykkel for første gang.....	3
Sikkerhetsinformasjon	3
Oppbygging av Trek Tandemsykkel.....	4
Montering av sykkelen.....	4
Vedlikehold	5
Kontaktinformasjon.....	5

Innledning

Takk for at dere har valgt en Trek Tandemsykkel.

For å få størst glede av produktet i lengst mulig tid, anbefaler vi at du leser denne bruksanvisningen nøye og følger sikkerhetsinstruksjonene.

Det finnes mange sykler ute på markedet for ulike behov. Uansett hvilken type sykkel du velger, trenger sykkelens din vedlikehold og service.

Når syklisten setter større krav til at sykkelens skal være lett, øker også behovet for vedlikehold. Jo lettere sykkelens og delene er og jo tyngre syklisten og bagasjen er, samt hvor hardt sykkelens blir brukt er faktorer som er med på å påvirke levetiden til sykkelens,.

Deformerte eller skadde deler kan føre til uhell som går utover syklistens eller andres helse.

Levering

Før levering sørger vi for at tandemsykkelens er i perfekt stand og pakker dem forsvarlig. Vi anbefaler imidlertid at du inspiserer tandemsykkelens umiddelbart etter mottak, fortrinnsvis i nærvær av transportøren, for å oppdage eventuelle skader.

Skulle du oppdager skade gjør som følger:

- 1) Skriv en skademelding
(Transportøren er forpliktet til å akseptere denne)
- 2) Signer et ansvarsskjema
(Du overfører da alle forpliktelser som følge av skaden til leverandøren)
- 3) Returner fraktbrevet, skader reserverasjoner og overføring til NAV.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, eller om en materialfeil er varslet etter aksept av produktet, vil vi ikke kunne erkjenne skaden.

Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt

Trek Tandemsykkel er utformet i den hensikt å gi personer med funksjonsnedsettelse mulighet til å drive med sykling, både i fritiden og for trening.

Sykkelens kan også leveres med hjelpemotor.


Før du bruker Trek Tandemsykkel for første gang

Før du bruker Trek Tandemsykkel for første gang bør du lese brukerhåndboken nøye.

Sikkerhetsinformasjon

- Før hver bruk, sjekk alltid at sykkelens er fri for skader (sprekker, løse skruer, osv.)
- Følg vedlikeholdsradene som blir gitt i denne brukerveiledningen.

Oppbygging av Trek Tandemsykkel

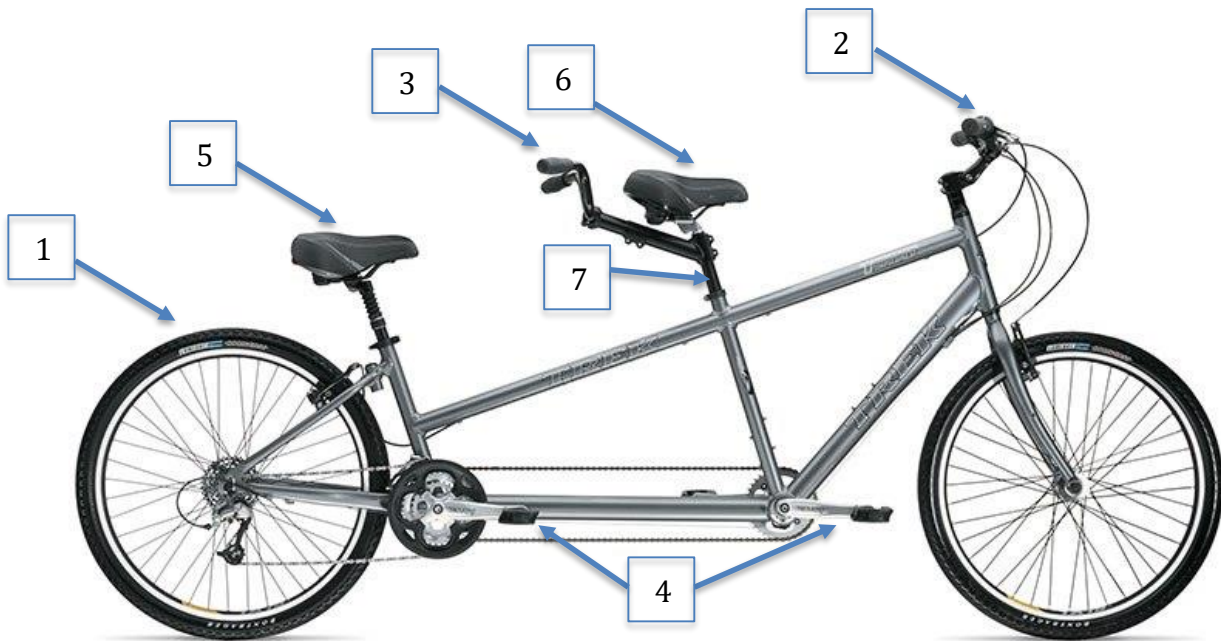

- 1: Bakhjul
- 2: Styre foran
- 3: Styre bak
- 4: Pedaler
- 5: Sete bak
- 6: Sete foran
- 7: Setestem


Montering av sykkelen

Pedaler

Pedalene skrues fast i pedalarmene, idet det bemerkes at det er linksgevind i de to venstre pedaler (se figur 2).

Hvis tandemmen er utstyrt med pedalarm-forkortere skal man huske å sette skivene i mellom pedalerne og pedalarm-forkorterne (se figur 3).

Figur 2

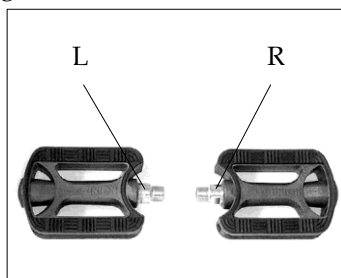

Figur 3



Styre

Styret rettes opp ved å løsne umbrakobolten i styrestammen. Når bolten er løsnet, slå lett opp på bolthodet, som dermed faller på plass igjen. Dette frigjør en innvendig konus, og styrestammen kan nå skyves opp eller ned og dreies til korrekt vinkel i forhold til forhjulet. Umbrakobolten strammes igjen etter innstilling.

Styrets vinkel kan innstilles når umbrakobolten forrest på styrestammen løsnes . Etter innstilling strammes bolten igjen.

Sete

For å få en best mulig sykkel opplevelse, er det viktig at setet er stilt inn riktig. Når du sitter på sykkelen og har hælen på pedalen , som er i nedre posisjon, skal beinet ditt være helt rett uten at du trenger å bevege hoften.

Vedlikehold

Dekkene består av dekk og slange som fylles med luft. Det er viktig at lufttrykket i dekkene er riktig. Dette er viktig for sikkerheten, kjøreegenskapene, komfort og rullemotstand. Det er vanlig at dekkene tapper seg litt for luft under bruk og lagring. Det er derfor viktig å etterfylle luft. Det anbefales å sjekke lufttrykk 1 gang i uken. Hvilket lufttrykk som er anbefalt for dekkene på din sykkel, står på siden av dekket. Det er viktig at MAX-trykket ikke overskrides, da dekket kan eksplodere.

Smør kjedet jevnlig med litt olje.

Vi anbefaler også at sykkelen oppbevares tørt når den ikke brukes, for å unngå rust.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til din nye sykkel, ta kontakt med oss på tlf 64 91 80 60 eller via mail post@bardum.no.

Besøk også vår hjemmeside www.bardum.no

Vi ønsker deg lykke til og håper du får mye glede av din nye tandemsykkel!

Hilsen

The logo for Bardum, featuring the word "Bardum" in a bold, blue, sans-serif font. A curved line underlines the letters "u" and "m", ending under the "m".

bardum.no • post@bardum.no • tlf. 64 91 8 0 60

Håndverksveien 8, 1405 Langhus