

# Installasjonsveiledning

Rifton Pacer gåstol medium K502 – Large K503 – XLarge K504

## Rammen

### Installasjon

Se fig. 1-3

Løft toppen av rammen til oppreist stilling som vist i fig.1. Begge låsene klikker når de går inn i låse hakk.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



## Installasjonsveiledning

Rifton Pacer gåstol medium K502 – Large K503 – XLarge K504

### Justeringer

#### Justering av høyde på rammen se fig.4

1. Trekk i låseknapp mens du holder i topp rammen.
2. Dra topprammen til ønsket høyde.
3. Slipp låseknappene.
4. Dra og skyv i topprammen til du kjenner at låsen går i posisjon.



Figur 4

#### Sammenlegging av Pacer for lagring eller transport se fig. 5

1. Reguler høyden på rammen til laveste posisjon.
2. Stå bak rammen og løft låsene mens du legger topprammen bakover.
3. Topprammen legges bakover til den når i gulvet.



Figur 5

# Installasjonsveiledning

Rifton Pacer gåstol medium K502 – Large K503 – XLarge K504

2. Hjulet gir en svak "klikkelyd" når det roterer forover og låser dersom man prøver å gå bakover.

## Hjul

### Justeringer

#### A. Svinglås hindrer hjul i å svinge.

Låsen betjenes som følger:

1. Sett spak/hendel A i ett av de to hakkene i hjulfeste.
2. Lås alle fire hjul dersom bruker skal kun bevege seg i en rett linje.
3. Lås to av hjulene dersom du vil unngå at den skal dras sidelengs.

#### B. Hjulbrems stopper hjulene å rotere.

Betjenes som følger:

1. Press nedre del av bremse(B) helt ned.
2. Løs bremsen ved å presse på øvre del av bremsehendel (B).


#### C. Slepebrems utøver motstand som Hjelper å holde igjen dersom brukeren har for mye skyvekraft .

Betjenes som følger:


1. Roter hendel (C) medurs til ønsket motstand for hjulet.
2. Løs bremsen ved å vri hendel tilbake.

#### D. Retningslås gjør at hjulene kun kan rotere i en retning. Nyttig for brukere som har lett for ufrivillig å skyve seg bakover.

1. Skyv hendel D oppover inntil den klikker på plass.

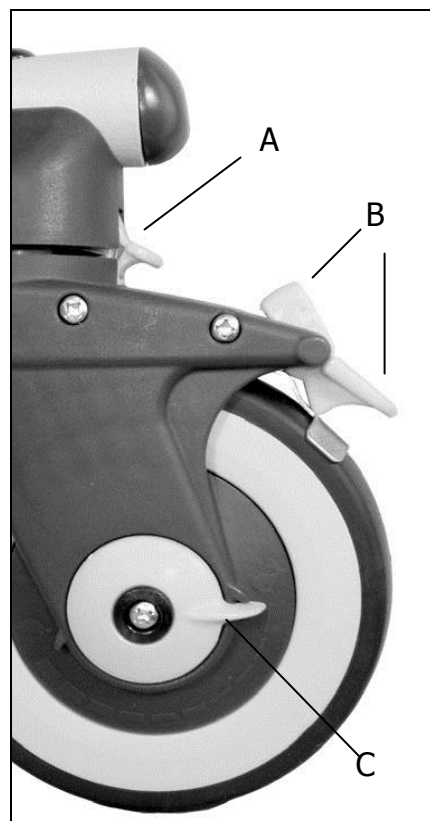

Figur 6

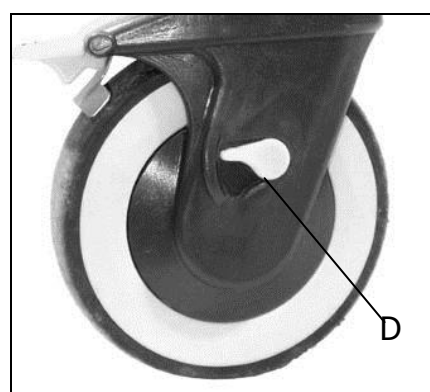

Figur 7

# Installasjonsveiledning

Rifton Pacer gåstol medium K502 – Large K503 – XLarge K504

## Klemmer

### Montering

Det meste av tilbehøret er festet til rammen ved hjelp av klemmer og innlegg. Figur 8 – 9 viser hvordan du monterer klemmer til topprammen.


#### 1. Åpne klemmen

- Løs skruknott og sving den ned
- Sving bandet opp


#### 2. Plasser klemme rundt oval ramme

- Sving skruknott opp
- Skru til

Plassering av tilbehør på rammen vil variere i henhold til ønsket plassering for brukeren, motoriske ferdigheter hos brukeren og antall tilbehør som brukes.

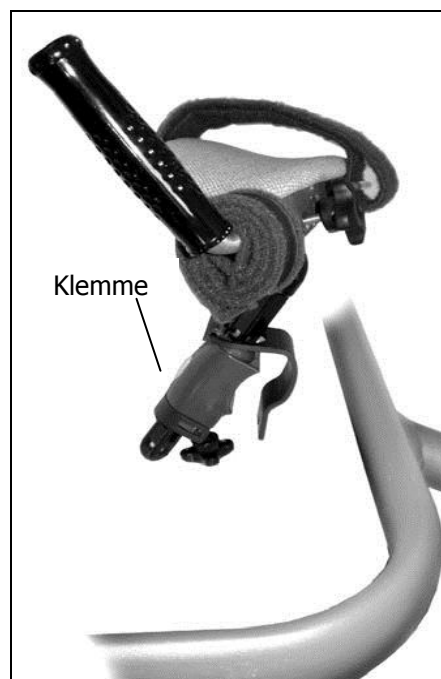

Figur 8

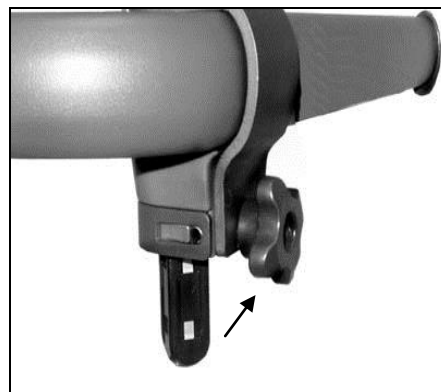

Figur 9

## Installasjonsveiledning

Rifton Pacer gåstol medium K502 – Large K503 – XLarge K504

### Armstøtter Montering


Det anbefales at armstøttene monteres foran på topprammen som vist i figur 10 – 11. Dette gir en stabil posisjonering og gir god plass for annet tilbehør på rammen.

Klemme for armstøtten monteres vanligvis slik at festehullet er på utsiden av rammen. Se fig. 10.


Kan også monteres med festehullet på innsiden av ramme dersom dette er bedre for brukerens funksjon.

Alle klemmer kan monteres med festehull på utside eller innside av ramme.

Vurderes etter brukerens plassbehov.

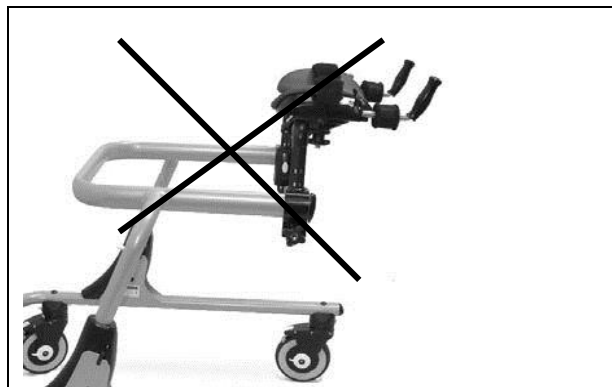

**Figur 10.** Armstøttene montert forover med klemmene på utsiden av rammen.

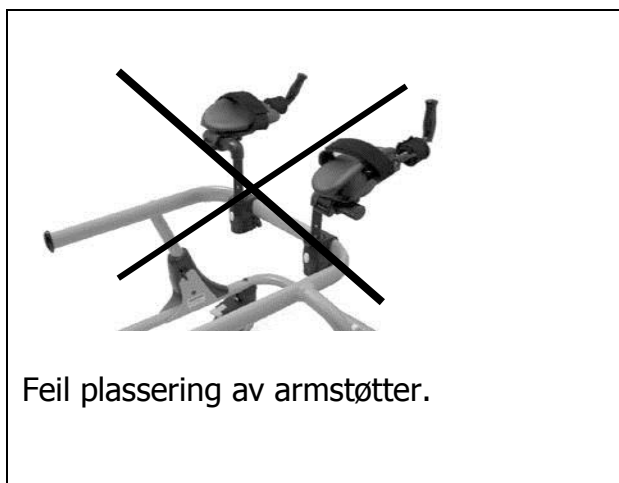

## Installasjonsveiledning

Rifton Pacer gåstol medium K502 – Large K503 – XLarge K504



**Figur 11.** Armstøttene montert forover med klemmene på innsiden av rammen.

- Slipp knapp (B) og juster støtten til den går i lås. (Klikker når den går i lås)

### Løs knott (C) for å justere håndtaket.

- Skyv håndtaket forover eller bakover for tilpasning til armlengde.
- Roter håndtaket til ønsket vinkel tilpasset brukerens gripeevne.

### Borrelås reim for arm (D) og for håndledd (E) sikrer brukerens arm i armstøtten.

- Ved å bruke borrelås reimene sikrer man arm og håndledd fra å komme ut av stilling i armstøtten.

### Løs knott (F) for å endre posisjon av armstøtten på rammen.

## Justeringer

### Løs knott (A) for


- Skyve armstøtte pute fra eller til bruker.
- Rotere opp eller ned. (Fig. 12)
- Rotere ut eller inn. (Fig. 12)
- Flytte arm pute bakover eller forover. (Fig. 12)

### Trykk på knapp (B) for å justere høyden på armstøtten.

- Trykk på knapp (B) og skyv armstøtten til ønsket posisjon.

## Installasjonsveiledning


### Rifton Pacer gåstol medium K502 – Large K503 – XLarge K504

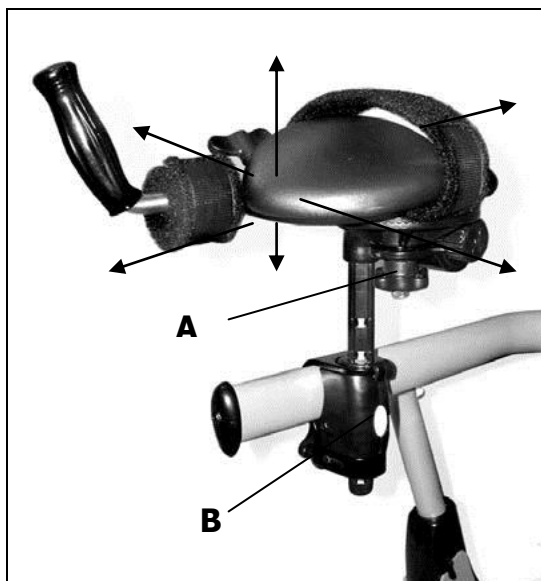

Figur 12

- Step 1: Løs skruknott (A) og ta av armputen.
- Step 2: Trykk på knapp (B), dra ut vinkelbrakketten av klemmen, og juster / snu den i ønsket posisjon.
- Step 3: Sett tilbake vinkelbrakketten i klemmen, sett på armputen og bruk knapp (B) for å regulere til ønsket høyde på armstøtten.

**Klemme for armstøtten** kan monteres med festehull for vinkelbrakketten, på innsiden eller på utsiden av rammen.

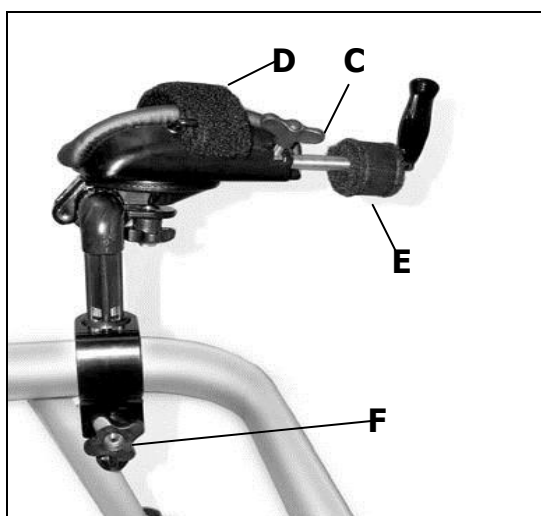


Figur 13

- Step 1 og 2 viser klemme med festehull på innsiden av rammen.
- Step 3 viser klemme med festehull på utsiden av rammen.
- Se figur 8 og 9 for montering av klemmer.


**Armstøtter** kan flyttes på og justeres slik at man oppnår riktig avstand mellom dem.

# Installasjonsveiledning

Rifton Pacer gåstol medium K502 – Large K503 – XLarge K504

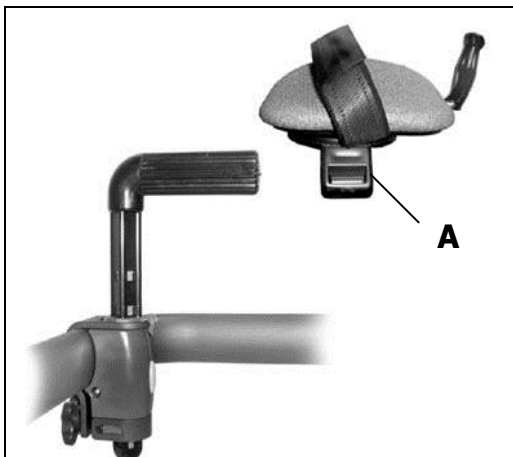

Step 1

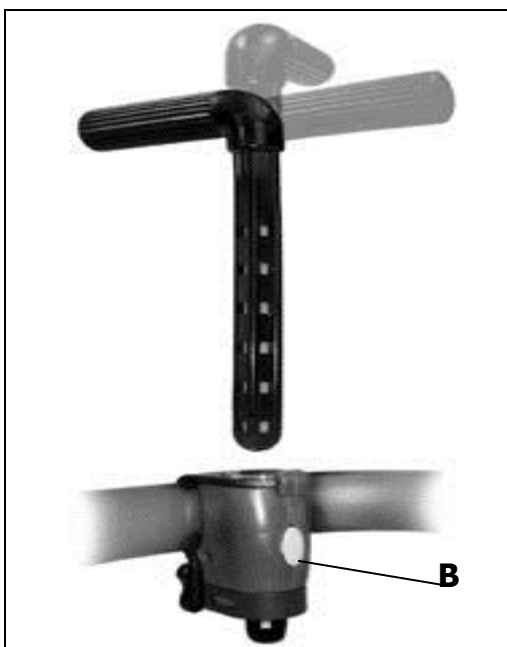

Step 2



Step 3

## Brystselen Montering

Monter brystselen på topprammen like bak den loddrette stangen på rammen. Figur 16. Fronten på brystselen har en kontroll reim for å holde sele sammen. Baksiden på selen kan enkelt åpnes for lett tilgang for brukeren.

## Justeringer

### Justering av vidde på brystselen

- Plasser klemmene med festehullene på innsiden eller utsiden av topprammen. (Fig. 7 og 8)
- Løs skruknott (A) for å justere brystselen inn eller ut i klemmen.

### Rotering av brystsele

- Løs knott (A) helt opp..
- Tilt brystselen til ønsket posisjon.
- Skru til knott (A).

### Justere høyden på brystselen

- Trykk på knapp (B) og skyv opp eller ned til ønsket posisjon.
- Slipp knapp (B) og beveg mekanismen til du kjenner at den klikker i lås.

### Endre posisjon av brystselen på rammen.

- Løs skruknott (C)
- Skyv klemmen forover eller bakover på rammen.
- Eller demonter klemmene fra rammen. (Fig. 7 og 8)




## Installasjonsveiledning

Rifton Pacer gåstol medium K502 – Large K503 – XLarge K504

**ADVARSEL : Monter ikke brystselen for langt bak på rammen da det øker risiko for at Pacer kan tippe bakover.**



Figur 15

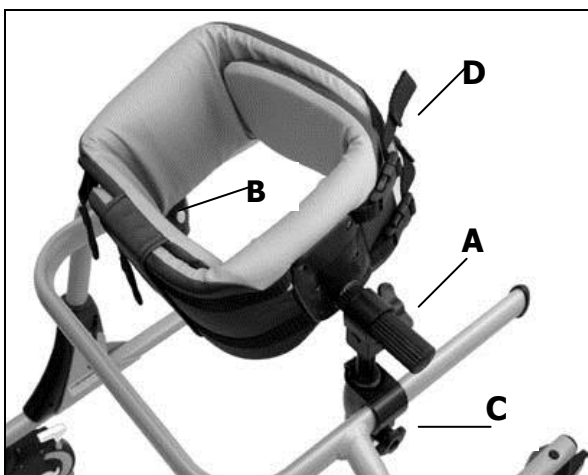

Figur 16

**De fire festereimer** kan justeres separat. Med disse kan man stramme eller løse grepet. De kan også benyttes for å justere kroppens forover helling ved tilpasse strammingen på hver enkel reim. Ref. Fig. 30 og 31.

Brystselen kan åpnes både i front og i bakkant slik at det skal være enkelt å plassere brukeren.

## Sete / hoftesele Montering


**Hofteselen** er designet for å kunne justere kroppens helning forover. Samtidig kan den justeres for å avlaste kroppsvekten på bena. Monter dette tilbehøret på klemmene og håndtak som vist på figur 17.

### Feste av hoftesele foran

- Monter klipsene (C) på ønsket sted på rammen.

### Feste av hoftesele bak

- Feste ringene på håndtakene.
- Håndtak og klemmer kan demonteres og ringene kan festes direkte på rammen. (Se figur 33)

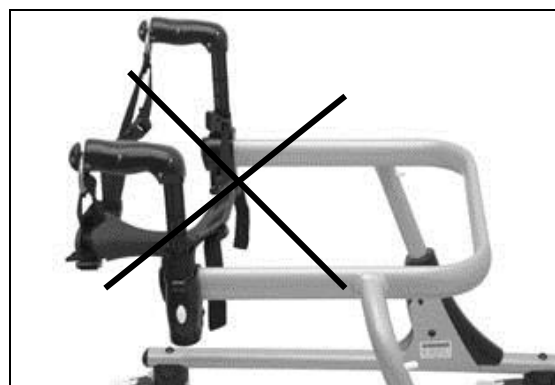

### ADVARSEL

**Dersom hofteselen brukes alene og monteres for langt bak, kan Pacer lett tippe bakover.**

## Installasjonsveiledning

Rifton Pacer gåstol medium K502 – Large K503 – XLarge K504

# Justering av hoftesele

Se figur 17 og 18

### Justere høyde på baksiden av hofteselen.

- Trykk på knappene (B) og skyv håndtakene til ønsket høyde
- Slipp utløserknappene (B) og kjenn at håndtaket går i lås.

### Justere håndtakenes feste på rammen.


- Løs skruknott A.
- Skyv håndtakene og klemmene bakover eller forover.
- Eller demonter håndtak og klemmer fra Pacer.  
(Se figur 7 og 8)

### Heve og senke foran eller bakside av hoftesele

- Bruk strappene D og juster.

**Brukerne er som regel mer komfortable** når baksiden av hofteselen er betydelig lavere enn foran, som vist i figurene 17 og 18.

- For å oppnå dette, forkort stroppene foran (E) og legg dem så høyt som mulig.

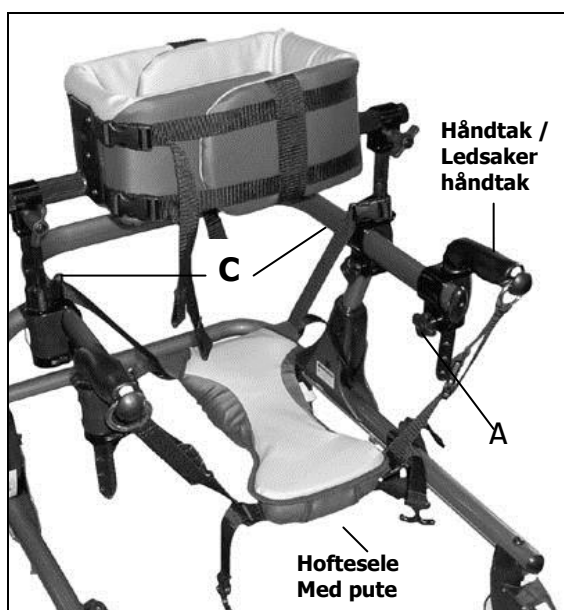


Figur 17

## Installasjonsveiledning

Rifton Pacer gåstol medium K502 – Large K503 – XLarge K504

# Hoftesele pute

## Montering

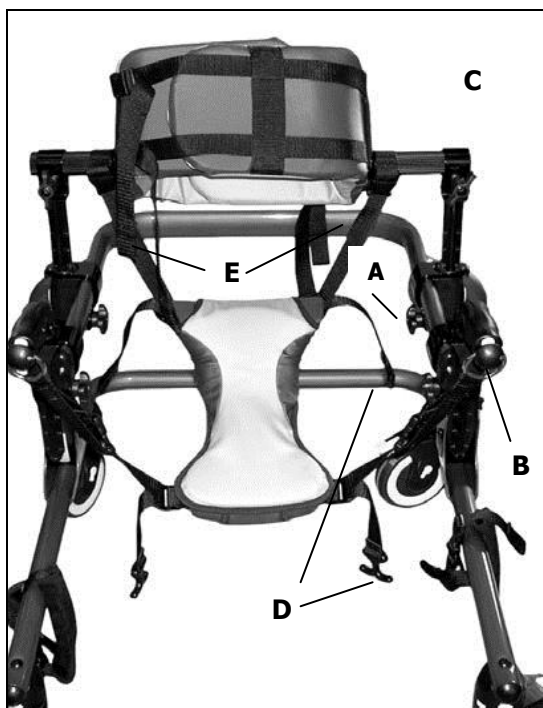

Figur 18

**1. Tre den bakre stroppen** gjennom hullene på baksiden av puten, og trekk på plass.


**2. Brett "flipper" rundt hoftesele (sete)** og feste med trykknapp. Vær sikker at begge "flipper" er godt festet.

**3. Monter hoftesele på Pacer.**  
(se figur 17)

- Fremre del av hoftesele monteres ca. 8 - 10 cm høyere enn bakre del.
- Prøv å holde hofteselen på denne vinkel når den er i bruk, slik at den grå puten fortsatt er den viktigste vekt bæreren.

## Installasjonsveiledning

Rifton Pacer gåstol medium K502 – Large K503 – XLarge K504

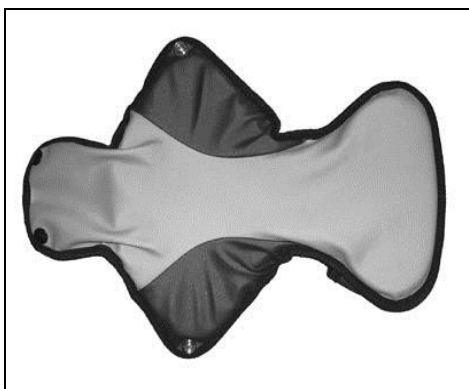

Figur 19. Oppside av pute



Figur 20. Hoftesele / sete



Figur 21. Underside av hoftesele med pute.

## Lårsele/støtte Montering

Lårsele fungerer best dersom den er montert bak feste for brystsele, som vist på figur 22.

Monter klemmene på øverste ramme.

## Justering

Se fig. 23


- 1. Å svinge lårsele til eller fra Brukeren.**
  - Løs skrue knott (A)
  - Juster støtten (B) og skru til knott (A) igjen.
- 2. Å skyve lårstøtten opp eller ned, eller rotere støtten til en komfortabel posisjon for brukeren.**
  - Løs skru knott (C)
  - Juster støtten og skru til (C) igjen.
- 3. Å flytte lårsele på rammen**
  - Løs skru knott (D)
  - Dra lårsele forover eller bakover på rammen.

## Installasjonsveiledning

### Rifton Pacer gåstol medium K502 – Large K503 – XLarge K504

- Eller demonter hele lårselen som vist i figur 8 og 9.

#### 4. Sikre og justere stroppen rundt låret ved å justere med spennen (E).

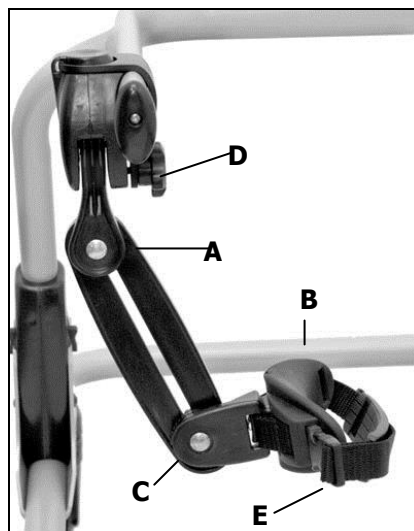

Figur 23



Figur 22

## Ankelsele Montering

Monter ankelselen som vist i figurene 24 og 25.

- Sett enden av stangen til ankelselen inn i sporet i bakre hjulhus.
- Trekk tilbake utløsermekanismen i andre enden av stangen, og sett stangen inn i sporet i framre hjulhus.

## Justering

Se figur 27

### 1. Å sikre, løse eller stramme reimer

## Installasjonsveiledning


Rifton Pacer gåstol medium K502 – Large K503 – XLarge K504

**rundt ankene til brukeren.**


- Juster med spenne (B)

### 3. Å justere skidelengde på ankelsen.

- Klem og juster lås (C) langs stangen.
- Juster feste rundt ankelen med spenne (A)

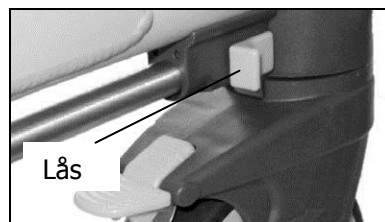


Figur 26 (Feste for stang i fremre Hjulhus)

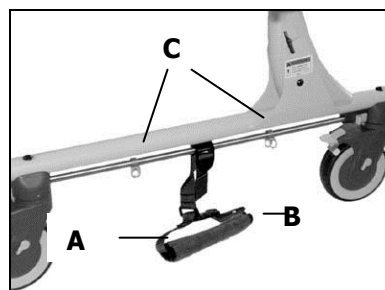

Figur 27



Figur 24

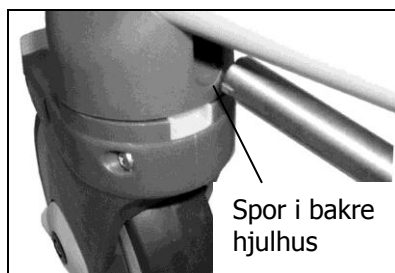

Figur 25

## Bord Montering

1. For maksimal stabilitet monter bordet sentrert foran på øverste ramme. Se figur 28.
2. Høyeste vekt som kan plasseres på bordet er 4,5 kg.

## Justering

Se figur 28 og 29

### Justere vinkelen på bordet.

- Løs skru knott (C).
- Endre vippe vinkel på bordet.

## Installasjonsveiledning

### Rifton Pacer gåstol medium K502 – Large K503 – XLarge K504

- Roter bordet fra side til side.

#### Justere høyden på bordet.


- Trykk på knapp (B).
- Skyv bordet til ønsket høyde.
- Slipp knapp (B)

#### Flytte bordet på rammen.


- Løs knapp (A).
- Skyv feste på rammen.
- Eller demonter som vist i figur 8 og 9.

#### Montere / demontere bordplaten

- Trykk fingrene oppover gjennom hullene i skuffen (G)
- Monter platen (D) ved å sette tappene (E) i sporene (F), og press ned i fronten av platen til den klikker på plass.

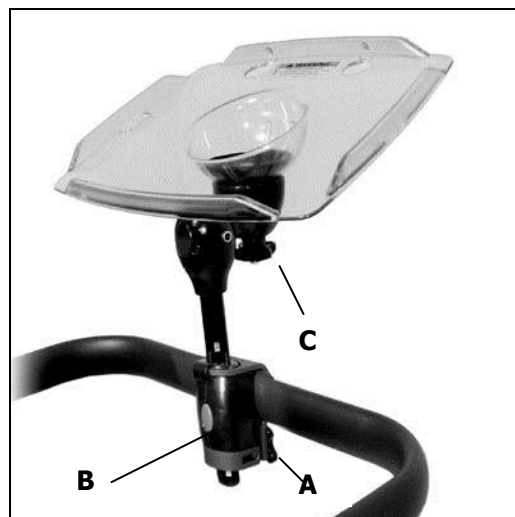

Figur 28

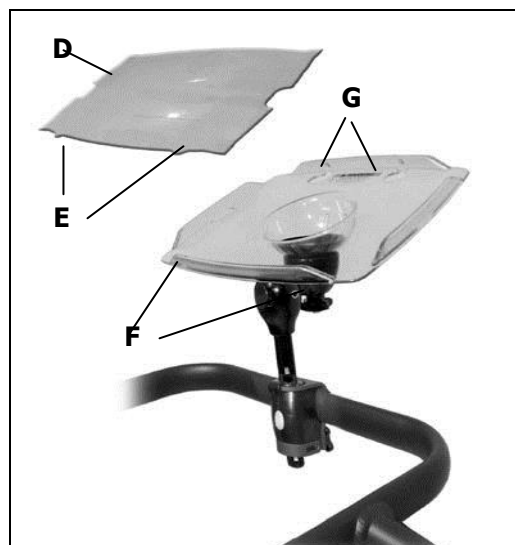

Figur 29

#### ADVARSEL:

**Bruk av bordet øker muligheten for at bruker kan tippe forover.**

# Installasjonsveiledning

Rifton Pacer gåstol medium K502 – Large K503 – XLarge K504

## Klar til bruk

Når tilbehøret er montert, kan bruker plasseres i Pacer.

### Forover stilling

Se figur 30

#### 1. Aktiviser bremsene på Paceren

#### 2. Kontroller justeringene på Brystsele, armstøtter, hoftesele og rammehøyde (topprammen).

#### 3. Løs følgende:

- Løs hoftesele / sete ringer bak.
- Spenner bak på brystselen.
- Reimer på armstøttene, lårseler og ankelsele.

#### 4. Plasser brukeren i Pacer


- Feste spenner på brystselen.

#### 5. Trekk hofteselen/sete mellom Bena.


- Feste ringene til håndtakene.

#### 6. Sikre underarmene med reimene til armstøttene.

- Feste reimer rundt lårene.
- Feste reimer rundt ankene.

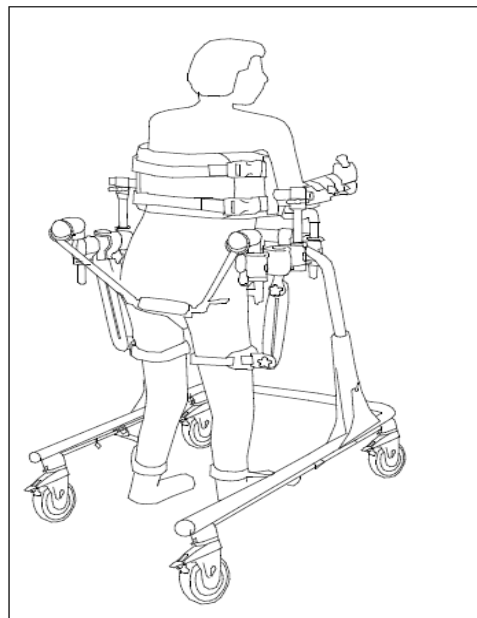

Figur 30

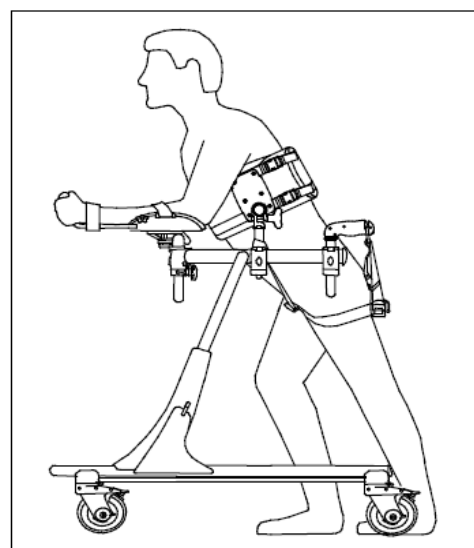

Figur 31



# Installasjonsveiledning

Rifton Pacer gåstol medium K502 – Large K503 – XLarge K504

## 1. Juster brukerens forover helling vinkel.

- Juster brystselen (fig. 31 og 32)
- Unngå at brystselen tar borti armstøttene.

## 2. Juster hoftesele / sete

- Juster høyden på håndtakene bak, som hofteselen festes til.
- Bruk reimene på brystselen for finjustering av hellingsvinkelen på overkroppen. (fig. 31 og 32)


## 3. Juster armstøttene

- For justering av bredde, høyde og vinkel på armstøttene, Se figur 11, 12, 13 og 14.

## 4. Juster lårselene.

(Se figur 21)

- Lårselen er viktig for å kunne regulere lårene tettere sammen eller ytterligere fra hverandre. De er også nyttig for å forebygge forvriddning av brukerens kropp .

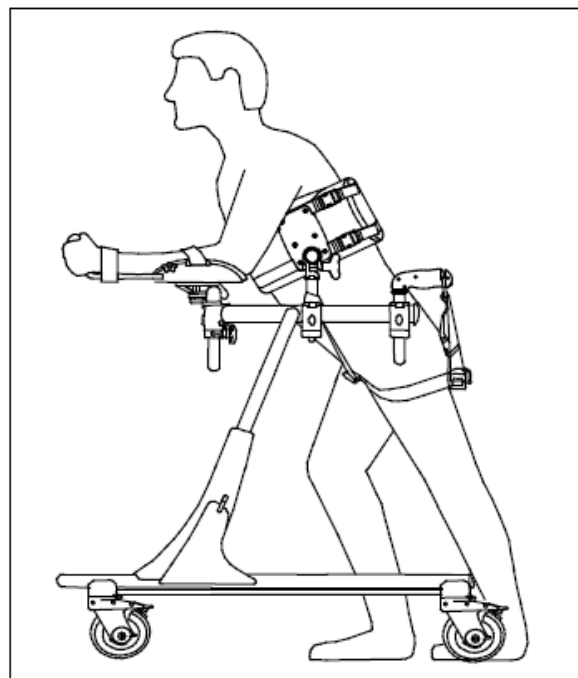

Figur 32

# Installasjonsveiledning

Rifton Pacer gåstol medium K502 – Large K503 – XLarge K504

## Informasjon om vedlikehold

Inspiser stropper og reimer to ganger i året for skade.

Inspiser jevnlig for sprekker, løse deler, manglende deler, og eller funksjonsfeil.

## Rengjøring

Til rengjøring av utstyret benyttes en fuktig klut og et mildt desinfeksjonsmiddel. Fjern lo fra borrelås.

Vask trinser/hjul med vann etter utendørs bruk.

Unngå leire og sand..

Ikke bruk petroleum-baserte eller løsemiddelbaserte smøremidler på trinser.

Smør heller med silikon spray eller grafitt.

## Dimensjoner

Mål vertikal avstand fra underkant albue til gulvet mens bruker står oppreist.

Velg en størrelse som kan justeres opp når brukeren vokser.

### VIKTIG

Velg brystsele som gir rom for at brukeren kan vokse. Brukerens vekt må ikke overstige maks. arbeidslast.

### DIMENSJONER

Del	Small	Medium	Large
Armstøtte	44-46 cm	61-86 cm	81-119 cm
Total bredde	57 cm	66 cm	70 cm
Total lengde	81 cm	83 cm	97 cm
Brystsele høyde (topp)	53-75 cm	71-97 cm	91-130 cm
Ramme høyde	38-46 cm	53-66 cm	74-99 cm
Ramme vekt	6 kg	7 kg	13 kg
Maks arbeidsvekt	34 kg	68 kg	91 kg
Brystsele (arbeidsvekt)	36-71 kg	56-102 kg	71-127 kg

## Kontaktinformasjon

Nitec Stavanger AS avd. Ronda

Tlf. 51 58 87 81      Faks 51 58 80 20

Mail: [at@ronda.no](mailto:at@ronda.no)

Hjemmeside: [www.ronda.no](http://www.ronda.no)