

Bruksanvisning

ATA



Innhold

Innhold.....	2
Garanti	4
Tekniske spesifikasjoner	5
Bruk av sykkelen.....	6
Sete og styre	6
Bruk av din ATA.....	8
Vedlikehold	8
Reparasjon og garanti	9



**Direktivet for medisinsk utstyr 93/42/EEC
Samsvarserklæring**

For

Klasse 1 medisinsk utstyr

Produsentens navn: Huka B. V.

Produsentens adresse: Munsterstraat 13, 7575 ED Oldenzaal, Nederland

Produkt: 3-hjulssykkkel

Navn på produkt: ATA

Undertegnede erklærer herved at utstyret spesifisert ovenfor er i samsvar med de grunnleggende kravene til medisinsk utstyr 93/42/EEC. Produktet er merket med CE-merket i henhold til direktivet.

Navn: Bas Kamp, CEO Huka B. V.

Signatur:

Garanti

ATA har 2 års garanti.

Garantien dekker ikke skader eller feil som oppstår ved uansvarlig bruk av sykkelen. Den dekker ei heller slitasjedeler ved normal bruk.

Huka BV

Huka er et Nederlandsk selskap som produserer sykler, spesielt designet til bruk for folk med nedsatte funksjonsevner. Om du har noen spørsmål knyttet til produktene, kontakt din leverandør i Norge,

Bardum AS
Håndverksveien 8
1405 Langhus
Tlf. 64918060
post@bardum.no

Tekniske spesifikasjoner

Matriale rammen

Belegg

Hjul

Skjermer

Kjedekasse

Styre og setepinne

Styreholker

Setet

Bremser

Gir

Korrosjonsbeskyttet stål

Epoxy belegg (til utendørs bruk)

Aluminiums felg med ståleiker

Hardplast

Hardplast


Stål

Gummi

Barnesete med skaitrekk

Trommelbremser, felgbremser og p-bremser

0 - Fastnav

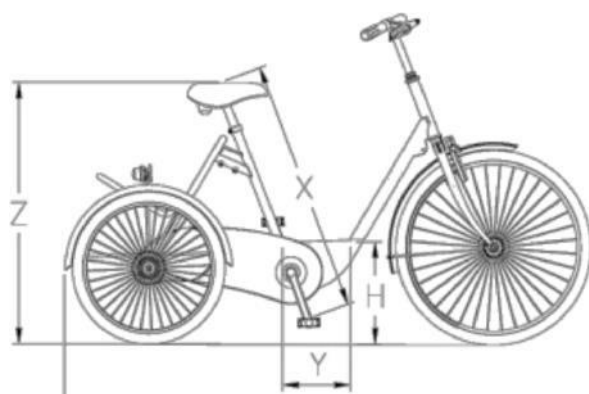

Lengde i mm (L)	1120
Bredde i mm	490
Vekt i kg	10
Lengde krank i mm	380
Høyde sete-gulv i mm	450
Høydejustering styrestem i mm	50
Bredde styrestem i mm	490
Maks belastning i kg	40

Bruk av sykkelen


Før du tar din ATA i bruk, se til at bremses fungerer som de skal. Sjekk at styret og setet er godt festet og at det ikke er noen løse skruer på sykkelen.

Her er noen tips

1. Sjekk alltid sykkelen før bruk. Bremses, setet, styret etc.
2. Vær aktsom under bruk
3. Juster setet og styret korrekt til bruk
4. Bruk alltid hjelm
5. Tilpass farten etter ferdigheter og forhold

Sete og styre


Justering av sete

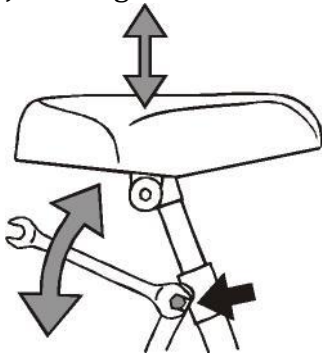

Justere setehøyden

Løsne mutteren med en fastnøkkel som vist på bildet. Juster setet til ønsket posisjon. Skru mutteren på plass og stram til.

MERK: Minimum setehøyde vil bli økt med ca 3 cm ved bruk av vinkelsadelpinne som må brukes ved kroppsstøtte.

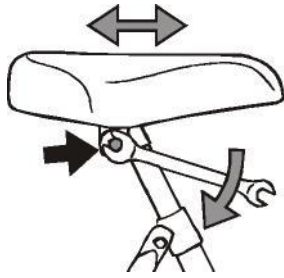


Justere setevinkel

Løsne mutteren med en fastnøkkel som vist på bildet. Juster setet til ønsket posisjon. Skru mutteren på plass og stram til.



ADVARSEL! Husk å stramme til skruene etter endt justering.

Justering av styret

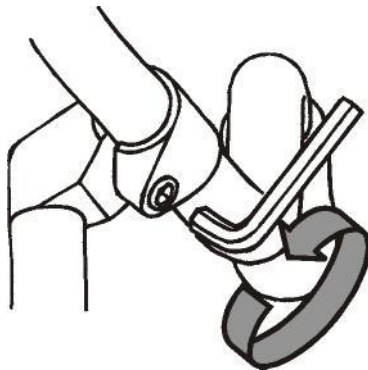

Styret kan justeres både i vinkel og høyde. For å justere benytt en 5mm unbraconøkkel.



ADVARSEL! Husk å stramme til skruene etter endt justering

Bruk av din ATA

- Se alltid til at din ATA er i god stand før sykkelturen. Gå over skruer på styret og sete. Kontroller at bremses fungerer som de skal og sjekk at dekkene har tilstrekkelig lufttrykk.
- ATA er beregnet for bruk på veier med asfalt eller grus og kan brukes i all slags vær.
- Unngå saltvann da dette kan føre til rust på sykkelen.



Respekter følgende:

- Sørg alltid for at det er rett lufttrykk i dekkene
- Sjekk bremsene hver gang før du sykler
- Respekter trafikkreglene og vær aktsom

Vedlikehold

Rengjøring.

Aluminiums rammen, plasten og andre deler på sykkelen kan rengjøres med en myk og våt klut.

Sykkelen bør spyles fri for salt, sand og grus ved jevne mellomrom.



Regelmessig rengjøring forlenger levetiden av din ATA. Ikke bruk høytrykksspyler ved rengjøring da trykket er så kraftig at du vil spraye vekk fett fra lagrene.

Reparasjon og garanti

For reparasjon av din ATA kontakt en autorisert forhandler. Bruk alltid originaldeler. Sykkelens garanti dekkes av din forhandler i Norge, Bardum AS.

Bardum AS
Håndverksveien 8
1405 Langhus
Tlf. 64918060
post@bardum.no



Bardum

bardum.no • post@bardum.no • tlf. 64 91 8 0 60

Håndverksveien 8, 1405 Langhus