

Bruksanvisning

Costa Kid



Innhold

1.	Introduksjon	4
	<i>COSTA KID</i> beskrivelse.....	4
2.	Før du tar sykkelen I bruk.....	5
2.1	<i>Riktig lufttrykk i dekkene</i>	5
2.2	<i>Bremsejekk</i>	5
3.	Innstilling Costa Kid.....	6
3.1	<i>Justering av setehøyde</i>	6
3.2	<i>Justering av fotplatene</i>	7
3.3	<i>Justering av ryggvinkel</i>	8
3.4	<i>Regulering av setedybde</i>	8
3.5	<i>Justering av bremsene</i>	8
4.	Bruk av sykkelen	9
	Vedlikehold, inspeksjoner og kontroller	10
6	Teknisk service	10
7	Garanti.....	10

Takk for at du valgte en Costa Kid fra OFFCARR

Siden 1982 har OFFCARR lyttet og svart på kundenes behov ved å utvikle svært innovative og tekniske løsninger, alltid med mål om å redusere daglige bevegelseshemninger, med spesiell oppmerksomhet til produktets stil og til å forbedre kundenes livskvalitet.

OFFCARR har et sertifisert system for kvalitetsstyring jmf UNI EN ISO 9001: 2008 regelverk og en produksjon sertifisert etter UNI EN ISO 13485: 2004 forskriftene.

OFFCAR sine produkter oppfyller 93/42/CE direktiv, oppgradert med 2007/47/CE direktivet.



Før du bruker dette produktet, eller foretar noen justeringer, les bruksanvisningen nøye. Ved behov ta kontakt med din forhandler i Norge, Bardum AS.

Bardum AS
Håndverksveien 8
1405 Langhus
Tel. 64918060 Fax 64918066
E-mail: post@bardum.no <http://www.bardum.no>

1. Introduksjon

Costa Kid er en hånds sykkel beregnet for barn med nedsatt benfunksjon.

COSTA KID beskrivelse

Costa Kid er en 8-girs sykkel med doble håndbremses, en til framhjulet, den andre til begge bakhjulene. Sykkelen kan også fås med påmontert hjelpemotor av typen GoSwissDrive. Rammen er av aluminium. Andre deler er laget i komposittmaterialer, som karbonfiber, aluminium- og stållegeringer. Sete og rygg er polstret i svart nylon. Ryggens polstring kan enkelt tas av og vaskes for hand.

Bakhjulene er 20" montert på en fast aksel med en vinkel på 6°

Håndsykkelen leveres standard med parkbrems og skivebrems bak.

Alle COSTA KID har følgende:

- Aluminium ramme
- Høyde og dybdejusterbart sete
- Justerbar ryggvinkel
- Justerbare fotplater
- **20" bak og framhjul**
- To håndbremses
- Fotstropper
- Parkbrems
- Justerbar ryggstøttetrekk
- Trådløs kjørecomputer
- Total lengde er 155 cm
- Total bredde er 71 cm
- Vekt: 23 kg (standard)
- Maks belastning 115 Kg

2. Før du tar sykkelen I bruk

2.1 Riktig lufttrykk i dekkene

En periodisk kontroll av lufttrykket bidrar til stabil kjøring og minimal slitasje av dekkene. Kontroller lufttrykket i henhold til verdien som er markert på dekket.

2.2 Bremsesjekk

For å kontrollere funksjonen og effekten på bremsene gjør følgende

1. Løft hvert hjul og spinn det rundt for å se om hjulet ruller uten motstand.
2. Aktiver bremsene
3. Løft hvert hjul og spin det rundt for å se om hjulene blokkeres.


Om noe av dette avviker, se punkt 3.5 justering av bremseser

3. Innstilling Costa Kid


Sykkelen blir levert i en standard konfigurasjon om ikke annet er avtalt.

3.1 Justering av setehøyde

For å endre setehøyde:

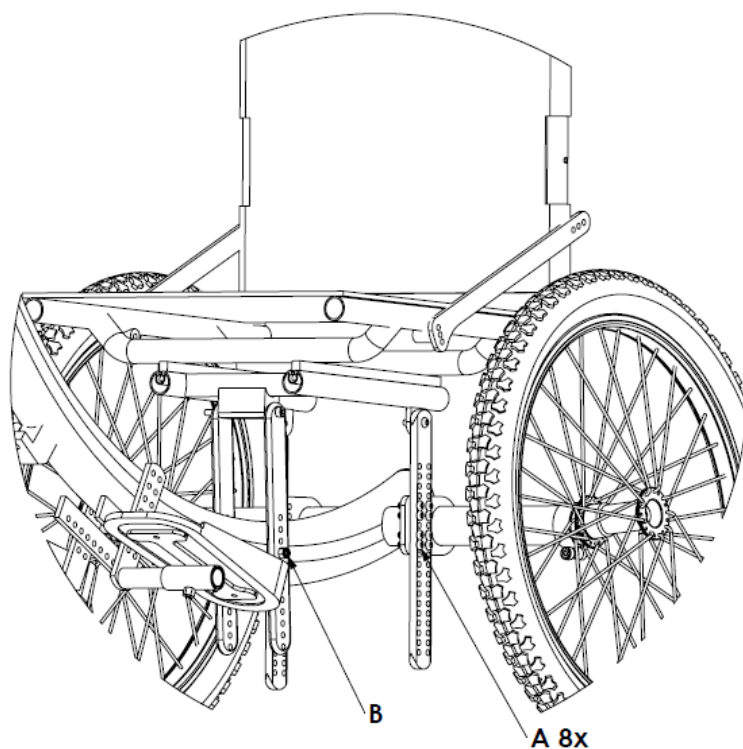

- Bakre setehøyde: løsne og fjern alle skruene som er markert med A på tegningen.
- Juster til ønsket høyde
- Entre skruene tilbake og stram til.
- Fremre setehøyde: løsne og fjern alle skruene som er markert med B på tegningen.
- Juster til ønsket høyde
- Entre skruene tilbake og stram til.

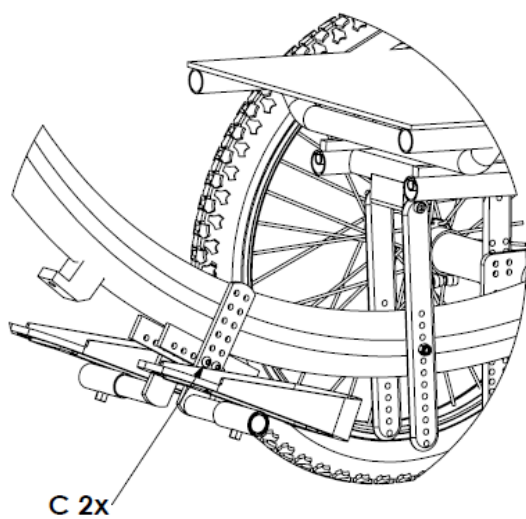

3.2 Justering av fotplatene


For å justere posisjonen til fotplatene

- Løsne og fjern skruene C ved siden av fotplatene.
- Flytt fotplatene til ønsket posisjon
- Entre skruene og stram til.

3.3 Justering av ryggvinkel

For å justere ryggvinkelen:

- Løsne og fjern skruer D, E, eller begge (på begge sider)
- Finn den ønskede vinkelen
- Entre skruene og stram til.

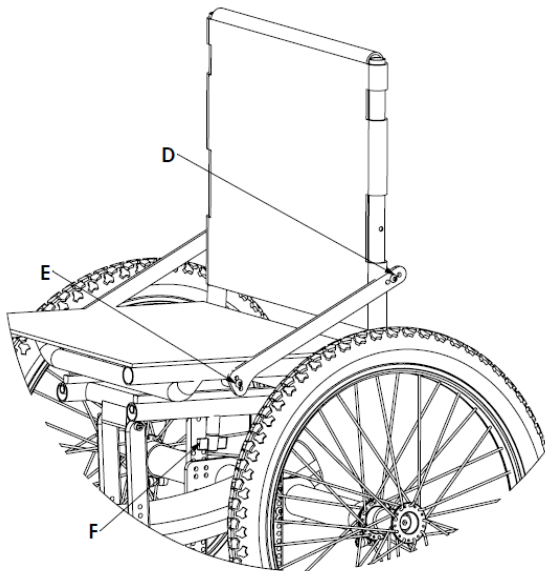

3.4 Regulering av setedybde

Sete kan reguleres frem og tilbake for å finne optimal sittestilling, samt gjøre forflytningen enklere.

Løsne skruer F under setet og flytt sete ved å gli det på sliden. Plasser setet i ønsket posisjon og stram skruer F. Det er svært viktig å stramme denne tilstrekkelig slik at setet ikke beveger seg i fart.

3.5 Justering av bremsene

For V-bremsene (foran)

1. Løsne skruen som holder wiren fast
2. Juster wiren nødvendigvis for å optimalisere bremsene
3. Stram til skruen

For skivebremsene

- Juster skruen til wiren.

Om dette ikke hjelper:

- Bruk en sekskantnøkkel for å justere bolten til kabelfeste samtidig som man holder bremsespaken inne. Plasser kablet manuelt til ønsket posisjon. Stram skruen.

4. Bruk av sykkelen

Her er noen forslag og anbefalinger for riktig bruk av sykkelen, også med tanke på å opprettholde sikkerhetsfunksjonene i lang varighet.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med kvalifisert personell.

- Sykkelen bør kun brukes til transport av personer og ikke objekter generelt
- Unngå kontakt med sjøvann og sand. Om dette skjer, rengjør umiddelbart.
- Utfør en generell sjekk av sykkelen med jevne mellomrom. Spesielt dekk, akslingen, feste til bakhjulene og bremseser.
- Rengjør jevnlig med en fuktig klut.
- Polstringen er ikke vanntett. Ved evt rengjøring, kan denne vaskes på lav temperatur



Hold sykkelen unna varmekilder da ikke alle materialene på sykkelen er brannsikre

5. Sikkerhet

Sikkerhetstiltak

- ⚠ For å opprettholde sykkelen i best mulig stand anbefales det å opprette en vedlikeholdsplan
- ⚠ Dårlig vedlikehold kan føre til økt slitasje og i ytterste fall være farlig å bruke.
- ⚠ Ved flytransport anbefales det å redusere lufttrykket i dekkene
- ⚠ Husk å aktivere parkbremsen før du forflytter deg inn eller ut av sykkelen

Vedlikehold, inspeksjoner og kontroller

- ✓ Før du sykler, sjekk alltid bremsene.

Ukentlig:

- ✓ Kontroller lufttrykket i dekkene.

Kvartalsvis:

- ✓ Kontroller slitasjen på dekkene.
- ✓ Kontroller hjullagrene.
- ✓ Smør alle bevegelige mekaniske deler

6 Teknisk service

Ved feil på sykkelen vennligst informer forhandler med følgende opplysninger

- a) model
- b) serienummer
- c) feilbeskrivelse
- d) Bestillingsnummer NAV

7 Garanti

- Rammen har 3 års garanti fra leverandør
- Slitasjedeler dekkes ikke av garanti, såfremt det ikke skyldes produktfeil
- Garantien dekker ikke transport.
- Om det oppstår feil i garantiperioden vil vi:
 - Reparere den defekte delen
 - Bytte den defekte delen
- Garantien dekker ikke skader som skyldes uaktsomhet, feil bruk, eller feil vedlikehold av sykkelen.
- Ved transportskade er det speditør som er ansvarlig.

Bardum

bardum.no • post@bardum.no • tlf. 64 91 8 0 60

Håndverksveien 8, 1405 Langhus