

Bruksanvisning till Musiksittsäckar Molly och Balloo



1 Innehåll

1	INNEHÅLL.....	2
2	INTRODUKTION.....	2
3	FÖRBEREDELSE.....	3
3.1	INNEHÅLL.....	3
3.2	HÖGTALARE OCH LJUDKÄLLOR.....	3
3.3	PLACERING.....	3
3	MONTERING.....	3
3.4	SITTSÄCK.....	3
3.5	INSTALLATION AV FÖRSTÄRKARE SAMT HÖGTALARE OCH LJUDKÄLLOR.....	4
4	ANVÄNDNING.....	6
4.1	AV/PÅ.....	6
4.2	INSTÄLLNING AV LJUD OCH VIBRATIONER.....	6
4.3	INSTRUKTIONER OCH TIPS.....	7
5	UNDERHÅLL OCH SÄKERHET.....	7
5.1	SITTSÄCKAR.....	8
5.2	SÄKERHET.....	8
6	ÖVRIGT.....	9
6.1	TILLBEHÖR.....	9
6.2	MILJÖ.....	9
6.2.1	När produkten är uttjänt.....	9
6.3	TEKNISKA DATA.....	9

2 Introduktion

Det är vår förhoppning att denna musiksittsäck skall ge Er en skön avslappning, stimulans och komma till stor nytta och glädje.

Vibrationerna som har en lätt masserande effekt, stimulerar känseln och gör det lätt att slappna av. En härlig känsla inte minst för personer med bristande kroppsuppfattning och nedsatta sinnesfunktioner. Musikvibrationer ger verkningsfull stimulans för många blinda, döva, autistiska, förlamade, hyperaktiva och personer med psykiska problem. För gravt hjärnskadade kan upplevelsen höja livskvaliteten och skapa vägar för kontakt och närhet.

Innan Musiksittsäcken tas i bruk, är det viktigt att alla berörda tagit del av denna och kringutrustningars bruksanvisningars innehåll.

Alla som handhar musiksittsäcken med kringutrustning MÅSTE läsa igenom och vara införstådda med avsnitt 5 och 6 i denna bruksanvisning.

Musiksittsäcken är lätt att installera men det är viktigt att instruktionerna följs och att skötseln sker omsorgsfullt och regelbundet.



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-666870

www.komikapp.se

3 Förberedelser

Börja med att packa upp alla paket och kontrollera att alla delar finns med och är hela.

3.1 Innehåll

En musiksittsäck består av följande delar:

- 1 st sittsäck Molly eller Balloo i galon
- 1 st vibrationsplatta (inkl anslutningskabel)
- 1 st förstärkare STA-200D
- 1 st Bluetooth adapter för anslutning till extern ljudkälla så som telefon eller surfplatta.

3.2 Högtalare och ljudkällor

Högtalare och ljudkällor ingår inte då dessa i många fall redan finns på plats!

KOMIKAPP rekommenderar att man använder högtalare med en god ljudkvalité.

Det finns möjlighet att använda många olika ljudkällor... Vanligast är att använda en CD-växlare.

Se även avsnitt 6.1-Tillbehör.

3.3 Placering

Se till att placera Musiksittsäcken så att vibrationerna inte fortplantas i husets golv, bjälklag etc. Sittsäcken bör placeras på ett ljudisolerande underlag, typ ljuddämpande matta eller liknande.

Tänk på att placera Musiksittsäcken så att i- och urstigning underlättas.

Musiksittsäcken skall ej användas i utrymmen med onormalt hög luftfuktighet eller i våtutrymmen.

3 Montering

3.4 Sittsäck

1. Se till att vibrationsplattan ligger riktigt i säcken. Plattan ska ligga plant mot golvet. Genom att öppna dragkedjan i säckens botten kontrolleras att kabeln inte hamnat mellan plattan och golvet.

Luftskåran på plattan ska ligga upp mot fyllningen i säcken.

OBS! Placera aldrig plattan i innesäcken tillsammans med fyllningen.

Dra försiktigt ihop dragkedjan så att kabeln till förstärkaren inte viks eller kläms ihop i den lilla öppningen.



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-666870

www.komikapp.se




3.5 Installation av förstärkare samt högtalare och ljudkällor

Förstärkare och annan ljudutrustning skall inte vara anslutna till eluttag när installationen utförs.

Följ instruktionerna med hjälp av bilderna nedan under installation och anslutning.

1. Anslut kabel från vibrationsplattan till kopplingsboxen på förstärkaren.

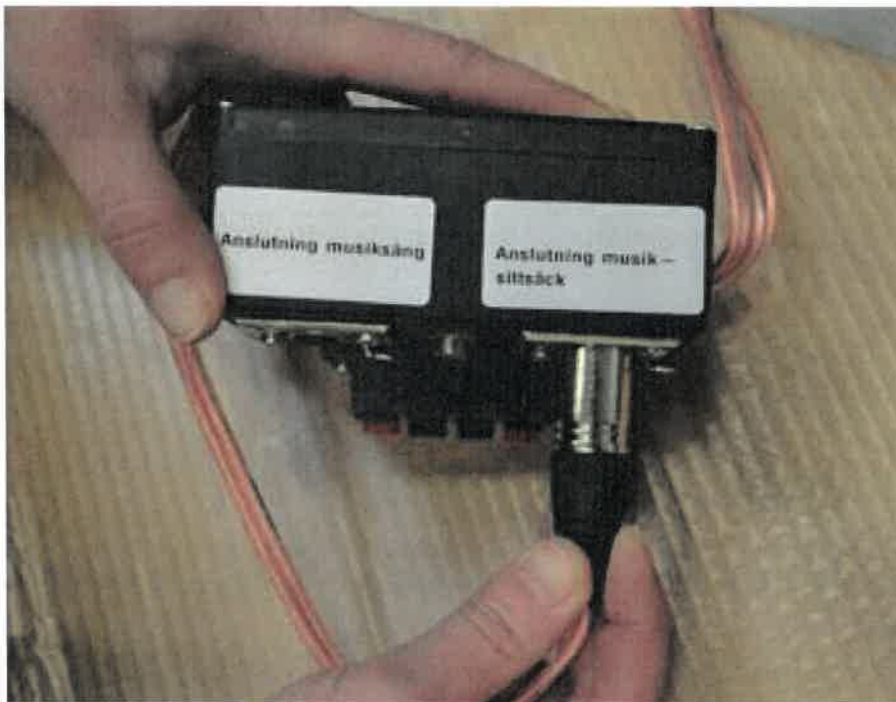

2. Anslut Bluetooth-adaptorn i uttag nr. 1. på baksidan av förstärkaren.



3. Anslut högtalarna i kopplingsboxen på förstärkaren. Röd kabel kopplas in i rött uttag och svart kabel kopplas in i svart uttag.



4. Anslut förstärkarens medföljande strömkabel till eluttag när allt är installerat och inkopplat enligt ovan instruktioner.
5. Koppla ihop telefon/surfplatta med Bluetooth-adaptorn.

4 Användning

4.1 Av/På

1. Innan strömmen till förstärkaren och övrig utrustning slås på skall förstärkarens volymreglage och vibrationsreglage vridas ner till lägsta volym (längst till vänster)




2. Slå på strömbrytarna och starta musikanläggningen.
3. Stäng alltid av ljudanläggningen när den inte skall användas längre.

4.2 Inställning av ljud och vibrationer

Vid användandet av musiksittsacken ställs vibrationer samt ljud från högtalarna (ljudet i rummet) enklast in på följande sätt:

1. Om Bluetooth-adaptorn är ansluten i uttag 1 på förstärkarens baksida måste knapp 1 på förstärkarens framsida vara intryckt för att spela upp ljud från telefon/surfplatta. Om annan extern ljudkälla ansluts väljer man motsvarande knapp på framsidan av förstärkaren.

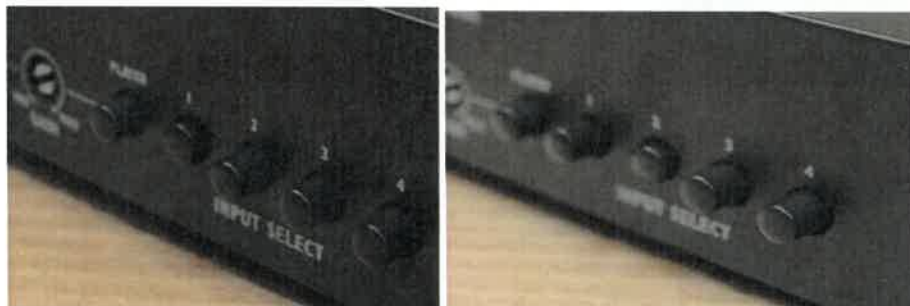

2. Vrid ner volymen på högtalarna (ljudet i rummet) till minimum genom att vrida vredet på förstärkaren till nolläge.
3. Ställ in rätt mängd vibrationer anpassat till personen som sitter i musiksittsacken genom att vrida vibrationsreglaget på förstärkaren från nolläge och uppåt till önskad nivå på vibrationerna är uppnådd.
4. Ställ in önskad volym i rummet genom att utgå från nolläget på förstärkaren "volym högtalare" och vrid uppåt till önskad ljudvolym.

4.3 Instruktioner och tips

- Med tanke på att fyllningen är rörlig, är det alltid bra att försöka forma sittsacken så att en skön sittgrop skapas. Forma en "grendelare" främst i sittgropen om användaren har tendens att sträcka sig och riskerar att glida ur sittsacken.
- Skulle din Molly eller Balloo vara för hårt fylld så att användaren inte sjunker tillräckligt långt ner, kan en del av fyllningen tömmas ut i en sopsäck eller dyl. Användarens storlek och tyngd spelar en avgörande roll och nya sittsäckar upplevs ibland som lite för hårt stoppade. Emellertid packas fyllning ihop efter en tids användning vilket tagits hänsyn till vid tillverkningen. Vänta därför gärna ett tag innan fyllningen reduceras.
- Sänk alltid förstärkarvolymen när en ny användare tar plats i musiksittsacken eller då musikens karaktär ändras. Bastoner ger t.ex. betydligt kraftfullare vibrationer än musik med toner från mellanregistret. Om användaren själv inte kan anpassa musikvibrationerna till en för honom / henne behaglig och njutbar nivå, skall hjälparen alltid avläsa ansiktsuttryck och kroppsspråk samtidigt som musikvolym och andra inställningar sakta justeras. Detta är väldigt viktigt eftersom våra sinnesupplevelser är högst individuella och två personer kan reagera helt olika på samma vibrationer. Särskilt god uppmärksamhet skall alltid hållas på krampbenägna personer.
- Vi vill varmt rekommendera att personal/hjälpare alltid själv tar sig god tid att själv pröva olika typer av musik och inställningar innan brukarna använder Musiksittsacken. Utgå från "0"-lägen och reglera volym och övriga kontroller (en i taget) för att uppleva vilka effekter som uppnås. Det är lättare att göra bra inställningar om man först själv utforskat och bekantat sig med utrustningen och de effekter som kan skapas. – Och det blir mycket lättare att välja lämplig musik.
- Vanligt är att man ställer vibrationerna alldeles för högt. Vibrationerna kan då snabbt kännas tröttande och kanske till och med obehagliga. Börja därför alltid med korta pass med svagare musikvibrationer och öka försiktigt.
- Tänk på att tjocka kläder och andra textilier på dynan dämpar musikvibrationerna.

5 Underhåll och säkerhet

5.1 Sittsäcker

Sittsäckarna är avtorkningsbara med ett mildt rengöringsmedel.

För att förhindra att kroppsvätskor tränger in genom sömmar bör plastade inkontinensskydd användas när detta är befogat.

5.2 Säkerhet

VARNING!

- **Lämna aldrig en funktionshindrad eller sjuk brukare utan uppsikt när han/hon använder Musiksittsäcken. Var speciellt observant på användare som har svårt att röra sig. Andningsvägar kan blockeras om mun och näsa hamnar mot dynan.**
- **Personer med hjärtsjukdomar och inflammatoriska tillstånd skall ej använda Musiksittsäcken. Detsamma gäller gravida.**
- **Sinnesintryck kan ge epileptiska anfall. Håll därför alltid krampbenägna personer under noggrann uppsikt.**
- **Iakttag stor försiktighet med psykotiska personer. Börja med mycket svaga vibrationer och håll god observation på patientens reaktioner och upplevelser.**
- **Musiksittsäcken är en möbel för vila och avslappning. Den skall inte användas att leka i eller för att sova i.**
- **Skydda dynan mot stick från vassa föremål och kanter. Dynan kan skadas av tandbett. Se till att ingen kommer åt att stoppa fyllning i munnen.**
- **Placera inte Musiksittsäcken nära elektriska element, eldstad eller på andra ställen med ökad brandrisk.**
- **Rökning skall undvikas.**



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-666870

www.komikapp.se

6 Övrigt

6.1 Tillbehör

Tillbehör	Artnr
Högtalare (2 st)	503880
Högtalarkabel	501017

6.2 Miljö

6.2.1 När produkten är uttjänt

Musiksittsacken innehåller elektronik och skall återvinnas som el-avfall.

Din kommun kan lämna information om vart du kan lämna in den.



6.3 Tekniska data

Material sittsäck	Polystyrenkulor & PVC galon
Storlek:	Molly Ø 280cm, höjd ca 55cm Balloo Ø 280cm, höjd ca 110cm
Vikt:	ca 5 kg

