

Tomcat manuelle trehjulssykler

Brukerveiledning.

Takk for at du valgte et produkt fra Tomcat™. Vi håper du får mange års glede og nytte av sykkelen din.

Din Tomcat trehjulssykkle er et medisinsk utstyr i klasse 1 som gjør at barn og voksne med bevegelses- eller funksjonshemninger kan sykle. Regelmessig sykling kan ha en positiv innvirkning på brukerens styrke, mobilitet og generelle helse og velvære. Formålet med denne brukerinformasjonen er å hjelpe deg å få mest mulig ut av produktet.

Trehjulssykkelen kan være utstyrt med spesielle tilpasninger for å kompensere for visse problemer, slik som redusert mobilitet. Når selvstendig bruk av trehjulssykkelen ikke er mulig eller trygt, kan den leveres med spesielle tilpasninger som gjør det mulig for en bruker å sykle med assistanse og tilsyn fra en gående omsorgsperson.



For å være trygg og få mest mulig ut av produktet, vennligst les disse instruksjonene nøye.



ADVARSEL.



Følg til enhver tid trafikkreglene som gjelder der du sykler.



Ha alltid på deg hjelm og nødvendig beskyttende plagg.



Bruk alle sikkerhetsinnretninger som følger med til enhver tid



Ikke la andre sitte på sykkelen, for eksempel på bakakselen eller i kurven. Ikke sitt flere på sykkelen, hverken på bakaksel eller i kurven.



Bruk parkeringsbremsen når du går av/på trehjulssykkelen, eller når du forlater den uten tilsyn.



Ikke kjør over fortauskanter (unntatt nedsenkte kanter) eller andre hindringer som kan skade sykkelen eller gjøre den ustabil.



Ikke bruk enheten i terreng, bratte brakker, kraftige sidveis hellinger, eller på ujevnt veidekke.

Generelt vedlikehold og sikkerhet for trehjulssykler

Før bruk.

- Kontroller at lys, reflektorer, flagg og varselutstyr er i god stand og virker som de skal.
- Kontroller dekkene og pass på at det er riktig lufttrykk i dem (det riktige lufttrykket er stemplet på siden av dekket).
- Kontroller bremse- og styrefunksjonene.

- Kontroller at alle avtakbare deler (hjul, sete, delbare rammemekanismer, o.l.) er forsvarlig festet, riktig montert i samsvar med instruksjonene i brukerveiledningen, låst sammen der det er hensiktsmessig, og at de virker som de skal.

Under bruk

- Bruk alltid alle sikkerhetsinnretninger som følger med.
- Overhold nasjonale og lokale forskrifter som gjelder sykling.
- Ha med deg et kommunikasjonsmiddel for bruk i nødtilfeller.
- Bruk en sikker sykkellås når du forlater trehjulssykkelen uten tilsyn.

Etter bruk

- Vask og tørk trehjulssykkelen før den settes bort.
- Oppbevar den på et tørt sted uten ultrafiolett (UV) lys.
- Utfør vedlikehold på trehjulssykkelen i samsvar med informasjonen i brukerveiledningen, samt etter langvarig oppbevaring.

Generell justering for trehjulssykler

Trehjulssykler med høydejusterbart sete (konvensjonelle modeller)

- Juster setehøyden slik at brukerens helt utstrakte ben blir lett bøyd.
- Juster ryggstøtten (hvis montert) slik at rumpeballene sitter på den bredeste delen på setet.
- Juster høyden på styret. Når det er riktig justert, vil underarmene være i horisontal stilling.
- Juster rekkevidden på styret. Når det er riktig justert, vil ryggen være rett og siktlinjen være horisontal.
- Juster bredden på sidestøttene (hvis montert) så de sitter tett inntil kroppen og brukerens klær.
- Juster tilbehøret (fotstøtter, sele, bencalipere, hansker, hodestøtte, osv.) i henhold til råd fra fysioterapeut / helsepersonell.
-


Trehjulssykler med skyvbart sete (modeller med lav sittehøyde)

- Juster høyden på styret. Når det er riktig justert, vil underarmene være i horisontal stilling.
- Juster ryggstøtten til en komfortabel vinkel (dersom den er justerbar).
- Juster skyvemekanismen for setet til du oppnår en komfortabel rekkevidde.
- Juster den nedre braketten og pedalene til du oppnår en komfortabel rekkevidde.
- Juster bredden på sidestøttene (hvis montert) så de sitter tett inntil kroppen og brukerens klær.
- Juster tilbehøret (fotstøtter, sele, bencalipere, hansker, hodestøtte, osv.) i henhold til råd fra fysioterapeut / helsepersonell.

Justere spesialtilpassinger på trehjulssykkelen (hvis montert) Merk! Med mindre noe annet er angitt, betyr remontering eller låsing det motsatte av å fjerne eller låse opp.


Svinge sete (konvensjonelle modeller)

- Skyv den svarte knappen (under setet) ned.
- Sving setet og slipp opp knappen. Setet låses automatisk når det er helt rotert.

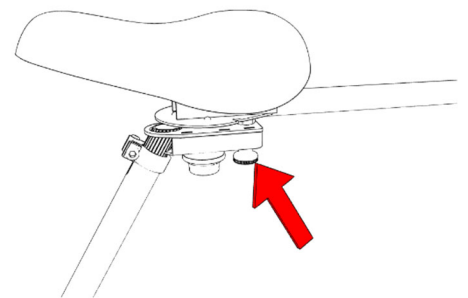


Svinge sete (modeller med lav sittehøyde)

- Skyv den røde spaken ned (forskjellige steder)
- Sving setet og slipp opp spaken. Setet låses automatisk når det er helt rotert.

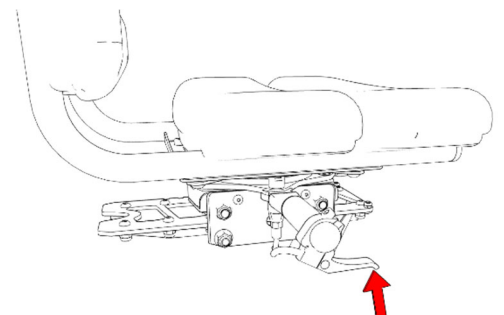


Skyve setet (modeller med lav sitte­høyde)

- På standard skyveseter, lås opp låsemutrene, foreta justeringen og lås på nytt.
- På hurtigjusterende seter, trykk/skyv knappen (på venstre side av setet), foreta justeringen, og slipp deretter opp knappen.

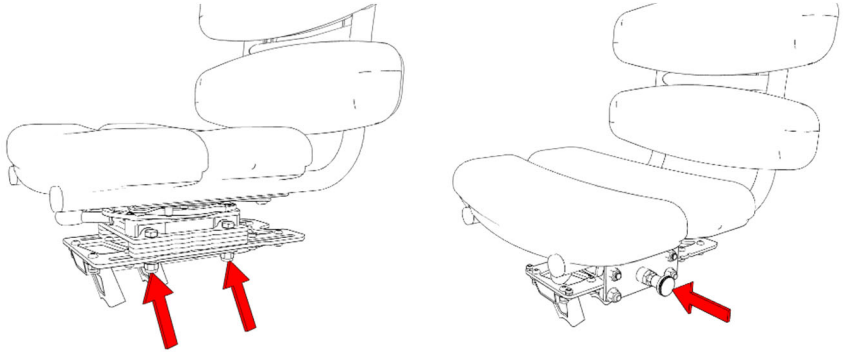


Demontere setet (modeller med lav sitte­høyde)

- Sving setet til den normale kjørestillingen.
- Skyv den svarte knotten (under setet) bakover på sykkelen. (Advarsel! Ikke dra knotten opp eller ned).
- Sving spaken mot urviserne.
- Løft setet for å fjerne det.

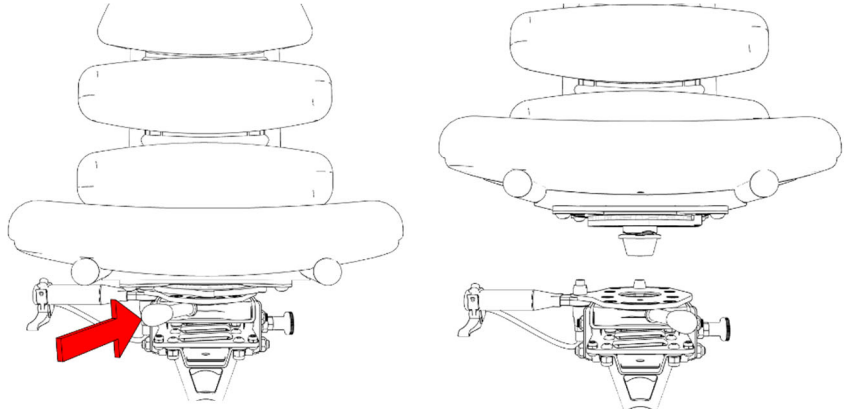


Gjøre sveivene og pedalene lenger/kortere (modeller med lav sitte­høyde)

- Frigjør fjærklemmen (1)
- Drei justeringsknotten (2) for å justere sveivene og pedalene.

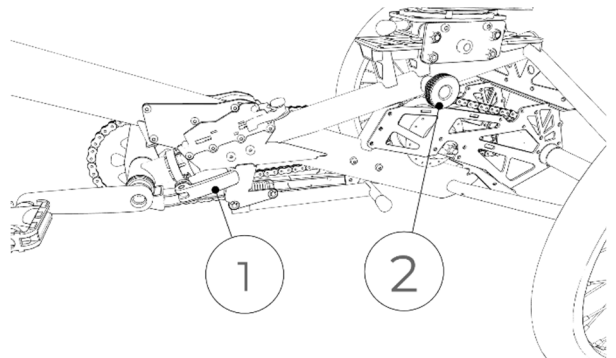


Dele rammen (konvensjonelle modeller)

- Bruk venstre hånd til å støtte den nedre braketten (3), og trykk på låseknappen (4) med den venstre tommelen.
- Åpne utløspaken (5) helt.
- Senk rammen på den nedre braketten ned mot bakken.
- Fjern den øvre rammen ved å skyve rammen bakover og deretter løfte den av.

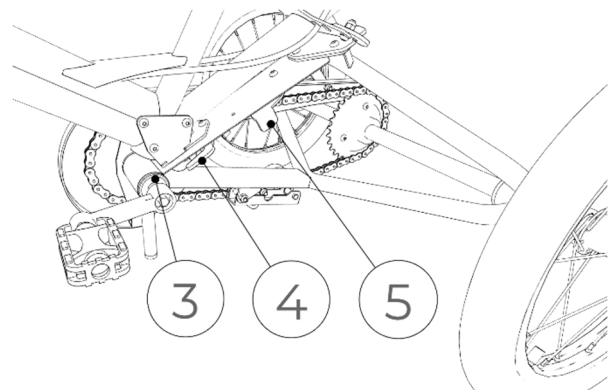


Dele rammen (modeller med lav sittehøyde)

- Fold ut midtstøtten (6).
- Løft og slipp låseknappen (7), samtidig som du roterer utløser-spaken (8) til den låses opp.
- Fjern den øvre rammen ved å løfte forhjulet, til den øvre rammen kan flyttes bakover. Den øvre rammen kan da løftes vekk.

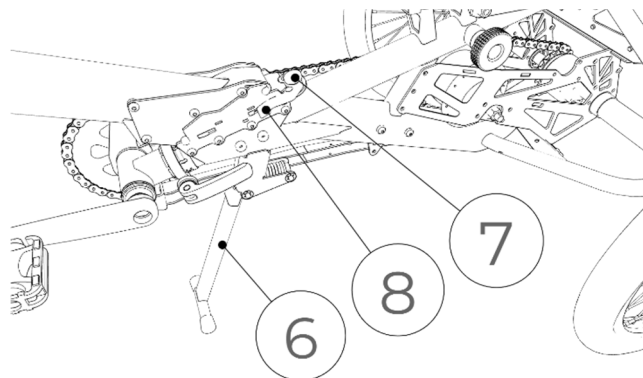

Fjerne "hurtigutløsende" bakhjul

- Fjern den øvre rammen mens den nedre rammen er støttet på stativet.
- Med den ledige hånden løft rammen litt, slik at hjulet som skal fjernes løftes fra bakken.
- Trykk på den svarte, midtre knappen (9) før du fjerner hjulet du ønsker.
- Senk rammen ned til bakken, og gjenta denne fremgangsmåten for det andre hjulet.
- **VIKTIG!** Sett alltid deksler på akselskaft og hjul når hjulene er fjernet.

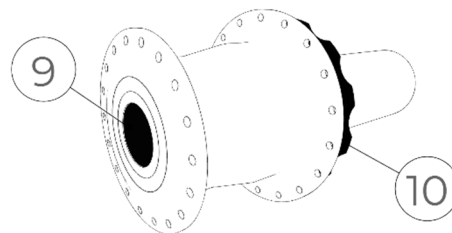


Sette tilbake hjulene

- Kontroller at akselen og navet er helt rene!
- Med den ledige hånden, hold på den svarte ringen (10) for å hindre at akselen vrir seg.
- Skyv hjulet over akslen.
- Trykk på den svarte knappen (9) og roter hjulet til det glir helt inn og låses på plass.
- Den svarte knappen (9) må være i flukt med akselen og hjulflaten. Test før trehjuls sykkel brukes.

Bruke ledsagerkontroll

- Flytt styrearmen mot høyre og venstre for å styre.
- Trekk håndtaket bakover for å bremse, eller trekk i den avtakbare snoren bakover for å bremse.
- Trekk parkeringsbremsespaken (11) og utløseren (12) bakover samtidig, for å aktivere og låse parkeringsbremsen.

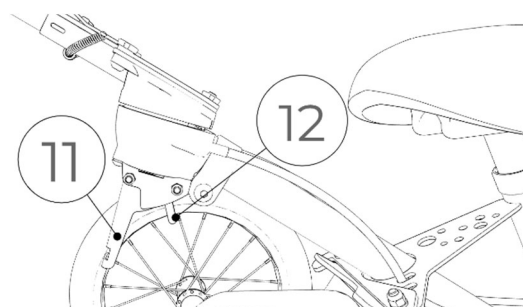


Fjerne armen på ledsagerkontrollen

- Trykk utløserknappen ned.
- Skyv armen forover før du fjerner den.


Sette tilbake armen på ledsagerkontrollen

- Plasser armens "nøkkelhull" over de tre låsestiftene.
- Trykk armen inn mot den hestekoformede platen, og trekk den deretter bakover for å feste den på nytt.

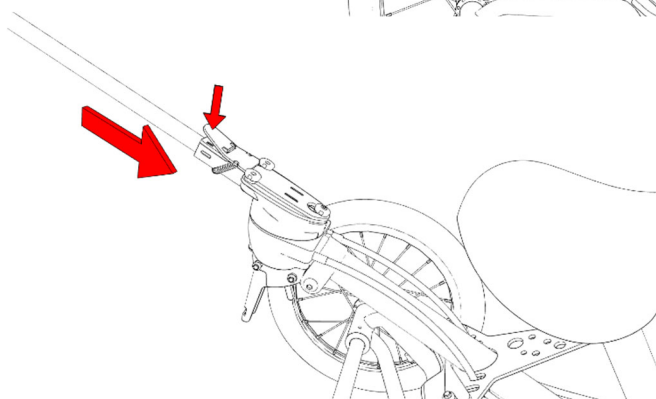

Endre de doble kjøreakslene fra fast kjøring til frihjulskjøring

- Trekk knappen mot venstre og roter en kvart omdreining (konvensjonelle trehjuls sykler).
- Drei den roterende spaken en halv omdreining (på trehjuls sykler med lav sittehøyde)

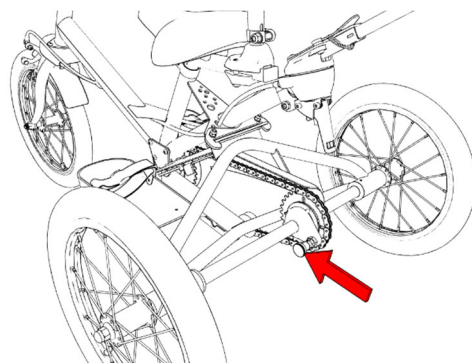

For ytterligere informasjon om hvordan du trygt setter opp og bruker trehjuls sykkel, gå til

Standard sykkeldeler og slitasjedeler/tilbehør/funksjoner

Merk! Bremsespaker, girskiftmekanismer, indikatorer, lys, reflektorer, sykkelhjelmer, pedaler, kabler, klemmer, håndtak, seter, pumper, reparasjonssett osv. er standard og velkjente sykkeldeler som er godt kjent innen sykkelindustrien, og som bør brukes på den måten som er tiltenkt av produsenten. Hvis du er usikker på hvordan du bruker eller vedlikeholder noen av standarddelene til sykkelen, bør du søke råd fra en sykkeltekniker før sykkelen brukes.



Tomcat SNI Ltd
Unit 13/7 The Gloucester Business Park
Hucclecote
Gloucester
GL3 4AA, UK
Tel +44(0)1452 616900
E-post info@tomcatuk.org
Nettside www.tomcatuk.org



Advena Limited.
Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street,
Swatar, BKR 4013
Malta.
Tel +356 2546 6689
E-post info@advena.mt
Nettside www.advena.mt