

- ▶ Frontalt og dorsalt ståstativ i ett produkt
- ▶ Stort tilbehørssortiment
- ▶ Myk polstring
- ▶ Enkel tilpasning



# ELLA STÅSTATIV

HJELPEMIDLER FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE

## Frontalt og dorsalt ståstativ i ett produkt

Ella er ståstativet med mange muligheter! Fokus på enkelhet i bruk. Ella har et stort brukerspenn med 4 størrelser som gjør at stativet vokser med bruker.

Ella er konstruert slik at stativet kan brukes både som frontalt og dorsalt ståstativ. Det betyr at man har to ståstativer i ett produkt. For å endre Ella fra et dorsalt til et frontalt stativ, fjerner man hodestøtten, og snur fotstøttene og bordet den andre veien.

Ella tilpasses ved hjelp av den medfølgende unbrakonøkkelen (T-nøkkel str. 5) som passer til alle skruene.

Tilbehørssortimentet muliggjør at brukeren, uavhengig av kroppslige utfordringer, kan få god posisjonering i Ella.

Stativet leveres med putetrekk som gjør det enkelt å holde hygienisk og trekkene vaskes i maskin på 30°.

Ella er prisforhandlet som nr. 1 og leveres standard som avbildet. Understellet kommer med manuell eller elektrisk hev/senk.



*Ella man. frontalt oppsett*



*Ella el. dorsalt oppsett*

## Teknisk data

### ► Ella Frontal

	<b>Ella str. 1 man. frontal</b>	<b>Ella str. 2 man. frontal</b>	<b>Ella str. 3 man. frontal</b>
Artikkelnr.	9310F	9320F	9330F
HMS nr.	289101	289102	289103
Brukerhøyde	60-95 cm	90-130 cm	120-155 cm
Maks. bredde	58 cm	58 cm	70 cm
Maks. lengde	75 cm	75 cm	100 cm
Hjuldiameter	10 cm	10 cm	10 cm
Snudiameter	100 cm	100 cm	135 cm
Egenvekt	28 kg	29 kg	32 kg
Maks. brukervekt	30 kg	40 kg	55 kg

### ► Ella Dorsal

	<b>Ella str. 1 man. dorsal</b>	<b>Ella str. 2 man. dorsal</b>	<b>Ella str. 3 man. dorsal</b>
Artikkelnr.	9310	9320	9330
HMS nr.	234692	234693	234694
Brukerhøyde	60-95 cm	90-130 cm	120-155 cm
Maks. bredde	58 cm	58 cm	70 cm
Maks. lengde	75 cm	75 cm	100 cm
Hjuldiameter	10 cm	10 cm	10 cm
Snudiameter	100 cm	100 cm	135 cm
Egenvekt	32 kg	35 kg	38 kg
Maks. brukervekt	30 kg	40 kg	55 kg

### ► Ella El.


	<b>Ella str. 1 el.</b>	<b>Ella str. 2 el.</b>	<b>Ella str. 3 el.</b>	<b>Ella str. 4 el.</b>
Artikkelnr.	9310EL	9320EL	9330EL	9341EL
HMS nr.	234695	234696	234697	234698
Brukerhøyde	60-95 cm	90-130 cm	120-155 cm	130-180 cm
Maks. bredde	58 cm	58 cm	70 cm	75 cm
Maks. lengde	75 cm	75 cm	100 cm	110 cm
Hjuldiameter	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Snudiameter	100 cm	100 cm	135 cm	145 cm
Egenvekt	32 kg	35 kg	38 kg	47 kg
Maks. brukervekt	30 kg	40 kg	55 kg	80 kg

● *Prisforhandlet med NAV*

## Stående posisjonering

En oppreist posisjon er viktig for mange av kroppens funksjoner. Det kan være hensiktsmessig å legge ståtrening inn som en del av personens intervensjon.

Med støtte og posisjonering i stående stilling fremmes kroppens vitale funksjoner. Samtidig aktiveres hjernevirksomhet, muskelaktivitet, struktur for skjelett og ledd, og risikoen for utvikling av sekundære følger som hofteluksasjon og nedsatt respirasjon.

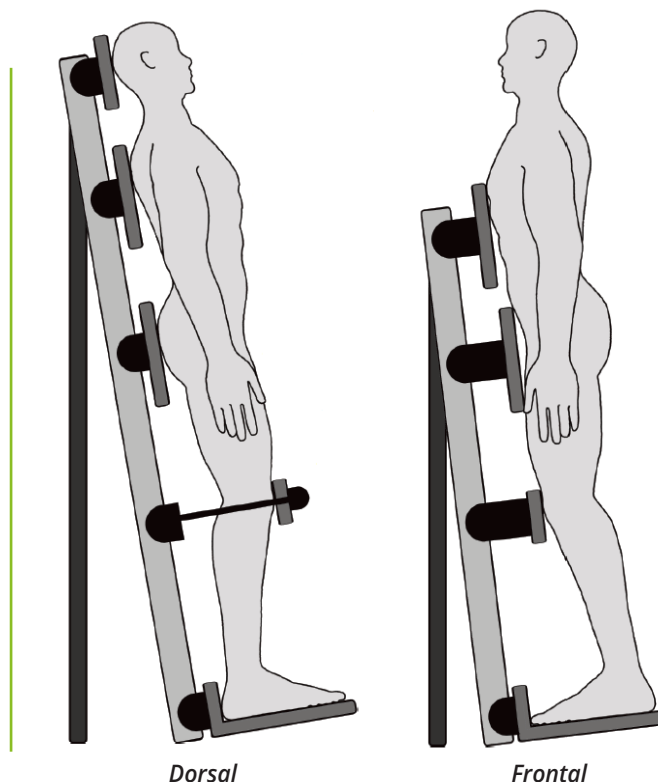

Oppreist posisjonering i ståstativet deles gjerne inn i to forskjellige typer; **frontalt og dorsalt**.

**Frontalt ståstativ** gir brukeren en mulighet til å ligge ventralt mot forskjellige avlastningspunkter for å lette belastningen på leddene i en stående posisjon.

Frontal posisjonering forutsetter at brukeren har tilfredsstillende muskel- og hodekontroll. Noen ganger brukes frontal posisjonering i ståstativ som en erstatning for en aktiv sitteposisjon, slik at brukeren får strukket hele overkroppen.

**Dorsalt ståstativ** åpner for det motsatte, hvor brukeren plasseres på rygg, før man oppnår stående posisjon. Ella håndterer alt fra de enkleste, og til de mer avanserte tilfellene av posisjonering og avlastning.

Med mindre tilfredsstillende hodekontroll anbefales posisjonering i en dorsal posisjon, i en vinkel der hodet hviler på hodestøtten og hvor leddene til de lavere ekstremiteter utsettes for skjelettbelastning.