



R82[®] 

R82 Crocodile

Motiverende støtte for bevægelse på nesten alle underlag

Gir motivasjon til bevegelse gjennom terrenget

R82 Crocodile er et ganghjelpemiddel for barn, utviklet for å støtte og styrke mobiliteten hos barn med fysiske utfordringer.

Crocodile er enkel å justere og bruke, og fungerer som en pålitelig gangtrener. Den gjennomtenkte utformingen og fokus på sikkerhet og fleksibilitet gjør den til et viktig hjelpemiddel for mange ulike brukere.

Ved hjelp av tilbehør kan Crocodile tilpasses barnets individuelle behov for støtte. Den finnes i to varianter for henholdsvis innen- og utendørs bruk, med totalt syv størrelser. Dette gjør Crocodile til et godt valg – enten det gjelder barnets aller første skritt eller behov for stabil støtte senere i livet. Den er en trofast følgesvenn i hverdagen.



Hvordan å gå endrer alt

Å gå er mer enn bare en milepæl i utviklingen. Det er en inngang til selvstendighet, utforskning og kontakt med omverdenen. For barn er det en viktig milepæl som åpner døren til utallige muligheter for vekst – fysisk, følelsesmessig og mentalt.

Hvorfor går vi?

De fleste barn begynner å gå mellom åtte og atten måneder, i en av de mest intense utviklingsfasene. Før de kan gå, begrenser krabbing eller annen bevegelse perspektivet til gulvnivå. Det endrer seg dramatisk når barnet reiser seg. I det øyeblikket barnet står oppreist, får verden en ny dimensjon – full av muligheter.

Å gå endrer hvordan barn samhandler med omgivelsene. Det gir dem en dypere forståelse av rom, gjenstander og mennesker. De kan bevege seg lenger og utforske fritt. For hvert skritt vokser selvstendigheten, forståelsen av verden blir større, og selvtiliten styrkes. Dette gir barnet en følelse av frihet som oppmuntrer til nysgjerrighet og utforskning – og åpner for nye veier til å lære og knytte bånd.

Fordelene med å gå handler om mer enn det fysiske. Når barnet begynner å gå, får det hendene fri til å bære, peke og utforske gjenstander. Dette gir rikere opplevelser og stimulerer problemløsning, valg og romforståelse.

Lær mer om
å gå



Fordeler med å gå

Å gå er en av de mest grunnleggende motoriske ferdighetene, og bidrar til barnets utvikling på flere områder. Gåtrening styrker fysisk helse, emosjonell trivsel, sosial deltakelse og kognitiv utvikling.



Kognitiv utvikling

Å gå endrer hvordan barn samhandler med omgivelsene. For hvert skritt vokser følelsen av selvstendighet, forståelsen av verden blir dypere, og selvtiliten blomstrer.



Bedre kondisjon

Ganghjelpemidler fremmer bevegelse og kan hjelpe barn med funksjonsnedsettelse å overvinne barrierer for fysisk aktivitet. Dette reduserer stillesitting og styrker kondisjon og lungefunksjon.



Fysisk vekst

Å gå er viktig for å bygge styrke og koordinasjon. Det fremmer bentetthet og styrker musklene. Bevegelse på tross av tyngdekraften bidrar også til bedre holdning og romforståelse.



Emosjonell og sosial trivsel

Å gå åpner en verden av følelsesmessige og sosiale muligheter. Med bevegelse kommer evnen til å ta egne valg – som å bestemme hvor man vil gå og hva man vil utforske. Selvstendighet bygger selvtilitt og styrker følelsen av egen identitet.





Bevegelse er en rettighet for alle barn

Å kunne bevege seg er ikke bare en milepæl i utviklingen – det er en grunnleggende menneskerett. Bevegelse er viktig for barns vekst, trivsel og følelse av tilhørighet – enten det er latteren når de sniker seg innpå en søsken, løper unna leggetid eller springer rett inn i armene på noen de er glad i. Når barn får støtte til å bevege seg, handler det ikke bare om å nå fysiske milepæler – det bygger også selvstendighet og selvtillit som varer livet ut.

Et ledd i tidlig innsats

For noen barn med utviklingsforsinkelser eller funksjonsnedsettelse kommer ikke gangfunksjonen naturlig eller innenfor forventet tidsramme. Dette kan begrense mulighetene for utforsking og læring som bevegelse gir. I tillegg kan barnets naturlige nysgjerrighet og eventyrlyst dempes hvis det ikke får samhandle fritt med omgivelsene.

Tidlig innsats er avgjørende. De første leveårene er et kritisk vindu der kropp og hjerne er spesielt mottakelige for utvikling. For barn med utfordringer knyttet til mobilitet, kan riktig støtte i denne perioden – som ganghjelpemidler, terapeutiske tiltak og posisjoneringsutstyr – gi verdifulle muligheter for utforsking og samspill.



Crocodile størrelse 1 med starter kit.

Crocodile for småbarn





Når barnets utvikling er forsinket, kan tidlig innsats bidra til å støtte og kompensere for manglende mobilitet. Over tid kan dette ha stor betydning for barnets utvikling.

For våre aller minste brukere har vi utviklet Crocodile i størrelse 0. I tillegg finnes det et tilbehør til størrelse 1 som gjør det mulig å tilpasse den til en enda mindre størrelse – en mellomting av Crocodile størrelse 0 og 1.

Lær mer om
tidlig innsats



Mål for de minste brukerne

Mål		Størrelse 0	Størrelse 1 satt opp med starter kit	Størrelse 1
 Høyde fra gulv til håndtak		300 - 610 mm	380 - 700 mm	420 - 715 mm
 Bredde mellom håndtak		100 - 280 mm	90 - 350 mm	190 - 350 mm
 Lengde		640 mm	660 mm	720 mm
 Maks brukerhøyde		1050 mm	1150 mm	1150 mm

Den forvandlende kraften i å være ute i naturen



Se Andreas og familien nyte
naturen.

Forskning tyder på at kontakt med naturen kan øke livskvaliteten, forbedre konsentrasjonen og redusere stress.

Naturen fremmer en mer positiv sinnstemning, gir mer energi og styrker evnen til å fokusere. Den har en unik evne til å støtte både kropp og sinn, og gir oss utallige muligheter til å vokse, utforske og knytte bånd.

Fra barnets første leveår er kontakt med naturen langt mer enn bare underholdning. Det legger grunnlaget for en sunn kropp, et sterkt sinn og gode relasjoner senere i livet. Naturoplevelser er også viktig for barn med funksjonsnedsettelse.

Å sikre tidlig tilgang til naturen for alle barn bidrar til en meningsfull utvikling, og gir dem mulighet til å blomstre på sin egen unike måte.

Samspill med naturen: Slik påvirker det barnets trivsel

Tid tilbragt i naturen har en veldig god effekt på barns mentale helse. Bare det å være utendørs kan redusere stress, styrke konsentrasjonen og fremme emosjonell robusthet. Studier viser at barn som ofte er i kontakt med naturen, har bedre fokus og takler utfordringer lettere.

For små barn er naturen et sansestimulerende miljø der nysgjerrigheten får fritt spillerom.

Å kjenne på bladene, følge med på insekter eller lytte til fuglesang stimulerer den mentale utviklingen og gir en dypere forståelse av verden. For barn med funksjonsnedsettelse kan godt tilrettelagte sanseaktiviteter – som naturbingo eller en sansehage – skape trygge og tilpassede rom som fremmer kognitiv og emosjonell utvikling. Disse oppdagelsesøyeblikkene bygger selvtillit og gir grunnlag for gleden ved å utforske.

Slik påvirker naturen kropp og mobilitet

De fysiske fordelene ved lek ute er like viktige.

Enten det handler om å løpe over enger, plaske i sølepytter eller grave i jorda, hjelper uteaktiviteter barn med å utvikle styrke, koordinasjon og bevegelighet. Disse bevegelsene fremmer sunn vekst og gjør fysisk aktivitet til noe naturlig og gøy – ikke en plikt.

Naturen byr på haugevis av muligheter for mestring, også



for barn med fysiske utfordringer.

Tilgjengelige turstier, hjelpemidler og tilpassede lekeplasser gjør det mulig for flere barn å oppleve gleden ved å bevege seg ute.

Aktiviteter som inkluderende hageprosjekter, tilrettelagt turgåing eller bare en tur med familie og venner kan styrke både kropp og sinn. Slike aktiviteter gir bedre fysisk utholdenhet og unike sanseopplevelser med frisk luft, sol og naturens lyder.

Disse opplevelsene av naturens magi skal være tilgjengelig for alle barn – uansett forutsetninger.

Lær mer om fordelene med utendørsaktiviteter



Riktig tilpasset

Crocodile hjelper barnet til en mer oppreist stilling. Den plasseres bak barnet, og den lette konstruksjonen gjør den enkel å flytte og bruke – samtidig som barnet får en stabil og støttet gange.

Crocodile har en høyderegulerbar toppbøyle og multijusterbare håndtak som kan tilpasses både i høyde og bredde.

Når håndtakene plasseres nær kroppen, gir de bedre støtte og stabilitet. Sammen med et bredt utvalg av tilbehør kan Crocodile enkelt tilpasses barnets behov og vekst.



Alltid trygg

Trygghet er viktig når verden skal utforskes. Derfor har Crocodile ryggstopp, og er tilgjengelig med både parkeringsbrems og faste eller utsvingbare tippesikringer. Alt bidrar til et trygt og stabilt ganghjelpemiddel for barnet ditt.

Crocodile har også ytterligere tilbehør som gir barnet en trygg følelse mens det utforsker verden på egen hånd.

Alle typer underlag

Crocodile finnes i to ulike størrelsesvarianter: Crocodile som har fire størrelser, og Crocodile for utendørs bruk som har tre størrelser.

Hovedforskjellen finner vi ved hjulene, som gjør det mulig å leke og delta i alle aktiviteter, uansett om underlaget er parkettgulv eller sti.

Crocodile størrelse 0, 1, 2 og 3 har mindre og slankere hjul med justerbar motstand, og er dermed ideell for innendørs bruk.

Crocodile for utendørs bruk størrelse 1, 2 og 3 har større hjul for bedre manøvrerbarhet på ulike underlag.



Klar for eventyr

Crocodile støtter selvstendighet innen bevegelse og lek. Den lar barnet delta aktivt og utforske omgivelsene slik som andre barn, fordi Crocodile kan brukes på alle typer underlag. Med løsninger som passer både innendørs og på ulike typer underlag ute, gir den mange muligheter til å utfordre barnets balanse og kontroll.

Med ergonomiske håndtak og en lett ramme er Crocodile enkel for barnet å manøvrere. Den kan også enkelt foldes sammen slik at den er lettere å transportere.

Å velge en Crocodile med smalere hjul er ideelt for småbarn eller barn med redusert balanse og kontroll, som hovedsakelig går innendørs eller på jevne underlag. Det gir mindre rullemotstand og en mer stabil gange.

Crocodile for utendørs bruk med større og bredere hjul er bedre egnet for barn som liker å utforske mer krevende omgivelser.

De større hjulene gir svært god fremkommelighet på underlag som grus, stier og ujevnt terreng. Med dypere mønster og større kontaktflate får hjulene bedre grep, noe som gir en jevnere og mer komfortabel tur – samtidig som stabilitet og fremdrift forbedres. Dette åpner for flere muligheter til å nyte lek og aktivitet på uteområder.

Finn ut mer om Crocodile for utendørs bruk



Barn som bare ønsker å bevege seg ...

Aktive ute i naturen

Da Andreas var 18 måneder, fikk han diagnosen spastisk tetraplegisk cerebral parese på GMFCS-nivå III. Han har utfordringer med å gå og går på tå, derfor bruker han skinner hver dag.

Andreas' verden ble mye større med den nyeste Crocodile-varianten.

Han elsker friheten den gir – å komme seg over kanter og ujevnheter, spille fotball, løpe gjennom søledammer og gå tur i skogen uten å bekymre seg for underlaget

Les historien om Andreas



Støtte i overgangene

Da Tobias var rundt 9 måneder, fikk han diagnosen spinal muskelatrofi type 1.

Etter å ha fått medisinsk behandling ble han gradvis sterkere og begynte å utvikle grovmotoriske ferdigheter, men han trengte fortsatt støtte når han gikk. For å styrke den selvstendige gangen fikk Tobias en Crocodile i størrelse 0 i stedet for Mustang, som han brukte tidligere

Les historien om Tobias



Friheten i det å gå

Oscar (16 måneder) har fått diagnosen ensidig spastisk cerebral parese på høyre side, som følge av periventriculær leukomalasi.

Han er klassifisert på GMFCS-nivå I eller II, og forventes å kunne lære å gå selvstendig mellom 18 måneder og 2 år – uten behov for hjelpemidler. I mellomtiden får han støtte fra sin Crocodile med starter kit montert.

Les historien om Oscar



... og ha det gøy!

Selvstendig mobilitet

Konrad ble født for tidlig og fikk senere diagnosen Angelman syndrom – en sjelden genetisk tilstand som kjennetegnes av alvorlig utviklingsforsinkelse og lærevansker.

Når han bruker sin Crocodile, konfigurert med rygg- og sidestøtte samt belte, kan Konrad gå selvstendig. Han utvikler gradvis nye motoriske ferdigheter, noe som krever kontinuerlig justering av graden av støtte i hjelpemidlene hans.

Les historien om Konrad



Forskjellen med en Crocodile

Da Alfie, som har global utviklingsforsinkelse (GDD) og lav muskeltonus, begynte på Humberston Park Special School som 3-åring, hverken gikk han selvstendig eller utforsket omgivelsene.

Med et kombinert utviklingsprogram hjemme og på skolen mestret Alfie gradvis ferdigheten å gå selvstendig ved hjelp av Crocodile.



Les historien om Alfie

Idrettsglede

Frame Football er en inkluderende sport som gir barn med begrenset mobilitet mulighet til å nyte spillet og samtidig samhandle sosialt med andre barn med funksjonsnedsettelse.

Da Fin begynte å spille Frame Football med sin Crocodile, gjorde han raske fremskritt og satte pris på den enkle manøvreringen – og muligheten til å ta en pause i pausen.

Les historien om Fin



Funksjoner

Crocodile er den perfekte følgesvennen for hverdagens små eventyr. Et bredt utvalg av tilbehør kan legges til for å dekke barnets behov for støtte mens det utforsker verden.

Vekst og støtte

Crocodile tilpasses enkelt takket være enkel høyderegulering og to bredde- og høydejusterbare håndtak. Når håndtakene plasseres nær kroppen, gir de barnet bedre støtte og en mer optimal gangstilling. Ekstra tilbehør kan legges til for å sikre at barnet får en stabil gangposisjon, som fremmer samspill og deltakelse med både familie og venner.

Tidlig innsats

Ved å velge Crocodile i størrelse 0 eller 1 med tilbehøret starter kit montert, får barnet støtte til å stå og gå. Dette gir mulighet for tidlig innsats og fremmer sosial kontakt med foreldre, omsorgspersoner og omgivelsene.



Sikkerhet

Crocodile er utviklet med fokus på komfort og sikkerhet og leveres med en ryggesperre som hindrer at den ruller bakover. I tillegg kan bremses (inkludert for utendørsvarianten) monteres for ekstra trygghet, slik at barnet kan være med på familieaktiviteter i alle typer terreng.

Pausemulighet på stedet

Ved å legge til det nedfellbare setet (inkludert for utendørsvarianten) på barnets Crocodile, får barnet mulighet til å ta en pause når det trengs.

Enkel å transportere

Crocodile kan enkelt foldes sammen med sete og tilbehør montert, noe som gjør den til den perfekte følgesvennen å ta med på farten.

Kan tilpasses utendørs bruk

Crocodile har forhjul med retningsstabilisatorer som gir barnet støtte til å gå på ulike underlag. Ved å velge mellom Crocodile med justerbar motstand i bakhjulene, eller utendørsvarianten av Crocodile med større hjul og dypere mønster, får du mulighet til å finne den modellen som passer best for barnets behov.

Crocodile-serien

Crocodile-serien består av sju størrelser og to varianter: Crocodile og Crocodile for utendørs bruk. Vi har samlet de viktigste egenskapene for hver variant, slik at du kan ta et informert valg når du skal finne riktig ganghjelpemiddel for barnet ditt.



Crocodile:

Crocodile finnes tilgjengelig i størrelse 0, 1, 2 og 3

- Høyderegulerbar ramme
- Brede- og høydejusterbare håndtak
- Ryggesperre
- Smale hjul med justerbar motstand på bakhjulene
- Sammenleggbar ramme
- Mye tilbehør for ytterligere støtte
- Passer for barn med høyde fra 1050 mm til 1800 mm
- Mulig å montere starter kit på størrelse 1

Crocodile for utendørs bruk:

Crocodile for utendørs bruk finnes tilgjengelig i størrelse 1, 2 og 3

- Høyderegulerbar ramme
- Brede- og høydejusterbare håndtak
- Ryggesperre og fremdriftsbrems
- Større hjul med dypere mønster og en gummiblanding som er bedre egnet utendørs
- Mulig å ta av bakhjulene ved transport
- Sammenleggbar ramme
- Nedfellbart sete
- Mye tilbehør for ytterligere støtte
- Passer for barn med høyde fra 1190 mm til 1840 mm

Les mer
om Crocodile



Mål

		Str 0	Str 1	Str 1 ute	Str 2	Str 2 ute	Str 3	Str 3 ute
	Bredden mellom håndtak	100-250 mm	190-350 mm	190-350 mm	240-420 mm	240-420 mm	330-480 mm	330-480 mm
	Høyde fra gulv til håndtak	300-610 mm	420-710 mm 380- 700 mm*	460-750 mm	560-850 mm	600-890 mm	740-1025 mm	780-1065 mm
	Maks brukershøyde	1050 mm	1150 mm	1190 mm	1500 mm	1540 mm	1800 mm	1840 mm
	Maks brukervekt	30 kg	30 kg	30 kg	45 kg**	45 kg**	80 kg**	80 kg**
	Lengde	640 mm	720 mm	780 mm	840 mm	900 mm	870 mm	930 mm
	Bredden	580 mm	630 mm	660 mm	690 mm	700 mm	690 mm	720 mm
	Lengde sammenslått	650 mm	720 mm	750 mm	860 mm	890 mm	1000 mm	1030 mm
	Bredden sammenslått	580 mm	620 mm	660 mm	690 mm	700 mm	690 mm	720 mm
	Høyde sammenslått	300 mm	300 mm	345 mm	270 mm	310 mm	290 mm	330 mm


*Utstyrt med tilbehøret starter kit. Se øvrige mål på side 5 i denne brosjyren.
**Produktet må utstyres med bremses. Derfor er bremses inkludert i vår norske standard.

Se flere mål på vår nettside

Fargevalg



Tilbehør

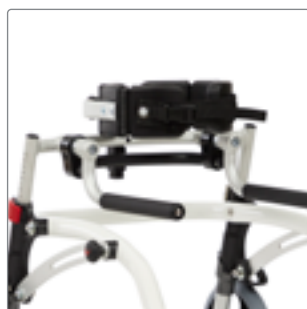

Bolstøtte

Beskrivelse | Art.nr | HMS
One size | 31868610 | 313492




Ryggstøtte med sidestøtter

Beskrivelse | Art.nr | HMS
Str S | 3186808 | 139759
Str L | 3186809 | 139760


Belte

Beskrivelse | Art.nr | HMS
One size | 31SN4016 | 024428

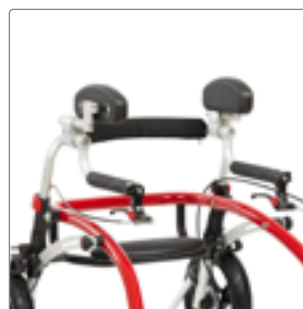

Hoftestøtter

Beskrivelse | Art.nr | HMS
One size | 3186819 | 024418

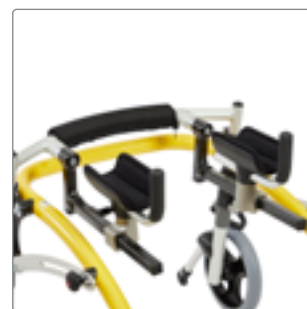

Underarmstøtte med gripehåndtak


Beskrivelse | Art.nr | HMS
Str 0+1 | 3186858-1 | 298248
Str 2 | 3186859-1 | 298249
Str 3 | 3186860-1 | 298250

Tilbehør




Starter kit

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 1	3186801-0	298248

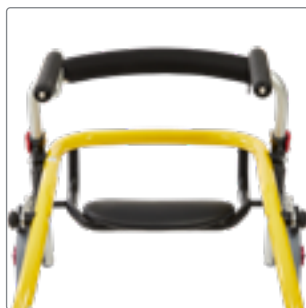


Sete, oppfellbart

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 0, hvit	3186820-01	298248
Str 1+1 ute, sort	3186820	xxxxx
Str 2 ute, sort	3186822	xxxxx
Str 3+3 ute, grå	3186863	xxxxx

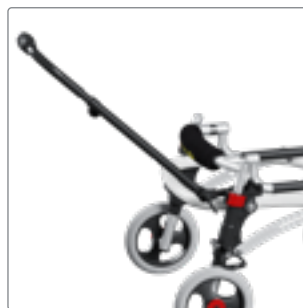

Ledsagerhåndtak

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 1	3186866-1	298248

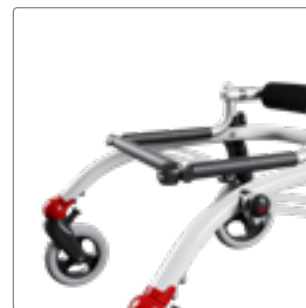


Gripebøyle

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 0	3186879-0	xxx
Str 1	3186879-1	xxx
Str 2	3186879-2	xxx



Vinkelregulerbar gripebøyle

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 0	3186878-0	xxx
Str 1	3186878-1	xxx
Str 2	3186878-2	xxx

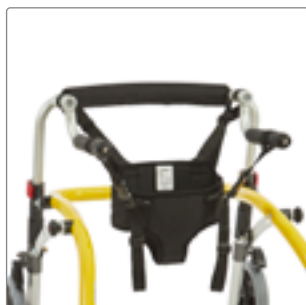

Hengesete

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 1	3186824	xxx
Str 2	3186825	xxx




Hengesete, lettvekt

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 1	3186824-1	267622
Str 2	3186825-1	267623



Veske

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 1+2	3186839	193995
Str 3	3186843	214795

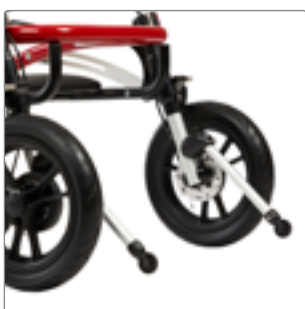


Tippekring, fast

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 1	3186815-F	214765
Str 2	3186815-3F	214766

Tippekring, oppfellbare

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 1	3186815	024416
Str 1 ute	31868151	
Str 2	3186815-3S	201384
Str 2 ute	31868153	

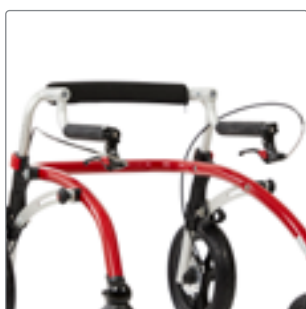


Fremdriftsbremse

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 1+2	3186834-DEC	313122
Str 3	3186873-DEC	313123
Str 1 ute	31868341	
Str 2 ute	31868342	
Str 3 ute	31868343	


Håndbremse

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 1+2	3186834	096694
Str 2	3186873	211622

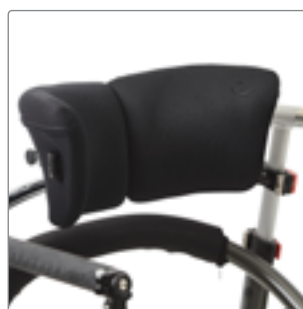

Ryggstøtte, regulerbar

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 3	3186886	201385

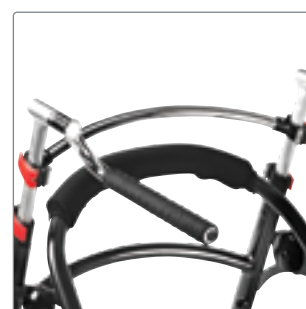

Tverrstag

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 3	3186880	201386

Se flere tilbehør på vår nettside



Crocodile_brochure.B1200_01_INT | Reserving our rights for printer's error or discontinued products. Please find an updated edition on our website: etac.com
© R82 AS All rights reserved.

Etac er en verdensledende utvikler av innovative hjelpemidler og utstyr for pasienthåndtering. Siden 1973 har vi jobbet for å forbedre livskvaliteten for den enkelte, familiemedlemmer og omsorgspersoner.

For informasjon om produktene og siste oppdateringer, besøk www.etac.no

ETAC AS



+47 815 69 469



hovedkontor.norge@etac.com



www.etac.no

 **etac**[®]

Creating Possibilities