

sensio

ALF Triple Call Button

Bruks- og monteringsanvisning



Produktnummer: 606600

Dokument: 9167-1

Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	4
Kom i gang	5
Bruk	6
Feilsøking	7
Spesifikasjoner	8
Vedlikehold	9
Resirkulering	9
Symboler	10
Godkjenninger	11
Support	11

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder
- Produktet må kun skrus fra hverandre for bytte av batteri.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys



Introduksjon

I esken

- ALF Triple Call Button med innebygget batteri
- Borrelås
- Våtserviett
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

Sender med tre knapper som sender forskjellig varsler til FlexiBlink-mottakere. ALF benytter et spesialbatteri med lang levetid.

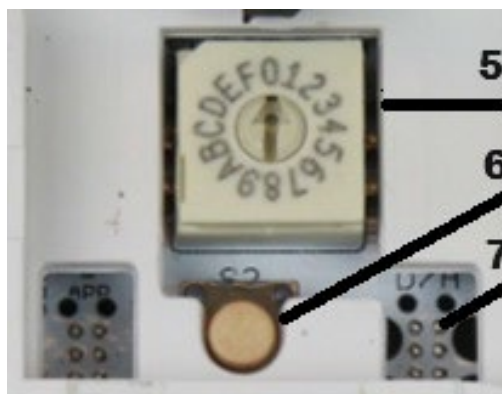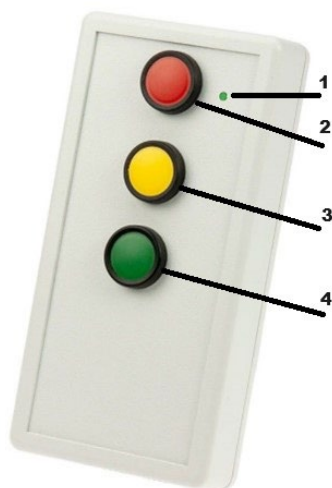

1. Lysdiode
2. Rød knapp – Hjelp meg nå!
3. Gul knapp – Kom snart
4. Grønn knapp – Assistanse ønskes
5. Funksjonsvelger
6. Pairing-knapp
7. Lysindikator

Kom i gang

Sammenkobling

Alle FlexiBlink-enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen. For å sammenkoble et FlexiBlink-system, må det alltid være en stasjonær mottaker som hovedenhet, som f.eks. IRIS alerter, ALMA alerter eller BRITT bed shaker, i systemet. For sammenkobling, følg beskrivelsen under:

1. På hovedenheten: Velg **Inviter** via skjermen eller trykk **2 ganger** på **Pairing**-knappen på IRIS, ALMA eller BRITT
2. På ALF: Trykk **1 gang** på **Pairing**-knappen
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder eller ved beskjeden «Vellykket sammenkobling».

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3, ved å benytte samme hovedenhet

Montering

ALF monteres på veggen eller der brukeren trenger den

1. ALF monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelås-tapen
2. Vask stedet den skal monteres med den medfølgende spritservietten
3. Vent i 30 sekunder
4. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder

Borrelåsen har veldig kraftig tape. Når borrelåsen fjernes, kan det forårsake at tapeten følger med.

Testing

Test ALF ved å trykke på en av knappene på fronten og se at det kommer riktig varsel i FlexiBlink-mottakerne.

Bruk

Statusindikasjon

Når enheten er i bruk, vises statusen i lysindikatoren på forsiden:

- **Slukket:** Standby
- **Grønt lys:** Varsel sendt
- **Blinkende rødt/grønt lys:** Bytt batteri
- **Blinkende rødt etter trykk:** Ikke koblet sammen med et FlexiBlink-system

Feilsøking

Det varsler ikke i mottakerne

- Batteriet er tomt. Bytt batteri. ALF benytter et spesialbatteri som kan kjøpes hos produsenten. For å bytte batteriet, må de fire små skruene på baksiden av ALF skrues ut og baklokket fjernes. Bytt batteri og skru baklokket på plass igjen.
- Enhetene er ikke riktig sammenkoblet. [Slett sammenkoblingen](#) og [sammenkoble på nytt](#)
- Avstanden mellom sender og mottaker er for lang. Sett da enhetene nærmere hverandre, eller sett inn repeater. Test ved å trykke på ALF og sjekk at det varsler i FlexiBlink-mottaker

Sammenkoblingen er feil

1. Slett sammenkoblingen: Trykk 5 ganger på Pairing-knappen. Enheten svarer med rødt og grønt blinkende lys
2. [Sammenkoble på nytt](#)

Rødt lys i enheten ved sammenkobling

Sammenkobling mislyktes. [Slett sammenkoblingen](#) og [sammenkoble på nytt](#).

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Batteri:** Innebygd litium, 3V
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **IP-grad:** IP20
- **Radiofrekvens:** 2400 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks. 20 mW

Dimensjoner

- **Høyde:** 130 mm
- **Bredde:** 65 mm
- **Dybde:** 28 mm
- **Vekt:** 140 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen. Se oppdateringer på Sensio sine nettsider.

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Les bruksanvisning og monteringsanvisning



Produsent



Produksjonsdato



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47