




BRUKERMANUAL

Active Oral Clean

Elektrisk tannbørste med sug

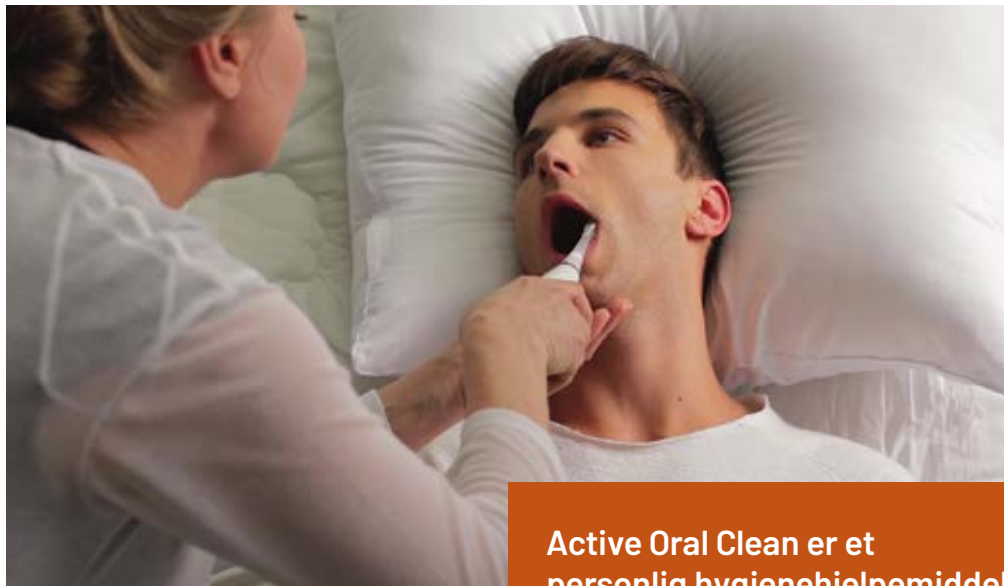

Active Oral Clean er et
personlig hygienehjelpemiddel



Active Oral Clean

Elektrisk tannbørste med sug

- Dette produktet er en elektrisk tannbørste med en innebygd sugefunksjon som støtter hygienisk munnpleie for personer som ikke kan stå ved en vask mens man pusser tennene.
- Den innebygde sugefunksjonen trekker ut skyllvannet inne i munnen mens du pusser.
- De soniske vibrasjonene øker rengjørings effektiviteten for en grundig og praktisk pusseopplevelse.
- LED-belysningen integrert i børstehodet lyser opp munnhulen og gir bedre oversikt under pussingen.
- Denne manualen vil veilede deg gjennom sikker og effektiv bruk av din nye Active Oral Clean.

Trådløs lading	Ja
Oppsugingsevne	Ca. 500 ml per minutt ($\pm 25\%$)
Soniske vibrasjoner	14 000 vibrasjoner i minuttet ($\pm 20\%$)
Vannbestandighet	IPX4
LED-lys	Ja
Batterilevetid	Opptil 3 ukers bruk på en enkelt lading
Batteritype	1,600 mAh Li-Ion Battery

Innholdsfortegnelse

1. Pakkens innhold	4
2. Active Oral Clean består av	5
3. Lade Active Oral Clean	6
4. Sette sammen Active Oral Clean	7
5. Hvordan bruke skrukorken	9
6. Viktig informasjon før bruk	11
7. Bruke Active Oral Clean.....	13
8. Rengjøring og vedlikehold.....	15
9. LED indikatorer.....	18
10. Ofte stilte spørsmål	19

HUSK!
Tannbørsten må
lades før bruk.

Se side 6

1. Pakkens innhold

1. Tannbørste
2. Børstehode (2 stk) – liten og stor
3. Slange
4. Oppsamlerpose
5. Rengjøringsbørste
6. Håndledsstropp
7. Strømadapter
8. Ladekabel
9. Skrukork
10. Bruksanvisning



2. Active Oral Clean består av

1. Børstehode
2. Sugedyse
3. Strømbryter
4. Ladeport
5. Slangetilkoblingsdyse
6. Spor for håndleddsrem



Når du skal bytte deler?

For optimal renslighet og hygiene anbefales det å regelmessig bytte forbrukbare deler.

<u>Børstehodet</u>	<u>2 måneder</u>
<u>Slange</u>	<u>Ved behov</u>
<u>Oppsamlerpose</u>	<u>Ved behov</u>
<u>Skrukork</u>	<u>Ved behov</u>

3. Lade Active Oral Clean



1. Sjekk bunnen av tannbørsten og overflaten på ladeporten for fremmedlegemer.



2. Før den runde delen av ladekabelen nær ladeporten på bunnen av enheten. Den vil feste seg selv, den er magnetisk.

NB! Lad produktet før det brukes for første gang!



3. Sett strømadapteren i stikkontakten.

4. Sette sammen Active Oral Clean



1. Monter børstehodet

Tre børstehodet over basen og vri børstehodet fra "unlock" til "lock" for å feste det. Nå er børstehodet i låst posisjon.



2. Monter håndleddsstropp

Tre håndleddsremmen inn i sporet for håndleddsremmen nederst på tannbørsten.



3. Monter slangen

Tre slangen over koblingsdysen nederst på tannbørsten.



4. Alt 1: Monter oppsamlerposen

Sett den åpne enden av slangen inn i dysen på korken til oppsamlerposen.



Alt 2: Koble til skrukorken

Fest skrukorken godt på PET-flasken. Tre den andre enden av slangen, som er festet til Active Oral Clean-tannbørsten, gjennom hullet merket med [+]

5. Hvordan bruke skrukorken



Fest skrukorken godt på PET-flasken.
Tre den andre enden av slangen, som er festet til tannbørsten, gjennom skrukorken ved å føre den inn i hullet merket [+] i midten av skrukorken.



Sørg for at PET-flasken står oppreist.
Hvis flasken tiltes, kan det føre til vannlekkasje.
Stram skrukorken godt før bruk for å unngå lekkasje.
Bruk kun på flasker med kompatibel korkstørrelse for å unngå mulige lekkasje problemer.

Dersom man ikke har
oppsamlerposen tilgjengelig,
kan man bruke en flaske.
Pass på at skrukorken passer
med flasken.

Forholdsregel 1

Skrukorken kan vaskes og brukes om igjen.
Den tåler oppvaskmaskin.
Varme- og kuldebestandig temperatur: 120 °C til -55 °C



Forholdsregel 2

For å unngå feilfunksjon, sørg for at slangen ikke er klemt. Dersom slangen er klemt kan det hindre korrekt vanddrenering.



Forholdsregel 3

- Sørg for at PET-flasken står oppreist. Hellende eller liggende posisjon kan føre til lekkasje.
- Stram korken godt før bruk for å hindre lekkasje.

- Bruk kun flasker med compatible korkstørrelser for å unngå mulige lekkasje problemer.
- Skrukorken kan vaskes og brukes om igjen. Den tåler vask i oppvaskmaskin. (Varme- og kuldebestandig temperatur: 120 °C ~ -55 °C)

6. Viktig informasjon før bruk



1. Heng oppsamlерposen rundt nakken eller et annet sikkert sted nært tannbørsten.



2. Sikre tannbørsten ved å ta på deg håndleddsstroppen.



3. Sørg for at mottakerens overkropp er tilstrekkelig oppreist. For personer med dysfagi, hold overkroppen så oppreist som mulig under bruk for å forhindre at vann kommer inn i luftveiene.

NB! Lad produktet før det brukes for første gang!



Forholdsregel 1

Hold oppsamlingsposen oppreist under bruk for å forhindre overløp. Korken har et hull for å justere lufttrykket.



Forholdsregel 2

Fjern eventuelt fremmedlegemer, matrester og evt. seigt slim fra mottakerens munn før bruk. Fremmedlegemer, matrester og seigt slim kan tette børstehodet. Dette kan også redusere sugekraften.

7. Bruke Active Oral Clean



1. Påfør en passe mengde flytende tannkrem.

NB! Vi anbefaler å bruke flytende tannkrem, som ikke inneholder skummemiddelet SLS (natriumlaurylsulfat; Sodium Lauryl Sulphate).



2. Aktiver den soniske vibrasjonen ved å trykke på strømbryteren én gang. Børst alle områder av munnen grundig.



3. Når du skyller, hell rent vann i munnen. For enkel bruk anbefales en vannflaske med sprayfunksjon.

NB! Hvis personen har dysfagi, må en være oppmerksom og passe på at vannet ikke kommer inn i luftveiene.



4. Trykk på strømbryteren igjen for å aktivere sugefunksjonen, og bruk den for å fjerne skyllvannet fra munnen.



Sonisk vibrasjon + sug

Både den soniske vibrasjonen og sugefunksjonen opererer samtidig. Trykk på strømbryteren kort for å sette på pause eller gjenoppta.

Bytte mellom funksjoner

Når tannbørsten er slått av, hold strømbryteren i 3 sekunder for å bytte modus.



Trykk på strømbryteren kort for å bytte mellom sonisk vibrasjon og sug. Hold strømbryteren i 3 sekunder for å slå av enheten.



Forholdsregel

Sugehullene er plassert på den øverste delen av børstehodet. For å bruke sugefunksjonen, hold børstehodet med børstehårene vendt oppover.

8. Rengjøring og vedlikehold



1. Fjern eventuelt rusk fra børstehodet, og gjør klar en kopp rent vann til skylling.



2. Bruk sugefunksjonen for å føre rent vann gjennom børstehodet og slangen, slik at hovedenheten skylles.



3. Etter at du har fjernet børstehodet fra hovedenheten, bruk rengjøringsbørsten for å rengjøre sugemunningen.



4. Bruk rengjøringsbørsten for å vaske børstehodet grundig.



5. Åpne skrukorken på oppsamlerposen og skyll den med rent vann.



6. Etter vask, tørk børstehodet, hovedenhet, slangen og den sammenleggbare posen før oppbevaring.



Forholdsregel 1

Tørk bort vann på strømbryteren med et håndkle eller en våt serviett.



Forholdsregel 2

Hovedenheten skal ikke senkes ned i vann.



Forholdsregel 3

Ikke vask tannbørsten eller andre komponenter av produktet i oppvaskmaskin.
(Kun skrukorken kan vaskes der!)

9. LED indikatorer



Lader
Rødt LED-lys



Ferdig ladet
Grønt LED-lys



Aktiv
Hvitt LED-lys



Lavt batteri
Hvitt LED-lys
som blinker



Bytte til
"single mode"
Blått LED-lys
som blinker



Bytte til
"dual mode"
Grønt LED-lys
som blinker


10. Ofte stilte spørsmål

Funksjon og bruk	Hva bør man sjekke	Tiltak
	Hvorfor lager tannbørsten lyd ved bruk?	Det er normalt. Lyd oppstår når enheten suger vann.
	Hva skal jeg gjøre hvis produktet ikke slår seg på?	Vennligst lad enheten. Hvis den fortsatt ikke fungerer etter lading, kontakt din lokale Nav Hjelpemiddelsentral.
	Hvorfor er vibrasjonen svak?	Vibrasjonen er designet for å være skånsom, spesielt for de med sensitiv tannkjøtt eller dårlig munnhelse. Dette er normalt for produktet.
	Hvorfor er ikke sugekraften sterk?	Sugehullene er plassert på toppen av børstehodet. Sørg for at både børstehodet og sugehullene er fri for rusk. Bruk også enheten med bustene vendt oppover for å oppnå bedre sugelytelse.
	Hva er anbefalt alder for å bruke dette produktet?	Produktet er egnet for brukere i alle aldre som pusser tennene.

	Hva bør man sjekke	Tiltak
Børstehode	Hvordan fester jeg børstehodet?	Sørg for at bustene vender bort fra strømbryteren. Når du fester børstehodet, roter det til venstre slik at det utstikkende merket på bunnen av børstehodet samsvarer med merket på hovedenheten.
	Hvor ofte bør børstehodet byttes?	Det anbefales å bytte børstehodet etter 2 måneders bruk. Langvarig bruk øker risikoen for bakterievekst, og på grunn av utslitte børstehår blir det vanskelig å opprettholde effektiv munnhygiene.
	Er det kompatibelt med andre elektriske børstehoder?	Nei, det er kun kompatibelt med Active Oral Clean børstehoder.
Slange	Hvor lenge kan slangen brukes?	Bytt det ut når det er nødvendig, for eksempel ved forurensning, skade eller av andre grunner som krever utskifting.
	Hvordan rengjør man slangen?	Etter at du har pusset tennene, aktiver sugefunksjonen og sug grundig opp en rikelig mengde rent vann for å skylle.

	Hva bør man sjekke	Tiltak
Oppsamlerpose	Er skrukorken kompatibel med plastflaskekorker?	Nei, skrukorken til oppsamlerposen er ikke kompatibel med standard plastflaskekorker. Imidlertid kan du koble slangen til den medfølgende skrukorken for å bruke den med plastflasker.
	Hvor lenge kan oppsamlerposen brukes?	Bytt den ut ved behov, for eksempel ved forurensning, skade eller andre grunner som kan kreve utskifting.
	Hvordan rengjør du oppsamlerposen?	Skyll den grundig med rent vann, tørk den, og oppbevar den deretter.
Lading	Hvor lang tid tar det å lade?	Det tar 4 timer å lade enheten helt opp.
	Hvor lenge varer en full lading?	ca. 3 uker.
	Når må jeg lade?	Hvit LED-lys vil blinke, noe som indikerer at batteriet er lavt og må lades.

	Hva bør man sjekke	Tiltak
Annet	Hvor får jeg tak i deler	Kontakt ergoterapeut i din kommune.
	Hva gjør jeg hvis det er feil på tannbørsten?	Ta kontakt med din lokale Nav Hjelpemiddelsentral
	Hvordan desinfiserer jeg Active Oral Clean	For å desinfisere enheten, oppløs en rengjøringsstablett i et glass med rent vann. Bruk deretter sugefunksjonen for å trekke rengjøringsløsningen gjennom enheten.
Hms.nr	Active Oral Clean	269341
	Suppleringspakke 4 børster, oppsamlerpose og slange	290063
	Suppleringspakke JUNIOR, 4 børster, oppsamlerpose og slange	327941

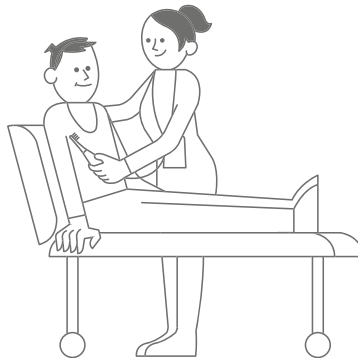

Active Oral Clean er
produsert av Bluereo Inc.

©2016 Bluereo Inc. All rights reserved.

BM-G100-M-E-250801 (Rev. 1.3)

Hjelpemiddelpartner AS
er ansvarlig leverandør i Norge.

I Norge er produktet markedsført
og solgt som Active Oral Clean.

www.hmp.no



hmp.no

HJELPEMIDDELPARTNER

