



Fraværsensor vekt stol/senge-ben

P144

Brukerhåndbok

Modell: P144

Alert-iT og Alert-iT-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for iTs Designs Ltd.

Copyright © 2025 iTs Designs Ltd.

Alle rettigheter forbeholdt.



Revisjonsoversikt:

Dato	Navn	Kort beskrivelse av endring
02.05.25	Bent-Håvard Sollid	Første utgave, basert på: UH1123 P144 Bed Occupancy (Weight) Detector

1 Brukerinformasjon

Fraværssensor vekt stol/sengeben P144 kan brukes mot Alert-iT sensormottakere P163.

Enheten registrerer at brukeren forlater sengen eller stolen på grunn av den reduserte vekten som virker på ett av benene.

2 Tiltentkt bruk

Brukerinformasjon for P150 gulvmatte

Mattene er utformet for minimal fare, men følg disse retningslinjene:

- Det er best å bruke matten over teppe. Dette reduserer ikke bare sklifarten, men forbedrer også følsomheten for kroppsvekt.
- Hvis P150-matten er utsatt for å skli på overflaten, kan et sklisikkert underlag kjøpes separat (P150D).
- Sørg for at mattekantene ligger flatt mot gulvet.
- Trekk kabelen rett under møbler eller fest den til gulvet med tape.
- Oppbevares flatt. Om den brettes sammen vil det føre til skade og ugyldiggjøre garantien.

3 Installasjon


- Senge-/stolbenet plasseres i fordypningen på kilen.
- For senger anbefales det å bruke et ben nær hodegavlen som bærer større pasientvekt.
- På hjulbein er det best å låse hjulene der det er mulig, da bevegelse i fordypningen kan påvirke vektinnstillingen.



3.1 Justering

Enheten må kalibreres for sengens vekt for å sikre maksimal følsomhet for brukeren.

- Bruk den røde innstillingsnøkkelen som følger med produktet.
- Vri justeringen mot klokken til monitoren indikerer tilstedeværelse.
- Vri nå med klokken til den viser at det ikke er noen til stede i stolen/sengen.
- Be brukeren om å gå opp i sengen. Da skal mottakeren vise at det er noen til stede.
- Dette skal gå over til å vise fravær når bruker forlater sengen.

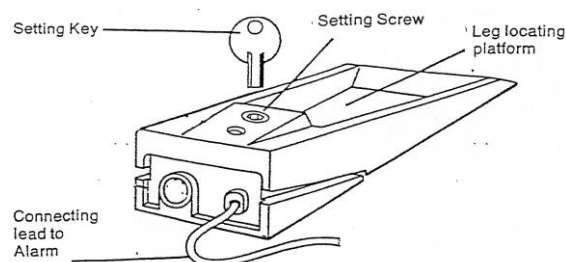

4 Tekniske data

Spesifikasjon

Mål	19 x 10 x 0,8 cm.
Konstruksjonsmateriale	Glassfiberforsterket nylonharpiks
Sengens/stolens maksimale vekt	200 kg
Minimum brukers vekt	40 kg

5 Renhold

Fraværssensor vekt stol/senge-ben P144 kan rengjøres med en tørr eller lett fuktet klut.



ITs Designs Ltd
T/A: Alert-iT Care Alarms
Fernie House (Unit 3)
Coalville Business Park
Jackson Street
Leicester, UK
LE67 3NR
Tel: +44 (0) 1530 239 900
Email: support@alert-it.co.uk
Web: www.alert-it.co.uk

For støtte, vennligst kontakt utstyrsleverandøren din.