

sensio

SOFUS Smart Activity Transmitter

Bruks- og monteringsanvisning



Produktnummer: 606315

Dokument: 9025-1

Innhold

Innhold	2
Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	5
Feilsøking	9
Spesifikasjoner	11
Vedlikehold	12
Resirkulering	12
Symboler	13
Godkjenninger	14
Support	14

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.


Introduksjon

I esken

- SOFUS Smart Activity Transmitter
- Batterier 2 stk. AA lithium
- Veggbrakett med låsedel
- Borrelåser
- Våtserviett
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

Tidsstyrt sensor som sender varsler til FlexiBlink-mottakere. Den benyttes oftest til å varsle passasje eller vandring. SOFUS må kobles til en av sensorene i FlexiBlink-systemet.

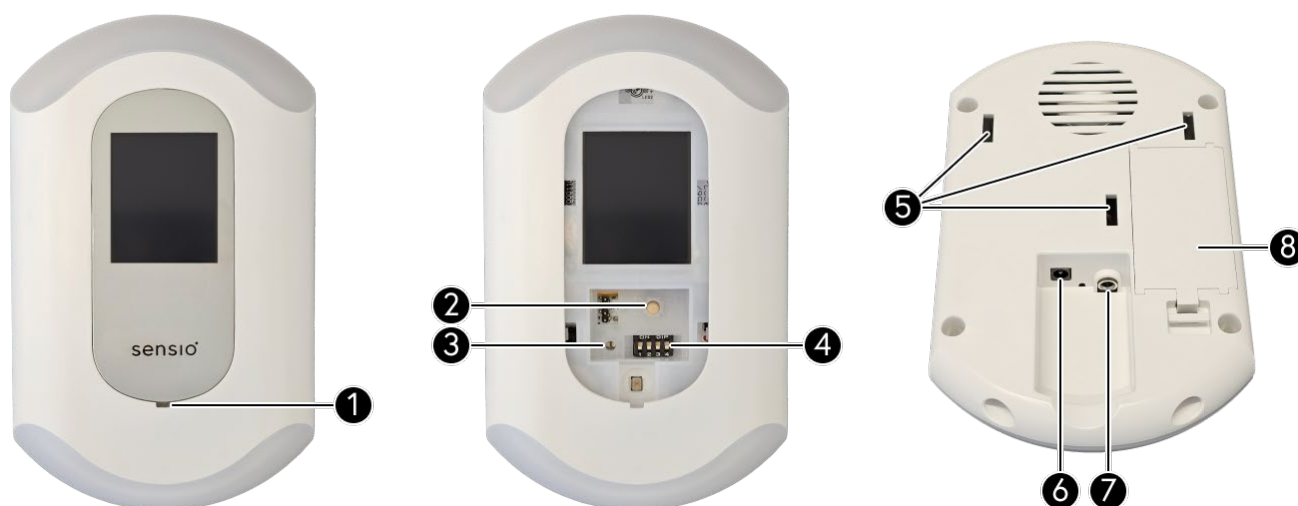

1. Spor for åpning av frontlokk
2. Pairing-knapp
3. Lysindikator
4. Funksjonsbrytere
5. Spor for veggbrakett
6. Strømtilkobling (Strømadapter medfølger ikke)
7. Signalinggang for tilkobling av sensor
8. Batterideksel

Kom i gang

SOFUS kan settes opp til å varsle i en periode av døgnet. Innenfor denne perioden sender den varsel til FlexiBlink-mottakere når hendelsen inntreffer.

SOFUS må kobles til en sensor som for eksempel:

- FLORA Floor Mat Sensor
- PIA PIR Motion Sensor
- PIA PIR Passage Narrow Sensor
- PIA PIR Passage Sensor
- MINA Magnetic Sensor
- SOFIA Bed Mat Sensor
- SOFIA Chair Mat Sensor

Montering

Enheten monteres normalt på veggen der sensoren skal plasseres

1. Sett inn begge de medfølgende batteriene i batterilommen ⑧ på baksiden. Den flate siden på batteriene(minus), skal vende oppover.
2. Med borrelås:
 - a. Vask området der enheten skal monteres med spritservietten som følger i pakken
 - b. Vent 1 minutt før dekkpapiet på borrelåsen fjernes og festes på veggbraketten
 - c. Fest aktivitetsvarslerens på veggbraketten i sporene ⑤
 - d. Trykk aktivitetsvarsleren med veggbraketten på plass på veggen og hold den fast i 30 sekunder
3. Alternativt kan veggbraketten skrus fast
4. Løft ned aktivitetsvarsleren og koble til sensoren
5. Heng opp aktivitetsvarsleren på veggbraketten

Borrelåsen har veldig kraftig tape. Når borrelåsen fjernes, kan det forårsake at tapeten følger med.

Sammenkobling

Alle FlexiBlink-enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen. For å sammenkoble et FlexiBlink-system, må det alltid være en stasjonær mottaker som hovedenhet, som f.eks. IRIS alerter, ALMA alerter eller BRITT bed shaker, i systemet. For sammenkobling, følg beskrivelsen under:

1. På hovedenheten: Velg **Inviter** via skjermen eller trykk **2 ganger** på **Pairing**-knappen på IRIS, ALMA eller BRITT
2. På SOFUS: Trykk **1 gang** på **Pairing**-knappen
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder eller ved beskjeden «Vellykket sammenkobling».

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3, ved å benytte samme hovedenhet

Innstillinger

1. Gå inn i skjermmenyen på Innstillinger
2. Aktivere varsling:
 - a. Velg Ja på Aktiver varsling
 - b. Velges Nei på dette, vil produktet settes inaktivt og vil ikke varsle
3. Velg funksjon:
 - a. Disse funksjoner reagerer med en gang hendelsen skjer:
 - i. Barnet har stått opp
 - ii. Passasjealarm
 - iii. Vandring inne
 - iv. Vandring ute
 - v. Opplest klokke tale fra IRIS
 - vi. Generell varsling
 - vii. Generell alarm
 - b. Disse funksjonene kan det legges inn forsinkelse på varslingen på:
 - i. Vandring inne – Benyttes sammen med sengematte
 - ii. Ute av seng – Benyttes med sengematte
 - iii. Lukk igjen kjøleskapet
 - iv. Generell varsling
 - c. Trykk Neste for å velge en annen funksjon. Bla til ønsket varsling
 - d. Velg Bekreft for å velge
4. Velg tidspunkt:
 - a. Velg hvilket tidsrom varslingen skal være aktiv. Velg fra-tidspunkt og velg Neste
 - b. Velg hvilket tidspunkt varslingen skal gjelde til. Velg Neste. Dersom samme tidspunkt velges på fra og til, vil varslingen gjelde hele døgnet
5. Velg varighet:
 - a. For varslingene i 3b kan SOFUS settes til at hendelsen skal vare en viss tid før varsling sendes. Her kan tiden stilles inn. Dette fungerer kun dersom det benyttes en sensor som er aktiv mens hendelsen pågår, som for eksempel magnetbryter for dør eller sengematte. Dersom varsling skal iverksettes straks hendelsen oppdages (Vandring inne – med sengematte), settes tiden til 0 minutter.
6. Send test nå?
 - a. Velg om det skal sendes en test til FlexiBlink-mottakerne

Sett på frontlokket og se at skjermen slukker, for at enheten skal kunne varsle. Batteriet vil raskt lades ut hvis lokket ikke settes på.

Etter at SOFUS har varslet eller batteriet er satt inn, tar det 30 sekunder før den er klar til å varsle på nytt.

Testing

1. Sett tidspunkt slik at tiden er innenfor tidsrommet hvor det skal varsles
2. Sett dekselet på aktivitetsvarsleren
3. Aktiver sensoren ved å utføre handlingen som skal utløse varsling
4. Se at mottakeren varsler
5. Sett tidspunkt for varslingen til rett tidsperiode

Funksjonsbrytere



Funksjonsbryterne ④ kan benyttes for spesialtilpasninger:

Bryter 1

Ved bruk av sengematte vil SOFUS først aktiveres etter at brukeren har lagt seg i senga i aktiveringstidsrommet. Ønskes det varsel dersom bruker **ikke** har lagt seg, vipp bryter 1 opp.

Bryter 2

SOFUS sender normalt alarm opptil 5 ganger etter hverandre dersom alarmsituasjonen er opprettholdt. Dette gjelder for eksempel *Vandring inne* når sengematte benyttes. Ved å vippe bryter 2 opp, vil den kun sende én gang selv om situasjonen er opprettholdt.

Bryter 4

Systeminnstillinger: Benyttes for å stille klokke eller dato, kalibrere touch-skjermen og tilbakestille til fabrikkinnstilling.

1. Vipp bryter 4 opp.
2. Sett på og ta av lokket igjen for å komme til innstillingsmenyen.
3. Trykk *Innstilling* på skjermen og velg fra menyen.
4. Når justeringen er ferdig, vipp bryter 4 ned.
5. Sett på lokket.

Feilsøking

Det varsler ikke i mottakerne

- Batteriet er tomt. Bytt batteri
- Tidsrommet for varsling er satt opp feil. Endre ved å gå inn i *Innstillinger* i menyen
- Lokket er ikke satt skikkelig på. Se at det er mørkt på displayet eller dytt lokket godt på
- Varslingen er slått av. Aktiver varsling
- Sensoren er ikke riktig montert
 - For å sjekke at SOFUS reagerer på aktivert sensor, ta av dekkelet på aktivitetsvarsleren
 - Aktiver sensoren
 - Et rødt paragraftegn i øvre venstre hjørne på displayet dukker opp
 - Sensoren fungerer
- Enhetene er ikke riktig sammenkoblet. [Slett sammenkoblingen](#) og [sammenkoble på nytt](#)
- Senderen får ikke signal fra kilden. Sjekk at tilkoblet ledning er satt helt inn
- Avstanden mellom sender og mottaker er for stor. Sett da enhetene nærmere hverandre, eller sett inn repeater. Test ved å aktivere sensoren og sjekk at det varsler i FlexiBlink-mottaker

Sammenkoblingen er feil

1. Slett sammenkoblingen: Trykk 5 ganger på Pairing-knappen. Enheten svarer med rødt og grønt blinkende lys
2. [Sammenkoble på nytt](#).

Rødt lys i enheten ved sammenkobling

Sammenkobling mislyktes. [Slett sammenkobling](#) og [sammenkoble på nytt](#)

Feil varsling i mottakeren

Gå inn i [Innstillinger](#) i menyen og velg rett varsling

Klokken viser feil tid

Still dato og/eller klokke. Se [Funksjonsbrytere](#)

Berøring på skjermen registreres ikke

Kalibrer touch. Se [Funksjonsbrytere](#)

Produktet varsler lavt batteri med helt nye batterier

Forsinkelse i batterimåling. Ta av frontlokket. Sjekk at det ikke står Bytt batteri på skjermen. Sett lokket på igjen

Skjermen varsler Lavt batteri

SOFUS har behov for batteribytte. FlexiBlink-mottakerne vil også varsle at senderen trenger nytt batteri. Bytt batterier

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Batteri:** 2 stk. 1,5V litium AA
- **Strømadapter:** FlexiBlink strømadapter, 15VDC / 230VAC (kjøpes separat)
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **IP-grad:** IP20
- **Radiofrekvens:** 2400 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks. 20 mW

Dimensjoner

- **Høyde:** 150 mm
- **Bredde:** 95 mm
- **Dybde:** 40 mm
- **Vekt:** 240 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen. Se oppdateringer på Sensio sine nettsider.

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Les bruksanvisning og monteringsanvisning




Produsent



Produksjonsdato



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.

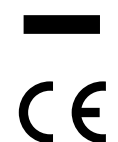

Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47