

Talk Pad 8

Slimline

Brukerveiledning



Communication is life

Denne enheten er produsert av Smartbox Assistive Technology Ltd

Storbritannia

Smartbox Assistive Technology Ltd
Ysobel House, Enigma Commercial Centre
Sandys Road
Malvern
WR14 1JJ

Europa

REHAVISTA GmbH
Konsul-Smidt-Str. 8c
28217 Bremen
Germany

Document:	Talk Pad 8 - SL - Manual - NO - A
Based on:	Talk Pad 8 - SL - Manual - UK - B
Device:	TS08E
Language:	Norwegian
Date of issue:	April 2024

Copyright © 2024 Smartbox Assistive Technology



Talk Pad 8 Slim Edition

Denne veiledningen inneholder grunnleggende informasjon for å komme i gang med Talk Pad.

Du finner en komplett veiledning til alle funksjonene til Talk Pad på Smartbox Hub:




hub.thinksmartbox.com/talkpad-2nd-gen

1. Konfigurere enheten

Trinn 1

Slå på Talk Pad ved å trykke på av/på-knappen på venstre side av enheten.

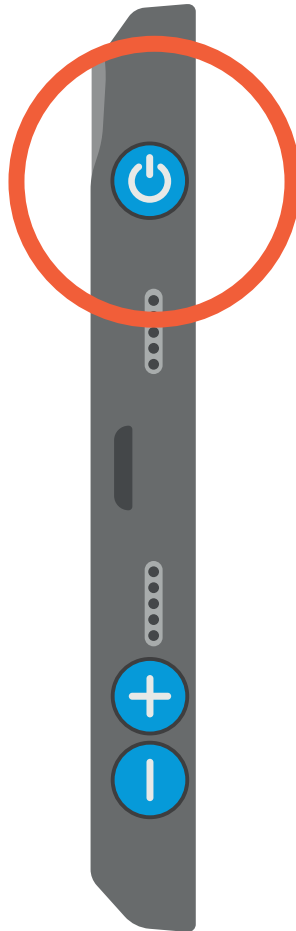

Trinn 2

Talk Pad kan leveres klar til bruk eller for egenkonfigurasjon.


Det følger med en kort veiledning for å hjelpe deg med konfigurasjonen.

Husk å notere deg kontoopplysningene dine.

2. Strøm

Enhetens av/på-knapp finner du øverst til venstre på Talk Pad.

Når du skal slå på enheten, trykker du på og holder nede av/på-knappen i 3 sekunder.

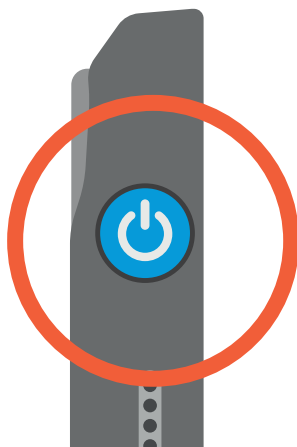

Sette Talk Pad i dvale

Hvilemodus er en modus med lavt strømforbruk der enheten er inaktiv og skjermen er av.

Trykk på av/på-knappen for å sette enheten i hvilemodus.

Trykk på av/på-knappen igjen for å aktivere enheten.

Slå av

Når du skal slå av enheten, trykker du på og holder inne av/på-knappen og på volum opp-knappen.

Sveip «Skyv for å slå av»-bryteren på skjermen. Trykk på krysset for å avbryte.

3. Lading

Koble Talk Pad-strømadapteren til et nettuttak.

Koble ladekabelen til strømadapteren.


Koble USB C-kabelen til laderport 1.



4. Montering

Din Talk Pad kan monteres på et Rehadapt eller Daessy tilkobling med monteringsplate (selges separat)


Den doble monteringsplaten kan festes med skruene og skrutrekkeren som følger med monteringssettet, til de tre hullene på baksiden av etuiet.

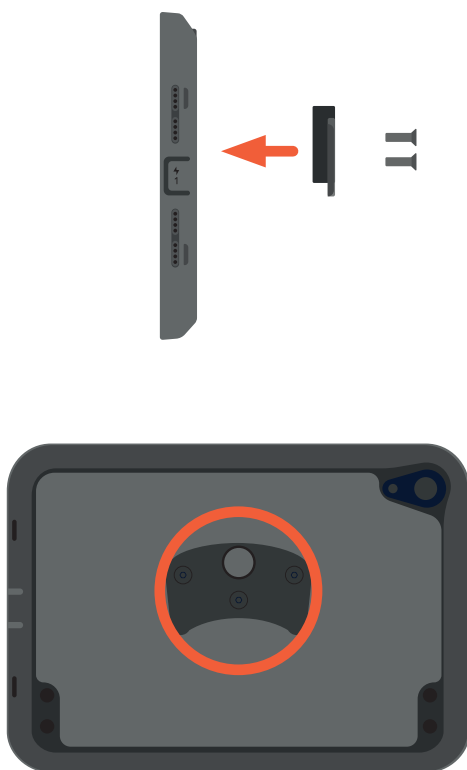

5. Feste reimen

For å feste remmen til Talk Pad, før enden av remmen gjennom festepunktet, løsne koblingen og skyv den gjennom løkken.

Fest koblingen igjen og gjenta på motsatt side.

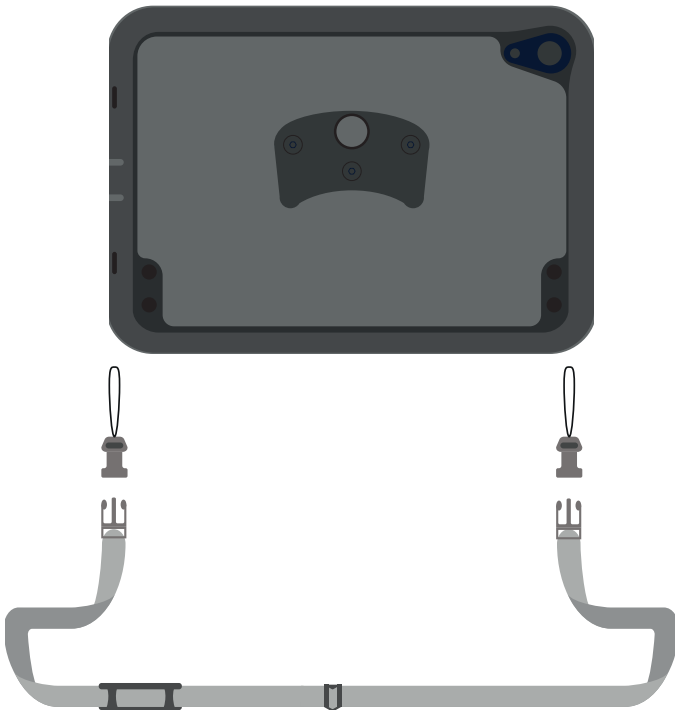

6. Finne modell og serienummer

Ha modell- og serienummeret for hånden når du kontakter brukerstøtte. Dette hjelper oss med å identifisere enheten du har problemer med!

Du finner både modell- og serienummeret på baksiden av Talk Pad.

Slik ser et modell- og serienummer ut





Talk Pad 8 - SL - Manual - NO - B