


Swift

Duschstol/pall

Shower chair/stool

Art.nr. 8170 1010 / 8170 1020 / 8170 1030

Brukarmanual / User manual

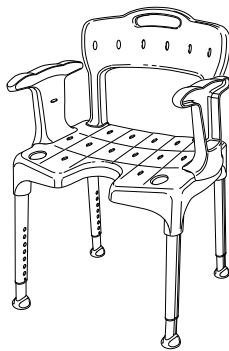

Beskrivning:

Swift är en serie pallar/stolar utvecklad för att användas i duschen eller i badrummet. Stolen/pallen har en stabil konstruktion som anpassar sig efter ojämna underlag. I duschen där golvet sluttar mot golvbrunnen står Swift stadigt på alla fyra benen tack vare sin inbyggda flexibilitet. Doppskorna ger dessutom ett bra grepp och sitsens antihalkmönster ger säkerhet och stabilitet, viktiga egenskaper för att Du ska känna dig trygg och säker. Swift kan vara allt från en enkel duschpall till en komplett duschstol, beroende på hur Du väljer att utrusta den.

Description:


Swift is a stool/chair developed for use in the shower or in the bathroom. The chair/stool is of a sturdy design that adapts to uneven surfaces. In showers where the floor slopes towards the drain Swift stands securely on all four legs thanks to its built in flexibility. The ferrules also provide an excellent grip, and the anti-slip pattern on the seat provides security and stability, important elements that help you to feel safe and secure. Swift can be anything from a simple shower stool to a complete shower chair, depending on how you choose to equip it.

Montering:

Swift är enkel att montera, och Du gör det helt utan verktyg.

Mounting

Swift is easy to assemble. No tools are needed.

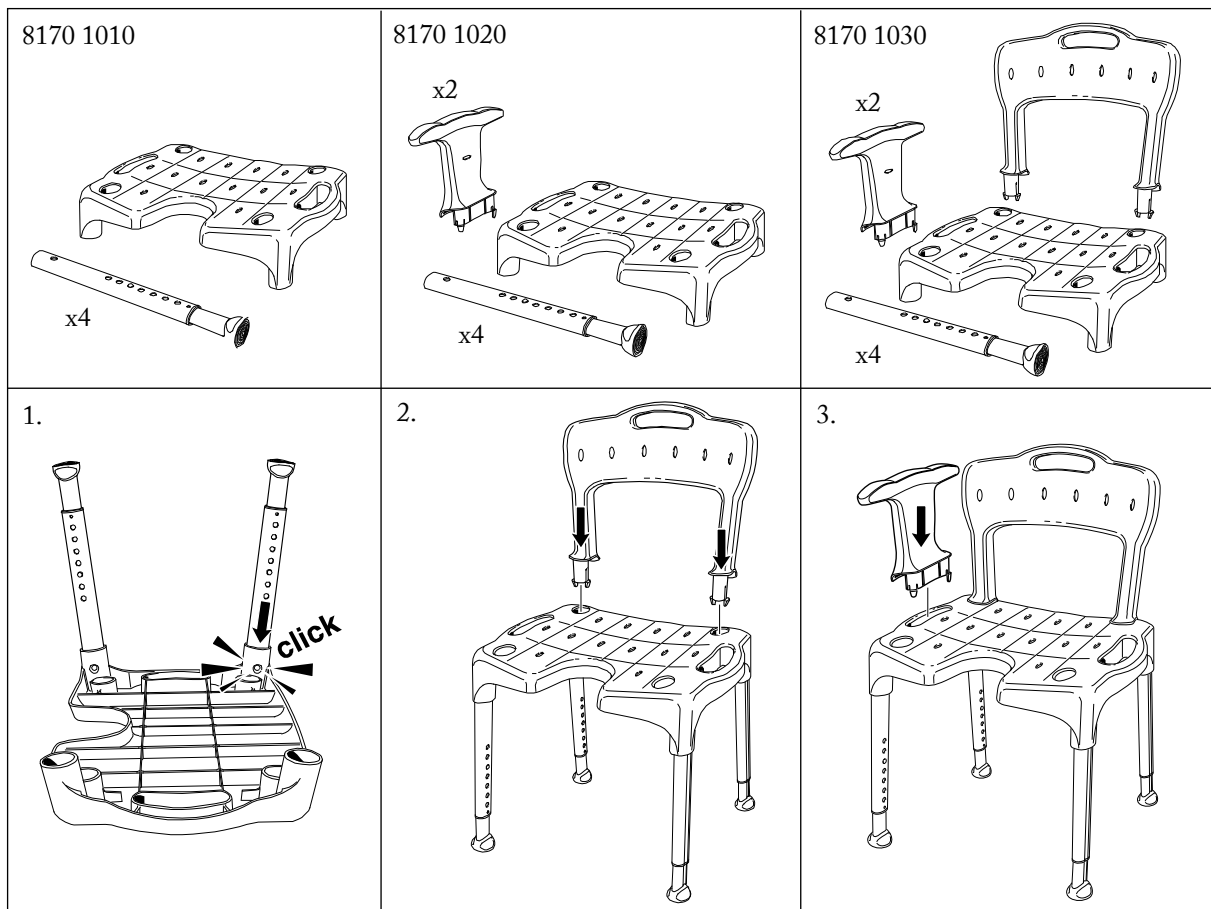

78390A

06-02-01


Etac, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90



www.etac.com



etac®

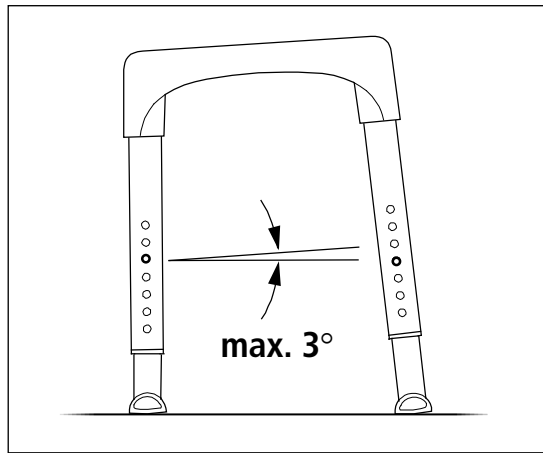

Demontering / Dismounting

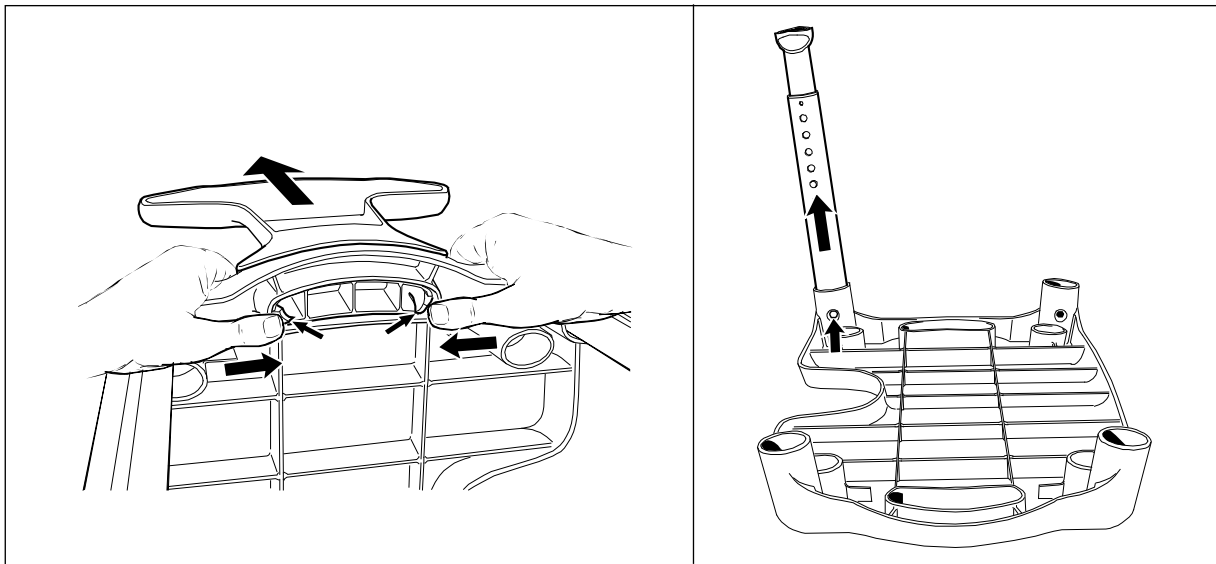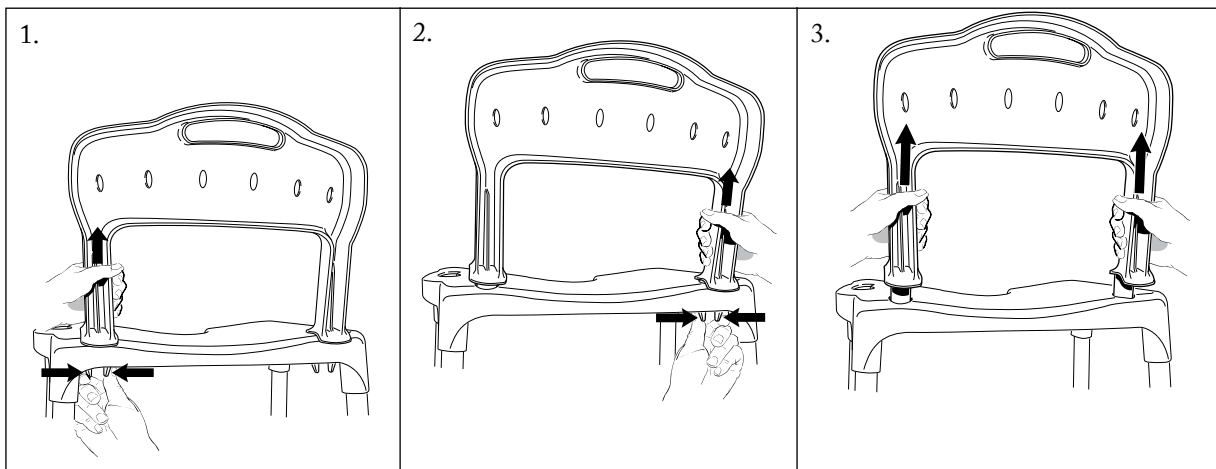

Tillbehör:

Armstöd / par: Swift kan enkelt förses med armstöd för att ge bättre stöd vid uppresning.

Ryggstöd finns för den som vill ha bättre stöd. Det monteras genom ett enkelt tryck helt utan verktyg, och sitter sedan stadigt i sitsen.

Mjukdyna sits: En sits som ger både mjukhet, värme och friktion

Mjukdyna rygg: En ryggdyna som ger mjukhet, värme och friktion

Tvålköpp: En liten hylla att ställa schampot, tvålen eller duschcremen som man fäster på sidan av stolen. Den har också en hållare för duschhandtaget.

Accessories:

Armrest/pair: Swift can be easily fitted with armrests for better support when standing up.

There is a backrest for people who require more support. This is fitted simply by pressing it into place. It then stays securely in place.

Seat pad: A seat pad that provides both softness, warmth and friction.

Backrest pad: A back pad that provides softness, warmth and friction.

Soap dish: A small shelf to keep your shampoo, soap or shower gel, within convenient reach. There is also a holder for the shower handle.

Säkerhet:

Varning: Vinkla inte stolen mer än 3° (1 håls skillnad).

Varning: Belasta inte bara ett armstöd vid sidoförflyttning.

Max brukarvikt: Stolen skall inte belastas med mer än 130 kg.

Rengöring: Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit.

Dekontaminering: Kan vid behov dekontamineras i max 85° C i 3 minuter.

Safety:

Warning: Do not angle the chair more than 3° (difference of 1 hole).

Warning: When moving sideways, do not lean on just one armrest.

Max. weight: The chair must not be subjected to a load greater than 130 kg/286.7 lbs.

Cleaning: Clean the product using a solvent-free cleaning agent with a pH value of 5-9 or with a 70% disinfectant solution.

Decontamination: Can be decontaminated at max. 85° C/185°F for 3 minutes if required.



78390A

06-02-01

Etac, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.com

etac®