

# Active<sup>®</sup>

by

ACCESS<sup>™</sup>



[www.active-walker.com](http://www.active-walker.com)

Active walker - user manual

Active

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Innhold                 | 6. Transport og sammensetting |
| 2. Introduksjon            | 7. Personlig sikkerhet        |
| 3. Produktbeskrivelse      | 8. Praktisk bruk              |
| 4. Vedlikehold             | 9. Tekniske data              |
| 5. Justering av rullatoren | 10. Tilleggsutstyr            |

Active rullator kombinerer alle de gode brukervennlige egenskapene med et moderne design. Rullatoren er utviklet for å hjelpe brukeren i alle daglige situasjoner.

Active kan brukes både inne og ute. De store fronthjulene gjør det meget enkelt å forsere de fleste hindringer på veien.

Active er utviklet og testet etter gjeldende standarder for medisinsk utstyr, og er CE-merket.

Produsenten forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene på Active rullator vist i denne brukermanualen uten videre informasjon.

Alle tall, mål og spesifikasjoner nevnt i denne brukerveiledningen er ikke nødvendigvis helt eksakte.




- Rulatoren skal kun benyttes som et ganghjelpemiddel.
- Hold rullatoren rengjort. Bruk en klut eller fille og litt såpevann. Rullatoren kan også vaskes med høytrykkspyler eller hageslange.
- Kontroller bevegelige deler jevnlig (slik som hjul og setejustering)
- Forsikre deg om at bremsene er riktig justert og at de virker som beskrevet.
- Alle skruer, bolter og nagler kontrolleres jevnlig. Om det finnes noen løse skruer på rullatoren ber vi deg ta kontakt med autorisert forhandler.
- Bruk kun autorisert personell for service, vedlikehold eller reparasjon av Active rullator.
- Det anbefales at Active rullator gjennomgår ettersyn/service med jevne mellomrom, for å forsikre at rullatoren fungerer etter hensikten, og for å forlenge livslengden på produktet.

## 5.

## JUSTERING AV RULLATOREN

**Justering av håndtakshøyde**

Vipp ut den røde hendelen på innsiden av det teleskopiske røret, med den andre hånden justeres håndtaket til riktig høyde. Slipp den røde hendelen og dytt håndtaket ned til det låses i riktig posisjon. Gjør tilsvarende justering på det andre håndtaket, slik at begge håndtakene står i samme posisjon.

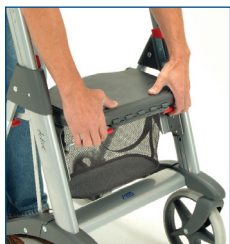**Justering av setehøyde**

Trekk opp de to røde hendelene under setet, og flytt setet til riktig posisjon. Slipp hendlene og trykk setet ned til det går i lås. Forsikre deg om at setet er låst i samme posisjon på begge sider, før du setter deg.

## 6.

## TRANSPORT OG SAMMENSETTING



- Active leveres ferdig montert. Ingen verktøy er nødvendig for å klargjøre rullatoren.
- For å folde sammen rullatoren for parkering eller transport, ta tak i den røde hendelen til høyre på rullatoren. Trekk ut og fold forover til hendelen går i endeosisjon. Bildet til venstre viser hvordan rullatoren skal være når den er sammenfoldet.
- For å folde ut rullatoren bruker du den røde hendelen på høyre side av rullatoren. Fold hendelen tilbake og ned til endeosisjon.
- Vær forsiktig når du løfter rullatoren inn og ut av bagasjerommet på en bil.




- Still inn rullatoren slik at den passer til din størrelse, og slik at du enkelt kan operere bremsehendlene.
- Oppbevar rullatoren på et sikkert sted.
- Fold rullatoren ut fullstendig før du tar den i bruk.
- Forsikre deg om at alle fire hjulene berører underlaget før du begynner å bruke rullatoren.
- Forsikre deg om at bremsene er riktig justert og at de fungerer, før du tar rullatoren i bruk.
- Forsikre deg om at setet er låst i posisjon før du setter deg.
- Sitt alltid midt på setet, og juster setet slik at brukeren alltid har føttene på underlaget.
- Parkeringsbremsene skal alltid være på før brukeren setter seg på setet.
- Sitt aldri på setet dersom rullatoren er sammenslått for parkering.
- Stå aldri på setet på rullatoren.
- Man skal aldri transportere en person sittende på setet.
- Ikke løft eller bær rullatoren unødig. Den er mye enklere å forflytte på hjul.



### Handlekurv

Du får tilgang til handlekurven ved å løfte opp sitteplaten i bakkant. Handlekurven er enkel å ta ut, og bære med seg i de to bærestroppene. Maks 5kg vekt i handlekurv.

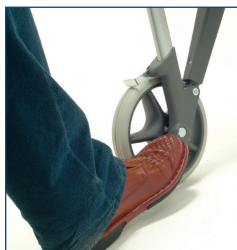

### Forsering av hindringer


Rullatoren er utstyrt med ekstra store fronthjul og vippehjelp, som gjør det svært enkelt å komme over hindringer. Press foten (høyre eller venstre) på vippehjelpen innenfor bakhjulene, og trekk håndtakene lett tilbake for å løfte fronthjulene over hindringen.



## Bremser

Bremsene er spesialutviklet og en viktig del av Active rullator. Det er ingen utvendige bremsekabler, og det patenterte innebygde bremsesystemet er sikrere og krever mindre vedlikehold enn tradisjonelle bremsesystemer med utenpåliggende kabler.

For å bremse rullatoren presses bremsehendlene lett mot håndtaket på rullatoren. For å sette på parkeringsbremsen trykkes bremsehendlene ned til man føler et klikk. For å løse ut parkeringsbremsen trekkes hendlene lett tilbake mot håndtakene, og man hører et klikk når parkeringsbremsene slår seg av og hendlene går tilbake til nøytral posisjon.

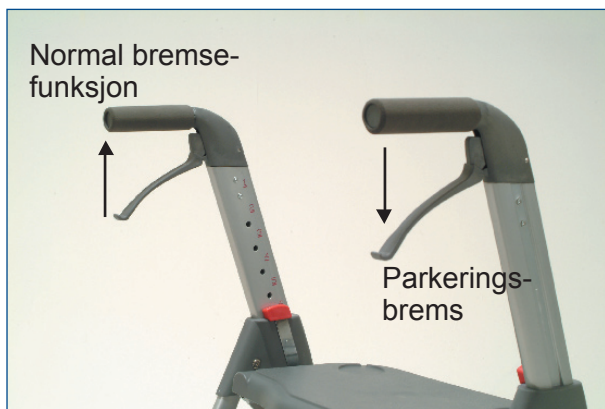

## Vedlikehold av bremser

Før du tar i bruk Active rullator skal du kontrollere at bremsene virker hensiktsmessig. Bremsene bør kontrolleres og eventuelt justeres med jevne mellomrom, da slitasje på bremsesystem og hjul kan føre til svekkelse av bremsene over tid.

Justering av bremsene skjer ved å operere skruen som sitter i bunnen av det bakre aluminiumsrøret. Juster skruen slik at du har tilstrekkelig gode bremser, og samtidig slik at parkeringsbremsen fungerer som foreskrevet. Skru mot høyre for stramming av bremsene. Det er to separate bremsesystemer, slik at justeringen må foretas på både høyre og venstre bremsesystem.



Type	Active
Max. brukervekt	125kg
Håndtakshøyde	79 - 100 cm
Mål	60 x 72 cm
Mål sammenfoldet	60 x 50 x 89 cm
Setehøyde	50 x 63 cm
Vekt	ca. 9kg
Materialer	Aluminum og fiberarmert plast
Rengjøring	Såpe og vann, høytrykksspyling, eller dampvask

Din Active rullator kan utstyres med ulike typer av tilleggsutstyr for å tilpasses dine behov. Kontakt din leverandør dersom du trenger noe av det tilleggsutstyret som er listet nedenfor:

- Ryggstøtte – polstret ryggstøtte som festes med braketter til setet.
- Serveringsbrett – med plass til mat og drikke.
- Stokk-/krykkehoder med plass til en eller to krykker/stokker.
- Ekstra bag – henges i fronten på rullatoren og gir ekstra oppbevaringsplass.
- Oksygenflaskeholder – leveres i ulike størrelser etter behov.
- Retningsperre – Låser rotasjonen på fronthjulene, slik at rullatoren kun går rett frem.
- Slepebrems- trinnløs justering av rullemotstanden på hjulene.
- Ski – monteres på fronthjulene for å forenkle fremkommeligheten på snø.
- Putesett – komfortable Active puter til sete og ryggstøtte. Kommer i 7 forskjellige farger. Putetrekk kan vaskes i vaske maskin.