

NO BRUGERVEJLEDNING
Echo MegaLoop DAC

**Echo®
DAC™**



MegaLoop

Bruksanvisning



SLYNGESYSTEM MED DIGITAL OMFORMER

Produktkode: 901-1010-02

INNHold

- 2 *Innhold*
- 3 *Sikkerhetsinstruksjoner og forholdsregler*
- 4 *Bilde av innhold*
- 5 *Monteringsveiledning*
- 6 *Monteringsveiledning, fortsatt*
- 7 *Monteringsveiledning, fortsatt*
- 8 *Tilkoblingsråd, analog*
- 9 *Tilkoblingsråd, digital/optisk lyduttgang*
- 10 *Viktig informasjon*
- 11 *Reservedeler/Tekniske data*
- 12 *Samsvarserklæring*

Echo® MegaLoop DAC™

Teleslyngesystem med innbygd digital til analog omformer.

Les og følg sikkerhetsinstruksjonene nedenfor før bruk av dette produktet:

Sikkerhetsinstruksjoner og forholdsregler

1. Lytting til ubehagelig høy lyd i lengre tid kan skade hørselen din.
2. Feilaktig bruk av dette produktet kan skade hørselen. Følg den trinnvise veiledningen nøye!
3. Ved rengjøring av MegaLoop DAC™ og tilbehør, må det bare brukes myke kluter og syntetisk vaskemiddel.
4. Bruk kun apparatets godkjente strømforsyning. Bruk ikke andre typer strømforsyning.
5. Ved bruk av denne enheten må grunnleggende sikkerhetsregler som nedenfor angitt alltid følges for å unngå risiko for elektrisk støt eller personskaide.
6. Les og forstå veiledningen, og følg alle advarsler og merking på enheten.
7. Ikke bruk den i et miljø som er fuktig, vått, svært varmt eller svært kaldt.
8. Monter enheten sikkert på en stabil overflate, og monter enheten hvor ledningen ikke kan bli skadet eller noen kan snuble i den.

9. Enhet kan bli varm når den er i bruk. Påse at enheten har tilstrekkelig ventilasjon.

10. Benytt KUN kvalifisert personell ved behov for service.
Merk: hvis serienummeret fjernes, er enheten ikke lenger dekket av garantien.

Bilde av innhold:

A. MegaLoop DAC forsterker med fot

B. Strømforsyning

C. Slyngeledning

D. Ledningsklips

E. Mikrofon


F. SCART-plugg

G. Lydkabel


H. Toslink-kabel



A

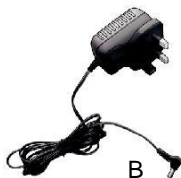

B

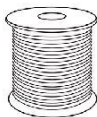

C



D



E



F



G



H

Monteringsveiledning:

1. Plasser MegaLoop DAC™-forsterkeren på en hylle under TV-en eller ved siden av TV-en.
2. Sett støpslet til strømforsyningen til MegaLoop DAC™ (B) i en standard kontakt og pluggen på ledningen i utgang 1 (Fig. 2).
3. Begynn fra forsterkeren og trekk slyngeledningen (C) langs veggene i rommet. Ledningen kan festes opp langs og over dørkarmen om nødvendig. Ledningen kan trekkes under teppet eller festes til gulmister (Fig. 3). Sørg for at du har nok ledning til å rekke frem til forsterkeren.
4. Når du er kommet rundt hele rommet, kutter du ledningen og avisolerer ledningsendene. Fest hver ende til klemmene (2) (Fig. 2).
5. Hvis du bruker en stolslynge (ekstraustyr), fester ledningsendene i klemmene (2) (Fig. 2). Kontroller at ledningen plasseres omhyggelig, slik at ingen kan snuble i dem. Trekk aldri ledninger over gulvet medmindre de er helt dekket av gulvteppet. Husk at løse ledninger kan forårsake at noen snubler i dem.
6. Når du kobler til en TV som har digital optisk lydutgang (se side 8/9), må du bruke Toslink-kabelen (H) for å koble fra TV-ens digitale utgang til MegaLoop DAC™ digital utgang (4) (Fig. 2).


***MERK: Hvis det ikke kommer noe lydsignalet til MegaLoop DAC™, vil "intet signal"-LED (5) (Fig.2) lyse.**

7. Ved kobling til en TV som har analog lydutgang (se side 8) kobles ledning (G) til lydutgangen på TV-en og den andre enden kobles til line-utgangen (6) (figur 2).


8. Ved bruk av mikrofonen, kobles pluggen (3,5 mm) på mikrofonen E til en av mikrofonutgangene på MegaLoop™ DAC (7 & 8) (figur 2), deretter festes mikrofonen til høyttaleren på TV-en. Se (figur 4) for en forklaring.

9. Slik tester du din installasjon: Slå på MegaLoop DAC™, og den grønne LED-en (6) (Fig. 1) vil lyse, innstill volumet til maks.-posisjon 3 (Fig. 1). Slå på TV-en. Den røde loop-LED-en begynner å blinke. Dette viser at systemet arbeider. Skru volumet til midtposisjon, og innstill høreapparatet i T-stilling for å bruke systemet.


Figur 1

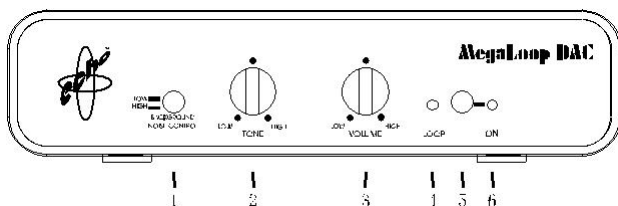


Figur 2

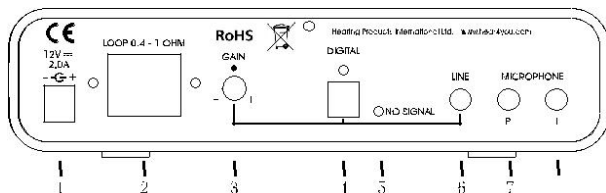

Figur 3

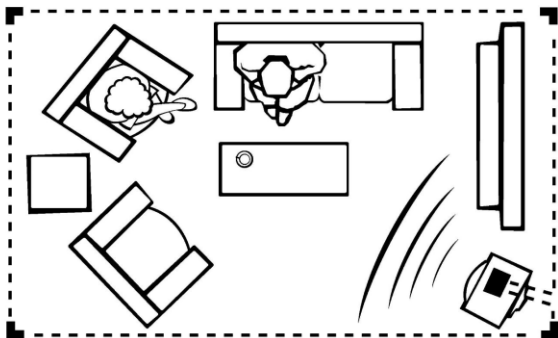


Microphone on lead (d)
attached to TV
speaker with
velcro® pad.

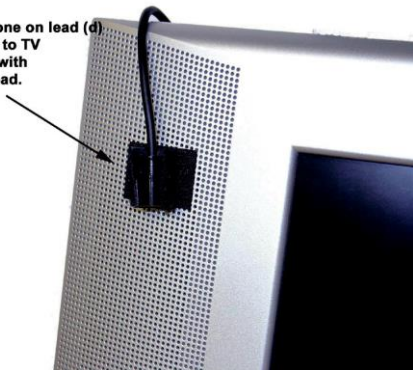

Figur 4

Billedtekst: Mikrofonen på ledningen (d) festet til TV-høytaler med borrelås®

Råd om tilkobling til TV med analog lydutgang.

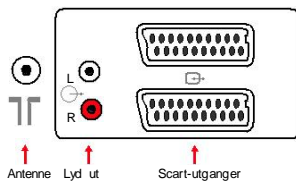

Lyd ut

Når du kobler til en TV, er det første du skal se etter de røde og hvite lydutgangene, disse er vanligvis bak på TV-en og vanligvis merket med en sirkel med en pil som peker ut av den. Tilkobling til lydutgangene vil alltid gi riktig lyd for det programmet som vises på TV-en. **Legg merke til at rød, hvit og gul eller rød, hvit og blå utganger er for lyd og bilde inn og vil ikke gi lyd ut.**

Hodetelefonutgang

Hvis TV-en ikke har lydutgang, eller de ikke virker, er neste mulighet å prøve hodetelefonutgangen. Bare slå på TV-en, og stikk inn 3,5 mm pluggen i hodetelefonutgangen. Hvis lyden fra høyttalerne ikke blir koblet ut, så må du koble fra hodetelefonutgangen og til line in på MegaLoop DAC™. Deretter må du justere hodetelefonvolumet på TV-en. Det gjør du ved å trykke på meny-knappen på fjernkontrollen til TV-en, velge lyd og deretter stille hodetelefonens lydstyrke på cirka to tredjedels full.

Mikrofon

Hvis TV-en ikke har lydutgang og hodetelefonutgangen kutter lyden fra TV-høyttalerne, kan du oppta lyden ved å feste den medfølgende mikrofonen til høyttaleren på TV-en.

Råd om tilkobling til TV med digital optisk lydutgang.



Toslink-kabelen skal kobles til digital lydutgang som vist ovenfor.

Billedtekst: Optisk forbindelse, vanlig på de fleste nye TV-er
Analog lydutgang, brukes ikke lenger så mye av TV-produsentene

EKSTRA INFORMASJON:

MegaLoop DAC™ mikrofonen er svært følsom, slik at for høy lydstyrke fra TV-høytaler kan forvreng lyden i høreapparatet, når det er i T-stilling. TV-høytalerens volum skal innstilles på et nivå som er behagelig for en person med normal hørsel.

Mikrofonprioritet

Mikrofonutgangen (7 & 8) (figur 2) kan begge brukes. Utgang (8) er standardutgang når du kobler mikrofonen til en TV med høyttalere. Utgang (P) står for prioritet; den gir et høyere signal enn utgang (7). Det er svært nyttig når du bruker en ekstra mikrofon for lyder som blir registrert i tillegg til TV-en eller andre lydkilder.

Bakgrunnsstøvfunksjon

Knappen for bakgrunnsstøy (1) (Fig. 1) kan brukes til å øke lydnivået for mikrofonen. Dette kan være svært nyttig når du bruker en mikrofon til å registrere lyder i tillegg til TV-en.

Tonekontroll (2) (Fig. 1)

Reguleres etter ditt eget hørselstap. Skru bryteren mot unviseren for å få en mørkere tone. Skru bryteren med unviseren for å få en lysere tone.

Gain (3) (Fig. 2)

Fabrikkinnstillingene for Gain-knappen (3) (figur 2) er midtposisjon. Denne stillingen er forhåndsdefinert for de fleste TV-ers Scart- og lydutgangssignaler. Dette må økes på visse TV-apparater for å kompensere for et lavt utgangssignal, spesielt hvis du bruker digital, optisk utgang.

Intet signal (5) (Fig. 2)

Denne LED-en lyser hvis det ikke mottas et lydsignal.

Reservedeler

Kode	Del
1007	Kun MegaLoop DAC forsterker
1008	MegaLoop DAC fot
207	Slyngeledning – 38 m
208	Ledningsklips (pakke med 50 stk.)
306/B	Lydledninger
201/B	SCART-plugg
202/M	Mikrofon med ledning
209	Toslink-kabel
570-1010-01	12 V DC 2 A med UK-støpsel
940-1012-01	MegaLoop DAC bruksanvisning
490-1019-01	DAC farget veske
490-1018-01	Brun pappeske

Tekniske spesifikasjoner:

Strømforsyning	12 V DC. 2,0 A senter positivt
Utgang	Utgangsstrøm > 4 A maks., slyngemotstand mindre enn 1 ohm
Frekvensgang	100 Hz til 5,2 kHz (v/c midt)
Tonekontrolleffekt	20 dB område maks.-min. (v/c midt)
Mikrofon	2 mikrofoninnganger 3,5 mm mono/elektromagnetisk kondensator
Linjeinngang	1 linjeinngang, 3,5 mm stereoplugg med forsterkningsstyring
Digital utgang	1 linje optisk inngang, Toslink-plugg med forsterkningsstyring
AGC (automatisk styrkekontroll)	Styrkekontroll > 30 dB tidsrom
Mål	190 mm (B) x 45 mm (H) x 112 mm (D)

Samsvarserklæring

Echo® er et varemerke for Hearing Products International Limited.

Hearing Products International Limited erklærer at Echo® MegaLoop DAC™ overholder alle relevante EU-direktiver. Full EU-samsvarserklæring for Echo® MegaLoop DAC™ er tilgjengelig fra Hearing Products International Ltd.

Hearing Products International Limited

Echo House, 26/27 Haigh Park, Stockport, SK4 1QR, England.

Tlf. +44 (0) 161 480 8003 Faks +44 (0) 161 480 8006

www.hear4you.com

Hearing Products International Ltd. forbeholder seg retten til å endre priser, design og/eller tekniske spesifikasjoner eller farger uten varsel. Med forbehold om feil og utelatelser.
06.12.16. 940-1012-01 MegaLoop DAC™ Bruksanvisning.
Versjon 2. © Copyright Hearing Products International limited 2016.

UK: Avfall av elektriske produkter og batterier må ikke avhendes sammen med husholdningsavfall. Det finnes særlige innsamlingsordninger. Din nærmeste se www.recycle-more.co.uk eller Hearing Products International Limited for informasjon www.hear4you.com.

