

PIXEL - Indoor Rollator

Brukerhåndbok



CE

Mer enn bevegelighet

1 Generell Informasjon

Kjære Kunde,

Denne brukerhåndboken inneholder en beskrivelse av medisinsk utstyr og viktige retningslinjer for å sikre korrekt og sikker bruk av produktet. Det er viktig å lese denne håndboken nøye før bruk. Det er spesielt viktig å lese sikkerhetskravene og følge disse.

REHASENSE utvikler kontinuerlig sine produkter og forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner og funksjoner av produkter uten varsel.

Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt din forhandler eller Rehasense direkte. Kontaktinformasjon finner du på den siste siden av denne håndboken.

2 Tiltent bruk, indikasjoner og kontraindikasjoner

Tiltent bruk: Rullatoren er utformet som et verktøy for å hjelpe personer med mobilitetsproblemer med å bevege seg, kan for eksempel hjelpe med å stå oppreist eller gå uavhengig. Takket være denne rullatoren kan disse menneskene stå og gå lett og de kan oppfylle de fleste av sine daglige oppgaver og rutiner uten hjelp fra andre. Eventuell annen bruk er forbudt. Enheten er kun beregnet for innendørs bruk.

Indikasjoner: Enheten er spesielt utviklet for personer som på grunn av et bredt spekter av mulige helseproblemer, krever ekstra stabil støtte under gangavstand.

Kontraindikasjoner: Apparatet må ikke brukes utendørs, det bør ikke brukes av brukere som har alvorlige problemer med kroppsbalansen eller hvis muskelstyrken er for lav til å kunne stå og gå selv, men trenger ekstra støtte av en rullator. Behovet og muligheten for bruk av en rullator av brukeren skal alltid vurderes og indikeres av en lege eller fysioterapeut.

3 Levering og generell produktbeskrivelse

Rullerne leveres i esker og er foldet, for lettere transport.

Komponentene i leveransen er:

- 1 komplett foldet rullator ink. kurv
- 1 avtagbart brett
- 1 praktisk nettbag
- 1 brukermanual

Pixel er en firehjuls, lettvekts rullator med en sammenleggbare ramme. Produktet er laget av aluminium, så den er veldig lett å lagre eller transportere. Rullatoren gir god manøvrerbarhet, stabilitet og trykkhåndtaket er høydejusterbart for en god brukervennlighet. Produktet består av en pulverlakkert, foldbar strukturramme av aluminium og den er også utstyrt med en stoffkasse og plastskuff som lar brukeren bære små gjenstander. Rullatoren er utstyrt med 6 tommer hjul for innendørs bruk.

4 Sikkerhetskrav

Pass på at denne brukerhåndboken leses av alle som bruker enheten. Produsenten tar ikke ansvar for skader og / eller skader forårsaket av at brukerhåndboken ikke er fulgt.



Begrensninger for bruk


- Rullatoren må ikke bli belastet med mer enn 110 kg.

- Enhetens kurv har en belastningbegrensning på 5 kg.
- Enheten er designet for kun å brukes innendørs og på flate, glatte overflater.
- Enheten er ikke beregnet til å sittes på.
- Bremsene MÅ være låst FØR man forlater rullatoren uten tilsyn.



Unngå uhell

- Bruk bare enheten for det formål den er beregnet til.
- Bruk kun enheten i god teknisk stand.
- Unngå å gjøre konstruktive endringer på enheten, med mindre du har produsentens skriftlige aksept for slike endringer.
- Under ulike justeringer som er mulige på enheten, må brukeren passe på å ikke klemme fingrene eller andre kroppsdeler mellom to bevegelige elementer på enheten.
- Enheten må kun brukes på stabile flater.
- Alle hjul må være i kontakt med gulvet under ALLE TIDER under bruk. Dette vil sikre at rullatoren er riktig balansert og bør unngå ulykker.
- Ved bruk av rullatoren i stillestående stilling, må håndbremsene låses.

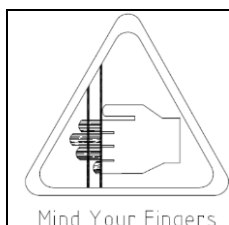

Mind Your Fingers

Vær forsiktig når du ser dette symbolet på enheten. Fingre eller andre kroppsdeler av en bruker og / eller assistent kan bli fanget mellom enhetens deler under folding, utfolding eller justering av enheten. Vær ekstremt forsiktig når du justerer enheten. Vær oppmerksom på dimensjonene mellom hullene mellom enhetens elementer for å unngå å fange fingrene eller andre kroppsdeler.

5 Produktdetaljer



6 Bruk

Når du ser på bildet ovenfor, bør enheten være forberedt på bruk på en instinktiv måte. Vi anbefaler imidlertid at du følger trinnene nedenfor:

Innledende sjekk

- Ta enheten ut av esken og kontroller (ved hjelp av bildet over) at ingenting mangler. Hvis du oppdager på dette stadiet at en del mangler eller er skadet, fortsett ikke å montere produktet. Kontakt leverandøren av produktet med en gang.

Åpning av rullator

- Hold trykkehåndtaket i begge hender foran deg, slik at bakhjulene er på gulvet. Skyv den ned slik at rammen åpner hele veien.
- Finn den røde rammeknappen på kurvrammen. Lås den på hovedrammen til du hører en "klikk" lyd på låsemekanismen.



- Prøv å trekke ramme delene sammen igjen for å folde rammen. Hvis dette er umulig å gjøre er rammen åpnet og sikret riktig. Se ÅPEN-posisjonen i bildet ovenfor.


umulig å gjøre er rammen åpnet og sikret riktig. Se ÅPEN-posisjonen i bildet ovenfor.



- Etter å ha foldet eller foldet ut rullatoren sørg alltid for å sjekke at halvdelene er låst, slik at rammen ikke kan bevege seg mer.
- *Vær alltid påpasselig at trykkehåndtaket er sikkert låst i hoved støtte røret med de to låse knottene for å forhindre utilsiktet bruk av trykkehåndtaket.*
- *Test alltid for at tilbehør er sikkert låst på plass FØR man tar i bruk rullatoren.*
- *Failure to follow these warnings can result in personal injury.*

Folde sammen

- Press den røde lukke knappen som kobler sammen kurven med hovedrammen.
- Løft bagens ramme for å løfte hovedrammen halvdel sammen og for å folde sammen rullatoren.

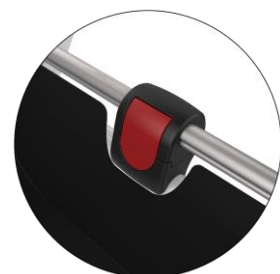

Justering av høyden på trykkhåndtaket

- Frigjør håndtakets 2 låse knotter.
- Gjør justering til din ønskede høyde.
- Fest de 2 knottene igjen.



- *Begge sidene av trykkhåndtaket burde justeres til samme høyde.*
- *Korrekt justert håndtak burde være i samme høyde som brukerens hofter.*

Bruk av håndbremse

- FOR Å STOPPE RULLATOREN trekk bremsestøtten opp mot håndtaket.
- FOR Å VÆRE STILLESTÅENDE hold inne håndtaket i "oppe" posisjonen.
- FOR Å STARTE Å GÅ slipp bremsehåndtaket. Det vil automatisk frigjøres og løsne bremsene.



- *Du må alltid presse inn bremsen når du står stille og ikke skal bevege deg!*
- *Forlat aldri rullatoren uten å ha aktivert bremsene!*
- *Forlat aldri rullatoren i bakker uten at bremsene er aktivert!*

Lås/Lås opp håndbremsen

- For å låse bremsene press bremsehåndtaket ned til du hører en "klikk" lyd.
- For å låse opp bremsene dra håndbremse håndtaket opp til du føler at hjulene kan rulle fritt.



- *Når rullatoren benyttes i stillestående posisjon, må ALLTID bremsen være aktivert.*

7 Rengjøring

Generelt:

- Rengjør rullatoren regelmessig og hold den ren.
- Lettere smuss kan fjernes med en fuktig klut.
- Større samlig av smuss kan fjernes med en ikke ikke-korroderende, mild vaskemiddel og varmt vann.
- Ikke bruk harde slitemidler eller blekemiddelbaserte rengjøringsmidler, da dette kan forårsake skade eller misfarging.
- Tørk deler med en myk klut.

Hjul:

- Rengjør hjul med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel. Tørk over med en ren klut.
- Smør med en multifunksjonsolje periodisk for å forhindre at hjulene knirker.

8 Merkelapp

Produktets merking er plassert på en av bunn rørene av kryssrammen. Den inkluderer viktig informasjon om produktet: navn, serienummer, produksjons dato, artikkel nummer, handle nett maks belastning, produktets bredde, størrelse og produsent data. Merkelappen må aldri fjernes fra rullatoren.

9 Teknisk data

Max. belastning	110 kg
Max. belastning av nett	5 kg
Total vekt med handle nett	5,2 kg
Lengde åpen	65 cm
Høyde sammenlagt (lavest)	91 cm
Bredde	54 cm
Lengde sammenlagt	27 cm
Høyde på grep håndtak (justerbar)	86 – 97 cm
Bremser	1 manøvrerer bremse on 2 bak hjul med parkering funksjon
Hjul (diameter x bredde)	4x 150 x 27 mm – Svart MYKT PU dekk

10 Transport beskrivelse

Rullatoren er et produkt som er lett å folde sammen, som gjøre det til et produkt som er lett å ta med seg. Hvis det er nødvendig å transportere den anbefaler vi at den foldes som beskrevet over. Rullatoren bør transporteres på en måte som er stabil og det er ingen risiko for plutselig og farlig bevegelser når rullatoren transporteres.

11 Vedlikehold

- Vær sikker på at alle deler av rullatoren er sikret hele tiden.
- Sjekk alle skruer for at de er fastmontert. Hvis ikke, fest.
- Bytt alle ødelagte, skadede eller slitte deler umiddelbart.

12 Gjenbruk

Rullatoren er mulig å gjenbruke. Før den overføres til en annen bruker må den inspiseres av en spesialist.

Følgende punkter må sjekkes:

- Visuell inspeksjon av rammen
- Sikre feste på muttere og bolter
- Tilstand på elementer av plastikk
- Tilstanden på hjulene og kulelager
- Effektivitet og tilstand på bremsene

Når en av delene er skadet eller ødelagt må den bli erstattet av en ny. Det er anbefalt å erstatte hjulene ved gjenbruk. Alle løse muttere og bolter må festes. Rullatoren må rengjøres grundig og desinfiseres før gjenbruk.

ADVARSEL! Det er forbudt å gjenbruke rullatoren når rammen er bøyd eller brukket.

Instruksjons manualen må følge med rullatoren ved gjenbruk.

13 Hvordan å avhende produktet

Rullatoren bør ikke avhendes sammen med normalt søppel. Den skal leveres til avfallstasjon for gjenbruk eller resirkulering.

14 Garanti

Produsenten tilbyr en 2 års garanti for feil i produksjonen. Garantien er ikke gyldig ved bruk av produktet uten bruk.

Forhandler

