

Toastol TS 130 toalettstol



Brukerveiledning

Innhold

Forord	03
Samsvarserklæring	03
Levetid	03
Avfallshåndtering	03
Produktetikett	03
Gjenbruk	03
Garanti	03
Komponenter	04
Bruksområde	04
Leveransen inkluderer	04
Sikkerhetsinstrukser	05
Justering av høyde	05
Utskifting av sete	05
Instruksjoner for bruk	05
Rengjøring Vedlikehold	05
Tekniske spesifikasjoner	05

Forord

Takk for at du kjøpte et produktet fra Drive DeVilbiss.

Designet, funksjonaliteten og kvaliteten til dette produktet vil ikke skuffe deg.

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker hjelpemiddelet for første gang. Her vil du få viktige instruksjoner og verdifulle tips om korrekt bruk og vedlikehold. Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon om produktet, kontakt Varodd Velferdsteknologi på +47 38 14 48 00 eller hjelpemidler@varodd.no.

Brukerveiledningen inneholder også all nødvendig informasjon om betjening og rotering av setet. Den siste utgaven av brukerveiledningen er tilgjengelig på nett som PDF-fil eller kan bestilles fra kundeservice hos Varodd Velferdsteknologi.

Før man kan ta denne type hjelpemiddel i bruk, skal brukeren ha fått opplæring i sikker bruk av hjelpemidlet. Bruker er i denne sammenheng alle som skal betjene hjelpemidlet, både bruker selv og eventuelt ledsager, assistent, personell i bolig osv. Denne opplæringen skal bare gis av personell som er godkjent formidler og opplæringsansvarlig.

Samsvarserklæring

Produsenten DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG erklærer samsvar for produktet beskrevet i henhold til forordningen om medisinsk utstyr (EU) 2017/745.

Levetid

Produsenten estimerer en produktlevetid på fem år for dette hjelpemiddelet, så lenge produktet brukes som beskrevet i denne veiledningen og at alle vedlikeholds- og servicekrav overholdes.

Denne levetiden kan forlenges hvis hjelpemiddelet håndteres, repareres, vedlikeholdes og brukes med omhu.

Produktlevetiden kan imidlertid også bli betydelig forkortet ved ekstrem eller feil bruk. Produsentens estimering av produktlevetiden for dette hjelpemiddelet utgjør ingen tilleggsgaranti.

Avfallshåndtering

Avhending av enheter eller deler skal foregå på en måte som ikke skader miljøet og er i henhold til nasjonal lovgivning. Kontakt din lokale myndighet eller avfallssenter for å få opplysninger om hvor og hvordan man kan avhende utslitte hjelpemidler.

Produktetikett



- 1 Artikelnummer | 2 Produktnavn | 3 Produsent |
4 Serienummer | 5 UDI-kode | 6 Maks brukervekt |
7 Les brukerveiledning | 8 Medisinsk utstyr |
9 Produksjonsdato (år-måned)

Gjenbruk

Denne toalettstolen kan gjenbrukes. Husk at alle medfølgende dokumentasjon og tekniske dokumenter for sikker håndtering skal overleveres til ny bruker.

Hjelpemiddelet må kontrolleres, rengjøres og settes i optimal stand av kyndig personell før produktet kan brukes igjen.

Følg alltid produsentens instruksjoner i denne bruker-veiledning ved gjenbruk. Du finner mer teknisk dokumentasjon på nettsiden til Varodd Velferdsteknologi.

Du finner ytterligere informasjon om produktet på www.hjelpemidler.varodd.no og i Hjelpemiddel-databasen.

Garanti

Lovbestemte garantibestemmelser gjelder. Produsent garanterer en garantiperiode på 24 måneder fra kjøpsdato, gitt at produktet er montert og betjent i samsvar med den medfølgende brukerveiledningen.

Deler som utsettes for slitasje er generelt ikke dekket i den normale garantiperioden med mindre delene trenger reparasjon eller utskifting grunnet material- eller produksjonsfeil.

Det tas forbehold om feil og endringer som følge av tekniske forbedringer eller designendringer.

OMFATTES IKKE AV AV GARANTI

Deler som typisk utsettes for slitasje, inkluderer (blant annet): doppsko / deksler til stolben.

Komponenter



- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Ryggstøtte | 5. Bekken med lokk |
| 2. Armlenpute | 6. Justerbare stolben |
| 3. Avtagbart setedeksel | 7. Klips til stolben |
| 4. Toalettsete | |

Bruksområde

BRUKERMÅLGRUPPE:

Denne toalettstolen er tiltenkt for brukere med nedsatt gange/forflytningsevne/mobilitet. Den er også egnet for personer med funksjonsnedsettelse i underkroppen (eks. ved amputasjon, senskader, muskel-/skjelettplager osv.).

- Toalettstolen er beregnet for bruk ved toalettbesøk. Ved å fjerne bekkenet, kan stolen plasseres over toalettskålen. Den kan også brukes som toalettstol med bekken på badet – eller hvor enn man måtte ønske.

Leveransen inkluderer

1 ×	toalettstol, ferdigmontert
2 ×	bekken med lokk
1 ×	brukerveiledning

Sikkerhetsinstrukser

- Les denne brukerveiledningen nøye.
- Kontroller alle komponenter for mangler og skader før bruk. Ikke bruke hjelpemiddelet hvis du oppdager defekter!
- Klær eller kroppsdeler kan komme i klem når man setter seg, reiser seg, setter inn bekkenet, samt når man hever armlenene.
- Unngå fuktige omgivelser – fare for å skli!
- Unngå uautorisert bruk, f.eks. av barn.
- Overhold maksimalt tillatt brukervekt. Du finner denne opplysningen på side 5 i brukerveiledningen (tekniske spesifikasjoner), samt på produktetiketten på hjelpemiddelet.


Justering av høyde

Toalettstolen TS 130 er ferdigmontert. Juster stolbenene til ønsket høyde (6 hull med 20 mm mellomrom fra 520 mm til 640 mm). Fest stolbenene med klipsene som vist på (bilde 1-2).



Utskifting av setet


Toalettsetet er festet med klips, og kan fjernes ved å trekke setet oppover med tilstrekkelig kraft (bilde 3-4).

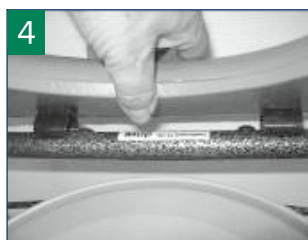

Instruksjoner for bruk

Toalettstolen kan brukes som en vanlig stol. For å bruke hjelpemiddelet som en toalettstol, må man fjerne setedekselet, løfte toalettsetet og sette inn bekkenet. Legg til slutt ned toalettsetet igjen før bruk.

Fjern bekkenet etter bruk for rengjøring. Ta tak i bærehåndtaket og trekk opp bekkenet. Den kan også fjernes fra høyre og venstre side (bilde 5-6).

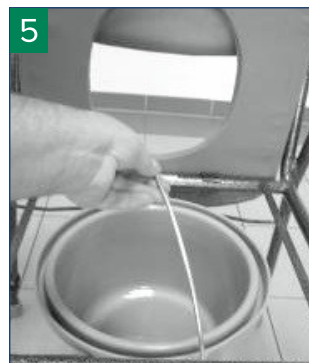

Rengjøring | Vedlikehold

- Vaskes jevnlig med en fuktig klut!
- Ikke bruk sterke rengjøringsmidler!
- Ikke bruk slipe- og skuremidler!
- Ikke bruk høykonsentrert klor- og eddikbaserte rengjøringsmidler!
- For å desinfisere overflatene kan et desinfeksjonsmiddel uten alkohol brukes.
- Sjekk skruene regelmessig. Stram dem ved behov.
- Toalettstolen må ikke eksponeres for temperaturer over 60 °C i lengre perioder (f.eks. ved bruk i badstue osv.).
- Ved feil eller mangler, kontakt Varodd Velferdsteknologi eller hjelpemiddelsentralen.

Tekniske spesifikasjoner

Art. nr.	674074
HMS nr.	
Total lengde	57 cm
Total høyde	83,5 - 98,5 cm
Setebredde	43 cm
Setedybde	46 cm
Produktets egenvekt	8,5 kg
Maks brukervekt	130 kg
Materialer, ramme	Sveiset stålør,
Ramme, materiale	Aluminium
Sete / armlene, materiale	Tre med skum og flammehemmende PVC-trekk

– Vi gjør hverdagen enklere!

Varodd Velferdsteknologi AS

Rigedalen 41 | 4626 Kristiansand | Postboks 8343

38 14 48 00 | hjelpemidler@varodd.no

Org.nr. 919 571 039 | www.hjelpemidler.varodd.no

