



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

## BRUKSANVISNING

# Rollator Support

### **Stark och funktionell rollator avsedd för den bariatriska användaren.**

Rollator Support är utvecklad till användare som väger upp till 200 kg.

Rollatorn kan användas både utomhus och inomhus, på sjukhus, omsorgsboenden och i privata hem. Rollatorn finns i två bredder.



Cobi Rehab och Cobi Rehabs leverantörer följer FN:s konventioner om barn- och tvångsarbete och ILO 029, C132 samt C182.

# Innehåll

1. Säkerhet .....	3
2. Symbolförklaring.....	4
3. Generellt .....	5
4. Användning.....	5
5. Montering.....	6
6. Inställningar.....	6
7. Rollator King .....	7
8. Rengöring och underhåll .....	8
9. Bortskaffning .....	8
10. Garanti .....	9
11. Specifikationer.....	10
12. Beställning.....	11

# 1. Säkerhet

---



## Varning

Rollator Support får inte användas utan instruktion av utbildad personal eller av personer som fått en instruktion i användandet av rollatorn. Vid felaktig användning kan användaren ta skada.

Bruksanvisningen ska läsas grundligt innan rollatorn används. Rikta speciellt uppmärksamheten mot säkerhetsvägledningar markerade med

Cobi Rehab påtager sig inget ansvar för eventuella skador på produkten eller för personskador förorsakade av felaktig användning av Rollator Support.

Kontakta Cobi Rehab omedelbart om Rollator Support är skadad eller har felaktigheter. Använd aldrig egna reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador eller för oförutsedda situationer som kan uppstå efter reparationer som gjorts utan skriftlig tillåtelse från Cobi Rehab.



## SÄKERHETSVÄGLEDNING

Aktivera rollatorns bromsar innan den används till att sitta och vila på.

Använd aldrig rollatorn i rulltrappor eller i vanliga trappor.

Använd aldrig rollatorn som en rullstol.

Använd aldrig rollatorn till att transportera stora saker. Transportera endast saker som kan ligga i transportkorgen.

Använd aldrig rollatorn på underlag som lutar med än 3,5°.

Använd aldrig rollatorn på våta eller ojämna underlag.




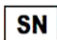





Dra alltid åt handvreden till höjjusteringen.












Låt bägge benen vila i marken när rollatorn används att sitta på. Det säkrar stabiliteten. Vicka heller inte rollatorn fram och tillbaka när den används att vila på.

Om produkten används till personer som väger mer än 200 kg finns det risk att rollatorn kan välta eller skadas.

Yttemperaturen kan stiga när rollatorn utsätts för externa värmekällor, till exempel solljus.

## 2. Symbolförklaring

Följande symboler finns i bruksanvisningen eller på produktens etikett.	
	Varning
	Försäkran om överensstämmelse enligt direktivet för medicintekniska produkter EU 2017/745
	Cobi Rehab artikelnummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Tillverkare
	Medicinsk utrustning klass 1
	Max. användarvikt
	Läs manual
TBA	Offentliggörs senare
CE-etiketten är placerad på rollatorns ram. Exempel på etikett kan ses härunder.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			
	XXL-Rehab Rollator Support 0173-050-000			200 KG
	2000741		MADE IN TAIWAN	
	2020			

## 3. Generellt

---

Denna bruksanvisning innehåller viktiga upplysningar om användningen av Rollator Support för anpassad målgrupp. Bruksanvisningen innehåller också en specifikationslista.

Den senaste versionen av denna bruksanvisning finner du på vår hemsida. Kontrollera att den version du sitter med nu är den senaste.

Om du har behov av en bruksanvisning med större skrift finns bruksanvisningen i PDF-format på [www.cobirehab.se](http://www.cobirehab.se). Där kan du förstora upp skriftstorleken.

Du kan alltid kontakta Cobi Rehab på telefon 08-702 97 74 om du önskar fler upplysningar om Rollator Support.

Cobi Rehab förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående varning.

Rollator Supports UDI-nummer framgår av etiketten på ramen.

Produktsäkerhetsmeddelanden och tillbakakallelse av produkten kan ses på hemsidan under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/viktig-produktinformation/>

## 4. Användning


---

Rollator Support får endast användas av mobila användare som har såväl fysik som kognitiva förmågor att kontrollera att gå och bromsa rollatorn på ett säkert sätt.

Rollator Support är avsedd för användare som väger upp till 200 kg. Rollatorn kan användas utomhus och inomhus på institutioner, vårdcentraler och i privata hem.

De höjdbarbara underarmsstöden hjälper användaren att gå i upprätt läge och ökar avlastningen på handlederna.

Rollatorn kan användas som stol när bromsarna är låsta.

 Använd aldrig Rollator Support på våta eller ojämna underlag.

Konsultera alltid en förskrivare innan Rollator Support rekommenderas till en användare.

### Kontraindikationer

Det finns inga kontraindikationer i samband med användningen av produkten som rollator eller stol.

### 4.1 Mer användning

Rollator Support finns i två bredder, 61 cm och 71 cm. Bredden avser mellanrummet in till sitsen och avspeglar avståndet mellan handtagen.

Båda modeller har en sitsbredd på 51 cm, en sitshöjd på 51 cm och ett sitsdjup på 37 cm.

Den totala bredden på de två modellerna är 13 cm mer än avståndet mellan handtagen.

Var uppmärksam på att modellen med den totala bredden på 84 cm kan ha svårt att komma igenom vissa dörröppningar.

#### Val av modell till användare

Valet av modell är beroende av användarens kroppsform. Till användare med päronformad kroppsform rekommenderar vi en rollator i storlek 71 cm. Kontakta gärna Cobi Rehab på 08-702 97 74 för råd och vägledning innan beställning.

Ta alltid måtten på användaren i stående position. Placera till exempel en bok eller liknande på den sida av användaren där användaren är bredast. Mät sedan avståndet mellan de två böckerna.

#### Att gå med Rollator Support

1. Placera händerna på handtagen. Släpp bromsarna.
2. Kliv sedan försiktigt fram, en fot i taget.
3. Se till att ytan är slät så det är lättare att gå. Var uppmärksam och var försiktig med hinder / håll i vägen / underlaget.
4. Använd bromshandtagen för att stanna.

Använd aldrig rollatorn på sluttande ytor som är mer än 3,5° eller på mjuka och ojämna underlag.

## 5. Montering

---

Kartongen innehåller förutom rollatorn även två handtag (anslutna till rollatorn med kablar), två stänger med underarmsstöd, en korg och ett säkerhetsryggstöd

1. Fäll ut rollatorn.
  2. Ta bort höjjusteringskruvarna från handtagsstängerna.
  3. Fäst stängerna med underarmsstöden på rollatorn.
  4. Sätt in handtagen i underarmsstöden.
  5. Montera säkerhetsryggstödet på framsidan av rollatorn genom att dra upp knappen på höger respektive vänster sida.
- Knappen kan låsas vilket gör det lättare att montera fästet. Detta görs genom att dra upp knappen och vrida det ett kvarts varv.

Kom ihåg att lossa knappen igen så att säkerhetsryggstödet sitter säkert.

6. Förvaringskorgen monteras framtill genom att hänga upp korgens krokar på det översta röret under sitsen.
7. Justera höjden på handtagen för att anpassa till användaren.
8. Justera bromsarna.

**⚠** Använd inte rollatorn utan att ryggsäkerhetsstången är fastmonterat.

Ryggsäkerhetsstången säkrar att belastningen på rollatorn inte hamnar för långt fram. Om detta skulle ske kan rollatorn tippa framåt.

**⚠** Lägg inte kuddar ovanpå den polstrade sitsen när rollatorn används.

## 6. Inställningar

---

### Justering av höjden på handtagen/underarmsstöden

1. Ta bort skruven och höjjusteringsvredet från båda handtagen så att handtaget kan röra sig fritt upp och ner.
2. Skjut handtagen uppåt eller nedåt tills önskad höjd uppnås. Sätt i skruv och vred. Placera bulten på baksidan så att den passar i hålet.
3. Spänn till.
4. Justera höjden på handtagen så att handtagen ligger i området mellan höftleden och revbenets nedre del. Observera att båda handtagen är lika höga. Ojämn höjd kan leda till instabilitet.

### S Hopfällning av rollatorn

1. Ta tag i sitsens framkant (den kant som är närmast dig) med en hand. Håll i ett av handtagen med den andra handen.
2. Lyft upp sitsen.
3. Rollatorn viker sig nu.

Om rollatorn behöver ta ännu mindre plats vid hopfällningen kan transportkorgen och ryggsäkerhetsstången monteras av.

### Användning av bromsarna

Rollator Support kan bromsa på två sätt:

1. Korttidsstopp:

Tryck båda handtagen uppåt.

2. Längre stopp:

Tryck ner båda bromshandtagen så att de låser i nedre läge. Handtagen förblir i detta läge tills de aktivt trycks upp igen.

### Översyn av bromsarna

Bromsarna är korrekt inställda vid leverans.

Bromsarna och parkeringsbromsen ska kontrolleras innan rollatorn tas i bruk.

Om parkeringsbromsen inte kan låsas eller om bromsarna inte fungerar korrekt, kontakta Cobi Rehab på 08-702 97 74.

Bromsarna ska ses över var 3:e månad.


## 6.1 Transport i motorfordon

Rollator Support kan lätt fällas ihop om den ska transporteras i ett motorfordon.

1. Tag tag i sitsens framkant med ena handen, håll en hand på ena handtaget.

2. Lyft upp sitsen och fäll ihop rollatorn.

Om rollatorn behöver ta liten plats kan transportkorgen och ryggsäkerhetsstången tas av.

 Rollator Support får inte användas som sittplats i ett motorfordon.

## 6.2 Förvaring och långtidsförvaring

Rollator Support bör förvaras mörkt och övertäckt med en filt eller liknande.

Rollator Support bör temperaturmässigt förvaras mellan -10° - 50°C.

Kontrollera med jämna mellanrum att rollatorn inte blivit våt eller fått någon annan skada under förvaringen.

# 7. Rollator King

---

Vår andra bariatriska rollator, Rollator King påminner i sin konstruktion om Rollator Support.

Rollator King har dock handtag i stället för underarmsstöd och en max användarvikt på 325 Kg.

Om användaren i stället behöver en Rollator King kan underarmsstöden tas bort och ersättas med handtag.

Kontakta Cobi Rehab för mer information om borttagning av underarmsstöd.



## 8. Rengöring och underhåll

---

### 8.1 Rengöring och desinficering

Rollatorns chassi, sits, handtag, underarmsstöd och ryggsäkerhetsstång kan rengöras med vatten och ett vanligt rengöringsmedel.

#### Desinficering

Rollatorns chassi, sits, handtag, underarmsstöd och ryggsäkerhetsstång kan också desinficeras med 70% ytdesinfektion eller med en klorprodukt 1000-1200 ppm.

Sits och ryggsäkerhetsstång kan bytas ut när rollatorn ska användas av en annan användare.

⚠ Desinficera alltid Rollator Support om den ska användas av en annan användare. Detta för att undvika korskontaminering.

⚠ Eventuella lokala rutiner kring rengöring och underhåll ska alltid följas.

### 8.2 Underhåll

Bultar och vred ska kontrolleras var tredje månad. Spänn åt dem om det behövs.

Kontakta Cobi Rehab för ytterligare information kring underhåll av Rollator Support.

⚠ Bristande underhåll av bultar och vred kan leda till funktionsfel.

## 9. Bortskaffning

---

När Rollator Support inte längre är i bruk ska den bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Kontakta Cobi Rehab eller kommunen för ytterligare information kring bortskaffningen.

#### Återanvändning

Delar av Rollator Support kan återanvändas. Kontakta Cobi Rehab för mer information.



# 10. Garanti

---

Cobi Rehab garanterar att Rollator Support är felfri när den levereras. Skulle det mot förmodan finnas skador eller saknas något på rollatorn vid leverans, kontakta Cobi Rehab omedelbart.

Garantiperioden för Rollator Support är ett år från köpedatum och täcker produktionsfel eller defekter vid leverans. Fakturan gäller som garantibevis.

Garantin gäller inte:

- produkter där serienummer, batchnummer eller liknande har försvunnit eller skadats väsentligt.

- produkter där det gjorts en reparation av icke auktoriserad personal.

Garantin omfattar inte:

- slitagedelar.

## 10.1 Oförutsedda händelser

Varje incident som inträffar i samband med användningen av Rollator Support ska meddelas till Cobi Rehab.

## 10.2 Efter förväntad livslängd

Efter den förväntade livslängden är det viktigt att det görs en samlad bedömning av produkten innan fortsatt bruk.

Efter den förväntade livslängden kan Cobi Rehab inte garantera lämplighet och säkerhet för produkten då Cobi Rehab inte har någon kontroll över hur produkten använts och hur sliten den är.

Den samlade bedömningen av produkten ska göras av utbildad personal såsom förskrivare eller hjälpmedelskonsulent. Som ett minimum ska det bedömas hur produkten är använd, produktens tillstånd och produktens samtliga komponenter.

Garantin gäller inte om Cobi Rehab bedömer att rollatorn blivit hanterad på ett felaktigt sätt.

Vid skada på grund av felaktig användning faktureras både för service och använda reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador av någon art.

⚠ Brist på underhåll kan skada rollatorn, förkorta livslängden eller påverka rollatorns prestanda.

Cobi Rehab kan alltid göra en sådan bedömning.

Efter förväntad livslängd är det viktigt att en helhetsbedömning av produkten görs innan fortsatt användning.

# 11. Specifikationer

<b>Modell 61 cm och 71 cm</b>	
Max användarvikt	200 kg
Total längd	850 mm
Total bredd	740/840 mm
Bredd mellan handtag	610/710 mm
Höjddjusterbar i intervaller av 2,5 cm	100 - 130 mm
Sittbredd	510 mm
Sittdjup	370 mm
Öppning in till sits	610/710 mm
Sitshöjd	510 mm
Vikt	15,7 kg
Max vikt i transportkorg	5 kg
Hopfällbar	Ja
Massiva hjul	Ja
Chassi	Krom molybden stål/SAE41-30
Chassi och sits	Brandsäkert
Sits och ryggpolstring	Polyuretanskum
Hjul	8" massiva
Förväntad livslängd	7 år
ISO-klassifikation	ISO 12 06 06 - 11
Riskklass	I
Grundläggande UDI	5740000100007N8
Yttemperaturen på rollatorn kan stiga eller sjunka om den utsätts för yttre kyla eller värme.	

## 12. Beställning

---

Modell	Öppning in till sits	Totalbredd	Artikelnummer
Rollator Support 61, inkl. korg	610 mm	740 mm	0173-050-000
Rollator Support 71, inkl. korg	710 mm	840 mm	0173-071-000
Handtag till King modell, vänster			0170-999-010L
Handtag till King modell, höger			0170-999-010R



# **COBI REHAB**<sup>®</sup>

The Positioning Company

---



## **TILLVERKARE**

**Cobi Rehab**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
+45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)

## **LEVERANTÖR**

**Cobi Rehab**  
Rålambsvägen 17  
112 59 Stockholm  
08-702 97 74

[WWW.cobirehab.se](http://WWW.cobirehab.se)





## USER MANUAL

# Rollator Support

### **Strong and functional rollator designed for the bariatric user.**

Rollator Support is intended for users weighing up to 200 kg.

The rollator can be used outdoors and indoors in institutions, care centers, and in private homes. Rollator Support comes in two sizes, 61 cm and 71 cm.



Scan or click the QR code and find the product on the Danish AssistData.



Cobi Rehab and Cobi Rehab's suppliers comply with UN conventions on child and forced labor and ILO 029, C132 and C182.

# Table of content

1. Safety .....	3
2. Symbols .....	4
4. Using Rollator Support .....	5
3. General comments .....	5
5. Assembling the rollator .....	6
6. Adjustment .....	6
7. Rollator King .....	7
8. Cleaning and maintenance .....	8
9. Disposal .....	8
10. Warranty .....	9
11. Specifications .....	10
12. Ordering .....	11
13. Accessories .....	11

# 1. Safety


---



## CAUTION

Do not use Rollator Support without prior thorough instruction by trained staff or by persons who have received instructions in the use of the rollator. Improper operation may cause injury to the user.

If Rollator Support is used for persons weighing more than the maximum user weight, the risk of damaging Rollator Support increases.

Carefully study these instructions before using the Rollator Support. Pay attention to Safety Instructions indicated by a warning triangle .

Cobi Rehab accepts no responsibility for damage caused to the product nor for personal injury caused by improper installation, assembly or use of Rollator Support.

Contact Cobi Rehab immediately in the case of damaged or missing parts. Never use your own spare parts.



## SAFETY INSTRUCTIONS

Always lock the rollator before sitting down.

Never use the rollator on stairs and escalators.

Never use the rollator as a wheelchair.

Never use the rollator to transport large items. Only items that fit in the basket.

Never use the rollator on surfaces that slope by more than 3,5 degrees.

Never use the rollator on soft and uneven surfaces.

Always remember to tighten the hand nuts for height adjustment.










Keep both feet on the ground while using the rollator as resting chair. This prevents the rollator from tipping backwards if the user leans against the backrest.












Rollator Support can tip over, sustain damage, or break if used by a user weighing more than 200 kg.

The surface temperature of the Rollator Support can increase or decrease when exposed to external sources of heat or cold.



## 2. Symbols

The following symbols are used in this user manual and/or on the product label.	
	Caution!
	Declaration of conformity, Medical Device Regulation, EU 2017/745
	Ingres Protection Ratings Guide.
	Cobi Catalogue number
	Serial number
	Date of manufacture
	Manufacturer
	Medical device
	Body weight
CE-Label on the product is located on the bottom frame. See example of label below.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			
	XXL-Rehab Rollator Support 0173-050-000			200 KG
	2000741		MADE IN TAIWAN	
	2020			

## 3. General comments

---

This user manual contains important information about the use of Rollator Support and the target group for the rollator. It also includes a wide range of specifications on Rollator Support.

The most recent version of this user manual can be found on our website. Check if the version you are reading now is the most recent.

If you need a user manual that is written in a larger font size, the manual is available in PDF format at [cobirehab.com](https://www.cobirehab.com), which can be scaled up to the required font size.

You can always contact Cobi Rehab on + 45 7025 2522 or [cobi@cobi.dk](mailto:cobi@cobi.dk) if you want more information about Rollator Support.

Cobi Rehab reserves the right to change the product specifications without providing prior notice.

The UDI number of the rollator appears on the label, which is located on the side of the frame.

Product safety notices and product recalls can be viewed on the website.

<https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/>

## 4. Using Rollator Support

---

Rollator Support should only be used by the independent user, who are physically and mentally able to use the rollator safely (e.g., to walk, steer, brake).

Rollator Support is intended for users weighing up to 200 kg. The rollator is designed for use outside and inside, in institutions, care centers and private homes.

**⚠** Rollator Support can tip over, sustain damage, or break if used by a user weighing more than 200 kg.

Always consult a therapist before assigning a Rollator Support to a user.

### 4.1 More use

Rollator Support is available in two sizes, 61cm and 71 cm which refers to the distance between the handles. Both models have a seat width of 51cm, seat height of 51cm and a seat depth of 37 cm.

The total width of Rollator Support is 13 cm more than the distance between the handles. Be aware of the model with a width of 84 cm can have difficulties going through certain doorways.

#### How to choose the right size

Which size of Rollator Support depends on the body shape of the user. For users with a lot of fullness around the pelvis and thighs, we recommend a size 71 cm.

Always measure user standing. For example, place a book or similar on the side of the user's

The height adjustable forearm supports assist the user to drive the rollator forwards in an upright position and at the same time relieve the wrists.

Rollator Support can be used as a resting chair when the brakes are locked.

**⚠** Never use the rollator on soft and uneven surfaces.

#### Contraindications

The user of Rollator Support must have physical and cognitive resources to control and operate the rollator in a safe manner.

body where the user is widest. Then measure the distance between the two books.

Contact Cobi Rehab at [cobi@cobi.dk](mailto:cobi@cobi.dk) for guidance and instructions on how to choose the right size.

#### To walk the Rollator Support

1. Place hands on the handles. Release the brakes.
2. Step forward gently, one foot at a time.
3. Make sure the surface is smooth, so it is easier to walk. Pay attention to obstacles.
4. Use the brake levers to stop.

**⚠** Never use the rollator on surfaces that slope by more than 3,5 degrees.

## 5. Assembling the rollator

---


In addition to the rollator, the shipped box also contains two handles (connected to the rollator by cables), two bars with underarm support, a basket, and a safety backrest.

1. Unfold the rollator.
2. Remove the screws for height adjustment from the handlebar.
3. Attach the bars with the underarm support to the rollator.
4. Mount the handles to the underarm support.
5. Mount the back on the front of the rollator by pulling upwards on the knobs on the left and right sides, respectively.


Notice that the knob can be locked to make it easier to mount the back. This is done by pulling the knob upwards and turning it a quarter turn.

Remember to loosen the knob again to fasten the safety back rest.

6. Mount the basket in the front by placing the two hooks on the upper tube below the seat. Place the notch on the bottom of the basket on top of the bottom tube.
7. Adjust the height of the handles to suit the user.
8. Adjust the brakes.

 Do not use the rollator without the safety backrest.

The safety backrest ensure that the weight is not positioned too far forward. If the weight is positioned too far forward, the rollator may tip.

 Do not lay or put extra cushions on the upholstered seat when in use.

## 6. Adjustment

---

### Adjusting the height of the underarm support

1. Loosen the knob for height adjustment. Push the screw, so the bars can move freely up and down.
2. Push the underarm support up or down until the required height has been found. Reinsert the screw and the knob again.
3. Tighten.

Ensure left and right underarm support are level to avoid instability problems.

### How to fold the rollator?

1. Grab the front of the seat (the side closest to user) with one hand. Hold one of the handles with the other hand.
2. Lift the seat.
3. The rollator now folds.

To minimize the size of an already folded rollator, remove the back and basket.

### Adjustment of the brakes

The rollator brakes is used in two ways.

Brief stops:

Squeeze each brake handles upwards.

Longer stops:

Push both brake-handles downwards, so they lock in a “down” position. The handles stay in this position until they are actively released.

### Brake inspection

The brakes are properly set on delivery.

Brake operation, and parking brake should be checked before every use.

If the parking brake cannot lock or if the brakes are not working correctly, contact Cobi Rehab immediately.

## 6.1 Transportation in motor vehicle

Rollator Support can be transported from one place to another. Fold the rollator as described below.

1. Grab the front of the seat (the side closest to user) with one hand. Hold one of the handles with the other hand.

2. Lift the seat. The Rollator now folds.

To minimize the size of an already folded rollator, remove the back and basket.

⚠ Rollator Support cannot be used as a seat in a motor vehicle.

## 6.2 Storage (incl. long-term storage)

The Rollator Support should be stored in the dark and covered with a sheet or other cover.

Check regularly that the rollator has not become wet or damaged during storage.

The Rollator Support should be stored at temperatures between -10°- 50°C.

# 7. Rollator King

---

Rollator King is in the construction like Rollator Support. However, Rollator King has handles instead of underarm supports. User weight 325 kg.

Contact Cobi Rehab for more information on mounting of handles.

See "Accessories"-section for handles item number.

If the user instead needs a Rollator King, the underarm supports can be removed from Rollator Support and replaced with handles.



## 8. Cleaning and maintenance

---

### 8.1 Cleaning and disinfection

Frame, seat, handles, and safety backrest can be cleaned with water and a household detergent.

#### **Disinfection**

Frame, seat, handles, and safety backrest can be disinfected with ethanol 70-85% or a chlorine product 1000-1200 ppm.

⚠ The upholstered seat and the back rest must be replaced or thoroughly disinfected when Rollator Support is transferred to a new user.

This is done to avoid cross-contamination and infections.

Local cleaning and disinfection procedures must always be followed.

The seat and back holder can be replaced when switching to a new user.

### 8.2 Maintenance

Check bolts and nuts every three months. Retighten them if needed.

Contact Cobi Rehab for further guidelines on cleaning and maintenance.

⚠ Non-compliance with the bolt inspection guidelines can lead to malfunction.

## 9. Disposal

---

Products that can no longer be used are to be disposed of in a sustainable way. Please contact the relevant authorities for information on proper disposal.

#### **Recycling**

Parts of the rollator can be reused. Contact Cobi Rehab for more information.

# 10. Warranty

---

When delivered, Rollator Support is free from defects. Should, contrary to all inspections, there be any defects or damage to the Rollator Support, please contact Cobi Rehab immediately.

Rollator Support is covered by a 1-year warranty from the date of purchase. The invoice serves as warranty certificate.

The warranty does not apply to:

- products whose serial number, batch number etc. have been removed or considerably damaged
- products that have been repaired by unauthorized staff
- normal wear and tear, for example cleaning, adjustment, lubrication and update of equipment or parts.

## 10.1 Unintended incident

Report any incidents related to the use of Rollator Support to Cobi Rehab.

## 10.2 After expiry of expected service life

After the expected service life, it is important that an overall assessment of the product is made before continued use.

After the expected service life, Cobi Rehab cannot guarantee the suitability and safety of the product, as Cobi Rehab has no control over how the product is used and wear and tear.


The overall assessment of the product must be carried out by qualified professionals, and as a

The warranty is void if Cobi Rehab assesses that Rollator Support has been used for purposes other than its intended use, for example, if its weight capacity is exceeded.

In case of incorrect use, both service and spare parts will be invoiced.

The warranty described above is the only valid warranty.

Cobi Rehab may not be held liable for damages of any kind.

 Lack of maintenance can damage the product, shorten the life, or affect the performance of Rollator Support.

minimum, consideration must be given to how the product has been used, the condition of the product and its components.

Cobi Rehab can always make such an assessment.

# 11. Specifications

<b>Model 61 cm og 71 cm</b>	
Maximum user weight	200 kg
Total length	850 mm
Total width	740/840 mm
Width between handles	610/710 mm
Height adjustable in 2.5 cm intervals	100 - 130 mm
Seat width	510 mm
Seat depth	370 mm
Seat opening	610/710 mm
Seat height	510 mm
Weight	17 kg
Weight capacity in basket	5 kg
Foldable	Yes
Massive wheel	Yes
Frame	Steel/SAE4130
Frame and seat	Flame retardant
Seat and back	Polyurethane
Wheel	8" massive
Expected product life	7 years
ISO classification	ISO 12 06 06 - 11
Risk class	I
Basic UDI	5740000100007N8
The surface temperature of the Rollator Support can increase or decrease when exposed to external sources of heat or cold.	

## 12. Ordering

---

<b>Model</b>	<b>Seat opening</b>	<b>Total width</b>	<b>Item number</b>
Rollator Support 61, incl. basket	610 mm	740 mm	0173-050-000
Rollator Support 71, incl. basket	710 mm	840 mm	0173-071-000

## 13. Accessories

---

<b>Accessories</b>	<b>Item number</b>
Rollator Support Kit/King	0170-999-010
Handlebar with grip, left	0170-999-010L
Handlebar with grip, right	0170-999-010L





**COBI REHAB<sup>®</sup>**  
The Positioning Company

---



**MANUFACTURER**

**Cobi Rehab**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Denmark  
+45 7025 2522

[cobi@cobi.dk](mailto:cobi@cobi.dk)

[cobirehab.com](http://cobirehab.com)