

Go-box



Manual



Inn hold fortegnelse

1	Hva er Go-box.....	3
	Hva er i pakken.....	4
	Serienummeret.....	5
2	Koble opp Go-box.....	6
	Blåtann hodetelefon.....	7
	Flere videokilder.....	7
3	Utseende.....	8
	Bakside.....	8
	Forside	9
	Fjernkontroll.....	10
4	I bruk.....	11
	Velg talekanal ut.....	11
	Juster tale hastighet.....	11
	Juster hodetelefon volumet.....	11
5	Meny.....	12
	Meny - Tale - Volum.....	12
	Meny - Tale - Balanse.....	12
	Meny - Tale - Hastighet.....	13
	Meny - Tale - Stemme.....	13
	Meny - Profiler.....	13
	Meny - Wifi.....	14
	Meny - Bluetooth.....	15
	Meny - Go-box.....	15
6	Ofte stilte spørsmål.....	16
7	Spesifikasjoner.....	17

Hva er Go-box

Go-box er utviklet spesielt for personer med syn/hørsel eller lesevansker. Den leser eller forstørrer opp undertekstene som er i sendingen/filmen du ser på. Enheten har bare noen få innstillinger, og all tilbakemelding blir talte. Det er derfor mulig å betjene enheten helt ved berøring og hørsel. Dette gjør det til en innovativ og praktisk enhet for personer med synshemming eller for eldre uten datakunnskaper. En datamaskin er ikke nødvendig, og GObox er veldig enkel å bruke. En Internett-tilkobling er heller ikke nødvendig, selv om Internett kan være nyttig å ha tilgjengelig for automatiske oppdateringer.

Go-box er plassert "i mellom" med en HDMI-kabel. TV-en er vanligvis koblet til den eksterne dekoderen med en slik HDMI-kabel. Denne kablet som går inn i TV-en, settes nå inn i Go-boksen, som i sin tur kobles tilbake til TV-en med kablet som følger med i esken. Bruk "dekoeder"-fjernkontrollen til å bytte mellom TV-kanaler slik du er vant til. Go-box følger automatisk den valgte TV-kanalen.

Hva er i pakken

Esken inneholder følgende:

- Go-box med 5V adapter
- HDMI
- USB hodetelefon overgang
- Blåtann hodetelefoner
- Fjernkontroll + AAA-batteri
- Bruksanvisning



Hvor finner jeg serienummeret

Serienummeret er et 5-sifret nummer som starter med stor G (f.eks. G12345)

Nummeret finner du på undersiden av din GObox, og på utsiden av pakken og i menyen for talende innstillinger.


Dette serienummeret er viktig for eventuelle kundestøttespørsmål.

KOBLE OPP GO-BOX

Go-box trenger bare strøm og en videokilde for å begynne å lese eller forstørre undertekster for deg. Dette er beskrevet i eksemplet "Grunnleggende oppsett" nedenfor. Noen andre eksempler som kan passe bedre til ditt miljø eller dine behov er også beskrevet i Basis oppsett.

Dette eksemplet beskriver bruk av:


- En TV-tuner (eller annen videokilde)
- En TV med HDMI inngang
- Hodetelefon for å lese opp undertekst

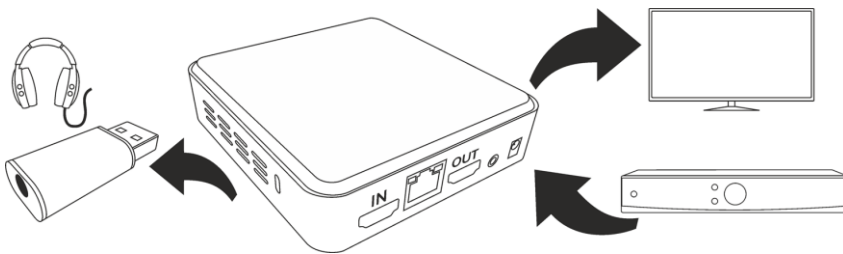

Ta HDMI-kabel ut av TV-en og sett den inn i HDMI-IN-kontakten på GObox. Kontroller at oppløsningen er satt til HD-kvalitet (1920x1080). Bruk den medfølgende HDMI-kabelen til å koble HDMI-OUT-kontakten til en HDMI-inngang på TV. Bruk 5V adapter som følger med og koble den til strøm.


Still TV-en til riktig HDMI-inngang (også kalt kilde) for å se signalet fra TV-mottakeren. GObox viser kortSolutions Radio-logoen i et oppstartsskjerm bilde. Du er nå klar til å høre talte undertekster som kommer fra TV-en. Hvis ikke: trykk på [Tale]-knappen på fjernkontrollen for å veksle "taleutgang" mellom TV og hodetelefoner.

Blåtann Hodetelefon

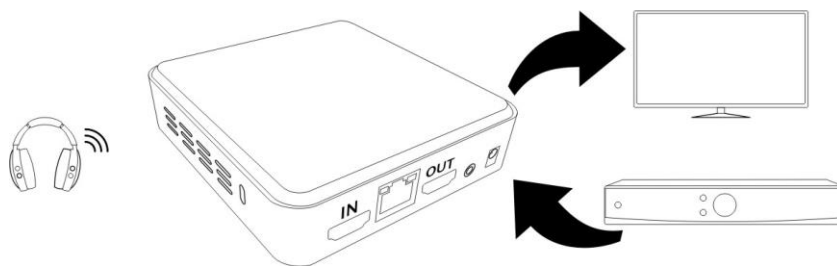

Flere videokilder

Dersom du har flere videokilder tilkoblet din TV i dag så kan man gjøre følgende midlertidig. Bytte kabler til HDMI inn kan være en midlertidig løsning for å bruke Go-box med flere videokilder. Dette gjøres ved å ta ut HDMI inn og koble til HDMI fra den andre kilden i TV, men vi anbefaler å skaffe en HDMI-svitch(bryter). *En slik bryter er ikke i pakken men må kjøpes separat*

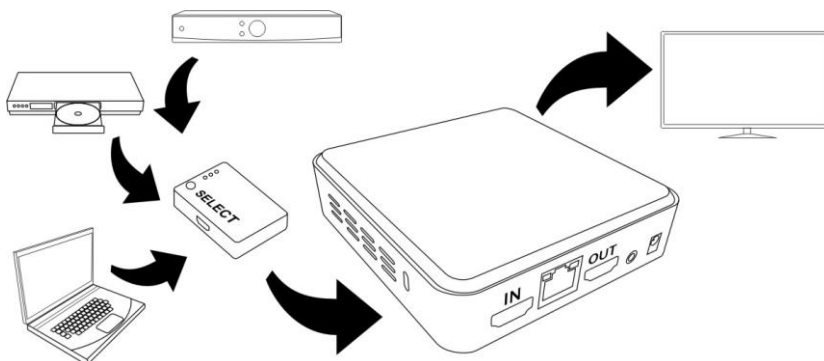


Utseende

Bakside

Baksiden har 5 tilkoblinger. Fra venstre til høyre.


- **HDMI-input** tilkobling for HDMI kabel som kommer fra en videokilde/TV-Tuner.
- **nettverk** kontakt for et nettverk - kabelet til ditt locale nettverk.
- **HDMI-ut** tilkobling for HDMI kabel til din TV
- **IR-blast**er (ikke i bruk)
- **Strøm** tilkobling (1.3x3.5mm) for tilkobling til strømatak i vegg.

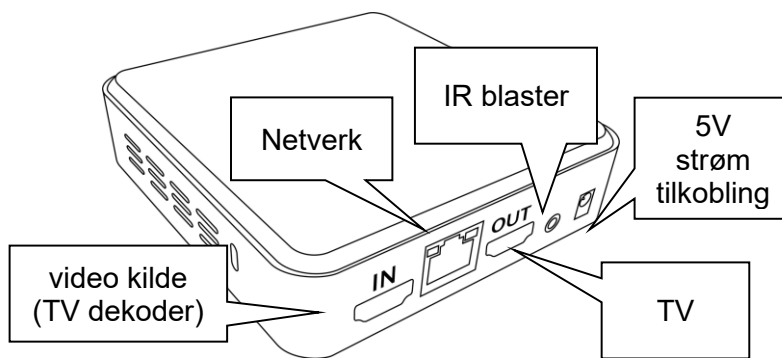

Forside

Forsiden har følgende funksjoner, fra venstre til høyre.

- Standby knapp
- Fjernkontroll mottaker
- SD kort
- Aktivites lys
- Standby/strøm lys
- to USB tilkoblinger (for tilkobling til hodetelefon overgang)

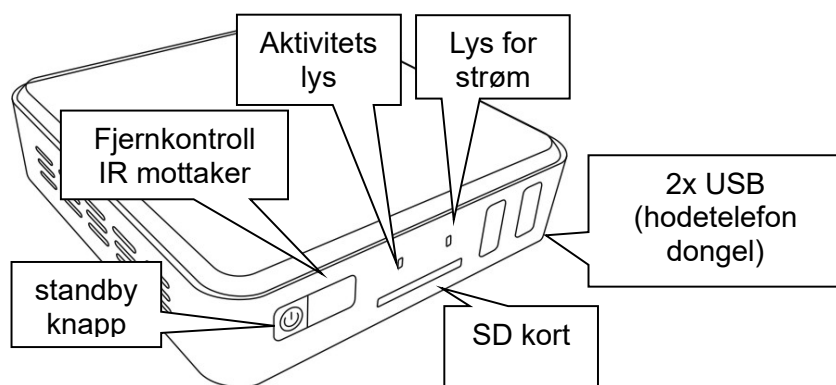

Fjernkontroll

Fjernkontrollen har 13 knapper.


[**Tale**]-knappen er plassert øverst til venstre og styrer de talte undertekstene til enten TV-høytalerne eller til hodetelefonene.

[**ON**]-knappen er plassert øverst til høyre. Denne knappen vil enten slå av GObox (standby) eller slå den på igjen.

Retten under disse knappene er det et par [**Hastighet**] -knapper langs venstre side for å stille inn hastigheten som stemmen leser opp undertekstene på. Et annet par langs høyre side styrer **volumet** på hodetelefonene.

Den nederste halvdel har 5 knapper i en diamantform, hvorav den midterste knappen er [**OK**] -knappen for å velge et alternativ i menyen. De omkringliggende 4 knappene er for å navigere **opp**, **ned**, **til venstre** og **høyre** gjennom menyen.

De to siste knappene til venstre for denne diamantformen er for enten å gå inn i [**menyen**] (den øverste) eller gå [**tilbake**] ut (den nederste).

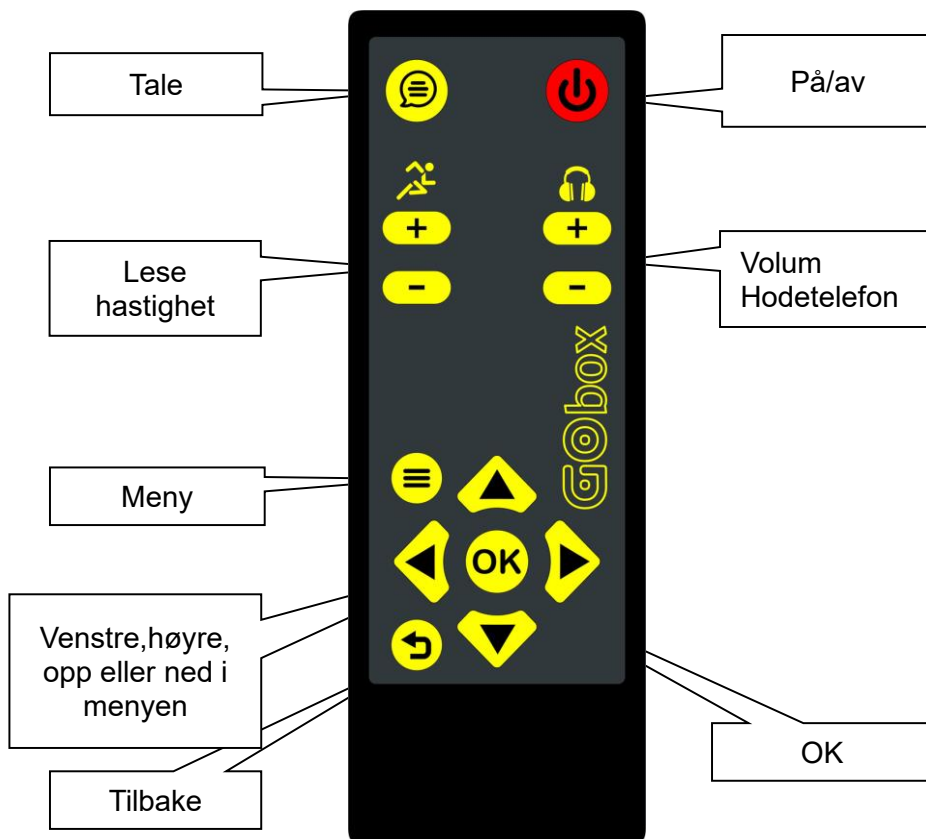

I Bruk

Go-box slås på automatisk når den oppdager et videosignal via HDMI-inngangen. Du kan også trykke på ON-knappen på fjernkontrollen.

Velg talekanal ut

Trykk på [tale]-knappen på fjernkontrollen i øvre venstre hjørne for å bytte tale til de tilkoblede hodetelefonene eller tilbake til TV-en.

Justere lesehastighet

Noen programmer eller filmer har så mange undertekster at du må la den syntetiske stemmen inne i GObox lese dem for deg litt raskere for å holde tritt.

Du finner et par knapper på venstre side av fjernkontrollen som styrer denne hastigheten.

Trykk på den øvre [**hastighet+**]-knappen for å øke og den nedre [**hastighet-**] for å redusere lesehastigheten.

Juster volum i hodetelefonen

Medfølgene hodetelefon er koblet til din GO-box via Bluetooth.

(Du finner av/på knappen i midten av de tre knappene på den ene øreklokken.)

Du finner et par knapper på høyre side av fjernkontrollen som styrer hodetelefonvolumet. Trykk på den øvre [volume+]-knappen for å øke og den nedre [volume-] for å redusere volumet.

Hodetelefonene har også egne knapper for justering av lyd.

Tips: Blandingen av talte undertekster versus TV-lyd kan styres i menyen Tale - Volum (som er uavhengig av hodetelefonvolumet).


Dersom du ønsker å bruke et kablet headsett(følger ikke med, så koble det med 3,5 mm jackplugg i USB-dongelen som fulgte med enheten).

Vedlagt hodetelefon er satt opp ferdig til bruk.

Meny Go-box

Go-box-menyen lar deg vanligvis endre engangsinnstillinger. Trykk på [Menu]-knappen (venstre til [U p]-knappen) og bruk deretter [OK]-knappen for å velge mellom:

- Tale
- Profiler
- Wifi
- Bluetooth
- Go-box

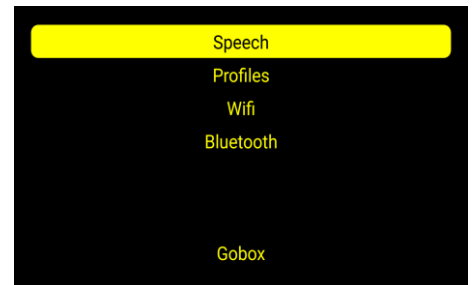


Meny- Tale - Volum

De talte undertekstene vil bli spilt av på et visst volum sammenlignet med lydvolumet i videoen. Bruk [Venstre]- og [Høyre]-knappene for å stille inn til høyre (f.eks. 50 %), og trykk deretter på [Meny] eller [Tilbake] for å gå ut av menyen. Merk: Det opprinnelige volumet på TV-lyd vil bli redusert under oppleste undertekster.


Meny - Tale – Balanse

Stemmen som leser undertekstene kan høres på begge sider eller bare til venstre eller på høyre høyttaler / hodetelefon. Bruk [Venstre]- og [Høyre]-knappene for å stille inn til høyre (f.eks. midtstilt), og trykk deretter på [Meny] eller [Tilbake] for å gå ut av menyen.

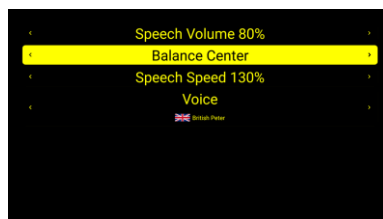


Meny - Tale – Hastighet

Stemmen som leser undertekstene kan settes til høyere eller lavere hastighet avhengig av dine preferanser eller hastigheten på tekster som vises på TV-en. Bruk [Venstre] og [Høyre]-knappene for høyreinnstilling (f.eks. 120 %), og trykk deretter på [Meny] eller [Tilbake] for å gå ut av menyen.

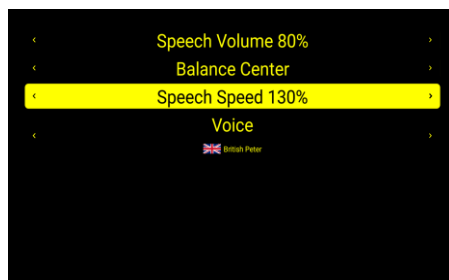


Meny - Tale – Stemme

Stemmen som leser undertekstene kan velges, for eksempel å velge en mannsstemme i stedet for en kvinnestemme. Bruk [Venstre]- og [Høyre]-knappene for å stille inn til høyre (f.eks. Olav), og trykk deretter på [Meny] eller [Tilbake] for å gå ut av menyen..

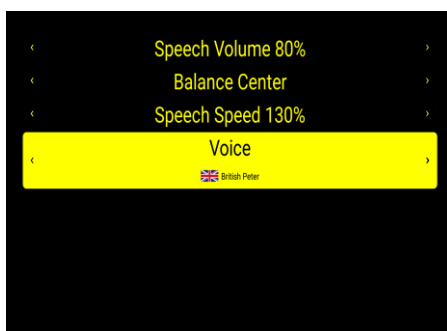

Meny - Profiler


[Tale]-knappen øverst til venstre på fjernkontrollen kan bytte destinasjon for de talte undertekstene (til TV-høytalerne eller til hodetelefonene). Begge disse destinasjonene har sin egen profil for å høre enten bare tale eller en blanding av tale og TV-lyd.

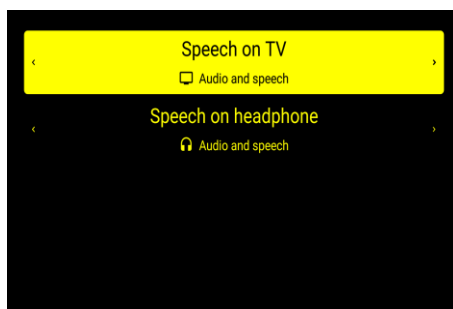

Meny- WiFi

Go-box kan kobles til internett slik at den for eksempel kan laste ned tilgjengelige programvareoppdateringer. Dette kan gjøres enten direkte via en nettverkskabel til ruterens til internettleverandøren din, eller gjennom det trådløse nettverket.

Velg nettverksnavnet ditt (også kalt SSID) fra listen, trykk på [OK]-knappen og skriv inn passordfrasen (også kalt WPA-nøkkel).

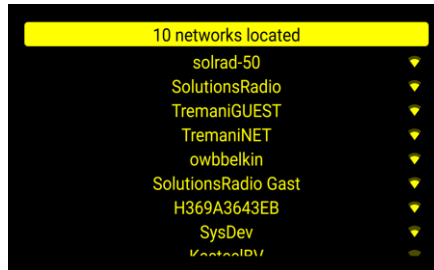

Skriv inn passordet ditt (WPA-nøkkel): bruk [opp] og [ned] knappene for å først bla gjennom små bokstaver, deretter store bokstaver, deretter sifrene noen spesialtegn som "utropstegn" eller "mellomrom" som slutter med tegnet kalt "klar". Trykk på [OK] eller [RIGHT]-knappen når du fant et riktig tegn.

Trykk på [BACK] eller [LEFT]-knappen for å korrigere et falskt tegn. Du må legge til tegnet " ↩ " for å bekrefte passordet etterfulgt av [OK] eller [HØYRE] -knappen.

Teksten 'konfigurert' vil nå vises ved siden av nettverksnavnet ditt. Det kan være lurt å oppdatere listen ved å trykke på [TILBAKE] og velge 'Wifi' igjen for å se om 'tilkoblet' vises.

Tips: Slik fjerner du en nettverkskonfigurasjon: Gå til «Wifi»-menyen og flytt den gule linjen til det konfigurerte nettverket du vil fjerne, og trykk på [TILBAKE]-knappen i 3 sekunder.




Meny - Bluetooth

Forsikre deg om at Bluetooth-enheten din er i såkalt 'paringsmodus' (se håndboken). Go-box starter å søke etter Bluetooth-enheter som er i "paringsmodus" når du åpner Bluetooth-menyen.

Velg enheten din og trykk på [OK]-knappen. En muntlig melding som sier "... tilkoblet" vil bli hørt på Bluetooth-enheten din. Trykk på [Menu] eller [Tilbake] for å gå ut av menyen.

Tips: Slik fjerner du en Bluetooth-konfigurasjon: gå til 'Bluetooth' -menyen og flytt den gule linjen til den konfigurerte Bluetooth-enheten du vil fjerne, og trykk på [BACK] -knappen i 3 sekunder.

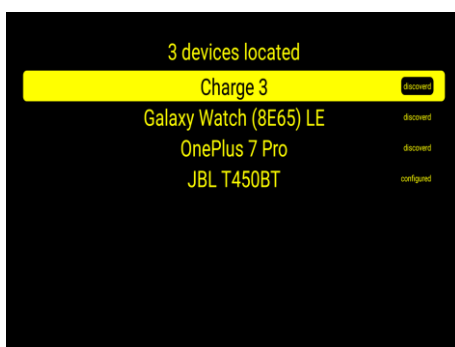

Meny – Go-box

GObox-menyen viser deg lisensstatusen og noen systemdetaljer som videokvaliteten til dekoderen (x1080 foretrukket) programvareversjonen og serienummeret.



Ofte stilte spørsmål

Skulle du ha spørsmål eller problemer med GObox, vennligst les følgende vanlige spørsmål først:

1. Hvorfor leses ikke alle ordene i undertekstene for meg, eller hører jeg bare noen fragmenter?

Videokvaliteten (oppløsningen) til dekoderen din er kanskje ikke riktig innstilt ennå. Gå inn i deko­derens innstillingsmeny og sett videokvalifiseringen til 1080p eller 1080i.

2. Kan jeg også bruke Go-box når jeg bare har en TV uten ekstern deko­der eller annen videokilde?

Go-box kan ikke fungere når videoen genereres i TV-en, for eksempel med en CI+-modul eller ved hjelp av on-demand-funksjonene til smart-TV-en. Be kabel-TV-leverandøren din om en ekstern deko­der for å gjøre det samme.

3. Kan jeg også bruke et døvesløyfesystem til å lytte til Go-box med høreapparatet mitt?

Du kan koble døvesløyfesystemet til 3,5 mm telefonkontakten som du ville koblet den til TV-en. Noen andre høreapparatsystemer har en såkalt "streamer" som kan kobles til Go-box som Bluetooth-hodetelefoner.

4. Det grønne lyset lyser ikke på Go-boxen når jeg slår på TV-en og dekoderen. Hva gjør jeg?

Sjekk om strømadapteren er riktig tilkoblet. Hvis den har: Kontroller at andre enheter som er koblet til den samme Stikkontakt fungerer også. Go-box trenger også minst en av HDMI-kontakten for å se en aktiv enhet, så sørg for at dekoderen og TV-en er riktig tilkoblet og slått PÅ.

5. Jeg ser også på forespørsel som Netflix eller HBO. Hvordan fungerer det med Go-boksen?

Den enkleste måten er å få en deko­der fra TV-leverandøren din som også kan streame slike tjenester slik at videoen automatisk går gjennom Go-box. Et annet alternativ ville være å starte on-demand-tjenesten på smarttelefonen eller PC-en og deretter streame den til en Chrome Cast koblet til Go-box. Et tredje alternativ er å koble PC-en til Go-box direkte med en HDMI-kabel.

6. Hvordan zapper jeg gjennom TV-kanalene?

Du bytter TV-kanal slik du er vant til med fjernkontrollen til dekoderen. Go-boksen følger kanal, og vil fortsette å lese undertekster fra neste kanal som går gjennom HDMI-kabelen.

7. Kan jeg også bruke min satellitt-TV-leverandør i stedet for kabel-TV?

Ja, du kan også bruke en satellittdeko­der så lenge den har en HDMI-utgang med oppløsning 1080.

8. Tekstingen blir ikke opplest selv om den er synlig på TV-skjermen.

Du må kanskje trykke på [tale]-knappen øverst til venstre på fjernkontrollen for å bytte mellom TV-høytalere og hodetelefoner.

SPESIFIKASJONER

Network

protocol	IPv4 and IPv6
Ethernet	10/100/1000M interface
connector type	RJ45 with cable-detection
WLAN/WiFi	IEEE802.11ac (2.4GHz + 5.0GHz)
encryption	WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPS-PB

USB

- 1x USB v2.0 high-speed type A
- 1x USB v3.0 full-speed type A

SD

- 1x SD slot (class 2,4,6) SDSC, SDHC (max. 32GB)

HDMI

- The HDMI interface supports HDCP v2.0
- 1x HDMI input + 1x HDMI output (for HD, full-HD or 4K TV)

Hodetelefon

- type Mini stereo jack 3.5mm (via USB dongel)
- adjustable level 2x 100 mW (2x 8 Ohm)

- Bluetooth v4.2 Class2, A2DP profile

General

- Power 5.0V-2A (1.3x3.5mm DC plug)
- 100-240 V, 50-60 Hz adapter included
- Remote Control 13 buttons, 140x49x20mm, 2xAAA-battery
- Operational temp. -10°C to +40°C
- Storage temp. -20°C to +60°C
- Dimensions 100x106x28 mm
- Weight 204g
- Approval CE, FCC

Logisense AS

Kontaktinfo:

Tlf: 22 12 00 86

E-post: post@logisense.no

Se mer info på www.logisense.no