

ORIGINALE INSTRUKSJONER

EUROLIFT

Trappeheis



Produseres av:



Leveres av:



Innholdsfortegnelse

1. Introduksjon.....	3
2. Søknad verdipapirer	3
3. Oversikt.....	4
4. Grunnleggende	5
5. Fjernkontroll.....	6
6. Forholdsregler for bruk	7
7. Vridningen av setet	8
8. Rengjøring.....	9
9. Barn og dyr.....	10
10. Vedlikehold og feilsøking.....	11
11. Teknisk data	13

1. Introduksjon

Vi gratulerer deg med kjøp av EuroLift trappeheis. Du har gjort et godt valg!

Du har nå en lojal følgesvenn ved din side, som ikke vil skuffe deg.

Denne bruksanvisningen er laget for å gjøre bruken av trappeheisen enklere for deg.

Trappeheisen gjør det lettere å flytte fra en etasje til en annen.

Vi gir 24 måneders garanti fra levering og montering.

2. Søknad verdipapirer

Det er viktig at du leser denne instruksjonen nøye, slik at du blir kjent med bruken trappeheisen.

VÆR FORSIKTIG! Du må være sikker før du bruker heisen, at maksimalt tillatt belastning på 125kg (valgfritt 160kg) ikke er overskredet.

Pass på at det ikke er noen hindringer i veien for trappeheisen, på trappene eller innenfor trappeheisens handslingsradius.

Trappeheisen er spesialdesignet med sikkerhetssystemer for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hvis heisen treffer en hindring, vil den bli stoppet av et forsvarlig sikkerhetssystem. Løftet vil ikke fortsette før hindringen er fjernet.

Den riktige posisjonen under heisens tur er å sitte på stolen med ryggen mot veggen, til ryggstøtten avvist, med føttene på fotbrettet og begge armene på stolens armlener.

FØLG MED!

Ikke bruk heisen hvis du holder store gjenstander som forstyrrer bevegelse eller hvis du ikke kan holde armene på stolens armlener under turen.

3. Oversikt



1. Sikkerhetsbelte

2. Joystick

3. Sete håndtak

4. På / Av knapp

5. Strømindikator

6. Fotbrett håndtak

7. Nødstoppbryter

8. Fotbrett

9. Nødsenk hendel

4. Grunnleggende

Som bruker har du full kontroll over trappeheisen.

Ved å bruke joysticken på enden av armlener (du velger selv hvor joysticken monteres, venstre eller høyre), kan du skyve joysticken i ønsket kjøreretning for å flytte heisen (venstre eller høyre).

Heisen beveger seg i den retningen du ønsker, til joysticken slippes.

Utløsningen av joysticken vil automatisk stoppe heisen fra å bevege seg.

For din egen sikkerhet vil heisen starte med 3 sekunders forsinkelse, etter at du har flyttet styrespaken. Dette forhindrer at heisen starter når joysticken dyttes ved et uhell.

På toppen og bunnen av skinnene stopper heisen automatisk, selv om du fortsetter å trykke på joysticken. Ikke slikk joysticken før du har nådd slutten av skinnen, heisen stopper automatisk.

For din egen sikkerhet vil du høre en pipelyd hvis heisen ikke er inne i en av ladestasjonene.

Nødstoppbryteren er plassert på ett sted på drivenheten. Ved å trykke på nødstoppanordningen vil heisen slås helt ut (bryteren klikker på plass).

Ladefunksjonen er fortsatt gitt i dette tilfellet, hvis heisen er i en av ladestasjonene.

Gjenåpningen skjer gjennom en «¼ sving til høyre» som vil sprette ut bryteren igjen.

5. Fjernkontroll

Trappeheisen er utstyrt med to separate styringssystemer som er enkle å bruke. En fjernkontroll brukes vanligvis for hvert stopp eller for hver etasje.

Kontrollknappene er merket OPP (1) og NED (2) og viser bevegelsesretningen til trappeheisen når du trykker på tilsvarende knapp som vist i figur 2. LED-en på fjernkontrollen lyser blått når du trykker på en knapp. Hvis dette ikke er tilfelle, vil batteriene være svake eller det er ingen radioforbindelse til heisen.



Figur 2

Med fjernkontrollen kan du sende trappeheisen fra avgangsposisjon (nedre etasje) til endeposisjon (oppe) og selvfølgelig den andre retningen.

Hvis trappeheisen ikke lenger reagerer på signalet fra fjernkontrollen, vil batteriene være svake og må skiftes.

En erstatning for vanlig bruk, er omtrent 12 måneder å anbefale.

Metode: Ved lett trykk på kassen under kontrollknappene og batteridekselet, samtidig som det trekkes ned for å åpne. Bytt ut de brukte batteriene med de nye med polariteten inn samme rekkefølge som de gamle.

Merk: kast batterier i henhold til gjeldende forskrifter.

Settes sammen igjen i omvendt rekkefølge.

6. Forholdsregler for bruk

Under parkeringsposisjonen til heisen, anbefales det å folde armlenet og fotbrettet, som vist i figur 3, slik at de tar liten plass. Før heisen tas i bruk, må armlenet og fotbrettet foldes ned, som vist i figur 4.



Figur 3



Figur 4

Nå kan du sitte komfortabelt på setet til trappeheisen. Ikke glem å holde føttene på fotbrettet og begge armene på armlenene. Sjekk igjen om det er noen hindringer på skinnen eller på trinnene før du bruker heisen.

Hvis det er noen hindringer på skinnen/trinnene, (figur 5) må de først fjernes før du kan bruke heisen.



Figur 5

Trykk styrespakene i retningen du vil bevege deg. Hvis joysticken av en eller annen grunn slippes, stopper trappeheisen. Når joysticken trykkes inn igjen, vil trappeheisen gå videre. Ikke glem at hver tur starter med en forsinkelse på 3 sekunder.

7. Vridningen av setet

For å hjelpe deg å komme deg på eller av stolen enkelt, kan du snu stolen til venstre eller høyre (avhengig av versjonen på trappeheisen). Med en vinkel endret med 45° eller 90° (figur 6). Retningen til «venstre» eller «høyre» avhenger av hvilken side på trappen trappeheisen er installert.



Figur 6

Normalt er det kun nødvendig å snu stolen i den ene enden av skinnen, vanligvis i øverste etasje. I dette tilfellet vil det å snu stolen i øverste etasje være i retning øverste etasje. Den andre retningen er blokkert.

FORSIKTIG! Vridning av stolen er bare ved enden av skinnen, etter at stolen har blitt automatisk suspendert, innrømmet. For å utføre svingen på stolen, må du skyve spaken på siden av stolen, se figur 1.

FORSIKTIG! Hvis stolen ikke kobles ordentlig inn etter rotasjonen, går ikke heisen. Sjekk i dette tilfellet om spaken er i riktig posisjon (til toppen).

8. Rengjøring

Trappeheisen er designet slik at den ikke trenger spesiell rengjøring. Du må være sikker på at veibanen til enhver tid holdes ren. Dette kan gjøres med en fuktig klut. Skinnen kan rengjøres med litt oppvaskmiddel, og dette må du gjøre regelmessig.

Rengjøring av trappeheisen er et spørsmål om estetikk, stemning og glansen inne i hjemmet ditt.

Seteoverflaten og ryggstøtten på stolen kan også rengjøres med en fuktig klut.

Fargen på skinnene kan med tiden, som en naturlig konsekvens av bruk av trappeheisen, vise spor. Dette er ikke en defekt.

FORSIKTIG! For din egen sikkerhet anbefaler vi deg å slå av strømmen til hovedstrømforsyningen før du begynner å rengjøre.

Vedlikehold

Det anbefales at en av våre utdannede teknikere utfører service på trappeheisen en gang hvert år. De utslitte delene kan fornyes om ønskelig.

Et vedlikehold er uavhengig av en eksisterende garanti.

Dersom du har noen spørsmål, kan du når som helst kontakte din servicetekniker.

9. Barn og dyr

Ikke glem at trappeheisen kun er til deg for å tilrettelegge ved hjelp til å komme opp og ned trappene. Derfor bør du unngå at barn leker med trappeheisen. Dette er ikke farlig, men heller ikke hensiktsmessig bruk. Levetiden på heisen din kan bli begrenset.

Dersom du ikke har lagt merke til visse hindringer, stopper trappeheisen automatisk når den berører den.

Fortsett reisen til trappeheisen først etter du har fjernet hindringen.

Anskaffelse av heisen

Det er veldig viktig for deg som eneste bruker av trappeheisen at du har lest bruksanvisningen til heisen nøye. Skulle du fortsatt ha spørsmål om trappeheisen din, ikke nøl med å kontakte din forhandler, som er TKS Heis AS.

10. Vedlikehold og feilsøking

For vedlikehold av trappeheisen trenger du bare å kjenne til renholdsbestemmelser. For din sikkerhet er det ikke tillatt med vedlikehold eller feilsøking selv. Dette skal kun gjøres av våre opplærte serviceteknikere.

Viktig: Heisen må alltid være slått på, slik at konstant strømforsyning er garantert. For eventuelle problemer som har oppstått over tid, kontakt TKS Heis AS.

Feilsøking


Før du ringer oss for problemer, vennligst sjekk først:

- Om det er en hindring på skinnen.
- Er stolen i riktig posisjon og setespaken i riktig posisjon.
- Armlenene skal ligge ned.
- Forsyningen til heisen er sikret (rød LED + grønn LED må begge lyse). Den svarte av/på-bryteren må være slått på (under setet).
- Den røde nødknappen, skal trekkes ut, ikke trykkes inn.

Hvis du har sjekket dette og heisen fortsatt ikke går, ta kontakt med oss.

Nødsenking

1. Slå av strømforsyningen
2. Ta frem håndbetjeningsverktøy (se bilde).
3. Sett inn betjeningsverktøyet inn i hullet
4. Vri håndbetjeningsverktøyet (med klokken) for å føre stolen nedover.

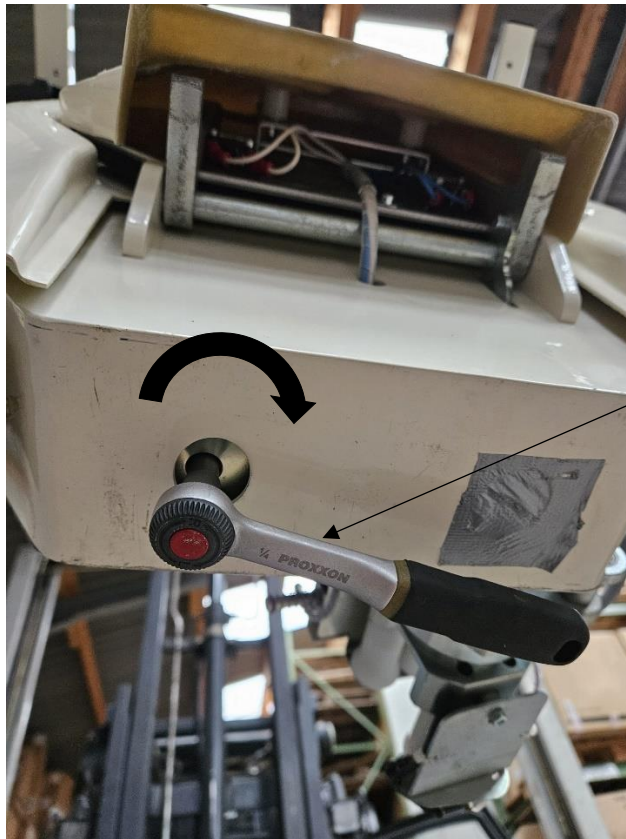

Betjeningsverktøy

11. Teknisk data

Maksimal vekt:	160 kg
Fart:	Cirka 0,13 m/s
Forbruk:	0,37 kw
Strøm:	24 V / 60 Hz

Resirkulering

For spesifikke spørsmål om bruk og resirkulering av trappeheisen, vennligst kontakt kundeservice.