


Basic Braille BT

En type leslist for alle behov

CANTEC
- helping people


20 er

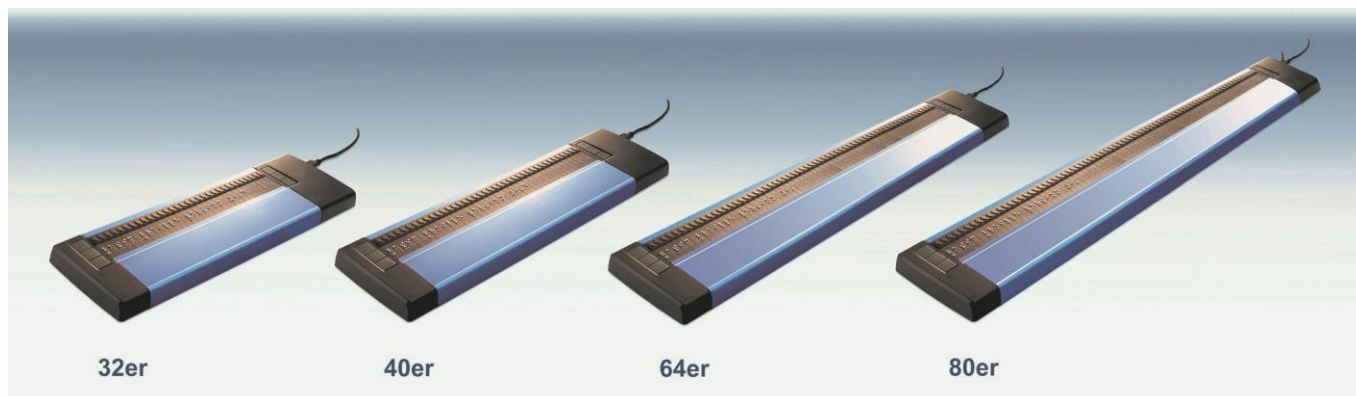

32er

40er

64er

80er



84er

- 20, 32, 40, 64, 80 eller 84 celler

Moderne, robust aluminiumshus og blindeskriftelementer

Integrert litiumionbatteri for trådløs bruk, Bluetooth

Flat og plassbesparende design

HID-teknologi: er uten installasjon av programmer klar for øyeblikkelig bruk

USB-micro/ magnet ladekabel.

Den mobile punktdisplayet Basic Braille er tilgjengelig med 20, 32, 64 eller 84 punktskriftelementer. Basic Braille er laget av robust aluminium. Sidedelene er laget av høykvalitets strukturert, behagelig gripende plast. Basic Braille er utstyrt med holdbare punktskriftelementer med spesielt slitesterk styluspenner, og gir deg tilgang til datasystemer i mange år fremover.

Fleksibel bruk

Basic Braille leveres med 32/40/48/64/80/84 punktelementer som alle er optimale i bruk med en bærbar datamaskin. Variantene med punktskriftelementer er ideell for kombinasjon med PC-tastatur. På grunn av sin veldig flate design kan Basic Braille plasseres foran et tastatur eller en bærbar PC.

Lett å bruke

Med bare 3 knapper på venstre og høyre side av punktelementene kan Basic Braille betjenes veldig enkelt. Naviger tekst med den ene hånden mens du leser punktdisplayet med den andre hånden. Med markørutetastene integrert i punktskriftelementene, kan du plassere markøren, dvs. markøren, på ønsket tekstposisjon og redigere teksten der.

Universell tilgang

Basic Braille fungerer med alle vanlige skjermleseprogrammer - enten det er med JAWS, SuperNova, NVDA eller VoiceOver for Apple-datamaskiner. Disse såkalte skjermleserne gjør det mulig for blinde brukere å få tilgang til datasystemer med blindeskjerm, ofte i kombinasjon med taleutgang. Når den er koblet til en PC via USB, trenger ikke Basic Braille en egen strømforsyning.

Takket være HID-teknologien (Human Interface Device) kan Basic Braille brukes med en gang uten å måtte installere programmer. Basic Braille gjenkjennes automatisk av systemet når det kobles til en datamaskin via USB takket være HID.

Valgfritt med Bluetooth

Bluetooth-versjonen av Basic Braille gir også tilgang til mobile enheter som smarttelefoner, nettbrett og iPhones. Basic Braille med Bluetooth er utstyrt med et kraftig internt litiumionbatteri som lades via USB-grensesnittet. Batteriet kan også lades ved hjelp av en standard strømforsyningsenhet for mobiltelefoner med mikro-USB-tilkobling eller den medfølgende ladepluggen via kontakten.

Tekniske spesifikasjoner

20/ 32/40/64/80 og 84 Brailleelementer

Markørføring 3 knapper på høyre og venstre side

Micro USB-grensesnitt Strømuavhengig (strømforsyning via USB C)

Dimensjoner (B x H x D) / vekt:

- 20: 25x 9,15x 1,95 cm

- 32/40: 34,7 x 9,15 x 1,95 cm

Vekt: 680 g

- 64: 50,1 x 9,15 x 1,95 cm

Vekt: 920 g

- 80-tallet: 60,3 x 9,15 x 1,95 cm

Vekt: 1120

■ Batteri brukstid: opptil 12 timer

■ Ladetid: 3 timer

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no