

Made for
iPhone



ReSound GN

ReSound Phone Clip+

BRUKSANVISNING

GN Making Life Sound Better

Velkommen

Gratulerer med valget av Telefonstreamer+.

Ved hjelp av Telefonstreamer+ kan du koble dine ReSound høreapparater trådløst til Bluetooth-aktiverede mobiltelefoner. Dette gir enkel og problemfri tilkobling av telefonen, uansett om du er hjemme, på kontoret eller på reise.

Når du ikke snakker i telefonen kan Telefonstreamer+ også brukes som en enkel fjernkontroll som kan brukes til å justere volum og bytte mellom programmer på høreapparatene.

Dette gjør det mulig å koble til mobiltelefonen på en rask og enkel måte, både når du er hjemme, på kontoret eller på reise.

Les brukerveiledningen grundig slik at du kan få fullt utbytte av Telefonstreamer+. Kontakt audiografen din hvis du har spørsmål.

Se www.resound.com for mer informasjon.

For din egen sikkerhet bør du lese kapittelet Viktig informasjon på side 25-31 grundig.

FCC ID: X26BTB-2

Erklæring:

Dette produktet samsvarer med del 15 av FCC- og ISSED-reglene.

Bruken forutsetter følgende to betingelser:

1. Dette utstyret kan forårsake skadelig interferens.
2. Dette produktet må akseptere enhver mottatt interferens, herunder interferens som kan fremkalle uønsket drift.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en Klasse B digitalt utstyr ifølge del 15 av FCC- og ISSED-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og kan hvis det ikke er installert og brukt i overensstemmelse med instruksjonene, forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon.

Men det finnes likevel ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser for radio- eller TV-mottaker, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å korrigere forstyrrelsene med ett eller flere av følgende tiltak:

- Stille inn på nytt eller flytte mottakerantennen.

- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakte forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Tiltenkt bruk

Telefonstreamer+ er beregnet for å gjøre det enklere for brukere av ReSound trådløse høreapparater å kommunisere i telefonsamtaler. Den viktigste oppgaven til Telefonstreamer+ er å overføre signaler mellom en telefon med Bluetooth og et trådløst ReSound høreapparat.

Når den ikke brukes til telefonsamtaler kan Telefonstreamer+ også brukes som en enkel fjernkontroll for justering av volum, bytte av program og for å dempe mikrofonen på høreapparatet*.

* Kun trådløse apparater i Verso-familien.

Dette produktet er i samsvar med følgende myndighetskrav:
I EU: Enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene i vedlegg I til rådsdirektiv 93/42/EØF for medisinsk utstyr (MDD).

Herved erklærer GN Hearing A/S at radioutstyrtypene BTB-2 samsvarer med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten i EU-deklarasjonen om konformitet er tilgjengelig på følgende nettside: declarations.resound.com

I USA: FCC CFR 47 del 15, underdel C, seksjon 15.247 og 15.249.

Andre identifiserte gjeldende internasjonale regulatoriske krav i land utenfor EU og USA. Vennligst se lokale lands krav for disse områdene.

iC: 6941C-BTB2

Dette Klasse B digitale apparatet overholder kanadisk ISED.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ISED du Canada.

Bruk av produktet er underlagt følgende to betingelser: (1) dette produktet kan ikke fremkalle skadelig interferens, og (2) dette produktet skal akseptere enhver mottatt interferens, herunder interferens som kan fremkalle uønsket drift.

I Japan:


I Japan er dette produktet tildelt et betegnelsesnummer av Ministry of Internal Affairs and Communications under "Ordinance concerning Technical Regulations Conformity Certification etc. of Specified Radio Equipment (特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則)" Artikkel 2-1-xx "Dette produktet må ikke endres (ellers vil det tildelte betegnelsesnummeret bli gjort ugyldig)."

Innhold


Beskrivelse	8
Kom i gang	10
Slå Telefonstreamer+ AV og PÅ.	11
Pare med Bluetooth	13
Bruke telefon.	16
Volumkontroll	20
Driftstid	21
Bære Telefonstreamer+.	21
Lysindikatorer	22
Introduksjon til Bluetooth	23
Viktig informasjon	25
Tekniske spesifikasjoner	32
Garanti	33
Feilsøking	36

Beskrivelse

1. AV/PÅ-bryter
2. Knapp for å besvare/avslutte samtale
3. Bryter for å veksle mellom programmer
4. Mute-knapp for mikrofonene på høreapparatet
5. Mikro-USB for lading

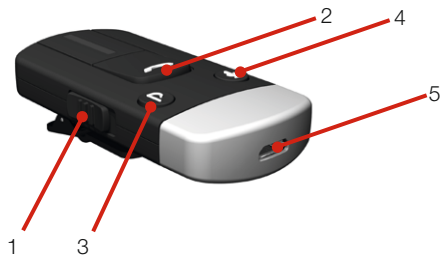

6. Volumkontroll
7. Mikrofoninngang
8. Festeklips
9. Pareknapp
10. Bluetooth pareknapp

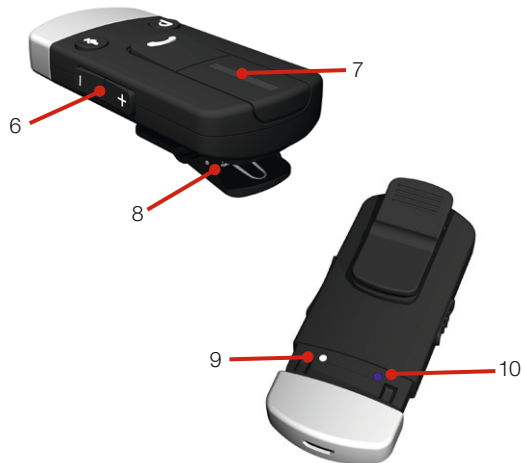

Kom i gang

Lade batteriet

Før du kan bruke Telefonstreamer+ må du lade opp batteriet helt.

For å lade den, sett i ladekabelen inn i Telefonstreamer+ som vist på bildet til høyre.

Deretter setter du den andre enden i stikkontakten.

Under ladingen vil LED-indikatoren øverst på Telefonstreamer+ vise et tent rødt lys.

Når enheten er helt oppladet og fremdeles koblet til laderen, vil LED-indikatoren lyse grønt avbrutt av et rødt blink hvert andre sekund.

Oppladingen av tomt batteri tar vanligvis ca. tre timer. Det er trygt å la laderen være tilkoblet over natten, batteriet kan ikke overlades.

- Når du lader Telefonstreamer+ for første gang må den stå til lading i minst tre timer, selv om batteriindikatoren viser at den er ladet opp (se avsnittet "Lysindikatorer").
- Av sikkerhetsmessige grunner skal batteriet kun lades med ladere levert av ReSound.



Do not charge the ReSound Unite Phone Clip+ while it is on your body.

Slå Telefonstreamer+ AV og PÅ

For å slå den på, skyv AV/PÅ-bryteren (1 på side 8) til PÅ-posisjonen. Et hvitt "I"-ikon vises nederst på bryteren og LED-indikatoren blinker grønt hver 2,5 sekund.

For å slå den av, skyv PÅ/AV-bryteren til AV-posisjonen. LED-lyset vil nå slutte å blinke.

Hvis batterinivået er lavt vil LED-indikatoren blinke gult hvert 2. sekund for å varsle om at enheten må lades opp.

Pare med høreapparater



Merk:Følgende informasjon er ment primært for Audiografen din, som i de fleste tilfeller vil utføre de oppgavene som er nødvendig før Telefonstreamer+ kan brukes med høreapparatene. Men prosessen er enkel og den kan utføres av nesten hvem som helst.

1. Undersøk at Telefonstreamer+ er slått på. Høreapparatene må være AV, dette gjøres ved å åpne batteridekslet på høreapparatet/høreapparatene.

2. Fjern sølvhetten fra Telefonstreamer+. Bruk spissen på en penn eller lignende til å trykke ned den lille pareknappen på baksiden av Telefonstreamer+ (se bildet til høyre). LED-indikatoren vil nå blinke gult hvert andre sekunder for å indikere at den er klar til å pares med høreapparatene. Telefonstreamer+ er i paremodus i 20 sekunder.
3. Lukk batteriluken på begge høreapparatene mens paremodus er aktivert, og undersøk at de er PÅ. En vellykket paring indikeres av en hørbar melodi som avspilles i begge høreapparatene. LED-indikatoren på Telefonstreamer+ forblir tent (gul) i 2 sekunder.



Pare med Bluetooth

Hvis mobiltelefonen din har aktivert Bluetooth og støtter egnede profiler, kan den kommunisere med Telefonstreamer+ etter at du har utført to enkle oppgaver: paring og tilkobling.

Ved hjelp av paringen kan du kontrollere hvilke Bluetooth-enheter som får lov til å kommunisere med hverandre. Det er bare nødvendig å utføre denne prosedyren én gang for hver enhet som du ønsker å bruke med Telefonstreamer+.


Du kan pare opptil 8 Bluetooth-enheter med Telefonstreamer+, hvor 2 Bluetooth-enheter kan være koblet til/aktive samtidig.

Prosedyren for paring er beskrevet i det følgende avsnittet. Når en mobiltelefon får tilgang til å kommunisere med Telefonstreamer+ gjennom pareprosedyren, konfigurerer tilkoblingsprosedyren enheten til å faktisk sende lydsignaler over Bluetooth-koblingen. Denne prosedyren er også beskrevet i det følgende avsnittet.

Paring til mobiltelefonen

Paringen utføres på mobiltelefonen. Forskjellige mobiltelefoner har forskjellige menyoppsett. Du må derfor se brukerhåndboken for mobiltelefonen hvis du ikke klarer å fullføre tilkoblingen med de trinnene som er beskrevet her.

1. Slå PÅ Telefonstreamer+ og fjern sølvhetten. Plasser mobiltelefonen ved siden av Telefonstreamer+ og kontroller at mobilen er PÅ.
2. Finn tilkoblingsinnstillingene på telefonen. Se etter Bluetooth i hovedmenyen eller en av undermenyene, som f.eks. Tilkoblinger.
3. Kontroller at Bluetooth er slått PÅ på mobiltelefonen.
4. Bruk spissen på en penn eller lignende til å trykke ned den lille blå Bluetooth pareknappen på baksiden av Telefonstreamer+ (se bildet nedenfor). Telefonstreamer+ vil nå være i Bluetooth paremodus i to minutter.
5. Velg å søke etter Bluetooth-enheter på mobiltelefonen.
6. Mobiltelefonen vil vise en liste med Bluetooth-enheter som ble oppdaget. Velg "Hearing Aid Phone" (høreapparattelefon) fra listen.
7. Deretter kan det være at mobiltelefonen ber deg om å oppgi en kode. Angi "0000" (fire nuller) hvis du blir spurt om kode.

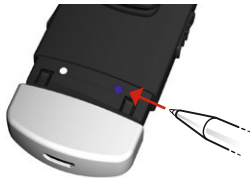

Din Telefonstreamer+ skal nå være parett med mobiltelefonen. Noen mobiltelefoner kan spørre hvilken Bluetooth-tjeneste du vil aktivere. Velg "Hodetelefon" ("Headset").

Tilkobling

Når mobiltelefonen og Telefonstreamer+ er parett må mobiltelefonen kobles til før den kan sende lydsignalerne.

Denne funksjonen skal være tilgjengelig i Bluetooth-menyen på mobiltelefonen din, vanligvis under en liste med Tilkoblede enheter. I denne listen merker du Telefonstreamer+ og velger "Koble til".

Når Telefonstreamer+ og mobiltelefonen er koblet sammen, kan du se et hodetelefonsymbol på hovedskjermen på mobiltelefonen. Symbolet ligner på dette: 

Koblingen mellom Telefonstreamer+ og mobiltelefonen beholdes så lenge begge enhetene er slått PÅ og forblir innenfor rekkevidde for hverandre. Hvis en av enhetene slås AV eller flyttes til utenfor rekkevidde, må du kanskje utføre tilkoblingsprosedyren igjen.

På noen telefoner kan du konfigurere "Automatisk tilkobling." Vi anbefaler at du gjør dette hvis denne funksjonen er tilgjengelig. Les bruksanvisningen på mobiltelefonen for informasjon om hvordan du gjør dette.

Bruke telefonen

I tabellen nedenfor finner du en oversikt over hvordan du bruker Telefonstreamer+ i tilknytning til telefonsamtaler.

Merk: Med unntak av svar- og avslutt samtale-handlingene, kan en eller flere av de beskrevne handlingene nedenfor være avhengig av telefonen, dvs. de kan avvike litt eller ikke være tilgjengelige.

Svare og avslutte en samtale	Trykk svar-/avslutt-knappen en gang.	Hvis en annen samtale allerede er aktiv vil den bli avbrutt og den nye innkommende samtalen, indikert av bankelyder, vil bli aktiv. Hvis en annen samtale er på vent vil den nå bli den aktive samtalen.
Avvise en samtale	Dobbelklikk svar-/avslutt-knappen.	Hvis en annen samtale allerede er aktiv vil den forbli aktiv, bare den innkommende samtalen, indikert av bankelyder, vil bli avvist.
Overføre en samtale startet på mobiltelefonen til Telefonstreamer+	Trykk svar-/avslutt-knappen én gang.	
Sette en aktiv samtale på hold	Trykk og hold svar-/avslutt-knappen én gang.	Hvis en annen samtale er på hold eller en inngående samtale venter, vil dette nå bli den aktive samtalen.
Ringte sist brukte nummer	Dobbelklikk svar-/avslutt-knappen mens ingen samtale er aktiv eller venter.	Hvis to mobiltelefoner er koblet til, gjelder denne handlingen for den sist brukte mobiltelefonen.



Taleanrop	Trykk og hold svar/avslutt-knappen i 2 sekunder	Hvis to mobiltelefoner er koblet til, gjelder denne handlingen for den sist brukte mobiltelefonen. Denne funksjonaliteten krever at Taleanrop-funksjonen er tilgjengelig og aktivert på Bluetooth-telefonen.
Øke eller redusere høyttalervolumet på den andre enden av telefonsamtalen	Trykk + på siden av Telefonstreamer+ for å øke volumet. Trykk - på siden av Telefonstreamer+ for å senke volumet.	
Mute eller fjerne muting av mikrofonene på høreapparatet under en samtale	Trykk mute-knappen  foran på Telefonstreamer+.	Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig på trådløse høreapparater i Verso-familien.

Bruke fjernkontrollen

Når den ikke brukes til telefonsamtaler, kan Telefonstreamer+ brukes som en enkel fjernkontroll for høreapparatene*.

Volumkontroll

Øke volumet på høreapparatet

Trykk "+" på volumkontrollen (6 på side 9) for å øke volumet på høreapparatet/høreapparatene).

Senke volumet på høreapparatet

Trykk "-" på volumkontrollen (6 på side 9) for å senke volumet på høreapparatet/høreapparatene.

Avhengig av telefonen kan du også benytte volumkontrollen som er innebygd i mobiltelefonen.

Merk at hvis du har to høreapparater vil endring av volum gjelde for begge.

* Info kun for trådløse Alera-høreapparater: Alera-høreapparater må først pares med Resound Unite Fjernkontroll (enten kundens eller Audiografens) for å kunne bruke fjernkontrollfunksjonaliteten i Telefonstreamer+.

Mute eller fjern muting av mikrofonen(e) på høreapparatet

(Bare tilgjengelig på trådløse høreapparater i Verso-familien).

For å mute mikrofonene på høreapparatet trykker du mute-knappen (4 på side 8) foran på Telefonstreamer+ én gang.

For å fjerne muting av mikrofonen på høreapparatene trykker du mute-knappen (4 på side 8) foran på Telefonstreamer+ én gang.

Bla gjennom høreapparatprogrammer

Trykk programknappen (3 på side 8) for å bla gjennom tilgjengelige programmer på høreapparatet.

Brukstid

Batteriforbruk og hvor lang tid du kan bruke Telefonstreamer+ avhenger i stor grad av hvordan du bruker enheten.

Batteriet på Telefonstreamer+ kan lades opp hundrevis av ganger. Kontakt Audiografen hvis brukstiden reduseres betydelig.

Bære Telefonstreamer+

Fest Telefonstreamer+ på genser, jakke eller andre klær slik at mikrofonen (7 på side 9) peker oppover. Dette sikrer at mikrofonene på Telefonstreamer+ er plassert optimalt for å fange opp stemmen din under telefonsamtaler. Telefonstreamer+ har en

dreibar klips for å sikre at du kan feste den slik at mikrofonen peker oppover mot munnen.

For optimal lyd bør den plasseres 10-30 cm fra munnen din.

Lysindikatorer (LED)

Lysindikatoren øverst på Telefonstreamer+ fungerer som et flerbruksgrensesnitt som gir informasjon om enhetens status.

Blinker	Betydning
	Normal drift
	Lavt batterinivå
	Lader
	Fullt oppladet. Fortsatt koblet til lader
	Klar for å pares med høreapparat(er)
	Klar for å pares med Bluetooth-enhet
	Samtale via Bluetooth aktiv

Introduksjon til Bluetooth

Hva er Bluetooth?

Bluetooth er en teknologi som gjør at enheter som mobiltelefoner kan kommunisere trådløst.

Undersøk først om den telefonen du ønsker å bruke har Bluetooth. Se etter følgende symboler på enheten eller i brukerveiledningen.



Mulige bruksområder for en Bluetooth-aktivert enhet defineres av "profiler". Den enheten som du ønsker å bruke med Telefonstreamer+ må støtte de riktige Bluetooth-profilene.

For å motta en samtale eller foreta en oppringning, må mobiltelefonen din enten støtte profilene "handsfree" eller "headset" (hodetelefon). Mange, men ikke alle mobiltelefoner støtter disse Bluetooth-profilene. Se etter denne informasjonen i brukerveiledningen til mobiltelefonen.

Bruksavstand for Bluetooth

Utendørs støtter Telefonstreamer+ bruk av Bluetooth ved en avstand på opptil 10 meter. Direkte synslinje mellom enhetene er ikke nødvendig. Men følgende faktorer kan påvirke maksimal rekkevidde:

- Forstyrrelser i omgivelsene.
- Mobiltelefonen som du er koblet til kan støtte en kortere rekkevidde enn 10 meter som er støttet av Telefonstreamer+.

Hvis mobiltelefonen flyttes utenfor rekkevidde, vil tilkoblingen bli avsluttet. Hvis enheten deretter tas med tilbake innenfor rekkevidde, vil Telefonstreamer+ forsøke å re-etablere tilkoblingen. Om dette lykkes avhenger av varighet siden koblingen ble brutt og på egenskapene til mobilen.

Viktig informasjon



Ettersyn og vedlikehold

- Rengjør Telefonstreamer+ med en fuktig klut. Bruk aldri husholdningsrengjøringsmidler (vaskepulver, såpe osv.) eller alkohol til å rengjøre enheten.
- Når Telefonstreamer+ ikke er i bruk, bør du slå den AV og lagre den på et trygt sted.
- Beskytt Telefonstreamer+ fra mye fuktighet (bading, svømming) og varme (radiator, dashbordet i en bil). Beskytte den mot støt og vibrasjoner.
- Beskytt mikrofon- og laderinngangene fra rusk og smuss. Bruk om nødvendig rengjøringsbørsten som følger med høreapparatene til å rengjøre disse områdene.



Generelle advarsler

- Hold denne enheten utenfor rekkevidden til barn.
- Telefonstreamer+ bruker lavstrøms, digitalt kodede overføringer for å kunne kommunisere med andre trådløse enheter. Selv om det er usannsynlig, kan nærliggende elektroniske enheter bli berørt. I slike tilfeller flyttes Telefonstreamer+ bort fra det elektroniske utstyret som blir påvirket.
- Hvis du bruker Telefonstreamer+ og enheten blir påvirket av elektromagnetisk interferens, beveger du deg bort fra kilden.

- Unngå å utsette produktet for regn, fuktighet eller andre væsker for å beskytte mot skader på produktet eller deg selv.
- Hold produktet, eventuelle ledninger og kabler borte fra andre maskiner.
- Avslutt bruk av produktet og kontakt Audiograf hvis produktet blir for varmt, produktet har falt ned eller blitt skadet, produktet har en skadet ledning eller kontakt, eller hvis produktet har falt ned i væske.
- Kast produktet i henhold til lokale regler og forskrifter.
- Må ikke brukes i områder hvor det er eksplosjonsfare.

Antennelse i brennbare omgivelser

- Ikke bruk produktet i miljøer der det er fare for antennelse av brannfarlige gasser.



Generelle forholdsregler

- Ikke bruk dette utstyret på steder hvor det er forbudt å bruke elektronisk utstyr.
- Røntgenstråling (f.eks. CT, MR skanner) kan påvirke enhetens funksjonalitet. Vi anbefaler at du slår AV enheten før en røntgenundersøkelse, og oppbevarer den utenfor rommet.
- Kraftig elektronisk utstyr, større elektroniske installasjoner og metallstrukturer kan påvirke og redusere rekkevidden.
- Hvis høreapparatet ikke responderer på enheten på grunn av forstyrrelser, beveger du deg bort fra det forstyrrende området.
- Høreapparatet og denne enheten fikk en unik kommunikasjonskode under paringen. Dette sikrer at enheten ikke vil påvirke høreapparater som bæres av andre.
- Ikke foreta endringer eller modifikasjoner på enheten.
- Telefonstreamer+ kan bli skadet hvis du åpner den. Kontakt Audiografen din vis det oppstår problemer som du ikke får til å løse.
- Telefonstreamer+ kan kun repareres av et autorisert servicenter.
- Ikke bruk Telefonstreamer+ på steder hvor overføring av radiofrekvenser er forbudt, f.eks. i fly.

- Telefonstreamer+ må bare kobles til enheter som den uttrykkelig er beregnet for.

ETTERSYN AV INNEBYGD BATTERI:  Vær oppmerksom på følgende hvis produktet inneholder et batteri

- Produktet drives av et oppladbart batteri.
- Den fulle ytelsen til et nytt batteri oppnås først etter to eller tre fullstendige ladesykluser.
- Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil etterhvert bli oppbrukt.
- Ta laderen ut av kontakten og produktet når den ikke er i bruk.
- Hvis enheten står ubrukt, vil et fullt oppladet batteri lades ut over tid.
- Batterikapasiteten og batteriets levetid kan bli redusert hvis produktet ligger på varme steder, som for eksempel i en lukket bil på sommeren.
- Et produkt med kaldt batteri kan slutte å fungere midlertidig, selv om batteriet er fulladet. Batterikapasiteten blir særlig begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Advarsel vedrørende batteri! 

- "Forsiktig" – Batteriet brukt i dette produktet kan medføre risiko for brann eller kjemisk forbrenning hvis det ikke behandles korrekt.
- Ikke forsøk å åpne produktet eller bytte ut batteriet. Det er innebygd og skal ikke skiftes. Bruk av andre batterier kan innebære en risiko for brann eller eksplosjon, og garantien blir ugyldig.
- Batteriet i produktet kan ikke fjernes eller byttes ut av brukeren. Ethvert forsøk på å gjøre det er risikabelt og kan skade produktet.
- Telefonstreamer+ må bare lades med laderen som er levert sammen med produktet.
- Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler hvis mulig.
- Ikke kast batteriet som husholdningsavfall eller i åpen flamme hvor det kan eksplodere.
- Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

ETTERSYN AV LADER:  Vær oppmerksom på følgende hvis produktet leveres med en lader

- Ikke forsøk å lade produktet med andre ladere enn den som følger med. Bruk av andre typer kan skade eller ødelegge produktet og kan være farlig. Bruk av andre ladere kan oppheve alle godkjenninger eller garantier.
- Undersøk med Audiografen vedørende tilgjengelighet av godkjent ekstrautstyr.
- Lad opp produktet i henhold til instruksjonene som følger med produktet.

Advarsel vedrørende lader! 

- Når du kobler fra strømledningen eller ekstrautstyr, må du trekke ut støpslet og ikke trekke i ledningen.
- Bruk aldri en lader som er skadet.
- Ikke forsøk å demontere laderen da det kan utsette deg for farlige elektriske støt.
- Feil montering kan forårsake elektrisk støt eller brann når produktet senere brukes.
- Unngå å lade produktet i ekstremt høye eller lave temperaturer, og ikke bruk laderen utendørs eller i fuktige områder.
- Ikke lad Telefonstreamer+ mens den er festet til kroppen.

Tekniske spesifikasjoner

Rekkevidde:	opptil 10 meter
Trådløs:	2,4 GHz
Driftstemperatur:	0 til 45 °C
Ladetemperatur:	0 til 45 °C
Lagringstemperatur:	-20 til 45 °C

Temperaturtest, transport og oppbevaringsinformasjon

Dette produktet har gjennomgått ulike tester og temperatur- og fuktighetssykluser mellom -25 °C og +70 °C i henhold til interne standarder og bransjestandarder.

Garanti

ReSound Unite Telefonstreamer+ dekkes av en begrenset garanti utstedt av produsenten for en periode på 12 måneder fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Vær oppmerksom på at utvidede garantier kan gjelde i ditt land. Vennligst kontakt din lokale Audiograf for mer informasjon.

Hva dekkes av denne garantien?

Alle elektriske komponenter som på grunn av dårlig utført arbeid, feilproduksjon, eller designfeil ikke fungerer normalt under garantitiden, vil bli byttet eller reparert uten kostnad for deler og arbeid ved retur til utsalgsstedet.

Hvis det er fastslått at en reparasjon ikke er gjennomførbar, kan hele produktet bli erstattet med en tilsvarende enhet etter gjensidig avtale.

Hva dekkes ikke av denne garantien?

Problemer som oppstår ved uriktig håndtering eller ettersyn, overdreven bruk, ulykker, reparasjoner utført av en uautorisert part, eksponering for etsende midler eller skader som skyldes fremmedlegemer i enheten er IKKE dekket av den begrensede garantien, og kan gjøre den ugyldig. Denne garantien påvirker ikke eventuelle lovfestede rettigheter du måtte ha i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning som regulerer salg av forbruksprodukter. Audiografen din kan ha utstedt en garanti som går utover den tidsbestemte garantien. Ta kontakt med Audiografen for ytterligere informasjon.

Serienummer: _____

Kjøpsdato: _____

FEILSØKING

SYMPTOM	ÅRSAK	MULIG LØSNING
<i>Telefonstreamer+ responder ikke på noen (lange eller korte) trykk på flerfunksjonssknappen.</i>	Batteriet i Telefonstreamer+ er tomt.	Lad batteriet.
<i>Pareknappen på Telefonstreamer+ er trykket ned, men ingen paremelodi spilles i høreapparatet etter at batteriluken er lukket.</i>	Telefonstreamer+ og høreapparatet er ikke innenfor trådløs rekkevidde.	Sørg for at Telefonstreamer+ og høreapparatet er innenfor rekkevidde, og gjenta paringen.
	Telefonstreamer+ og høreapparatet har ikke vært i paremodus samtidig.	Gjenta pareprosessen og påse at batteriluken på begge høreapparatene lukkes innen 20 sekunder etter at pareknappen er trykket på Telefonstreamer+.
<i>Telefonstreamer+ blir ikke funnet av mobiltelefonen når du ser i Bluetooth-menyen.</i>	Telefonstreamer+ og mobiltelefonen er ikke innenfor rekkevidde.	Undersøk at Telefonstreamer+ og mobiltelefonen er innenfor rekkevidde, og gjenta pareprosessen for Bluetooth.
	Telefonstreamer+ er ikke i Bluetooth paremodus.	Telefonstreamer+ er bare i paremodus for Bluetooth i 120 sekunder etter aktivering. Gjenta paring med Bluetooth.

FEILSØKING

SYMPTOM	ÅRSAK	MULIG LØSNING
<i>Paring med Bluetooth er mislykket.</i>	Telefonstreamer+ gikk ut av Bluetooth paremodus før mobiltelefonen hadde fullført paringen.	Gjenta pareprosessen med Bluetooth, og påse at prosessen blir fullført innen 120 sekunder etter aktivering på Telefonstreamer+.
	Feil PIN-kode på 4 siffer er angitt.	Gjenta pareprosessen med Bluetooth og angi 0000 (fire nuller) hvis du blir spurt om PIN-kode.
<i>Mobiltelefonen ringer, men lysindikatoren på Telefonstreamer+ blinker ikke, og det høres ingen ringelyder i høreapparatene.</i>	Telefonstreamer+ er slått av.	Slå på Telefonstreamer+.
	Telefonstreamer+ og mobiltelefonen er ikke parete.	Utfør paring med Bluetooth og etabler en Bluetoothforbindelse mellom Telefonstreamer+ og mobiltelefonen.
	Bluetooth-tilkoblingen mellom Telefonstreamer+ og mobiltelefonen er gått tapt.	Sørg for at Bluetooth er aktivert på mobiltelefonen og opprett en Bluetoothforbindelse mellom Telefonstreamer+ og mobiltelefonen igjen, f.eks. ved å trykke på flerfunksjonsknappen et kort øyeblikk på Telefonstreamer+.
		Se brukerveiledningen til mobiltelefonen for informasjon om bruk av Bluetooth på mobiltelefonen.

FEILSØKING

SYMPTOM	ÅRSAK	MULIG LØSNING
<i>Mobiltelefonen ringer og lysindikatoren på Telefonstreamer+ blinker, men ingen ringetoner høres i ett eller begge høreapparatene.</i>	Telefonstreamer+ og høreapparatene er ikke innenfor rekkevidde. Batteriet i høreapparatene er så tomt at det ikke lenger støtter streaming.	Sørg for at Telefonstreamer+ og høreapparatene er innenfor rekkevidde. Bytt ut batteriet i høreapparatet med et nytt.
<i>Samtalepartner hører ikke stemmen min tydelig.</i>	Mikrofonen på Telefonstreamer+ fanger ikke opp stemmen din riktig.	Sørg for at mikrofonen på Telefonstreamer+ er nær munnen, og at Telefonstreamer+ ikke gnisser mot klærne dine under samtalen.
<i>Lyden fra høreapparatene er enten for lav eller for høy.</i>	Lydinngangsnivået er ikke egnet for lytting.	Juster volumet på mobiltelefonen inntil lyden er passende, eller juster volumet ved hjelp av "+" og "-" på Telefonstreamer+ inntil lyden er passende. Alternativt kan du bruke "+" og "-" på fjernkontrollen (tilbehør) for å justere volumet.
<i>Det er ingen lyd i høreapparatet, selv om det er i telefonprogrammet.</i>	Telefonstreamer+ og høreapparatene er ikke innenfor rekkevidde.	Sørg for at Telefonstreamer+ og høreapparatene er innenfor rekkevidde.

Vær oppmerksom på informasjon som er merket med advarselssymbol.



ADVARSEL indikerer en situasjon som kan føre til alvorlig skade.

FORSIKTIG indikerer en situasjon som kan føre til mindre og moderate skader.



Råd og tips om hvordan du kan håndtere ditt ReSound Unite-tilbehør bedre.



Utstyret inneholder RF-sender.

Nominell RF utgangseffekt sendt er 13.3 dBm



Produktet er en type B anvendt del.



Bruk av "Made for Apple"-merket betyr at et elektronisk tilbehør er designet for å kunne kobles spesielt til en iPhone, og at det er sertifisert av utviklerne til å tilfredsstille Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for bruk av denne enheten eller for at den overholder sikkerhetsstandarder.



Spør din lokale Audiograf om kassering av ReSound Unite-tilbehør.

© 2018 GN Hearing A/S. Med enerett. ReSound er et varemerke som tilhører GN Hearing A/S. Apple, Apple-logoen, iPhone, iPad og iPod touch er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth-merket er et registrerte varemerker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Android er et varemerke som tilhører Google Inc.

Produsent i henhold til EUs direktiv om medisinsk utstyr 93/42/EØF:

Internasjonalt

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark
Tlf.: +45 4575 1111
resound.com

Norge

GN Hearing Norway AS
Postboks 132 Sentrum
NO-0102 Oslo
Tlf.: +47 22 47 75 30
post@gnresound.no
resound.com

CVR no. 55082715

400227008NO-18.07-Rev.B



Eventuelle spørsmål vedrørende EUs direktiv for medisinsk utstyr 93/42/EØF eller EUs radioutstyrsdirektiv 2014/53/EU, skal rettes til GN Hearing A/S.

