

GRIPO

BRUKSANVISNING

NORSK



CE

HEPRO

Forord

Gripo er et solid og fleksibelt støtteredskap som gir trygghet ved oppreisning og forflytning i hjemmet. Gripo passer i de fleste hjem med takhøyde mellom 210–300 cm og er meget enkel å montere. For takhøyde lavere enn 210cm og høyere enn 300cm, tilbyr hepro Gripo Spesial og Gripo Lang. Støttestangen fungerer utmerket alene, men kan også kompletteres med nyttig tilbehør.

Med Gripo kombinerer vi kvalitet og miljø. Produktet er laget av resirkulerbare materialer som er skånsomme mot huden og motstandsdyktige mot korrosjon, noe som også gjør den ideell for bruk i våtrom og fuktige miljøer. Hos Hepro tenker vi helhetlig på miljøet. Derfor leveres Gripo i gjenvinnbar, miljøvennlig emballasje merket med Grønt Punkt – et bevisst valg for å beskytte både mennesker og natur.

Stangen er testet og godkjent etter relevante deler av EN 12182:2012 og samsvarsærklært for EN 21856:2022. Den er produsert i materialene aluminium og plast og beregnet for oppspenning mellom gulv og tak i hvilket som helst rom hvor tak og gulv har styrke nok til å tåle en punktbelastning på 100 kg.

Stangen monteres raskt og enkelt uten skruer eller verktøy, og festes trygt mellom gulv og tak. Med et bredt utvalg av tilbehør kan den tilpasses ulike brukerbehov. Hepro jobber alltid for å utvikle nytt tilbehør ut i fra brukerbehov og tilbyr nå ny sengehest og nytt tilbehør for svakere tak.

Hepro er produsent og kan derfor tilby brukertilpassede løsninger når det er nødvendig. Hepro er en norsk industribedrift som utvikler, produserer og selger hjelpemidler til eldre og bevegelseshemmede. Bedriften ble etablert i 1987 og har i dag ca 85 ansatte. Bedriftens hovedkontor og fabrikk er lokalisert på Rognan i Nordland.

Hepro AS, Tømmerveien 10, 8250 Rognan.

VIKTIG!


Les bruksanvisningen nøye før stangen tas i bruk

Gripo

Art. nr. 35200 Gripo

Art. nr. 35210 Gripo Lang

Art. nr. 35202 Gripo Spesial

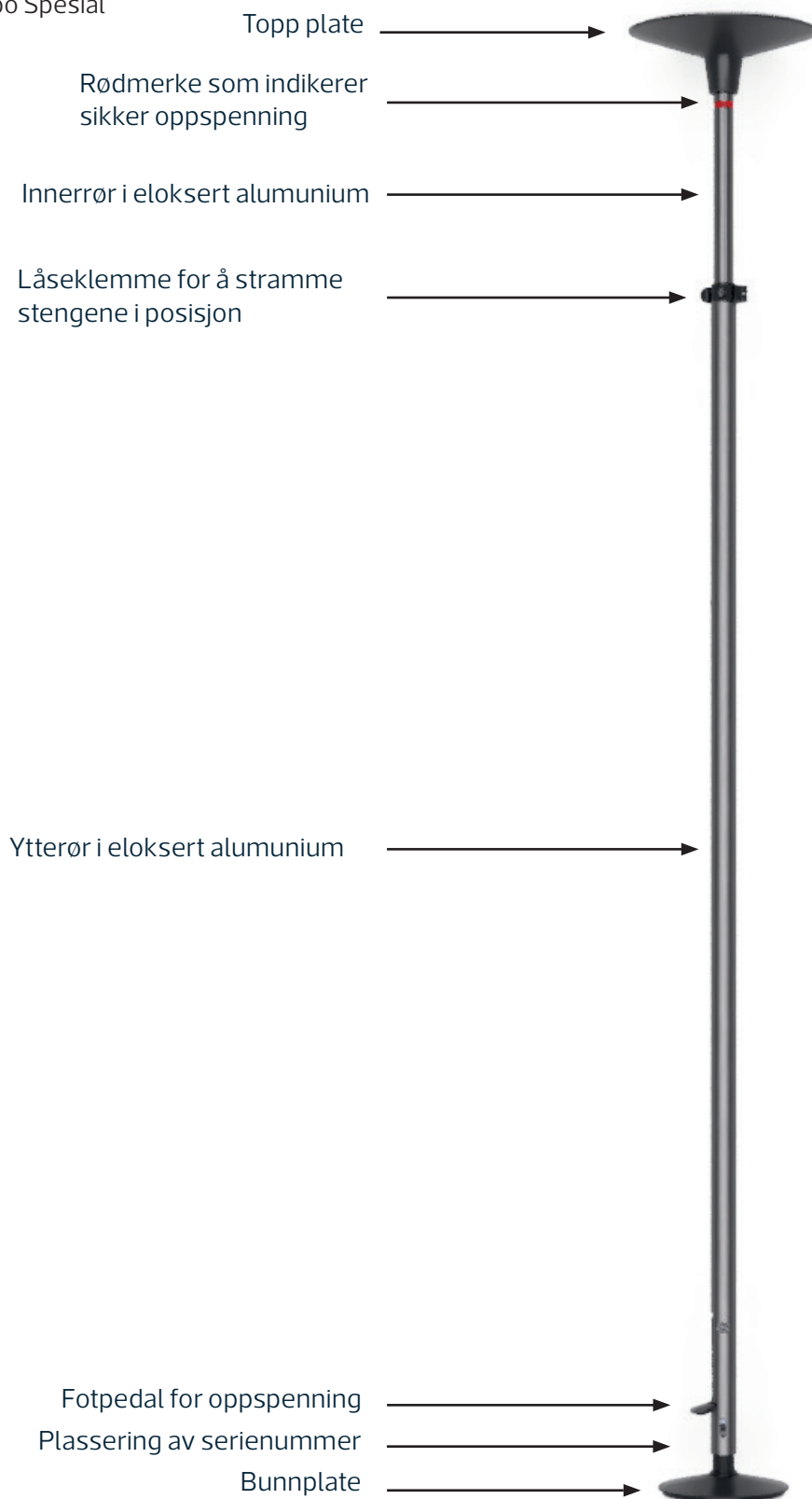

Sikkerhet

Dette produktet er ment brukt i private hjem eller institusjoner.

- Ikke bruk produktet hvis den røde sikkerhetsringen øverst på stangen er synlig.
- Vurder alltid klemfare mellom stangen og andre møbler/gjenstander. For mer informasjon, les punkt 4 og 5, side 9-10 i denne bruksanvisningen
- Ikke monter produktet på løse gjenstander som ikke er festet sikkert til tak eller gulv, som f.eks. gulvmatter, plater eller lignende.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Ikke plasser produktet på overflater som ikke er plane eller parallelle.
- Ved montasje i våte soner, bruk sklisikring; Art. nr. 35007
- Ikke modifier eller endre produktet på noen måte som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Ikke bruk dette produktet med annet tilleggutstyr som ikke hører til Gripo/produktet
- Gripo kan monteres i dusj, men produktet bør ikke permanent stå nedsenket i vann eller andre væsker.
- Vær forsiktig ved åpning av forpakningen, slik at hverken du selv eller produktet blir skadet.

GRIPO BESTÅR AV:

1 x Bunnplate (den minste)
1 x Topplate (den største)
1 x Stang
1 x Gassfjær
1 x Bruksanvisning

VARIANTER

Art.nr	Beskrivelse	Takhøyde
35200	Gripo	210-300cm
35210*	Gripo Lang	260-340cm
35202	Gripo Spesial	Lavere enn 210cm

* Denne utgaven har, i tillegg til ekstra høyde, et 15 cm lengre ytterrør som passer for dem som har behov for å ha tilbehør festet høyt oppe på stangen, evt. ønsker å bruke stangen til trening/aktivitet.

Innhold

Forord	2
Gripo	3
Sikkerhet	4
Innhold	5
1 Symbolforklaring	6
2 Innhold i pakken	6
3 Miljø	7
4 Risikovurdering av avstander under montering	9
5 Sikkerhet ved montering	10
6 Instruksjoner for bruk	11
7 Montering	13
8 Demontering	16
9 Vedlikeholdsrutiner	17
10 Garanti	17
11 Revisjoner av denne bruksanvisning	18

1 Symbolforklaring



Produsent



CE-merking



Advarsel



Medisinskutstyr



Produksjonsdato




Les bruksanvisningen nøye før bruk



Serienummer

2 Innhold i pakken

STANG

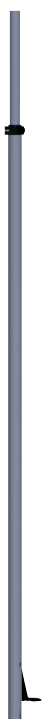

TOPPLATE / BUNNPLATE



GASSFJÆR



3 Miljø

3.1 MATERIALER OG RESIRKULERING

Gripo resirkuleres i henhold til lokale bestemmelser, vennligst ta kontakt med din lokale gjenvinningsstasjon for mer informasjon.

Når Gripo har nådd sin levetid, går det raskt og effektivt å sortere komponentene.

Del	Materiale	Sorteres som
Aluminiumsprofiler (eloksert)	Aluminium	Metall
Bunn- og toppplate, samt andre plastdetaljer	PA6	Plast
Gassfjær	Rustfritt stål	Metall
Fotpumpe	Aluminium	Metall
Festemidler (skruer, muttere, skiver, hylse)	Stål, kobber, aluminium	Metall

Lang levetid og kvalitet:

Under utviklingen av Gripo har vi lagt stor vekt på å velge materialer av høy kvalitet. Produktet er designet med slitesterke materialer og med en robust konstruksjon. Gripo er testet av Hepro og brukere i over 20 år for maksimal ytelse og levetid. Dette reduserer behovet for hyppig utskiftning, noe som bidrar til å spare ressurser og fremme en mer bærekraftig bruk – til fordel for både deg og miljøet

Reparasjon og gjenbruk:

Designet muliggjør utskifting av deler. Vi tilbyr reservedeler i avtaleperioden og fem år etter, noe som reduserer avfall.

ALUMINIUM STANG:

Gripo sine elokserte aluminiumsstenger er 100 % resirkulerbare og kan gjenvinnes uendelig uten tap av kvalitet. Resirkuleringen av aluminium krever kun 5 % av energien som trengs for å produsere nytt aluminium, noe som gjør det til et svært bærekraftig valg.

Elokseringen gir en hard, slitesterk overflate som beskytter mot både riper og korrosjon, hvilket gjør stengene ideelle for krevende miljøer, også optimalt i bruk i våtrom. Den jevne, glatte finishen gjør materialet lett å rengjøre, samtidig som den sikrer lang holdbarhet og optimal funksjonalitet.



PLASTDELER I PA6:

Plastdelene vi bruker er laget av PA6, et svært slitesterkt materiale, testet av Hepro for maksimal ytelse og levetid. Materialet tåler både høye og lave temperaturer, selv under stor belastning. Materialet er både sterkt og holdbart samt enkelt å rengjøre, noe som sikrer god hygiene i hele produktets levetid. Materialet er et bærekraftig valg, som kombinerer høy kvalitet, pålitelighet og miljøvennlighet i ett materiale.



4 Risikovurdering av avstander under montering




Vurder alltid klemfare mellom Gripo og andre møbler/gjenstander. Vær spesielt oppmerksom på avstand mellom stang og annet møbel, og vurder avstanden slik at ikke brukeren kan komme i klem mellom Gripo og møbelet.



For å unngå klemfare må montering av Gripo utføres med riktig sikkerhetsavstand til objekter som brukes sammen- og i forbindelse med Gripo. Kritiske områder for klemfare er torso, nakke og hode. Sørg for at "Anbefalte avstander mellom objekter" overholdes. Disse avstandene er avgjørende for å sikre trygg bruk og hindre alvorlige skader.

ANBEFALTE AVSTANDER MELLOM OBJEKTER

For å unngå klemfare av:	Anbefalt avtand for voksne	Anbefalt avtand for barn
Hode / Nakke / Torso	Mindre enn 120 mm eller mer enn 250 mm	Mindre enn 60 mm eller mer enn 250 mm
Føtter	Mindre enn 35 mm eller mer enn 100 mm	Mindre enn 25 mm eller mer enn 45 mm

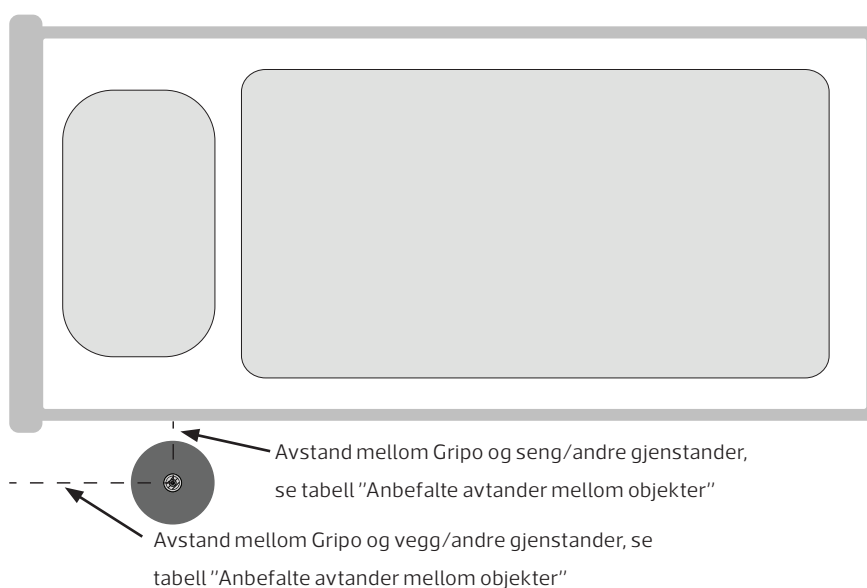


5 Sikkerhet ved montering

Personell som installerer Gripo, må hensyn ta følgende:

For å unngå tilfeller der brukeren kan sitte fast mellom Gripo og andre objekter, pass på å følge de anbefalte avstandene.


Vær oppmerksom på at justerbare og/eller flyttbare objekter kan føre til at avstanden mellom Gripo og objektet kan endres. Eksempler på flyttbare og/eller justerbare objekter er løftestoler eller senger som kan heves og senkes eller trilles.

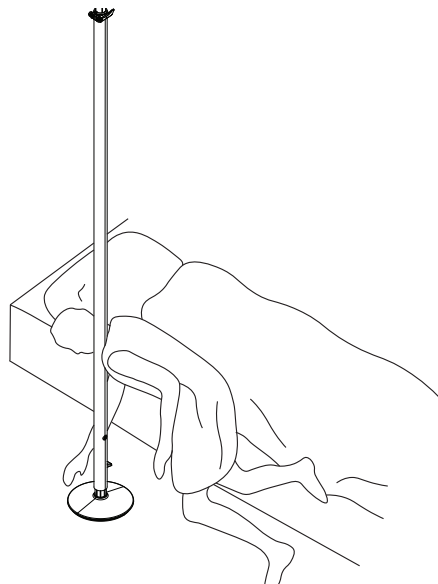

Merk at Gripo er et solid og fleksibelt støtteredskap som gir trygghet ved oppreisning og forflytning i hjemmet. Om man trenger et hjelpemiddel for å unngå at bruker faller ut av sengen, skal tilbehør egnet for dette formålet benyttes og ikke Gripo-stangen i seg selv.

Vurder alltid klemfare mellom Gripo og andre møbler ved montering.

For å hindre klemfare mellom seng/stol og Gripo, kan det monteres et sirkelgrep D30, eller tilsvarende tilbehør, slik det er vist på illustrasjonene.

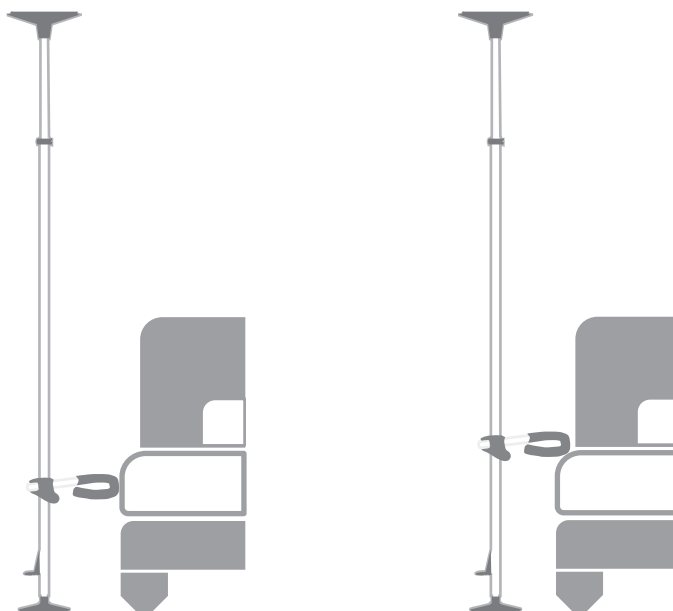

6 Instruksjoner for bruk

UTVIKLET OG PRODUSERT I HENHOLD TIL:

- MDR 2017/745
- Relevante deler av EN 12182:2012 i samsvar med EN 21856:2022

BRUKSMILJØ

Dette produktet er ment for bruk i private hjem eller institusjoner. Gripo-stangen bør være romtemperert før den settes opp.

BRUKERVEKT

Maksimal brukervekt 210 kg.

DIMENSJONER GRIPO

Vekt	4,7kg
Høyde	210cm til 300cm
Bredde topplate	29cm

TRANSPORT

Under transport må produktet være sikret slik at det ikke kan medføre fare for passasjerer eller andre gjenstander.


TILTENKT BRUK

Gripo støttestang er allsidig og kan brukes i ulike situasjoner der man har behov for støtte ved oppreisning. Enten det er på badet, ved sengen, i gangen eller andre steder, vil Gripo være der for å støtte deg. Støttestangen fungerer utmerket alene, men kan også kompletteres med nyttig tilbehør for å tilpasses dine individuelle behov.

6.1 MONTERING AV GRIPO MOT TAK

Før Gripo monteres bør takkonstruksjonen undersøkes med hensyn til styrke og mulighet for plassering av stangen på ønsket sted. Tak og gulv må ha styrke nok til å tåle en punktbelastning på 100 kg.

Ved gipstak er det svært viktig at Gripo monteres slik skissen viser. Unngå å plassere Gripo mellom takbjelker også ved sponplatetak. Ved montering av Gripo på gipstak eller andre svake tak anbefales det å benytte tilbehør for svake tak som sikrer ekstra forsterkning mellom stangens topplate og taket.

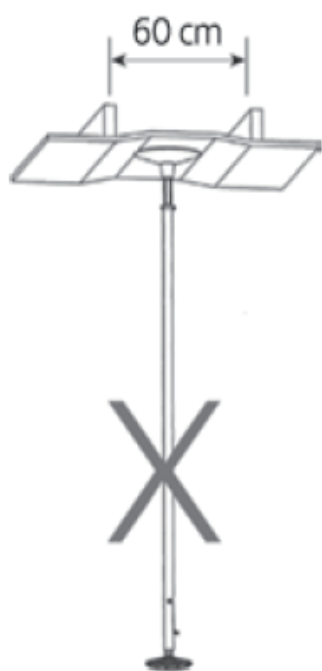

Ikke slik



Benytt stor takplate



Slik

7 Montering

1

Før du begynner med montering.

1. Plasser stangen på den lille bunnplaten slik at stangen passer i sporet.
2. Plasser gassfjæra på toppen av innerrøret og skyv gassfjæra mot det røde sikkerhetsmerket.
3. Fest den store topplaten på toppen av gassfjæren slik at stangen passer i sporet.




Kraften som virker mot taket er 100 kg


1



2

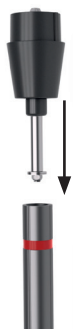

3

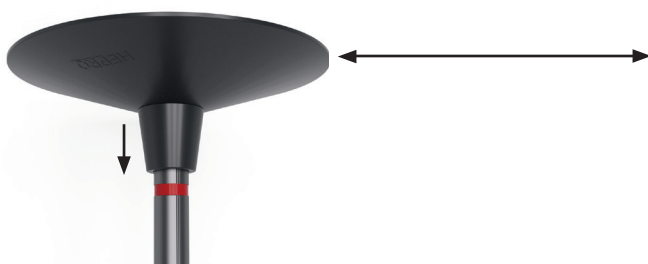

2

Plasser stangen på egnet sted.

1. Dra ut fotpedalen.
2. Åpne låseklemme.

1



2



3

Skyv innerrøret opp til topplaten når helt i taket, mens bunnplaten fortsatt holdes i kontakt med gulvet.

Påse at stangen er loddrett.



4

Roter det indre røret med klokken slik at innerrøret låses fast i ytterrøret.



5

Lås låseklemme.
NB: Se til at skruen på låseklemmen er strammet.



6

Trykk ned fotpedalen. Dersom man er usikker på om taket tåler belastningen, følg med at taket ikke slår sprekker mens man forsiktig trykker fotpedalen ned.

Sjekk at rød markering er borte.
Hvis den røde markeringen er synlig, demonter stangen og start fra punkt 2.



Pass på at den røde markeringen ikke er synlig under bruk.
Hvis den kommer frem - ta ned stangen og sett den opp på nytt.
Kontroller at strammeskruen på låseklemmen ikke er løs og at innerrøret er skrudd godt fast.
Dersom det røde merket fortsatt er synlig kan en mulig årsak være at takkonstruksjonen ikke er sterk nok.

8 Demontering

Dra opp fotpedalen og løsne låseklemmen. Om nødvendig dreier det indre røret mot klokken.

9 Vedlikeholdsrutiner

9.1 RENGJØRING

Vask produktet med vann på maks. 85 °C i minimum 3 minutter, eller desinfiser kjemisk med et godkjent desinfeksjonsmiddel. Noen desinfiseringsmiddel kan misfarge produktet, men vil ikke påvirke funksjonen.

9.2 GJENBRUK

Gripo er konstruert for lang levetid og kan derfor gjenbrukes. For å gjenbruke Gripo må topp og bunnplate samt gassfjær byttes. I tillegg må aluminiums stengene desinfiseres innvendig og utvendig. Gripo er da klargjort for ny bruker med minimalt vedlikehold.

10 Garanti

Ved normal bruk i samsvar med bruksanvisningen har Gripo 5 års levetid og 5 års garanti. Garantiperioden for tilbehør er 2 år. Ved reklamasjoner eller henvendelser om produktet, må produktets serienummer alltid oppgis som referanse.

Ved feil på produkter kontaktes

Hepro, Tlf.nr.: +47 46 74 55 55.

11 Revisjoner av denne bruksanvisning

Revisjon	Dato	Forfatter	Notat
1.0	20.02.2025	Anders Gloslie	Established

Notater

HEPRO

Aktiv og trygg
i alle livets faser

HEPRO AS | Tømmerveien 10, 8250 Rognan - Norge
hepro.no | firmapost@hepro.no | (+47) 46 74 55 55