

HEPRO

Kit for svakere tak / Kit for weaker ceilings
Bruksanvisning / User manual

NORSK	2-5
ENGLISH	6-9



NB! Les bruksanvisningen nøye før tilbehøret tas i bruk



NB! Read the user manual carefully before using the accessory

Sikkerhet og advarslar

Tilbehør som kan brukes i kombinasjon med «Kit for svakere tak»



Sengehest
art.nr. 35328



Bord
art.nr. 35326




Sirkelgrep D30 og D40
art.nr. 35280 & 35281



Tohåndsgrep
art.nr. 35159



Kombigrep
art.nr. 35208

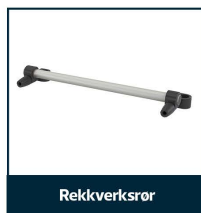

Rekkverksrør



Vertikal Mini-grep
art.nr. 35158



Triangelgrep
art.nr. 35145



Gripestrømpe
art.nr. 35298

Tilbehør som **IKKE** kan brukes i kombinasjon med «Kit for svakere tak»




Søsterhjelp
art.nr. 35148



Søsterhjelp som sidestøtte
art.nr. 35196



Sete oppfjellbart
art.nr. 35154

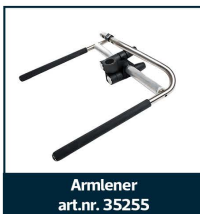

Armlener
art.nr. 35255



Multigrep
art.nr. 35315

- Maksimal brukervekt: **150 kg**
- Maksimal brukervekt for godkjente tilbehør: **110 kg**
- Vær sikker på at tak-konstruksjonen tåler trykk på **50 kg** før montering.
- Rengjør overflatene på gulv/tak ordentlig med fettløsende rengjøringsmiddel innen montering, dette er spesielt viktig ved montering på flis eller glatte overflater.
- Ikke bruk produktet hvis den røde sikkerhetsringen øverst på stangen er synlig.
- Vurder alltid klemfare mellom stangen og andre møbler/gjenstander.
- Ikke monter produktet på løse gjenstander som ikke er festet sikkert til tak eller gulv, som f.eks. gulvmatter, plater eller lignende.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Ikke plasser produktet på overflater som ikke er plane eller parallelle.
- Pass på at den røde markeringen ikke er synlig under bruk. Hvis den kommer frem - ta ned stangen og sett den opp på nytt.
- Kontroller at strammeskruen på låseklemmen ikke er løs og at det indre røret er skrudd godt fast. Dersom det røde merket fortsatt er synlig kan en mulig årsak være at takkonstruksjonen ikke er sterk nok.



NB! Dette tilbehøret må **KUN** kombineres med de tilbehørene som er angitt i **grønn boks** på forrige side


Montering av
**KIT FOR
SVAKERE
TAK**
Art. Nr. 35327

A

Pakk ut mottatte deler og sjekk at ingenting mangler.

Innholdet i pakken skal bestå av følgende deler:

- a) Stor bunnplate m/ friksjonbelegg
- b) Takplate inkl. gassfjær 500N

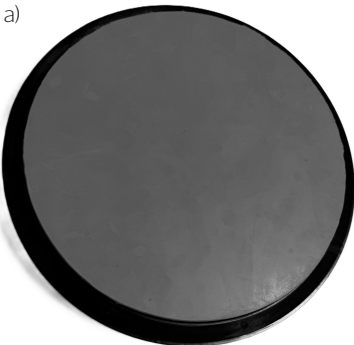

b)



B

1. Legg a) Bunnplate med friksjons-belegg på gulvet
2. Plasser Gripo i bunnplaten, slik at den passer i sporet.
3. Plasser b) takplate med gassfjær på toppen av det indre røret og tre gassfjæren ned mot det røde sikkerhetsmerket, slik at den sitter fast.



C



Gripostangen spennes deretter opp mellom gulv og tak i henhold til bruksanvisning for Gripo.




Sjekk at stangen sitter godt fastspent før bruk.

Safety and Warnings

Accessories that can be used in combination with the "Kit for weaker ceilings"

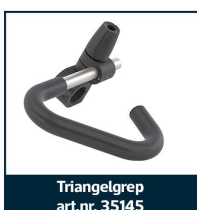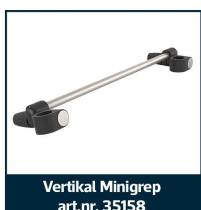

Accessories that CANNOT be used in combination with the "Kit for weaker ceilings"

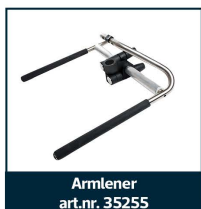

- Maximum user weight: **150 kg**
- Maximum user weight for approved accessories: **110 kg**
- Make sure that the ceiling structure can withstand a load of **50 kg** before installation.
- Clean the surfaces of the floor/ceiling thoroughly with a degreasing cleaning agent before installation; this is especially important when installing on tiles or other smooth surfaces
- Do not use the product if the red safety ring at the top of the pole is visible.
- Always consider the risk of pinching between the pole and other furniture/objects.
- Do not mount the product on loose items that are not securely fixed to the ceiling or floor, such as floor mats, boards, or similar.
- Do not let children play with the product.
- Do not place the product on surfaces that are not level or parallel.
- Make sure that the red marking is not visible during use. If it becomes visible, take down the pole and set it up again.
- Check that the tightening screw on the locking clamp is not loose and that the inner tube is screwed in firmly. If the red marking is still visible, a possible cause may be that the ceiling structure is not strong enough.



NB! This accessory must NOT be combined with other accessories than the ones listed in the **GREEN** box above


Installation of
**KIT FOR
WEAKER
CEILING**
Art. Nr. 35327

A

Unpack the received parts and check that nothing is missing.

The contents of the package should consist of the following parts:

- a) Large base plate with friction
- b) Ceiling plate including 500N gas spring

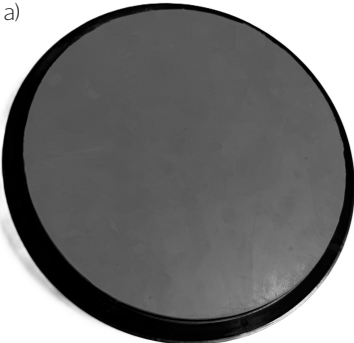

b)



B

1. Place a) the base plate with friction coating on the floor.
2. Place the Gripo in the base plate so that it fits into the groove.
3. Place b) the ceiling plate with gas spring on top of the inner tube and push the gas spring towards the red safety mark so that it is secured in place.



C

The Gripo pole is then tensioned between the floor and ceiling in accordance with the instructions for use for Gripo.



Check that the pole is securely fastened before use.

HEPRO

HEPRO AS
Tømmerveien 10, 8250 Rognan

 +47 46 74 55 55

 firmapost@hepro.no

Se og kjøp våre produkter på hepro.no

REV. NR. 2 / 2025