

smilla.



Bruksanvisning.

smilla. Det praktiske sittesystemet for hverdagen.




schuchmann®

Tusen takk.



Kjære kunde!

Vi vil gjerne få lov til å takke deg for at du har kjøpt dette produktet og for din tillit til oss. Før du tar i bruk produktet, ber vi deg om å lese bruksanvisningen nøye, og om å følge den. Ta hensyn til at henvisninger og fremstillinger i denne bruksanvisningen kan avvike fra ditt produkt, avhengig av valgt utstyr. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer.

Viktig informasjon!

Forsikre de om at denne bruksanvisningen oppbevares ved produktet.

Ditt **schuchmann**-team



1. Forberedelse.....	05
1.1 Levering.....	05
1.2 Sikkerhetstiltak før bruk	05
1.3 Sikker avfallshåndtering.....	05
1.3.1 Emballasje.....	05
1.3.2 Produkt	05
1.4 Plassering av bruksanvisningen.....	05
2. Produktbeskrivelse.	06
2.1 Materialinformasjon	06
2.2 Håndtering/Transport	06
2.3 Bruksområder, forskriftsmessig bruk.....	06
2.3.1 Indikasjoner	06
2.3.2 Kontraindikasjoner	06
2.4 Ikke forskriftsmessig bruk/advarsler.....	07
2.5 Utstyr basismodell	08
2.6 Tilbehør.....	09
2.7 Produktoversikt med tilbehør.....	09
3. Innstillinger.	10
3.1 Sitteflate som kan justeres i høyde, vinkel og dybde uten verktøy ...	10
3.2 Fotskammel	11
3.3 Armlener som kan justeres i høyden uten verktøy.....	11
3.4 Ryggvinkel som kan justeres uten verktøy	12
3.5 Rygghøyde som kan justeres uten verktøy.....	12
4. Tilbehør.	13
4.1 Hodestøtte	13
4.2 Belte- og stroppmonteringssett for rygg- og seteområdet.....	13
4.3 Sidestøtter	14
4.4 Lårføring	14
4.5 Terapibord av tre	15
4.6 Rullehjul	15
4.7 Abduksjonskile	16
4.8 Belter	16
5. Rengjøring og vedlikehold.	17
5.1 Rengjøring og desinfisering	17
5.1.1 Rengjøring.....	17
5.1.2 Desinfisering.....	17
5.2 Vedlikehold	17
5.3 Service	17
5.3.1 Vedlikeholdsspesifikasjoner	18
5.3.2 Vedlikeholdsplan.....	18
5.4 Reservedeler	19
5.5 Bruksvarighet og gjenbruk	19



6. Tekniske data. 20

7. Garanti. 21

8.1 Serienummer / Produksjonsdato..... 22

8.2 Produktversjon 22

8.3 Utstedelse av dokumentet..... 22

8.4 Navn og adresse til produsenten, forhandleren..... 22

1. Forberedelse.

1.1 Levering

Når du mottar produktet, må du kontrollere at det er fullstendig, at det ikke har feil og se etter eventuelle transportskader. Kontroller varen i nærheten av overbringeren. Hvis det oppstår transportskader, må du starte en reklamasjon (fastsettelse av mangler) sammen med overbringeren. Send en skriftlig reklamasjon til den ansvarlige forhandleren.

1.2 Sikkerhetstiltak før bruk

Riktig bruk av produktet krever nøyaktig og grundig opplæring av brukeren eller følgepersonen. Før du tar i bruk produktet, ber vi deg om å lese bruksanvisningen nøye, og om å følge den. Det er mulig at produktdele som kommer i berøring med huden, kan bli oppvarmet av sollys. Avhengig av intensiteten på solinnstrålingen, kan de enkelte delenes overflatetemperatur stige over 41 °C og dermed forårsake lette forbrenninger, hvis de kommer i direkte kontakt med huden. Du bør derfor dekke til disse områdene eller beskytte enheten mot direkte sollys.

1.3 Sikker avfallshåndtering

For å bevare og beskytte miljøet, for å forhindre miljøforurensning og forbedre gjenbruk av råvarer (resirkulering), må du følge instruksjonene for avhending i punkt 1.3.1 og 1.3.2.

1.3.1 Emballasje

Emballasjen for produktet skal oppbevares hvis det senere skulle bli nødvendig å transportere produktet. Hvis du må sende produktet tilbake til oss for reparasjon eller i garantitilfeller, ber vi deg bruke originalesken slik at produktet pakkes optimalt. Lever ellers emballasjematerialer til resirkulering avhengig av materialtypen.



Ikke la emballasjematerialer ligge rundt omkring uten oppsyn, da de kan være kilder til fare.

1.3.2 Produkt

Råstoffene som er brukt i produktet, leveres til resirkulering avhengig av materialtypen (se materialinformasjon under **punkt 2.1**) når produktets levetid er utløpt.

1.4 Plassering av bruksanvisningen

Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted, og forsikre deg om at den følger med produktet ved mulig gjenbruk. Hvis du mister bruksanvisningen, kan du når som helst laste ned en aktuell versjon fra www.schuchmann.de.



2. Produktbeskrivelse.

2.1 Materialinformasjon

Alle treelementene i sittesystemet **smilla.** er lagd av lakkert bøk. Frigivelse av formaldehyd fra lakken oppfyller kravene i henhold til E1. Trekkene er laget av 100 % polyester og er tungt antenkelige (i henhold til NS-EN 1021-1+2).

2.2 Håndtering/Transport

Sittesystemet er ikke ment for bæring. Hvis det ikke an unngås at stolen må bære grunnnet hindringer, må det tas hensyn til informasjonen "Løfte sittesystemet" under. For å transportere sittesystemet må alle innstillinger settes til det mest kompakte målet.

Løfte sittesystemet

Pass på at sittesystemet aldri løftes når det befinner seg en person i den. Sørg for at alle skrueforbindelser og skruegrep er skrudd godt fast før sittesystemet løftes. Løfting er kun tillatt i fotbrett- eller setepateholderne eller hovedrammen.

2.3 Bruksområder, forskriftsmessig bruk

Sittesystemet **smilla.** er et medisinsk produkt i risikoklasse 1 og brukes som kompensasjon for utpregede gale sitteholdninger og/eller for å stabilisere sitteholdningen. Det muliggjør varig og problemfri sitting i en funksjonell og fysiologisk gunstig posisjon.

2.3.1 Indikasjoner

Sittesystemet **smilla.** er designet for barn og ungdom som har nedsatt sittestilling, funksjonelle og/eller strukturelle skader på stammen eller kroppen og eventuelt nakkemusculatur (f.eks. på grunn av nevrologiske/ nevromuskulære sykdommer, deformiteter i ryggraden) med feil holdning. Sittesystemer er nyttige hvis det ikke er mulig å sitte på et standardmøbel over lengre tid, det ikke er nødvendig med en seteskål og du må opprettholde en sittestilling som er så fysiologisk som mulig og sikre stabil sitting med behov for hyppige tilpasninger som følge av vekstspurt i tilsvarende utviklingsfaser (spesielt i spedbarnsalderen).

2.3.2 Kontraindikasjoner

Generelt sett skal indikasjonen for behandling med et sittesystem følges opp fra medisinsk og ortopedisk side. Derfor skal det før en behandling undersøkes om det finnes kontraindikasjoner med hensyn til pasienten. Alle typer smerter er generelt sett en kontraindikasjon.

2. Produktbeskrivelse.



2.4 Ikke forskriftsmessig bruk/advarsler

- Påse at sittesystemet oppbevares tørt.
- Sørg for at produktet ikke brukes av flere brukere samtidig.
- Påse at det ikke befinner seg noen små deler, giftige stoffer, varme gjenstander, elektriske apparater osv. i nærheten av sittesystemet innenfor brukerens rekkevidde. Brukeren kan svelge gjenstanden, bli forgiftet eller bli skadet på andre måter.
- Av hensyn til brannsikkerheten skal sittesystemet ikke plasseres i nærheten av åpen ild eller andre kraftige varmekilder, som elektriske ovner eller gassfyrte varmeapparater.
- Sittesystemet er ikke egnet ved skoliose.
- Riktig bruk av sittesystemet krever nøyaktig og grundig opplæring av følgepersonen.
- Sittesystemet er ikke egnet for bruk utendørs.
- Maks. belastning (se **punkt 6**) må ikke overskrides.
- To til tre uker etter levering av sittesystemet må alle skruforbindelsene strammes. Deretter må de regelmessig kontrolleres og trekkes til ved behov, f.eks. annenhver måned.
- Tenk på at brukeren ved et bord med solid ramme lett kan skyve fra med føttene og vippe sittesystemet bakover.
- Ikke la brukeren sitte i sittesystemet uten tilsyn.
- Sørg for at alle selene er festet stramt uten feil.
- La ikke brukeren leke rundt sittesystemet når dette ikke befinner seg i tiltenkt posisjon for bruk.
- Sett alltid opp sittesystemet på et jevnt og stabilt underlag.
- Ikke bruk sittesystemet med defekte, slitte eller manglende deler.
- Bruk kun tilbehør og reservedeler fra Schuchmann, ellers setter du brukerens sikkerhet i fare.
- Ikke bruk sittesystemet som stige.
- Hvis brukeren stiger inn i sittesystemet på egen hånd, må det velges et forlenget stativ, ellers er det økt veltefare.
- Bruk sittesystemet kun når alle komponentene er montert riktig og stilt riktig inn. Pass særlig på at seteplaten og fotbrettet er festet riktig før du setter brukeren i stolen.
- Ved innstilling av sittesystemet kan kroppsdeler havne i klem.

2. Produktbeskrivelse.

- Brukere som har problemer med å lese, må få bruksanvisningen opplest for å forstå hvordan de bruker sittesystemet.
- Det må bare foretas justeringer når brukeren ikke befinner seg i sittesystemet.

2.5 Utstyr basismodell

- stabil treramme med integrerte aluminiumsprofiler
- **kan nå raskt justeres uten verktøy:**
 - rygglene som kan justeres i høyden og vinkel
 - armlener som kan justeres i høyden
 - seteflate som kan justeres i høyden, vinkel og dybden
- inkl. 2 forflytningshjul
- inkl. skyvehåndtak og fotplate
- inkl. sete- og ryggputer
- Material: Lakkert bøk

Plastglidere

For å forhindre at **smilla.** velter når den skyves bakover, er det plassert plastglidere under stativføttene. Disse gjør at **smilla.** sklir mykt når den skyves tilbake og forblir oppreist. For å garantere at knottene fungerer slik det er tiltenkt, må sittesystemet stå på et underlag som disse kan skli på. Knottene og underlag må holdes rene.

Trekk

Sete- og ryggputene til sittesystemet **smilla.** er på basismodellen trukket i et slitestoff og pustende stoff. Trekket har glidelås og kan tas av puten for rengjøring (se **punkt 5.1**).

Forflytningshjul

Sittesystemet er utstyrt med forflytningshjul som gjør det lettere å plassere stolen med støtte. Forflytningshjulene må ikke forveksles med rullehjul (se **punkt 4.6**). For å posisjonere **smilla.** riktig (f.eks. for å skyve brukeren mot/under et bord), må den helles lett fremover. Det er forflytningshjul under stolbeina i det fremre området. Nå kan du bevege stolen med støtte i ønsket retning.

2. Produktbeskrivelse.

2.6 Tilbehør

- hodestøtte
- sidestøtter
- lårføring
- Anatomisk setepute
- Abduksjonskile
- Terapibord av tre
- stort terapibord av tre med kant
- Abduksjonskile
- Stolbein lang
- doble rullehjul
- Selemonteringssett for seteomrâdet
- Selemonteringssett for ryggomrâdet
- Bryst-skuldersele
- Posisjoneringsvest
- Setebukse (standard/T-form)
- Bekkenbelte
- 4-punkts bekkenbelte

2.7 Produktoversikt med tilbehør



3. Innstillinger.


Innstillinger og justeringer på produktet eller tilbehøret skal kun utføres av personer som har fått innføring i dette av en medisinproduktrådgiver. For å redusere faren for skader må det ved alle typer innstillinger og justeringer passes på at ikke brukerens eller følgepersonens armer eller bein befinner seg i innstillings- eller justeringsområdet. Alle innstillinger kan utføres med vanlig verktøy (f.eks. unbrakonøkkel, skrutrekker eller skiftenøkkel).

Sittesystemet **smilla** kan justeres etter brukerens størrelse. Om mulig må over- og underarmene samt øvre og nedre del av beinet minst kunne danne en rett vinkel. Føttene må hvile fullstendig på fotbrettet og armene må kunne ligge løst på armlenene.

3.1 Sitteflate som kan justeres i høyde, vinkel og dybde uten verktøy

Riktig høyde på seteplaten må tilpasses brukerens størrelse og den aktuelle høyden til bordet/situasjonen. Når du har stilt inn seteplaten, må du plassere armlenene slik at brukerens underarmer ligger bekvemt på disse. Fotbrettet befinner seg i riktig høyde når fotsålene hviler på disse og øvre del av beinet hviler på seteplaten.

Seteplaten kan justeres i høyden, vinkel og dybden uten verktøy. For å stille inn høyden trykker du på tastebryteren (A) og setter seteplaten i ønsket høyde. Seteplaten må gå hørbart i lås for å være riktig låst. For å stille inn vinkelen til seteplaten, vrir du på skruknotten (B). For å stille inn dybden til seteplaten må du løsne skruknotten (C), sette seteplaten i ønsket dybde og skru fast skruknotten (C) igjen.

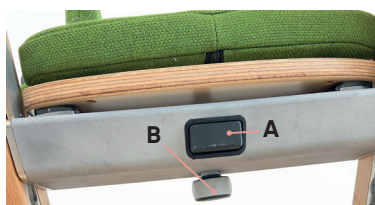



Det må bare foretas justeringer når brukeren ikke befinner seg i sittesystemet.



Ved justering av sittesystemet kan kroppsdeler havne i klem. Stram skruforbindelsene igjen etter hver innstilling!



3. Innstillinger.

For å skaffe enda mer dybde i dybdeinnstillingen må du bruke de to innskruingsmuffene (A) i seteplaten. Løsne da skruknottene med skruer (B) og trekk seteplaten til maksimal dybdeinnstilling. Sett skruknottene med skruer (B) inn i den bakre innskruingsmuffen (A). Nå kan du sette seteplaten i den maksimale dybdeinnstillingen.

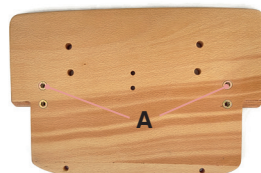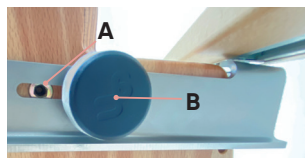


3.2 Fotskammel

To ulike fotbrett er tilgjengelige for **smilla**. Begge kan justeres i dybden og i høyden. Høyden til den versjonen av fotbrettet som kan justeres i høyden, stilles inn ved å trykke på tastebryteren (C), sette fotbrettet i ønsket posisjon og sørge for at det går hørbart i lås. For å stille inn fotbrettet i dybden må du løsne skruknottene (D) og sette fotbrettet i ønsket dybde. Skru skruknottene (D) fast i tilkoblingen igjen. Høyden til "Fotbrett bakkenivå" som kan senkes helt ned på bakkenivå, kan justeres ved å løsne de fire skruene (E). Sett fotbrettet i ønsket høyde og skru fast skruene (E) igjen. For å stille inn dybden til "Fotbrett bakkenivå" må du løsne skruene (F), sette fotbrettet i ønsket dybde og stramme skruene (F) igjen.

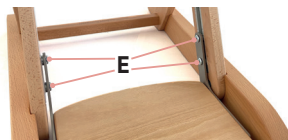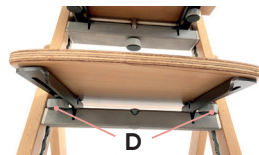

3.3 Armlener som kan justeres i høyden uten verktøy

Armlenene kan justeres i høyden uten verktøy. Skru da helt enkelt på skruknotten (G), sett armlenene i ønsket høyde og skru fast skruknotten (G) igjen.

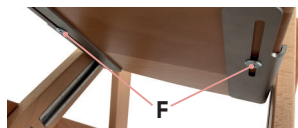


Det må bare foretas justeringer når brukeren ikke befinner seg i sittesystemet.

3. Innstillinger.

3.4 Ryggvinkel som kan justeres uten verktøy

Rygglenet må ligget i flukt med ryggen og må justeres i ønsket stilling for ryggen. Ryggvinkelen kan justeres fra -3° til $17,5^{\circ}$. For å stille inn vinkelen på rygglenet, må du løsne skruknottene (A) på begge sider av rammen og sette rygglenet i riktig posisjon. Deretter strammes skruknottene igjen.

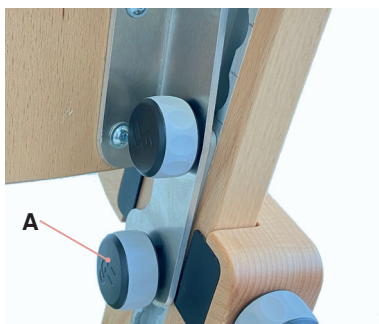


Ved justering av ryggvinkelen kan kroppsdeler havne i klem.



Stram skruforbindelsene igjen etter hver innstilling!

3.5 Rygghøyde som kan justeres uten verktøy

Rygglenet kan stilles trinnløst inn i høyden. Løsne da skruknottene (B) og skruknottene (C) på begge sider av rammen. Sette rygglenet i ønsket høyde og stram skruknottene (B) og skruknottene (C) på begge sider igjen.

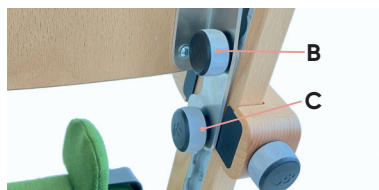

Ved justering av rygghøyden kan kroppsdeler havne i klem. Stram skruforbindelsene igjen etter hver innstilling!



Det må bare foretas justeringer når brukeren ikke befinner seg i sittesystemet.



4. Tilbehør.

4.1 Hodestøtte

I riktig posisjon kan hodet hvile på hode-
støtten slik at midten av hode-
støtten berører hodet tangentialt. Påse at øvre kant av
hode-
støtten er i samme høyde som øvre
kant av hodet. Hode-
støtten kan stilles inn i
høyden i trinn på 3 cm via et hullbilde. For å
sette hode-
støtten i riktig posisjon må du ta
av ryggputen (A), løsne unbrakoskruene (B)
på baksiden av hode-
støtten og ta ut hylse-
mutrene. Hold hode-
støtten i ønsket posisjon,
sett hylsemutrene inn igjen forfra gjennom
hullene og stram unbrakoskruene (B) igjen fra
baksiden.




Stram alle skruforbindelsene igjen etter hver innstilling!

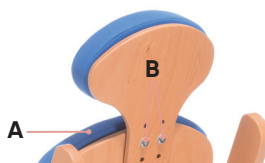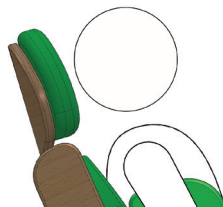

4.2 Belte- og stroppmonteringssett for rygg- og seteområdet

Alternative belte- og stroppmonteringssett er
tilgjengelige for rygg- og seteområdet. For
å tre belter og stropper (se punkt 4.8) inn i
klaffelåsene (C), må du åpne dem, føre beltet
gjennom klaffelåsene (C) og lukke dem igjen.
Belte- og stroppmonteringssettet for rygg-
området monteres på hode-
støtten (D) og
nede på seteplaten. Løsne skruene (E) på ho-
destøtten, legg hullbildene til hode-
støtten (D)
og beltemonteringssettet over hverandre og
sett inn skruene (E) igjen. Belte- og stopp-
monteringssettet for seteområdet monteres
på seteplaten.

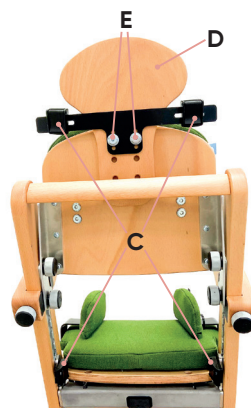



Stram skruforbindelsene igjen etter hver innstilling!



4. Tilbehør.



4.3 Sidestøtter

Sidestøttene kan justeres i høyden, i bredden, og vinklene kan justeres. For å justere høyden må du ta ryggputen fra rygglenet og løsne de fire unbrakoskruene (A) bakfra. Ta de fire hylsemutrene (B) av forfra og sett dem inn i hullene gjennom langhullene i ønsket høyde og stram de fire unbrakoskruene (A) lett igjen. Nå kan du sette ryggputen på igjen, skyve sidestøttene i ønsket posisjon og stramme de fire hylsemutrene (B) igjen. For å justere vinkelen og bredden må du løsne de fire unbrakoskruene (A), stille støttene i ønsket vinkel hhv. stille inn ønsket bredde og stramme de fire unbrakoskruene igjen.

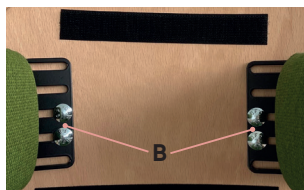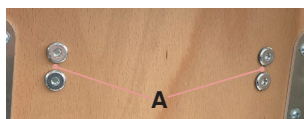

4.4 Lårføring

Lårføringen kan justeres i dybden, i bredden og i vinkel. For å forandre vinkelen og bredden til lårføringen må du løsne de fire unbrakoskruene (C) under seteplaten. Sett nå lårføringen i ønsket posisjon og stram de fire unbrakoskruene (C) igjen. For å stille inn dybden på lårføringen må du skyve trekke litt opp, løsne de to skruene (D) på siden av lårføringen og sette føringen i ønsket posisjon. Stram deretter skruene igjen.

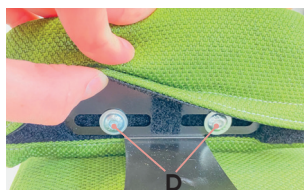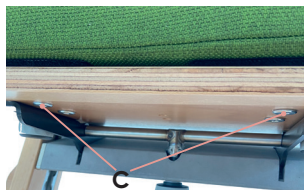

Ved justering av sittesystemet kan kroppsdeler havne i klem. Stram skruforbindelsene igjen etter hver innstilling!




Det må bare foretas justeringer når brukeren ikke befinner seg i sittesystemet.

4. Tilbehør.

4.5 Terapibord av tre

Terapibordet av tre er tilgjengelig i to varianter: et bord som kan settes på (A) og et stort bord som kan settes på (B) utstyrt med kant. For å montere bordet må du løsne skruknottene (C) i klemanordningene på undersiden av terapibordet av tre og skyve dette på armlenene i ønsket posisjon. Påse at klemanordningene til bordet er plassert helt på armlenene og stram deretter skruknottene (C) igjen. Høyden til terapibordet av tre kan justeres via armlenene (se punkt 3.3).

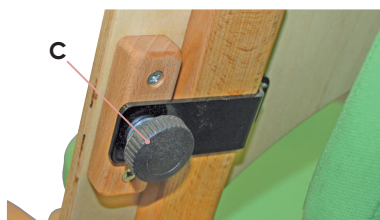

Terapibordet av tre må ikke utsettes for en belastning på mer enn 10 kg!




Ved justering av sittesystemet kan kroppsdelene havne i klem. Stram skruforbindelsene igjen etter hver innstilling!

4.6 Rullehjul

smilla. kan utstyres med 4 rullehjul som ekstrautstyr, 2 av disse kan ha lås. For å bremse/låse de bakre rullehjulene trykkes bremsen ned med skotuppen. For å løsne bremsen må den løftes med skotuppen igjen.




Bremsene fungerer kun pålitelig på et jevnt underlag!

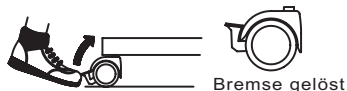

4. Tilbehør.

4.7 Abduksjonskile

Abduksjonskilen muliggjør en ev. medisinsk nødvendig abduksjon av lårene. For å fjerne abduksjonskilen trykker du inn knappen på stikkakselen (A) og trekker abduksjonskilen mot deg. For å montere abduksjonskilen fører du stikkakselen (A) inn i hullet (B) på monteringen. Abduksjonskilen sitter på plass når du hører et klikk.



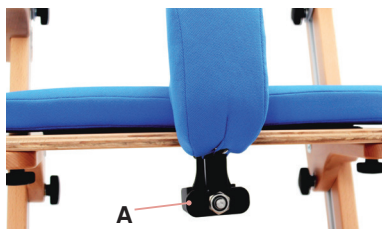


4.8 Belter

Det finnes en serie av seler tilgjengelige for **smilla**. Disse sørger for en enda bedre posisjonering av brukeren. Selelene må monteres med monteringssettene for sete- eller ryggområdet.

Du kan velge mellom bryst-skuldersele, en setebukse (standard) hhv. en setebukse i T-form (C), et bekkenbelte (D) og et 4-punkts bekkenbelte (E). Posisjoneringshjelpene våre er tilgjengelige i flere ulike størrelser. Du finner mer informasjon i bestillingsskjemaet/tilpasningsskjemaet å

www.schuchmann.de/smilla.

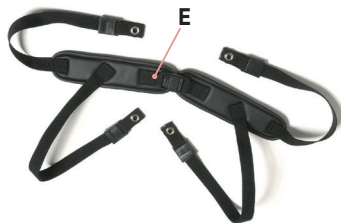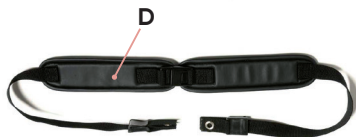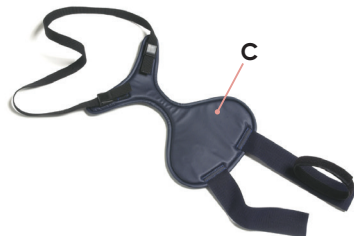

Sørg for at det respektive beltet alltid må plasseres riktig og føres nær kroppen.



Belter som settes på feil fører til fare for personskader og til og med kvelning av brukeren!



Brukere må ikke være alene uten tilsyn når beltet er på! Sittesystemet må bare brukes under tilsyn av en opplært person!

5. Rengjøring og vedlikehold.

5.1 Rengjøring og desinfisering

5.1.1 Rengjøring

Rengjør alle rammeelementene regelmessig med en svamp eller en fuktig klut, særlig vanndråper må fjernes. Ved kraftigere forurensninger må rengjøringen utføres med et mildt husholdningsrengjøringsmiddel. Det er viktig å tørke de rengjorte stedene grundig.

Alle stoffer som ikke kan tas av, kan tørkes av med en fuktig klut. Ved alle avtakbare stoffer må du være oppmerksom på de innsydde pleieetikettene (som f.eks. **A+B**) på det respektive elementet.

Ta også hensyn til våre generelle rengjørings- og hygienehenvisninger. Disse finner du på **www.schuchmann.de/mediathek**.



5.1.2 Desinfisering

For flatedesinfisering av tre-, metall- og plastdeler kan du bruke ulike produkter.

Flytende desinfiseringsmidler finnes som ferdige løsninger som kan sprayes på og påføres jevnt med en myk klut. Alternativt kan du bruke kluter som er fuktet med desinfeksjonsmiddel og tørke av produktflatene med disse. I begge tilfeller må du sørge for å dekke delene fullstendig. Desinfeksjon i helautomatiske desinfeksjonssystemer er også mulig og anbefalt.

Virketiden kan variere og må leses i produsentspesifikasjonene for middelet som brukes.

5.2 Vedlikehold

Gjennomfør en daglig visuell kontroll, og kontroller produktet regelmessig med tanke på sprekker, brudd, manglende deler og funksjonsfeil. Henvend deg direkte til forhandleren ved defekter eller funksjonsfeil (se **punkt 8.5**).

5.3 Service

Av hensyn til brukersikkerhet og for å opprettholde produktansvar, må service utføres av fagfolk minst én gang i året (se **punkt 8.5**). Utført servicearbeid må dokumenteres i serviceplanen (se **punkt 5.3.2**).



5. Rengjøring og vedlikehold.

5.3.1 Vedlikeholdsspesifikasjoner

- Grunnleggende rengjøring i henhold til produsentens angivelser (se **punkt 5.1.1**)
- Ev. desinfisering i henhold til produsentens angivelser (se **punkt 5.1.2**)
- Skader på ramme, påmonteringsdeler og tilbehør (sprekker, brudd, splitter, bøyde eller manglende deler)
- Faste forbindelser (trekk til løse skruer, erstatt manglende skruer)
- Justeringselementene fungerer riktig (glidelagre, rygg, hodestøtte, støt-teputer, armlener, fotstøtter, bord og guider i beinområdet)
- Rullehjulene fungerer riktig (går rundt, går lett, svinger lett) og bremsene fungerer riktig
- Kontroller belter og stropper for skader (kleminnretninger, låser, sømmer)
- Kontroller putene og trekkene for skader
- Lesbarhet av typeskiltene
- Avsluttende komplett funksjonskontroll av hjelpemiddelet
- Kontroller at alle påmonteringsdeler og tilhørende tilbehør er riktig festet

5.3.2 Vedlikeholdsplan

Produsentens servicekrav (se **punkt 5.3.1**) ble oppfylt:

Dato	Bedrift	Navn	Underskrift



Fastsatte feil eller skader må utbedres av forhandler eller produsenten før produktet brukes igjen.

5. Rengjøring og vedlikehold.

5.4 Reservedeler

Bruk kun originalt tilbehør og originale reservedeler fra Schuchmann, ellers kan det sette brukerens sikkerhet i fare og garantien utgå.

For bestilling av reservedeler må du henvende deg til forhandleren og oppgi serienummeret på sittesystemet (se **punkt 8.5**). Nødvendige reservedeler og tilbehør skal kun monteres av opplært personale.

5.5 Bruksvarighet og gjenbruk

Forventet bruksvarighet for produktet vårt er opp til "8" år avhengig av bruksintensiteten og antall gjenbruk, hvis bruken er i overensstemmelse med opplysningene i denne bruksanvisningen. Produktet kan brukes lenger enn dette hvis det er i sikker stand. Forventet bruksvarighet gjelder ikke for slitedeler, f.eks. rullehjul, gasstrykkfjær osv. Vedlikehold og vurdering av tilstand og eventuell gjenbruk, ligger hos forhandleren.

Produktet er egnet for gjenbruk. Utfør rengjørings- og desinfeksjonsinstruksjonene, nevnt under **punkt 5.1**, før du går videre. Medfølgende dokumenter som f.eks. denne bruksanvisningen, hører til produktet og må gis videre til den nye eieren. Produktet må ikke demonteres før gjenbruk. For lagring anbefales det å stille produktet inn på de mest kompakte målene for å spare plass.



Hvis det under bruksvarigheten ved tiltenkt bruk av produktet oppstår en alvorlig hendelse, må dette rapporteres til produsenten og de ansvarlige myndighetene.

		Str. 0 KITA	str. 0	Str. 1 KITA	Str. 1	str. 2
A	Setebredde	17–28 cm	17–28 cm	20–35 cm	20–35 cm	30–40 cm
B	Setedybde	16–26 cm	16–26 cm	25–35 cm	25–35 cm	30–40 cm
C	Setehøyde maks.	42 cm	62 cm	42 cm	62 cm	65 cm
D	Rygghøyde	25 cm	25 cm	29 cm	29 cm	34 cm
E	ryggvinkel	(-) 3° – 17,5°				
F	Setevinkel	(-) 5° – 15°				
G*	Hurtigjustering av høyden til fotbrettet min.	Standard	12 cm			
		med 50 mm dobbelt rul-lehjul	17 cm			
		med 75 mm dobbelt rul-lehjul	20 cm			
G*	Høyden til fotbrettet bakkenivå min.	Standard	2,5 cm			
		med 50 mm dobbelt rul-lehjul	7,5 cm			
		med 75 mm dobbelt rul-lehjul	10,5 cm			
	Maks. belastning	30 kg	30 kg	45 kg	45 kg	60 kg
	Vekt	9,2 kg	9,7 kg	9,6 kg	10,2 kg	12 kg

* maks. justerbar legglengde = valgt/nødvendig setehøyde - min. høyde fotbrett (G)

7. Garanti.


Den lovfestede 2-årige garantifristen gjelder for alle produkter. Garantien begynner å løpe når produktet leveres / gis videre. Dersom det skulle oppstå en materialfeil eller en fabrikasjonsfeil innenfor dette tidsrommet på varen vi har levert, vil vi se på den viste skaden uten kostnader ved fraktfri retur til oss, og utbedre feilen eller levere på nytt ev. gratis og iht. vårt valg.



8. Identifisering.

8.1 Serienummer / Produksjonsdato

Du finner serienummeret, produksjonsdatoen og ytterligere opplysninger på typeskiltet som finnes på alle våre produkter (A).

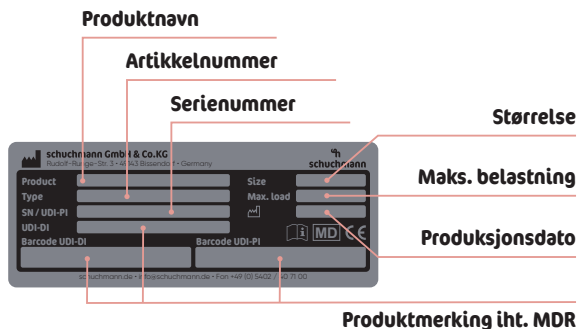

8.2 Produktversjon

Sittesystemet **smilla** er tilgjengelig i fem størrelser og kan utvides med mye tilbehør (se punkt 4).

8.3 Utstedelse av dokumentet

Bruksanvisning **smilla**. – Oppdateringsstatus A; utgave 07.2023

8.4 Navn og adresse til produsenten, forhandleren

Dette produktet er produsert av:



Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 · D-49143 Bissendorf · Tyskland
Tlf. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Faks +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Dette produktet ble levert av følgende forhandler:







schuchmann.de