

SIGHTCARE



# Sight Care CloverNote Digital lupe

# Manual

REV1.1

## Innhold

<b>Forholdsregel</b>	<b>1</b>
<b>Kom i gang</b>	<b>2</b>
Oversikt .....	2
Selve enheten.....	3
Tilbehør .....	4
Oppsett av enheten .....	5
Batterilading.....	5
Ladeport-LED .....	6
Batteribytte.....	6
Enhetsfolding .....	7
Oppsett og frakobling av eksternt kamera (valgfritt) .....	8
Brett for lese og skrivehjelp (valgfritt) .....	9
<b>Operasjon.....</b>	<b>10</b>
Av/på-knapp.....	10
Hjem/Avslutt-knapp.....	10
Forstørrelse .....	11
Lysstyrke .....	11
Fargemodus.....	12
Kontrastkontroll .....	12
Belysning.....	13

Volum.....	14
Frys bilde.....	14
Bildelagring.....	14
Leselinje og maske.....	15
Oversiktsfunksjon .....	16
Live Panorering.....	17
Fokuskontroll .....	18
Vippesystem.....	18
Åpen applikasjon .....	20
Innstillingsmeny.....	26
HDMI-utgang.....	28
Maskinvaretilbakestilling.....	28
<b>Feilsøking</b>	<b>29</b>
<b>Spesifikasjon</b>	<b>31</b>

# Forholdsregler



Før du bruker CloverNote for første gang, må du lade batteriet. Se avsnittet **om batterilading** for mer informasjon.



Bruk alltid enheten et sted hvor temperaturen ligger mellom 10° og 35°C.



Hold enheten unna våte områder, regn og andre kilder til væske. Ikke senk enheten ned.



Ikke forsøk å reparere enheten. Ethvert uautorisert forsøk vil ugyldiggjøre produktgarantien. Vennligst kontakt distributøren din.



Bruk den medfølgende strømadapteren og batteriet.

# Kom I gang

## Oversikt


---

CloverNote er et 12,5-tommers bærbart videoforstørrelsesglass som kan dekke alle daglige behov og fungere på tvers av tre hovedmarkedssegmenter: hjem, arbeid og utdanning for personer med nedsatt syn.


Det avanserte flerkamerasystemet sikrer overlegen og skarp bildekvalitet med 2,2–50 ganger kontinuerlig og tapsfri forstørrelse. Betjening av fysiske knapper og berøringsskjermbewegelse med lyd støttes begge slik at mer praktisk interaksjon kan velges etter eget ønske.

Enheten har alle grunnleggende og praktiske funksjoner, slik at du kan lese, endre farger og ta bilder. Sanntidsnavigasjon, Leselinje og maske- og posisjonsfunksjon oppnås på denne enheten.


## Selve enheten

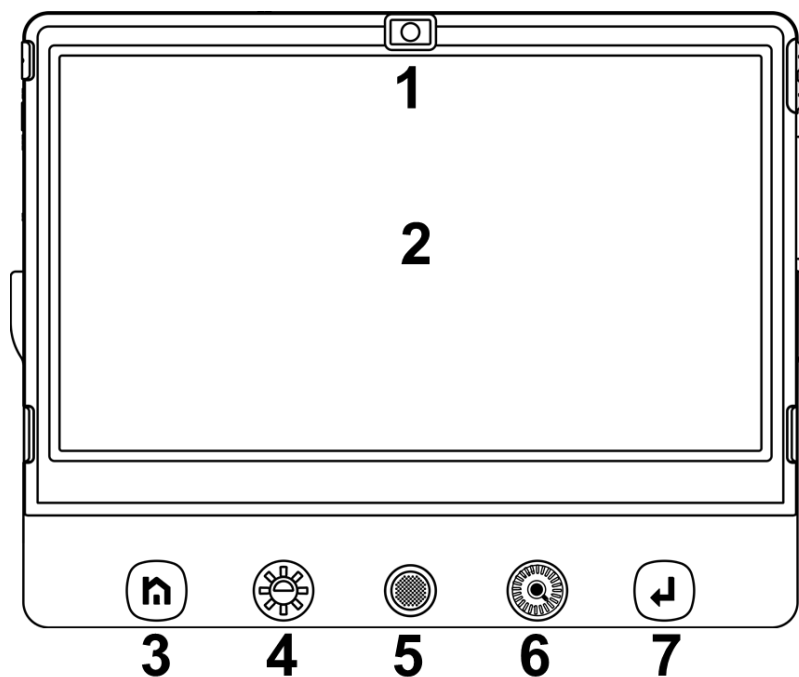


- |                   |               |                      |
|-------------------|---------------|----------------------|
| 1. Frontkamera    | 2. LCD-skjerm | 3. Hjem/Avsluttknapp |
| 4. Kontrast-knapp | 5. Joystick   | 6. Zoom-knapp        |
|                   |               | 7. Enter-knapp       |

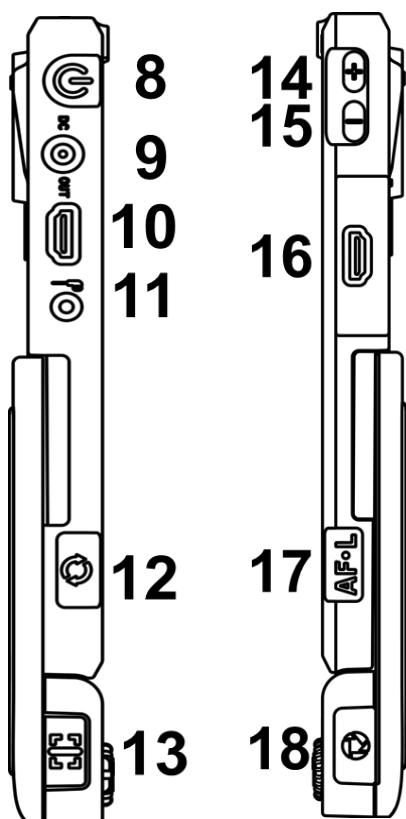

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 8. Av/på-knapp          | 14. Stemme opp-knapp      |
| 9. DC-port              | 15. Stemme ned-knapp      |
| 10. HDMI-utgangsport    | 16. Inngang ekstra kamera |
| 11. Hodetelefonport     | 17. Fokuskontroll-knapp   |
| 12. Switch-knapp        | 18. Frys bilde-knapp      |
| 13. Leseleselinje/maske | 19. SD-kortspor           |

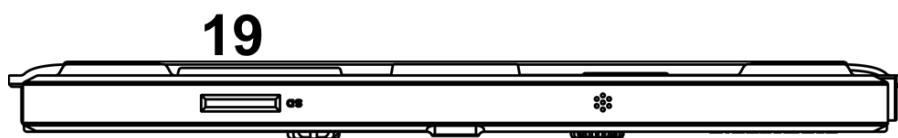

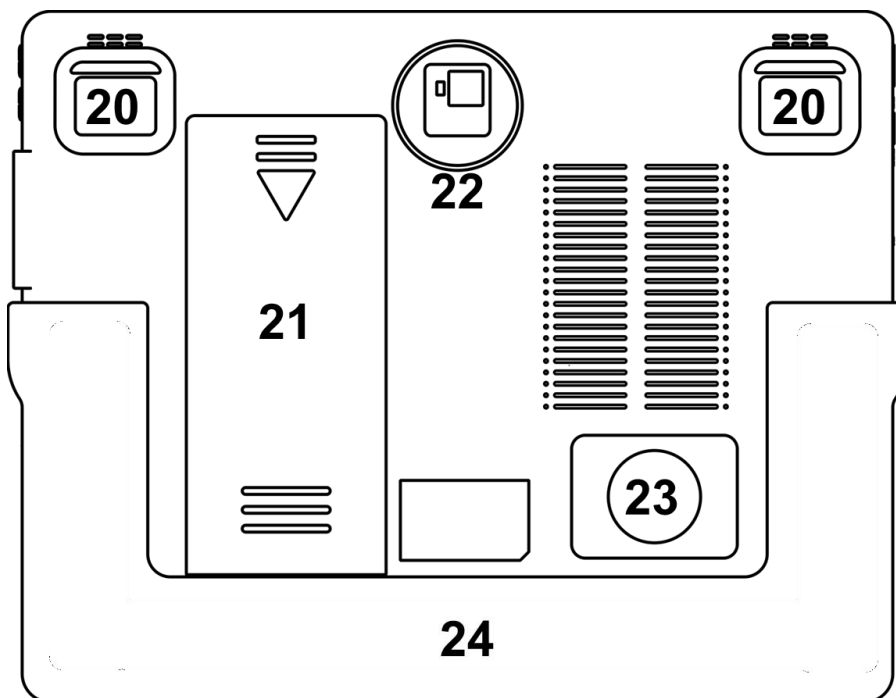

20. LED-lys

21. Batteri

22. Hovedkamera

23. Høytaler


24. Stativ/Støtte

## Tilbehør


---




Bruerveiledning

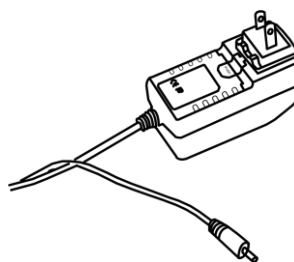

Strømadapter

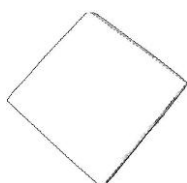

Rengjøringsklut

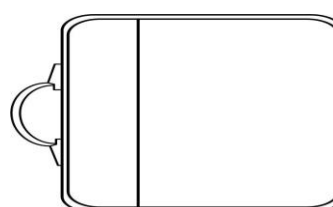


Bæreveske

## Oppsett av enheten

---


Brett ut stativet for å sette opp enheten.

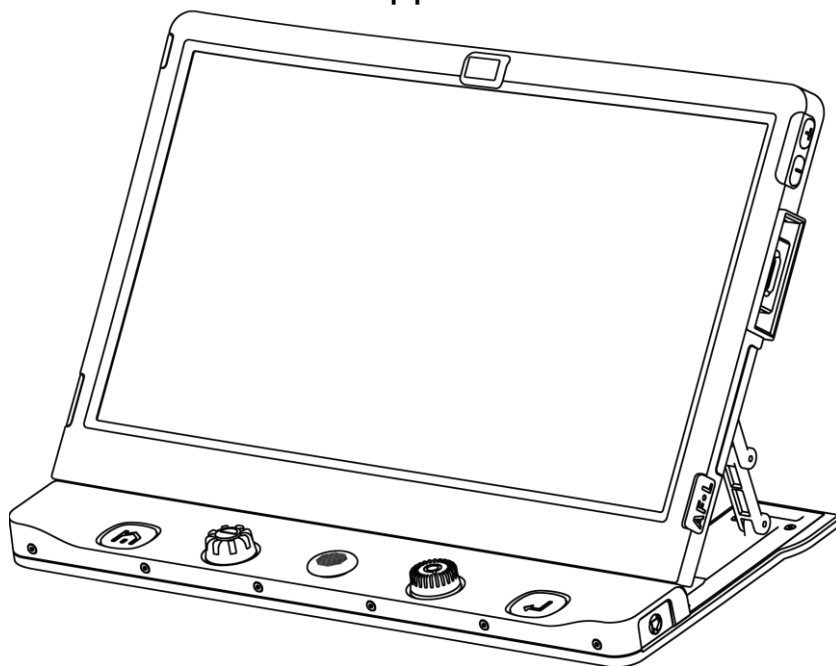

## Batterilading

---

Koble den medfølgende strømkabelen til enhetens ladeport, og koble deretter strømadapteren til en strømkontakt for å starte ladingen.

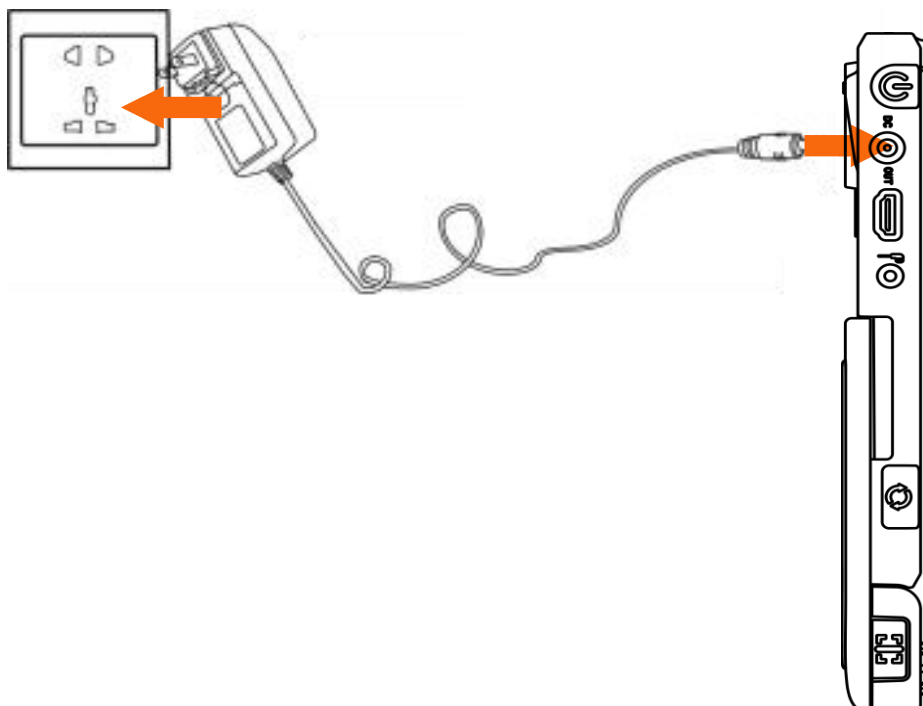

## Ladeport-LED

---

- Når jeg lader når enheten er av, vil strøm-LED-en være grønn og automatisk slå seg av når den er fulladet. En full ladning vil ta omtrent 2,5 timer og støtte enheten som jobber i omtrent 4-4,5 timer.
- Når den lader når enheten er på, vil strøm-LED-en holde seg grønn.
- Når enheten er på uten lading, vil strøm-LED-en være grønn når batterinivået er høyt, og rød når batteriet er i ferd med å gå tomt.

## Batteribytte

---

Batteriet kan fjernes fra enheten, noe som er veldig praktisk å bytte ut.

### Trinn 1

Brett ut stativet og snu enheten.



## Steg 2

Skryv ned batteridekselet for å eksponere batteriet. Ta ut batteriet og sett inn et nytt, så skryv dekselet tilbake.



## Enhetsfolding

---

Bruk fingeren til å presse stativstøtten til den bøyer seg først, slik bildene viser, og lukk deretter stativet.



## Oppsett og frakobling av eksternt kamera (valgfritt)

---

- ❑ Sett inn det eksterne kameraet i den ekstra kamera-inngangen.
- ❑ Trykk ned de to knappene på kameraet først for å miste forbindelsen, og dra det deretter ut direkte.

Merk: Vinkelen på kameraspaken kan justeres etter brukerens ønsker, og knotten kan også dreies. Flere eksempler kan leses i neste kapittel.



## Brett for lese- og skrivehjelp (valgfritt)

---




- ❑ Sett enheten på assistansebrettet i midten.
- ❑ Fold ut stativet/støtten og sett enheten inn i stativet.
- ❑ Med enheten på brettet kan den ta opp en halv side i A4-størrelse om gangen. Med hjulet under brettet og mer plass tilgjengelig, er det veldig praktisk og enkelt å flytte brettet for lesing og håndskrift.



# Operasjon






## Av/på-knapp


---

- ❑ Hold inne av/på-knappen  i 3 sekunder for å slå på enheten.
- ❑ Når enheten er på, trykk på strømknappen  for å sjekke batteriets nåværende status.
- ❑ Trykk lenge og hold inne av/på-knappen  når enheten er på i 3 sekunder for å slå av.

## Hjem/Avslutt-knapp




---

- ❑ Trykk lenge på Hjem/Avslutt-knappen  i 2 sekunder for å komme inn på startsidene, inkludert **forstørrelsesprogram**, **åpne applikasjon** og **innstillingsmeny**. Den utvalgte vil bli markert. Trykk på det spesifikke ikonet (eller bruk joysticken  for å velge og Enter-knappen  for å bekrefte).
- ❑ I applikasjoner med Hurtigkontroll-linje, trykk på Hjem/Avslutt-knappen  for å åpne Hurtigkontroll-linje; i andre situasjoner vil et kort trykk på Hjem/Avslutt-knappen  fungere som utgang/tilbake-funksjon.

- ❑ Ingen operasjon i 5 sekunder eller et kort trykk på Hjem/Avslutt-knappen  eller trykk på skjermen lukker Hurtigkontroll-linjen.

## Forstørrelse


---

- ❑ Vri zoom-knappen med  klokken for å zoome inn.
- ❑ Vri zoom-knappen  mot klokken for å zoome ut.
- ❑ I tillegg til zoom-knappen , bruk klem- og zoom-bevegelsen på berøringsskjermen for å justere zoomnivået.

Forstørrelsesområde: 2,2x -- 50x (nært syn)



## Lysstyrke

---

I forstørrelsesappen, trykk kort på Hjem/Avslutt-knappen  for å åpne Hurtigkontroll-linje

- ❑ Trykk for å velge ikonet nedenfor (eller bruk joysticken ).










- ❑ Beveg fingeren på skjermen (eller roter Zoomeknapp ) for å øke/reducere lysstyrken.
- ❑ Ingen Handlinger i 5 sekunder eller kort trykk på Hjem/Avslutt-knappen  eller trykk på det inaktive området for å lukke.

## Fargemodus

---

En fargemodus er en forhåndsdefinert fargekombinasjon.

Fullfargemodus er egnet for å se bilder eller kart. Kontrast-modus kombineres med ulike forgrunns- og bakgrunnsfarger, noe som kan hjelpe til med å lese klarere.

- ❑ Vri på Kontrast-knappen  for å gå gjennom alle mulige kontrastkombinasjoner.
- ❑ Trykk ned knappen for Kontrast  for raskt å bytte mellom fullfarge og den nyeste forbedrede fargen.
- ❑ Hold inne knappen for Kontrast  i 5 sekunder for å gå inn på siden for kontrastkombinasjoner farge, bruk trykkbevegelsen til å aktivere/deaktivere ulike kontrastkombinasjoner (eller bruk Joystick  for å velge og Enter-knappen  for å bekrefte).
- ❑ Trykk på Exit-ikonet  for å avslutte kontrast-siden (eller trykk på Hjem/Avslutt-knappen .


**Merk:** Siden for kontrastkombinasjoner kan også åpnes via innstillingsmenyen.




## Ekstra justering av kontrast

---

I de fleste tilfeller vil balansen mellom de to kontrastfargene være riktig. Men manuell kontrastjustering kan utføres hvis det er nødvendig.

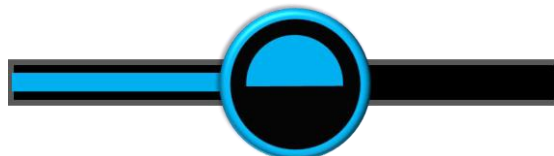
- Trykk ned knappen for Kontrast  og vri på zoom-knappen  samtidig for å åpne en Hurtigkontroll-linje





- Bruk en skyvebevegelse med fingrene, eller vri på Zoom-knappen  for å endre kontrastfargen mellom bakgrunn og forgrunn.
- Ingen Handlinger i 5 sekunder eller kort trykk på Hjem/Avslutt-knappen  / Enter-knappen , eller trykk på det inaktive området for å lukke.


## Belysning

---

I forstørrelsesappen, trykk kort på Hjem/Avslutt-knappen . De to lysene kan være både på/av, og venstre/høyre lys kan også styres separat.

- Trykk på det spesifikke ikonet på skjermen for å styre lysene (eller skyv joysticken  for å velge ikonet og Enter-knappen  for å bekrefte).



- Ingen Handlinger i 5 sekunder eller kort trykk på Hjem/Avslutt-knappen  eller trykk på det inaktive området for å lukke.

## Volum

---

Trykk på Voice Up-knappen  $\uparrow$  eller Voice Down-knappen  $\downarrow$  for å justere volumet. Når baren vises, kan du også skyve for å justere volumnivået.



Knapp/stemmevolumbar




Tekst-til-tale volumlinje

## Frys bilde

---


Å fryse et levende bilde kan være nyttig for bevegelige objekter. Ytterligere forstørrelse samt endring av kontrast er fortsatt tilgjengelig i denne modusen.

Trykk på Frys bilde-knappen  for å låse/låse opp bildet.

For et fryst bilde med økt forstørrelse kan du bruke fingrene på touch-skjermen eller Zoom-knappen for å endre forstørrelse, og bruke joysticken  for å panorere fritt i bildet.

## Bidlagring


---



- I forstørrelsesapplikasjonen holder du frys bilde-knappen inne i  3 sekunder for å lagre det aktuelle bildet.

**Merk:** Når de lagrede bildene når maksimal kapasitet (2 GB, ikonet for minne fullt vises), må du slette noen bilder først i avspillingsmodus før neste vellykkede lagring.




## Leselinje og maske

---




Trykk på Leselinje/maske-knappen  for å bytte mellom ulike Leselinje/maske -moduser. Live panorering-funksjonen er fortsatt tilgjengelig.

Når leselinjen er tilgjengelig, kan man gjøre et langt trykk på Leselinje/maske-knappen  og rotere Kontrast-knappen  for å endre linjefargen.

### ● En horisontal linje


□ Trykk og hold inne leselinje/maske-knappen  og skyv joysticken  opp/ned for å endre posisjonen til horisontal leselinje; Skyv joysticken  til venstre/høyre for å minke/øke bredden på linjen.


### ● En vertikal linje

□ Trykk og hold inne Leselinje/maske-knappen  og skyv joysticken  til venstre/høyre for å endre posisjonen til den vertikale leselinjen; Skyv joysticken  opp/ned for å øke/ redusere Bredde på linjen.

## ● Horizontal maske


☐ Trykk og hold Leselinje/maske-knappen inne , og skyv


Joysticken  opp/ned for å endre posisjonen på maskene.

Skyv joysticken  til venstre/høyre for å redusere/forstørre avstanden mellom maskene.

## ● Vertikal maske

☐ Trykk og hold Leselinje/maske-knappen  inne, og skyv

Joysticken  til venstre/høyre for å endre maskenes posisjon.


Skyv Joysticken  opp/ned for å forstørre/ redusere avstanden mellom maskene.


## Oversiktsfunksjon





---

Når du er på et høyere zoomnivå, kan du noen ganger være forvirret over hvilket avsnitt i artikkelen du leser nå.

Oversiktsfunksjonen er gjennomtenkt utformet for å hjelpe deg med å flytte det du er interessert i.


☐ Trykk på Zoom-knappen  kort, så zoomer bildet ut til minimumsforstørrelsen med Oversiktsboksen ser ut til å markere tekstdelen du leste.

☐ Dra en finger over skjermen eller skyv joysticken  for å endre posisjonen til Oversiktsboksen.



- ❑ Roterer du zoom-knappen,  kommer du raskt tilbake til boksens opprinnelige posisjon. Skyv joysticken i  en hvilken som helst retning og trykk ned Zoom-knappen  for å sentrere boksen på nytt.
- ❑ Trykk Zoom-knappen kort igjen  (eller dobbeltrykk på skjermen inne i boksen), så zoomer den uthevede konteksten inn til forrige høyere zoomnivå automatisk.

## Live Panorering




---

Ved et høyere zoomnivå, bruk skyvebevegelsen (eller bruk joysticken  ) for å navigere i bildet slik at du ser mer uten å flytte papiret.




### ● Endre panoreringshastigheten

- ❑ Skyv joysticken  i en hvilken som helst retning og vri på zoomknappen  for å åpne panoreringshastighets-linjen.



- ❑ Bruk skyvebevegelsen eller vri på Zoom-knappen  for å øke eller redusere panoreringshastigheten.
- ❑ Ingen operasjon i 5 sekunder eller kort trykk på Hjem/Avslutt-knappen  / Enter-knappen  eller trykk på det inaktive området for å lukke linjen for panoreringshastighet.



## ● Bildeposisjon

- ❑ Trykk raskt to ganger på bildesenteret for å sentrere bildet på nytt (eller skyv joysticken  i en hvilken som helst retning og trykk ned Zoom-knappen  samtidig).
- ❑ Trykk raskt på bildekanten to ganger for å hoppe til start-/sluttpunktet (eller skyv raskt joysticken  i samme retning to ganger)

## Fokuskontroll

---

Autofokussystemet fungerer godt i de fleste situasjoner. I tillegg finnes det noen metoder for å kontrollere fokuset.







- ❑ Trykk på skjermen i 2 sekunder for å aktivere fokuset manuelt (eller hold Focus Control-knappen inne lenge  i 2 sekunder).
- ❑ Trykk på  Fokus-knappen for å aktivere/deaktivere Autofokus. Å deaktivere autofokus er spesielt nyttig for håndskrift for å forhindre feilfokus på hånden eller pennen.

## Vippesystem


---

### ■ Innebygd kameravisning

- ❑ Når stativet åpnes/lukkes, vil enheten automatisk bytte mellom nærvisning og avstandsvisning.

- ❑ I Lupe-applikasjonen, trykk kort på Hjem/Avslutt-knappen  for å åpne Hurtigkontroll-linje
- ❑ Trykk på en av ikonene  /  /  (eller skyv joysticken  og trykk Enter knapp  ) for å bytte mellom Speilvisning, Nærvisning og Avstandsvisning.

### ■ Ekstern kameravisningsmodus



- ❑ Med det eksterne kameraet koblet til enheten, kan du trykke på Switch-knappen  bytte mellom det innebygde kameraet og det eksterne kameraet.
- ❑ Enheten kan automatisk bytte mellom Avstandsvisning og Fullsidevisning (håndskriftmodus) med avstandskameraet rett eller bøyd.




**Avstandsvisning**



**Fullsidevisning**



- ❑ I fullsidevisningen, trykk kort på Enter-knappen  (eller trykk på Hjem/Avslutt-knappen  for å åpne Kontroll-linjen og


trykk på roteringsikonet  for å justere bilderetningen. På minimum forstørrelsesnivå, trykk ned Zoom-knappen  første gang vil den zoome inn for å oppnå sidebreddejustering og fjerne den svarte kanten. Trykk på Zoom-knappen  igjen for å aktivere Oversiktsfunksjonen. LED-lyset på Camera Stick kan styres raskt




Kontrolllinje.






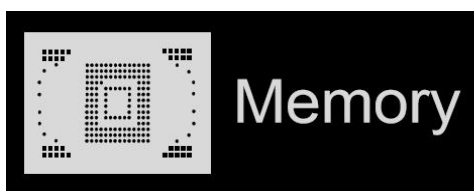


## Åpen applikasjon (Lagrede media)

---

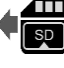


Det finnes to valg i Åpen applikasjon (lagrede media). Når det eksterne SD-kortet ikke settes inn i enheten, er kun ikonet for internt minne tilgjengelig. Med det eksterne SD-kortet satt inn, er ikonet for internt minne og SD-kortet tilgjengelig.

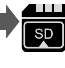












- Trykk på skjermen (eller vri knappen for Kontrast  ) for å bytte mellom de to valgene.
- Bilder og dokumenter i det interne minnet kan overføres til det eksterne SD-kortet når det settes inn. Velg det spesifikke bildet/dokumentet først og trykk deretter på Overføring ikonet  (eller trykk på frys bilde-knappen  ) for å starte.






- ❑ Bilder og dokumenter på SD-kortet kan overføres til enheten, og alt vil bli lagret i det delte bildet eller det delte dokumentet deretter. Velg det spesifikke bildet/dokumentet først og trykk deretter på Overføringsikonet , eller trykk på Frys bilde knapp  for å starte.
- ❑ Trykk lenge på en av Overføringsikonene  /  (eller lenge trykk på frys bilde-knappen ) i 3 sekunder, så vil hele bildet/dokumentet være valgt og overført mellom SD-kortet og enheten.
- ❑ Med flervalg aktivert, kan et par utvalgte bilder/dokumenter overføres samtidig ved å trykke på en av Overfør ikonene  /  (eller trykk på frys bilde-knappen ) for å få opp Bekreft-boksen.





## **Flervalg**

- ❑ I galleriet kan du trykke lenge på det spesifikke bildet/dokumentet (eller gjør et langt trykk på Enter-knappen  for å aktivere/deaktivere Flervalg).
- ❑ Med Flervalg aktivert, vil en liten boks dukke opp på nederste høyre hjørne av hvert bilde. Trykk (eller bruk joysticken , og trykk på Enter-knappen  for å velge bilder/dokumenter. Da kan du velge å overføre eller slette flere bilder.



- ❑ Trykk på det tilsvarende søppelboksikonet  (eller trykk på Leselinje/maske-knappen  ) Trykk på en av Overføringsikonene  /  (eller trykk på Frys bilde-knappen  ) for å åpne valgboksen. Trykk på ikonet i valgboksen (eller trykk på Enter-knappen  ) for å bekrefte sletting/overføring av alle valgte bilder/dokumenter. Trykk på Exit-ikonet  eller trykk på Hjem/Avslutt-knappen  for å gå tilbake til flervalget.
- ❑ Et langt trykk på skjermen igjen eller trykk på Exit-ikonet  (eller trykk på Hjem/Avslutt-knappen  eller lenge på Enter-knappen  ) for å avslutte Flervalg.



### **Åpen bilde (delt bilde)**

- ❑ Når du kommer inn i Åpen applikasjon fra startsidene, aktiver Bilde-ikonet for å gå inn i Bildegalleriet. Bla opp/ned i galleriet med skyvelinjen på høyre side av skjerm (eller bruk joysticken)
- ❑ Trykk for å markere miniatyrbildet og trykk på det igjen (eller trykk på Enter-knappen  ) for å se bildet.
- ❑ Du kan se og navigere i bildet med de samme operasjonene beskrevet i avsnittet Frys bilde. Trykk på Hjem/Avslutt-knappen  for å åpne Hurtigkontroll-linje
- ❑ Trykk på Hjem/Avslutt-knappen  for å åpne Hurtigkontroll-linje Trykk
- ❑ på ikon  /  for å bla opp/ned bildet (eller trykk på




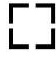
Switch-knappen  / Fokuskontrollknapp  ). Trykk på ikonene  /  for raskt å gå tilbake til det første eller siste bildet.




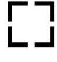
- ❑ Trykk på rotasjonsikonet  (eller trykk på frys bilde-knappen  ) for å rotere bildet, og den siste retningen lagres når du avslutter avspillingen.

**Merk:** I tillegg til fingerbevegelse på skjermen kan du bruke joysticken  og trykke på Enter-knappen  for å oppnå denne operasjonen.







- ❑ Trykk på Exit-ikonet  (eller trykk lenge på Hjem/Avslutt-knappen  ) for å gå ut fra galleriet.

- ❑ Når du er i galleriet, velg målbildet som må være



slettet, trykk på Søppel-ikonet  (eller trykk på Leselinje/maske-knappen  ), og den samme søppelmerkelappen vil dukke opp rett på bildet. Trykk på søppel-ikonet  igjen (eller trykk på Leselinje/maske-knappen  igjen) for å slette eller andre knapper/steder på skjerm for å avbryte.

- ❑ Når du er i galleriet, trykk på Søppel-ikonet  (eller hold inne Leselinje/maske-knappen  ) i 5 sekunder for å slette alle bildene. Trykk på søppel-ikonet  (eller trykk på Leselinje/maske-knappen  ) igjen for å bekrefte, eller på andre knapper/steder på skjermen for å avbryte.









- ❑ Med Flervalg aktivert, og alle målbildene Er valgt, trykk



på søppel-ikonet  (eller trykk på Leselinje/maske-knappen  ) og velg boksen. Trykk på søppelikonet  (eller trykk på /Enter-knappen  ) for å slette, og trykk på Exit-ikonet  (eller trykk på Hjem/Avslutt-knappen  ) for å avbryte.







### **Åpent document (delt document)**

- Når du kommer inn i Open Application fra startsidene, aktiver Dokumentikonet for å gå inn i dokumentgalleriet. Blad opp/ned i galleriet med skyvelinjen på høyre side av skjermen (eller bruk joysticken  ).
- Når man er i galleriet, kan overføring og sletting gjøres på dokumentene. Og operasjonene er de samme som ovenfor i Åpen bilde
- Trykk for å markere teksten og trykk igjen (eller trykk på Enter-knappen  ) for å spille av teksten.
- Enheten støtter TXT- og PDF-format av dokumentet. Det har også TTS-funksjonen. Vennligst se operasjonen nedenfor.










## TXT-format


- ❑ Hvis txt-filen har veldig langt innhold, vil den automatisk deles inn i sider. Trykk på Hjem/Avslutt-knappen  for å åpne kontrollen. Strek- og trykikon  /  for å bla opp/ned filen (eller trykk på Switch-knappen  / Fokus-knappen  ). Langt trykk på de to ikonene kan bla raskt om siden.
- ❑ Trykk på Hjem/Avslutt-knappen  for å åpne Hurtigkontroll-linje, trykk på Play-ikonet  (eller trykk på Enter-knappen  ) for å starte.

lesing. Trykk på pauseikonet  (eller trykk på Enter-knappen ) for å pause lesingen.




- Trykk på ikonet  for å endre størrelsen på ordene.
- Trykk på Exit-ikonet  (eller trykk lenge på Hjem/Avslutt-knappen , eller bruk joysticken og trykk på Tale/Enter-knappen ) for å avslutte.
- Aktiver dette ikonet , teksten vil bli omgjort til tale automatisk. Når du aktiverer dette ikonet , vil funksjonen slå seg av og du kan bla gjennom sidene raskt.

## PDF-format

- Trykk på Hjem/Avslutt-knappen  for å åpne kontrollinjen, trykk på ikonet  /  for å bla opp/ned filen (eller trykk på Switch-knappen  / Focus Control-knappen ). Langt trykk.
- De to ikonene kan bla om sidene raskt. Trykk på ikonet  /  for raskt å gå tilbake til første eller siste side.
- Hvis PDF-en har tekstinnhold, trykk på tale-ikonet,  vil det gå inn på TXT-formatsiden. Se denne operasjonen.
- Trykk på Exit-ikonet  for å gå ut til dokumentgalleriet.


**Merk:** SD-kortet støtter kun FAT32-format. I galleriet kan du raskt bla sidene ved å gli ned/opp på joysticken .

## Formathandling

I Open Application, trykk lenge på Line/Maske-knappen  knappen i 5 sekunder, vil Formatikonet  vises. Trykk på Leselinje/maske-knappen  igjen for å bekrefte formatet på de markerte mappene (Bilde eller Delt bilde og Delt dokument) og eventuelle

Andre knapper for å avbryte.


**Merk:** Alle bilder og dokumenter vil bli slettet etter denne handlingen. Vennligst kopier disse om nødvendig før denne operasjonen.

I Open-applikasjonen eller galleriet kan et kort trykk på Switch-knappen  raskt returnere til Forstørrelsesglass-applikasjonen.

## Innstillingsmeny

---


Gå inn i innstillingsmenyen fra startsidene. Det finnes tre settingsider som følger:

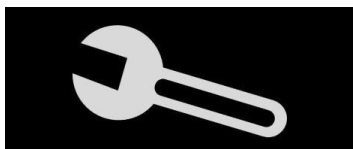





**Opsjonsside**

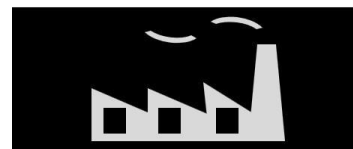

**Side for stemmeinnstilling  
Fabrikkinnstillingsside**








Trykk på en av ikonene (eller roter knappen for Kontrast  eller joystick ) for å bytte fra de 3 innstillingssidene.

- Trykk på skjermen for å markere og endre gjenstanden eller gå inn i undersiden (eller skyv på joysticken  for å markere og trykke på Enter-knappen ).

## **Valg-side**

- ◆ **Egne fargekombinasjoner** tilbyr de 16 forskjellige kontrastfargene, og brukerne kan tilpasse etter eget ønske.
- ◆ **Strømsparing** gir et alternativ om å ikke være i Handlinger i 5 minutter, deretter slår enheten seg av automatisk.
- ◆ **Touch-skjerm** gir mulighet for fingerbevegelsen på skjermen.
- ◆ **Taleguide** tilbyr et alternativ med menneskelige stemmeprompter etter hvert som operasjonen/statusen antyder.

## **Taleinnstillinger**

- ◆ **Stemmevalg** gir alternativer for mannlig og kvinnelig stemme. Fabrikstandarden er kvinnestemme.
- ◆ **Språkinnstillinger** gir de ulike språkvalgene.  
Trykk på skjermen eller bruk joysticken  for å velge målspråket og trykk på ikonet  (eller trykk på Enter-knappen ) for å bekrefte, eller ikonet  (eller trykk på Hjem/Avslutt-knappen ) for å avbryte.
- ◆ **Stemmehastighet** gir de tre stemmehastighetene: sakte, middels, rask.


## Fabrikkinnstillingsside

- ◆ **System resett** kan hjelpe med å gjenopprette til standard fabrikkinnstillinger. Automatisk avstengning når tilbakestillingen er ferdig.
- ◆ **Effektfrekvens** gir alternativer for 50 Hz og 60 Hz effektfrekvens avhengig av kundens region.

## HDMI-utgang




---

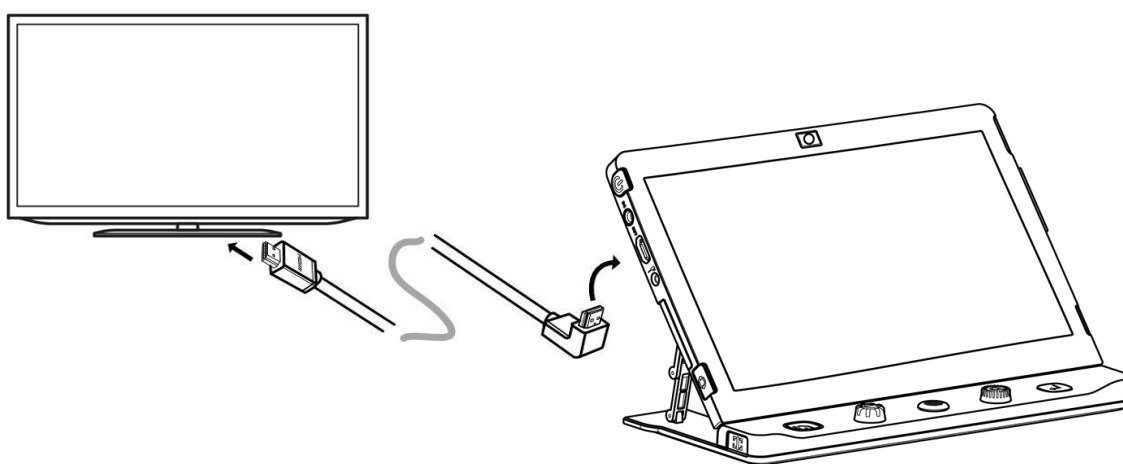Koble enheten til din eksterne skjermenhet med HDMI-kabel.



## Maskinvaretilbakestilling

---

Når enheten henger opp eller ikke kan slås av normalt, trykk på Power-  og Voice Opp-knappen  og Voice Down-knappen  samtidig for å utløse maskinvare-tilbakestillingen.

## Feilsøking

### Enheten slår seg ikke på

- Koble til strømadapteren
- Lad batteriet
- Maskinvaretilbakestilling

### Svart skjerm eller hvit skjerm

- Hvis enheten står på en flat, ren overflate eller det ikke er noe på brettet, kan skjermen være svart eller hvit.
- Juster forstørrelsen
- Juster contrast-modusen
- Start enheten på nytt
- Maskinvaretilbakestilling

### Bildet endrer seg ikke

- Hvis enheten går inn i fryst bilde eller avspillingsmodus, kan bildet endre seg ikke
- Start enheten på nytt
- Maskinvaretilbakestilling

### Flekker på skjermen

- Juster lysstyrken

- Rengjør LCD-skjermen og kameraet

#### **Bildet er ute av fokus**

- Sjekk om autofokusen er deaktivert
- Beveg hånden frem og tilbake over dokumentet du ser på for å utløse fokuset
- Trykk på skjermen i 2 sekunder for å aktivere fokuset manuelt

#### **Andre problemer**

- Gjenopprette til fabrikkinnstillinger i menyen
- Maskinvaretilbakestilling

Vennligst kontakt din lokale distributør hvis problemet ikke er løst.

# Spesifikasjon

- **Vise:** 12,5 tommers IPS berøringsskjerm, skjermopløsning: 1920\*1080
- **Kamera:** Ultra HD 4K-kamera, videoopløsning: 3840\*2160
- **Forstørrelse:** Nærbilde: 2,2x - 50x (flatt på bordet)
- **Fargemodus:** Nature Color, opptil 16 brukerdefinerte Kontrasts
- **Lysstyrke:** LCD-lysstyrke justerbar
- **Kontrast:** Kontrastjustering i Kontrast-modus
- **Panorering:** Live panorering; Frys/lagret bildepanorering
- **Snapshot:** Bildelagring, lagringskapasitet: omtrent 2 GB
- **Avspilling:** Bildeformat: JPG, BMP, PNG  
Dokumentformat: TXT, PDF
- **Lokalisere:** Linje-/maskefunksjon; Tekstflytting / Finn-funksjon
- **Lyd:** Stemmefeedback, boklytting
- **LED-lys:** Venstre/høyre lys på/av
- **Batteri:** Avtakbar, oppladbar Li-batteripakke  
4-4,5 timer (relevant for ulike bruksområder) kontinuerlig bruk  
2,5 timer full ladetid
- **Strømadapter:** Inngang: 100-240V; Utgang: 12V/3A
- **Dimensjoner:** <= 318\*245\*24mm (Enheten foldet)  
<= 318\*140\*170mm (Enhetsoppsett)
- **Vekt:** <= 1105g (batteri inkludert)