

Sight Care Looky 6

Digital lupe

Bruksanvisning

Rev A-1

Innhold

Forholdsregler	1
Rask start.	3
Oversikt	3
Selve enheten	5
Tilbehør	8
Stativ/Støtte	12
Håndtak	13
Operasjon	15

Av/på-knapp	15
Innstillinger Meny	17
Forstørrelse	19
Lysstyrke	20
Fargemodus	20
Belysning	22
Frys bildet	23
Bidlagring	24
Avspilling	27

Velg flere bilder	31
Leselinje og maske	33
Live panorering	35
Fokuskontroll	36
USB-overføring	37
Skjerminnstilling frekvens.	39
Minne.	39
Automatisk strømsparing	40
Gjenopprett.	40

Maskinvaretilbakestilling	41
Feilsøking	42
Enheten slår seg ikke på	42
Svart skjerm eller hvit skjerm	42
Bildet endrer seg ikke	43
Flekker på skjermen	44
Spesifikasjoner	45

Forholdsregler



Før du bruker Clover 6 for første gang, må du lade batteriet. Se avsnittet **om batteri og lading** for mer informasjon.



Bruk alltid enheten på et sted hvor temperaturen er mellom 10° og 35°C (50° og 95°F).



Hold enheten unna våte områder, regn og andre kilder til væske.



Ikke forsøk å reparere enheten. Ethvert uautorisert forsøk vil ugyldiggjøre produktgarantien. Kontakt distributøren din for service.



Bruk den medfølgende strømadapteren og batteriet.

Rask start

Oversikt


Looky 6 er et håndholdt videoforstørrelsesglass, og alle operasjoner støttes av de høykontrast taktile knappene. Utstyrt med 1080P FHD-berøringsskjerm gir håndbevegelser enklere og mer naturlig tilgang til visse funksjoner.

To 13M-kameraer og rask brytermekanisme for å dekke kravet om full avstandsvisning. Når du står på

bordet, avsløres fantastiske detaljer med 2–35 ganger tapsfri forstørrelse.

Håndtaket er fleksibelt nok til å kunne roteres i alle vinkler og tilfredsstillende alle krav til feste, noe som også er vennlig for venstrehåndsbrukere. Gjør håndtaket om til et stativ for komfortabel skrivebordslesing.

Selve enheten

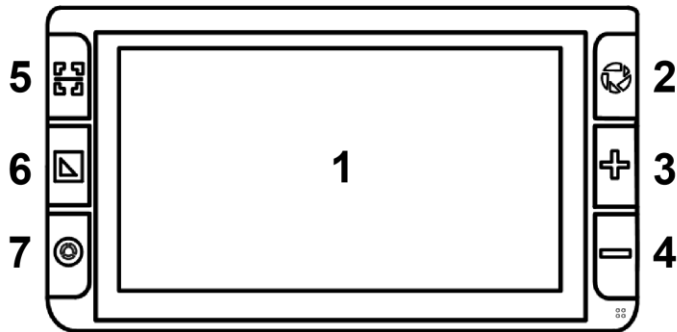

1. LCD-skjerm

2. Frys bilde


3. Zoom inn

4. Zoom ut

5. Leselinjer

6. Endre kontrast

7. Naturlig farge

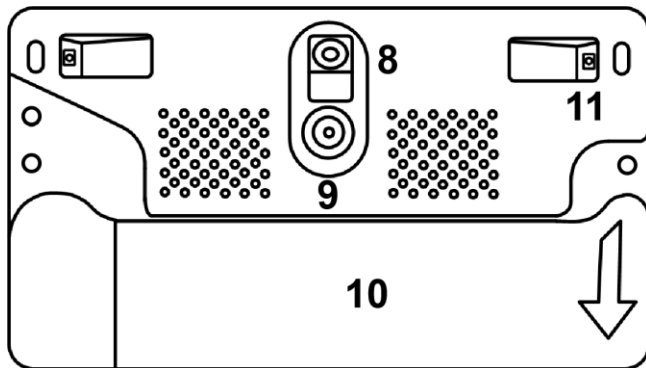


8. Nærkameraet

9. Avstandskamera

10. Håndtak/stativ

11. LED-lys

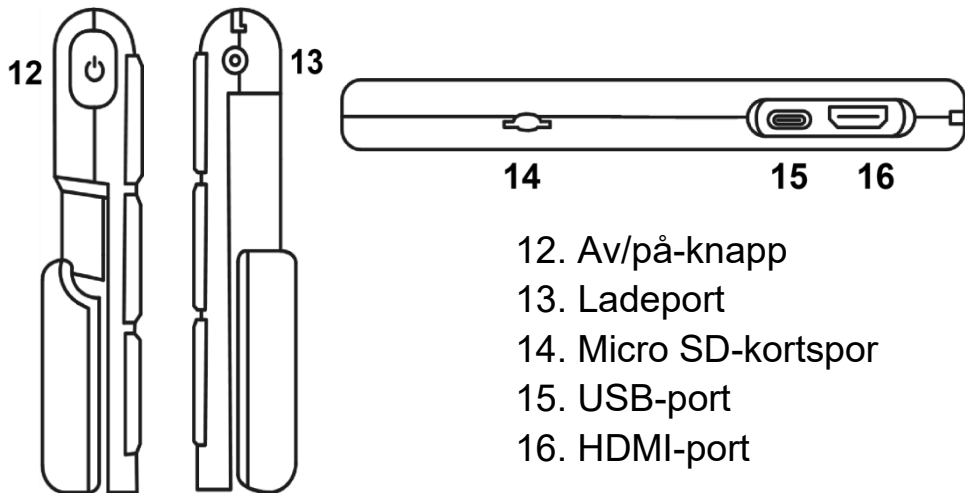

12. Av/på-knapp

13. Ladeport

14. Micro SD-kortspor


15. USB-port

16. HDMI-port

Tilbehør



Brukerveiledning

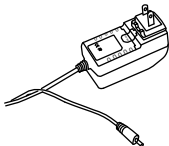

Strømadapter




Rengjøringsklut



Stropp




Etui

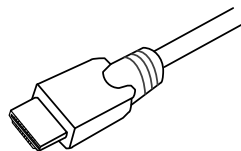

HDMI-kabel

Lading av batteriet

Koble den medfølgende strømkabelen til enhetens ladeport, og koble strømadapteren til en stikkontakt for å starte ladingen.

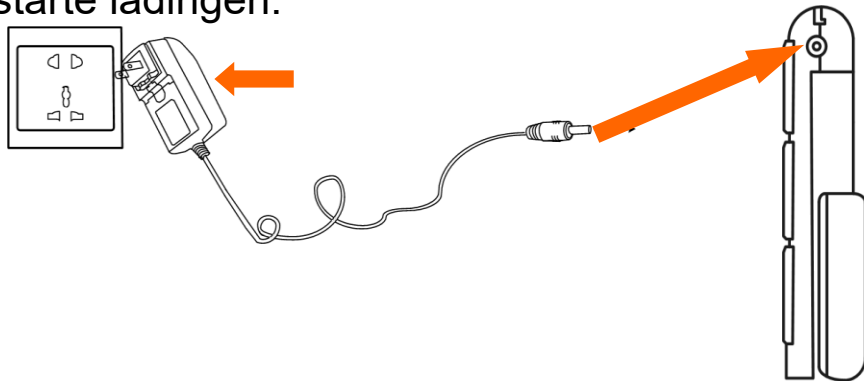

Ladeport-LED


- Når jeg lader når enheten er av, vil ladeport-LED-en være grønn, og så slå den seg automatisk av når den er fulladet. En full lading tar omtrent 2.5 timer, og vil støtte enheten som jobber kontinuerlig i omtrent 3 timer
- Når den lader når enheten er på, vil ladeport-LED-en være grønn
- Når enheten er på og strømforsyningen ikke er tilkoblet, vil ladeport-LED-en være grønn når batteriet er høyt og rødt når batteriet er lavt. Når

det røde lyset begynner å blinke, må du lade batteriet.

- Når du er i dvalemodus, vil LED-lyset være gult.
- Du kan også sjekke batteristatusen ved å trykke på **av/på-knappen**.


Stativ/støtte

Brett ut håndtaket som følgende figur viser.

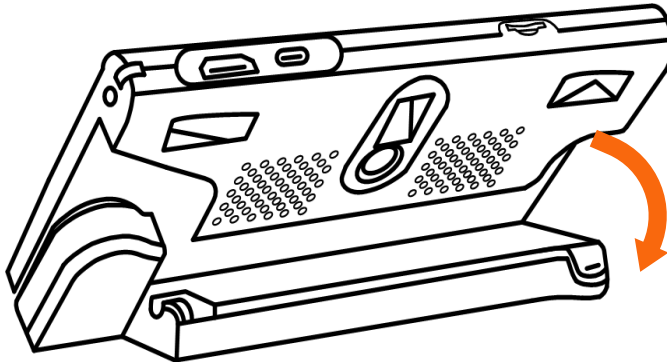


Håndtak

Vri håndtaket slik bildet viser, og hold det i den mest komfortable posisjonen.

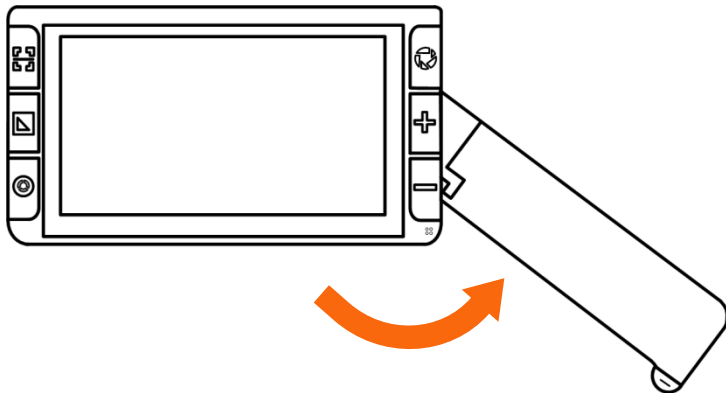



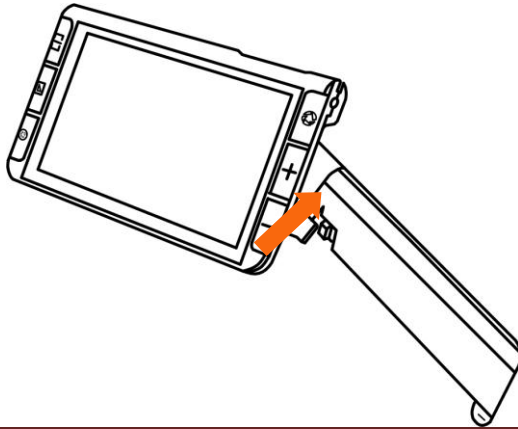



Når håndtaket er åpent som bildet viser, vil enheten automatisk bytte fra avstandskamera til nærkamera.





Operasjon

Av/på-knapp

- ❑ Hold inne av/på-knappen  i 2 sekunder for å slå på enheten.
- ❑ Trykk og hold inne av/på-knappen  i 2 sekunder når den er på for å komme inn i velg side: Sovemodus  eller slå av . Trykk på Sovemodus-ikonet  eller ingen operasjon på 3 sekunder for å komme i sovemodus. Når du er i

dvalemodus, hold inne av/på-knappen i  3 sekunder for å vekke enheten.

- ❑ Når enheten er på, trykk på strømknappen  for å gå inn i Innstillinger-menyen.
- ❑ Trykk på andre knapper når du holder inne Power-knappen  vil få kombinasjonen til å fungere, se følgende instruksjoner for mer informasjon.

Innstillingsmeny

- Skyv den kontrollinjen for å justere volum eller lysstyrke.



Volumkontroll-linje



Lysstyrkekontroll-linje

- Trykk på det spesifikke ikonet for å aktivere/deaktivere innstillingen.



Autofokus




LED-lys



Vibrasjon






Strømsparing

- Ingen operasjoner i 8 sekunder eller kort trykk på av/på-knappen  for å avslutte.

Forstørrelse





- ❑ Trykk på Zoom Inn-knappen \oplus / Zoom ut-knappen \ominus for å øke/reducere forstørrelsen, og hold inne knappen for kontinuerlig øking/reduksjon.
- ❑ I tillegg til zoomknappen, bruk klem- og zoom-bevegelsen på berøringsskjermen for å justere zoomnivået.
- Forstørrelsesområde: 2x – 35x (nært syn)



Lysstyrke

I tillegg til kontrollinjen, hold inne strømknappen  og trykk på Zoom Inn  /Zoom ut-knappen  for å øke/redusere skjermlysstyrken.



Fargemodus


En fargemodus er en forhåndsdefinert fargekombinasjon. Fullfargemodus egner seg for bilde- og kartvisning, og forbedret kontrastmodus kombineres med ulike forgrunns- og bakgrunnsfarger og kan hjelpe til med å lese klart.

- ❑ Trykk på knappen for kontrast  for å bla gjennom fargekombinasjonslisten
- ❑ Trykk og hold inne knappen for kontrast  i 3 sekunder for å komme inn på siden for tilpasset farge, bruk trykk-gesten for å aktivere/deaktivere den forbedrede fargekombinasjonen.
- ❑ Ingen operasjoner i 8 sekunder eller trykk på Avslutt-ikonet  eller lenge trykk på knappen for kontrast  for å avslutte Tilpasset farge-siden.

- ❑ Trykk på Naturlig farge-knappen  for raskt å gå tilbake til fullfargemodus.
- ❑ Trykk på knappen for kontrast  , og zoom inn/ut kan justere kontrastfargen.

Belysning


I tillegg til innstillingsmenyen, hold inne av/på-knappen  og trykk på frys-knappen  for å slå på/av LED-lysene.

Og venstre/høyre LED-lys kan styres separat ved å trykke på det tilhørende ikonet .

Frys bildet



Å fryse et bilde på LCD-skjermen kan være nyttig for videre lesing, samt for å zoome inn eller ut eller endre fargemodus for bedre utsikt.

Lysstyrkejustering er ikke tillatt når man Frys bildet.


- Trykk på Frys bilde-knappen  for å låse/låse opp bildet.

- ❑ For det låste bildet med økt forstørrelse kan du bruke gesten til å navigere fritt.

Bildelagring

- ❑ Hold inne Frys bilde-knappen  i 3 sekunder for å lagre det nåværende bildet.
- ❑ Ikonet for stemmeopptak vil dukke opp etter lagringen. Trykk og hold mikrofonikonet for å starte opptaket, og slipp ikonet for å fullføre (eller trykk på Leselinje-knappen  for å ta opp).



- Du kan spille av den innspilte stemmen ved å trykke på Play-ikonet (eller trykke på Frys bildeknappen ).



- Du kan gjenta opptaket av stemmen, men bare det siste opptaket lagres sammen med bildet.
- Ingen operasjoner på 5 sekunder eller trykk på et annet inaktivt område eller trykk på strømknappen


⏻ for å lukke.


- ❑ For bedre opptakskvalitet, vennligst nærm deg mikrofonen slik bildet viser og snakk høyt.






Merk: Når de lagrede bildene når maksimal kapasitet (2 GB, ikonet for minne fullt vises), må du slette noen bilder først i avspillingsmodus før neste vellykkede lagring.




Avspilling





- Trykk på Naturlig farge-knappen  i 3 sekunder for å gå inn i bildegalleriet. Bla opp/ned galleriet via skyvelinjen på høyre side av skjermen (eller trykk på Zoom-knappen).
- Trykk på bildet for å velge (eller trykk på Zoom-




knappen). Miniaturbildet med stemmeetiketten kan spille av den innspilte stemmen ved å trykke på stemmeikonet øverst til høyre. Trykk igjen (eller trykk på frys-knappen ) for å spille av bildet.

❑ Du kan se og navigere i bildet med de samme operasjonene beskrevet i Frys bildet. Trykk på Frys-knappen  for å gå tilbake til galleriet.




❑ Når du er i galleriet, velg målbildet som må slettes, trykk på papirkurv-ikonet  (eller trykk på Leselinje-knappen ) , og den samme papirkurv-



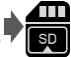


etiketten vil vises rett på bildet. Trykk på papirkurv-ikonet  igjen (eller trykk på Leselinje-knappen igjen ) for å slette eller trykk på av/på-knappen /andre steder på skjermen for å avbryte.

- Når du er i galleriet, trykk på papirkurv-ikonet  (eller hold inne Leselinje-knappen ) i 5 sekunder for å slette alle bildene. Trykk på papirkurv-ikonet  (eller trykk på Leselinje-knappen ) igjen for


- å bekrefte, eller trykk på av/på-knappen / andre steder på skjermen for å avbryte.
- Bilder kan overføres til det eksterne SD-kortet når det settes inn. Velg det spesifikke bildet først og trykk deretter på Overføringsikonet  for å starte.
 - Trykk lenge på Overføringsikonet  i 3 sekunder, alle bildene vil bli valgt og overført til det eksterne SD-kortet.

Velg flere bilder


- Når du er i galleriet, trykk lenge på et spesifikt bilde (eller hold inne frys-knappen  i 3 sekunder) for å aktivere/deaktivere Flervalg.
- Med Flervalg aktivert, vil en liten boks vises nederst til høyre i hvert bilde. Trykk (eller bruk Zoom-knappen og Frys-knappen ) for å velge alle målbildene. Deretter kan du overføre eller slette flere bilder.
- Trykk på det tilsvarende søppelkurv-ikonet 

- /Overfør-ikonet  for å åpne valgboksen. Trykk på ikonet i valgboksen for å slette/overføre alle de valgte bildene. Trykk på  Exit-ikonet eller trykk på Power-knappen for å gå tilbake til flervalget.
- Lang trykk på skjermen eller trykk på Exit-ikonet  igjen (trykk på Power-knappen  eller lenge på Frys bilde-knappen ) for å avslutte Flervalgmodusen.


Linje og maske

Trykk på Leselinjer-knappen  for å bytte mellom ulike leselinje- og maskemoduser. Live-panorering-funksjonen er fortsatt tilgjengelig.


- **En horisontal linje**

- Trykk og hold inne Leselinjer-knappen  og skyv opp/ned for å endre posisjonen til horisontal leselinje; venstre/høyre for å redusere eller øke bredden på linjen.


- **En vertikal linje**

☐ Trykk og hold Leselinjer-knappen  og skyv til venstre/høyre for å endre posisjonen til den vertikale leselinjen; opp/ned for å øke/ redusere bredden på linjen.

● **Horisontal maske**

☐ Trykk og hold Leselinjer-knappen  og skyv opp/ ned for å endre maskenes posisjon; venstre/høyre for å snevre/forstørre avstanden mellom maskene.

● **Vertikal maske**

- Trykk og hold Leselinjer-knappen  og skyv til venstre/høyre for å endre maskenes posisjon; opp/ned for å forstørre/snevre avstanden mellom maskene.

Live panorering



På det høyere zoomnivået, bruk skyvebevegelse for å navigere i bildet slik at du ser mer uten å flytte papiret.

- Trykk raskt to ganger på bildets sentrum for å sentrere bildet.
- Trykk raskt to ganger på bildekanten for å hoppe til start-/sluttpunktet.

Fokuskontroll

Autofokussystemet fungerer godt i de fleste situasjoner. I tillegg finnes det noen metoder for å kontrollere fokuset.

- Trykk på skjermen i 2 sekunder for å aktivere fokuset manuelt.


- ❑ I tillegg til innstillingsmenyen, trykk på Power-knappen  og Leselinjer-knappen  for å aktivere/deaktivere autofokus. Å deaktivere autofokus er spesielt nyttig for håndskrift for å forhindre feilfokus på hånden eller pennen.

USB-overføring



Koble enheten til PC-en via USB-kabel. Bildene kan overføres fra enheten til PC-en.

HDMI-utgang

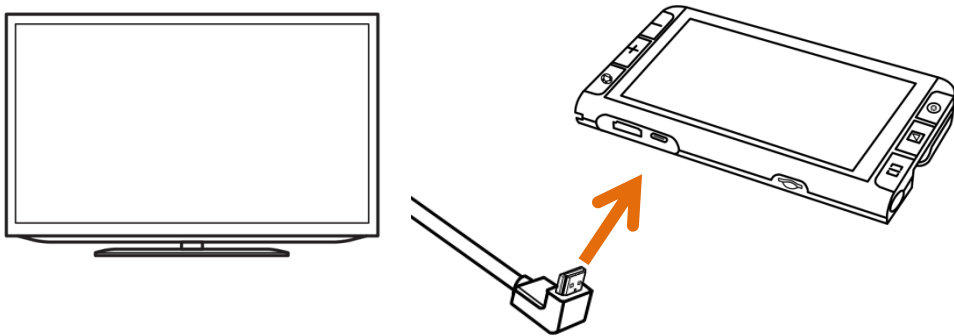Koble til den eksterne skjermen for en bedre og større visning.



Skjerminnstilling frekvens

Oppdateringsfrekvens gir alternativer for 50 Hz og 60 Hz. Oppdateringsfrekvens er avhengig av kundens region. Å holde på av/på-knappen  + Kontrast-knappen  i 3 sekunder kan justere frekvensen.

Minne



Enheten vil automatisk memorere de nyeste innstillingene som fargemodus, forstørrelse, pipelyd

når den slås av som vanlig, og bruke dem ved neste påslagsprøve

Automatisk strømsparing




Hvis ingen drift og ingen bevegelse i over 5 minutter, vil enheten automatisk gå i dvalemodus og slå seg av etter 10 minutter uten videre drift.

Gjenopprette

- Hold inne Frys-knappen  og Leselinjer-knappen  samtidig i 3 sekunder for å

tilbakestille til standard fabrikkinnstillinger.
Automatisk avstengning når tilbakestillingen er ferdig.

Maskinvaretilbakestilling

Når enheten er hengt opp, trykk samtidig på av/på-knappen  + Zoom inn-knappen () + Zoom ut-knappen () for å gjøre maskinvaretilbakestillingen.

Feilsøking

Enheten slår seg ikke på

- Koble til strømadapteren
- Lad batteriet

Svart skjerm eller hvit skjerm

- Hvis enheten står på en flat, ren overflate, kan skjermen være svart eller hvit. Løft av enheten for å sikre at det skjer endring.
- Juster forstørrelsen

- Juster fargemodusen
- Når enheten er koblet til TV-en, er skjermen svart
- Start enheten på nytt

Bildet endrer seg ikke

- Hvis enheten er i fryst bilde-modus, vil ikke bildet endre seg
- Trykk på av/på-knappen for å sjekke gjeldende status
- Start enheten på nytt

Merker eller flekker på skjermen

- Juster lysstyrken
- Rengjør LCD-skjermen og kameraet

Vennligst kontakt din lokale distributør hvis problemet ikke er løst.

Spesifikasjoner

- **Vise:** 5,5 tommers IPS berørings skjerm, antirefleks
Skjermopløsning: 1920*1080
- **Kamera:** Dobbel 13M autofokuskamera
Videopløsning: 1920*1080
- **Forstørrelse:** Omtrent 2x ~ 35x
- **Fargemodus:** Naturfarge
Opptil 16 brukerdefinerte forbedrede

- **Lysstyrke:** farger LCD-lysstyrke justerbar
- **Videomodus:** Nærsyn, Avstandsutsikt
- **Vibrasjon:** Skjermvibrasjonsfeedback Av/på/av-kontroll
- **Snapshot:** Bildelagring og avspilling
Lagringskapasitet: omtrent 2 GB
- **Lokalisere:** Leselinje/maske-funksjon
- **Størrelse:** $\leq 160 \times 91 \times 21$ mm (Enheten foldet)
- **Vekt:** < 270 gram (batteri inkludert)
- **Batteri:** Nesten 3 timers kontinuerlig bruk

- **Strømadapter** Lader om omtrent 2,5 timer
Inngang: 100-240V; Utgang: 5V/3A