


Nimbus 4 & Nimbus Professional


Montere madrass og pumpe

1

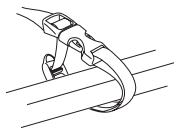


Legg madrassen på sengebunnen, med slangesettet og HLR i fotenden. Bruk festestroppene til å feste madrassen til sengerammens bevegelige deler.

2

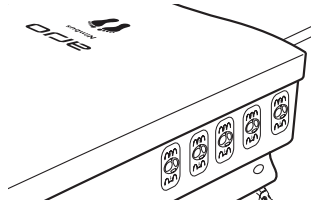


Lukk det beskyttende trekket med glidelås over madrassen slik at Arjo-logoen er synlig og plassert i fotenden.

3

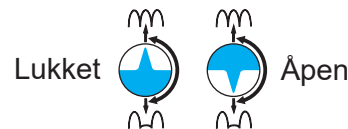


Kontroller at alle luftventilene er lukket.

4

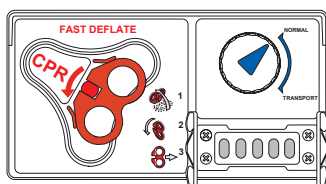


Sjekk at transportkontrollen er stilt inn på Normal og HLR-kontrollen er lukket og låst fast.

5

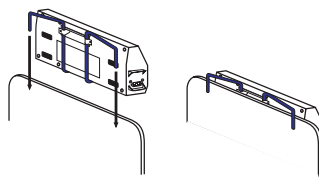


Fest sengebraketten til sengerammen, eller sett pumpen under sengen.

6

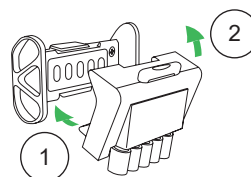

Koble slangesettet til pumpen og madrassen.

7

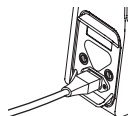


Koble strømledningen til pumpen og til et strømuttak.

8



ADVARSEL

Strømledningen og slangesettet må plasseres slik at snublefare unngås, og ute av veien for bevegelige mekanismer på sengen eller andre steder der de kan hekte seg fast.

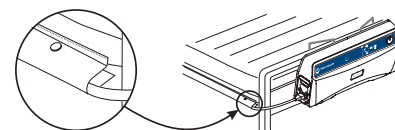

Før strømledningen langs siden av madrassen og fest klaffen ved hjelp av trykkstiftene.

Blås opp madrassen

1




ADVARSEL

HLR-kontrollen må hele tiden være synlig og tilgjengelig.


- HLR-kontroll lukket og låst på plass.
- Transportregulator stilt til Normal.
- Alle luftventiler lukket.

2

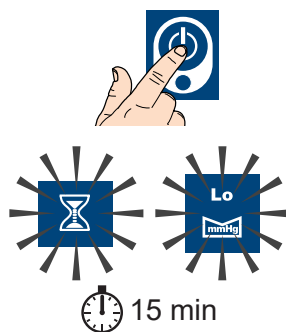

Trykk på Kjør/standby-knappen. Vent til madrassen er blåst helt opp.


3

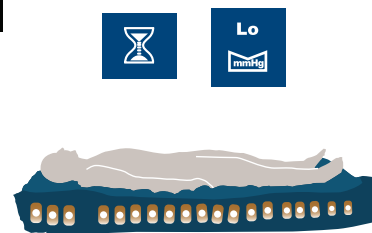

Legg pasienten på madrassen i ryggeleie (med ansiktet opp) når indikatoren for Vent og Lavt trykk er slukket. Standardinnstillingen er Dynamisk modus (alternerende trykk).


Aktivere HLR-enhet

1

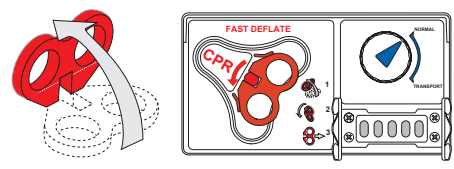


Løft det røde håndtaket på kontrollpanelet ved madrassens fotende.

2

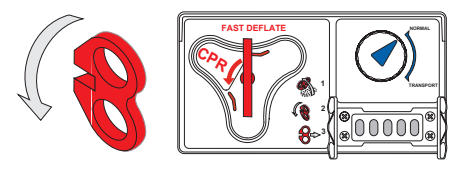

Drei håndtaket mot klokken.

3

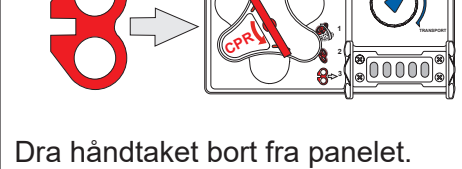

Dra håndtaket bort fra panelet. Den grå, trekantede tetningen roteres, og luften går ut av madrassen.

Nullstille HLR-enhet

1

Drei den grå trekantede tetningen med klokken og skyv den inn på koblingsstykkene.

2



Drei det røde håndtaket med klokken.


3



Fold håndtaket flatt for å låse det i ønsket posisjon.


Velge transportmodus

1

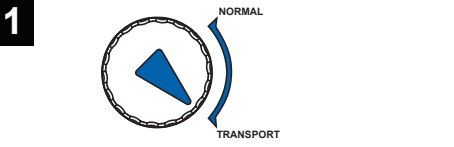


Drei transportregulatoren til Transport.

2



Slå av pumpen.

3

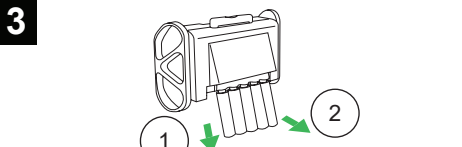

Koble fra slangesettet
Madrassen støtter pasienten i opptil 12 timer.


Gjenoppta normal funksjon

1



Koble til slangesettet igjen.

2

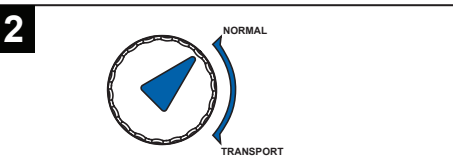

Drei transportregulatoren til Normal.

3



Slå på pumpen.

Rengjøring og desinfeksjon

Rengjør og desinfiser mellom pasienter og regelmessig mens produktet er i bruk.



ADVARSEL

Fjern den elektriske tilførselen til pumpen ved å koble strømledningen fra strømmettet før rengjøring.

Bruk alltid verneklær når du utfører dekontaminering.

Rengjøring

1. Rengjør alle eksponerte overflater og fjern eventuelle rester ved å tørke av med en klut som er fuktet med et nøytralt vaskemiddel og vann.
2. Tørk grundig. La ikke vann eller vaskemiddel samle seg på pumpen.

Kjemisk desinfisering

Bruk et klorutløsende middel, for eksempel natriumhypokloritt, med en styrke på 1000 ppm tilgjengelig klor (fra 250 ppm til 10 000 ppm avhengig av lokalt regelverk og kontamineringsstatus).

Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler (styrke 70 %) kan brukes som alternativ.

Hvis et annet desinfeksjonsmiddel velges, må kjemikalieleverandøren bekrefte at dette er egnet for bruk.

1. Tørk av alle rengjorte overflater med løsningen.
2. Tørk av med en klut fuktet med vann.
3. Tørk grundig.

Termisk desinfisering

Se etiketten for informasjon om vask av madrassstrekket.