

Ståstativ

for voksne og barn



gode ideer i praksis

HML Hjelpemiddel-leverandøren AS

Branderudveien 90, 2015 Leirsund

Tlf. 63870580, faks 63873246

E-post: firmapost@hml.no

Web: www.hml.no

Ståstativ HML




DELTA2004



Type KR204-S

DELTA2004 Evolution

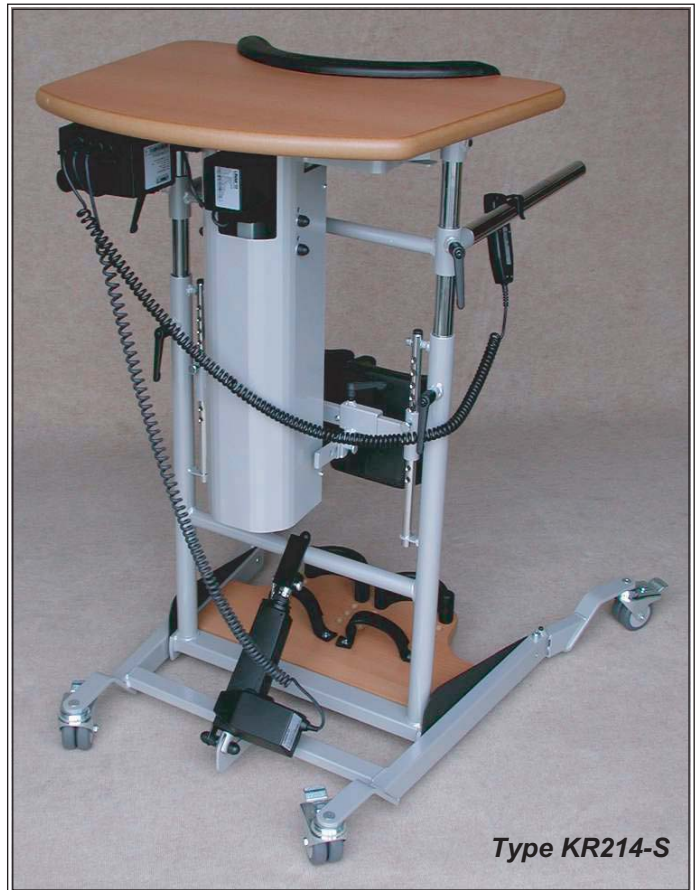

Type KR214-S

Art.nr. KR204-B (RTV.nr. 146707) **Ståstativ DELTA2004** har elektrisk optrekk

Art.nr. KR214-B (RTV.nr. 146280) **Ståstativ DELTA2004 Evolution** har elektrisk optrekk og tiltefunksjon

Tekniske data (Med forbehold om endringer.)

Lengde: 118 cm
Bredde: 77 cm
Høyde: 99 cm - 127 cm
Vekt: 58 kg

Standard strømstyrke: 230V / 50Hz
Effektforbruk: 120 VA
Brukers høyde: 140 cm - 200 cm
Brukers maksimumsvekt: 120 kg



HML Hjelpemiddel-leverandøren AS
Branderudvn. 90, 2015 Leirsund, Tlf. 63870580, Faks 63870581
E-post: firmapost@hml.no, Web: www.hml.no

NYHET!




Ståstativet "Delta Evolution", som har vippefunksjon, gir mer komfort for brukeren når man reiser seg opp, enn ståstativ med standarddesign. Armstøtter, knestøtter og fotplate bøyes mot pasienten før han reiser seg.

Hvordan man kommer seg opp i stående stilling ved bruk av "Delta 2004 Evolution", type KR-214-B/S



Oppreisnings Prosess:

- Tilt stativet bakover ved å trykke tast som vist på håndkontrollen.
- Klikk inn de to beltespennene i pasientens løfteseil.
- Stram inn beltetauene ved å det trykke tast som vist på håndkontrollen til tauene er strammet. Pasienten er ikke blitt løftet enda.
- Ved å trykke på stå-tasten, blir de to motorene aktivert samtidig og prosessen med å reise seg til stående stilling har begynt (ill. 9-12).

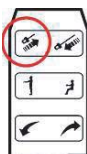

De bakre hjulfestene kan svinges ut for å gi plass til stoler som er ekstr brede, eller har brede drivringer.

Det kan selvsagt også brukes ekstrautstyr som hoftestøtte og rygg og bolstøtte på Ståstativet Delta 2004 Evolution

DELTA MANUELL, DELTA KIDS

STÅSTATIV

Ståstativ DELTA MANUELL

Utstyr:

- 4 transporthjul med full parkeringsbrems
- Høydejusterbar oppreisningshjelp
- Bord med bukpolster
- Fotplate med hælklapper og tåremmer
- Høydejusterbart bord med gassdemping
- Kneputer som kan justeres i høyde og dybde
- 2 parallelle justerbare håndtak



Type	Farge	Varenr.
DELTA	blå	KR-200-B
DELTA MANUELL Manuell oppreisningshjelp	blå	KR-202-B

Oppgi ønsket størrelse på brukerbelte ved bestilling.

Ståstativ DELTA KIDS

Utstyr:

- 4 transporthjul med full parkeringsbrems
- Høydejusterbar oppreisningshjelp
- Bord med bukpolster
- Fotplate med hælklapper og tåremmer
- Høydejusterbart bord med gassdemping
- Kneputer som kan justeres i høyde og dybde
- 2 parallelle justerbare håndtak



Type	Farge	Varenr.
DELTA KIDS	blå	KR-300-B
DELTA KIDS MANUELL Manuell oppreisningshjelp	blå	KR-303-B
DELTA KIDS ELEKTRISK Elektrisk optrekk med håndkontroll og sug/blås-styring	blå	KR-333-B

Oppgi ønsket størrelse på brukerbelte ved bestilling.

Ståstativ **compact** electric

Vesentlige fordeler:

- **sammenleggbar**
uten verkøy
på 30 sekunder med enkle grep
alle funksjoner blir klare
- **mindre plassbehov**
ved transport
ved lagring
- **svært lette materialer**
Vekt bare 35 kg



Ståstativ Compact electric
- Pasientvekt: maks 120 kg
- Pasientlengde: 140 cm - 200 cm
- 220V / 50Hz, 160W
- Farge: Gul
Art. nr. KR-500-G





- **Maks brukervekt 200 kg**
- **Ekstra bredt understell**
(passer for brukere med XL rullestol)
- **Stabil fotplate** (40mm Multiplex)
- **Ekstra brede håndtak** (61cm)



Ståstativ DELTA 2004 XL



Utstyr:

- 4 transporthjul med full parkeringsbrems
- 2 bakre hjulfester kan svinges ut
- Bord med bukpolster
- Fotplate med hælkipper og tåremmer
- Høydejusterbart bord med gassdemping
- Kneputer som kan justeres i høyde, bredde og dybde
- 2 parallelle justerbare håndtak
- Elektrisk beltetrekker med fjernkontroll
- Ramme i lakkert stål – farge RAL 7016


- Ekstra bredt understell (passer for rullestoler med opp til 70 cm hjulbredde)
- Ekstra stabil fotplate (40 mm Multiplex)
- Ekstra brede håndtak (61 cm klaring mellom håndtakene)
- Pasientvekt: Opp til 200 kg



Type	Farge	Artikkel Nr.
DELTA 2004 XL Elektrisk beltetrekker med brukerbelte*	grå	KR-216-B
Kneputer XL (kun til KR-216-X) Kraftigere utførelse Justerbar i bredde og dybde inntil 10cm		KR-850-X

*) Oppgi ønsket størrelse på brukerbelte ved bestilling

Fotbrettforhøyere ståstativ

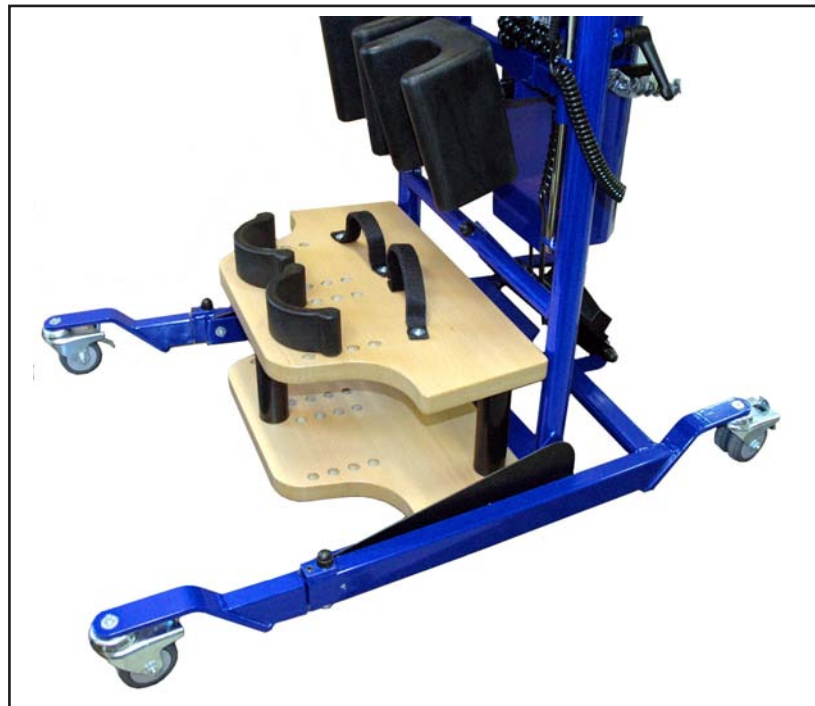

gode ideer i praksis

HML HJelpemiddel-leverandøren AS

Branderudveien 90, 2015 Leirsund

Tlf. 63870580, faks 63873246

E-post: firmapost@hml.no

Web: www.hml.no


Utstyr til Ståstativ HML



Hofstøtte	Art. Nr.
Holdestang med justerbare hofteputer	KR-620-X



Rygg og bolstøtte	Art. Nr.
Brukes sammen med hofstøtte KR-620-X Stangfeste: Krom Polster: Svart kunst skinn.	
Med rett vertikal stang Med bakover vinklet vertikal stang (Se bilde)	KR-630-X KR-631-X

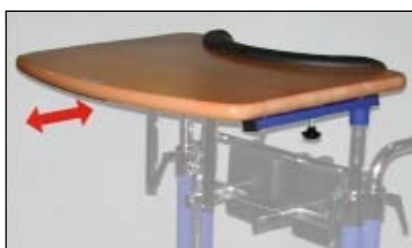

Justerbar bordplate	Art. Nr.
Bordplate som er justerbar (Se bilde) 6 cm horisontal justering.	
Bare til Classic og Delta ståstativ	KR-710-X



Justerbar fotplate	Art. Nr.
Fotplaten er justerbar (Se bilde) 10 cm horisontal justering	
Bare til Classic og Delta ståstativ NB! Ikke for Delta 2004	KR-720-X



Bordkanter	Art. Nr.
Kanter til bord av massiv bøk	KR-602-X



Bryststøtte	Art. Nr.
Brystputen er polstret med sort kunst skinn, og festes med klemmer. (Se bilde)	
Høyde 15 cm (målt fra overkant bordplate) Høyde 25 cm (målt fra overkant bordplate)	KR-744-X KR-745-X



	Str.	Art. Nr.
Hofte sete seil med setebelter	S M L	KR-618-X KR-617-X KR-616-X

CLASSIC MANUELL

CLASSIC ELEKTRISK



ÿ CLASSIC MANUELL, CLASSIC ELEKTRISK STÅSTATIV

Våre ståstativ er spesielt utviklet for å dekke funksjonshemmedes behov for å komme opp i stående stilling. Blodtrykk og blodsirkulasjon bedres. Skjelettet må ha trykk i lengderetningen for å danne ny bein substans og for å hindre osteoporose. Bra for mage og tarmfunksjon. Lungefunksjon bedres. Ved sittende stilling blir lungene og andre indre organer sammentrykket. Psykisk sett viktig å komme i øyekontakt med andre. Avlastning for ryggen, som ofte blir belastet ved at man sitter i en stol hele dagen. Balanse og muskler (ben, sete, mage og rygg) holdes vedlike. Aktiv stilling (stillingsendring) Strekke ut leddene (smertelindring, kontrakturprofylakse).

Ståstativ CLASSIC MANUELL

Utstyr:

- 4 transporthjul med full parkeringsbrems
- Høydejusterbar oppreisningshjelp
- Bord med bukpolster
- Fotplate med hælklapper og tåremmer
- Høydejusterbart bord med gassdemping
- Kneputer som kan justeres i høyde og dybde
- 2 parallelle justerbare håndtak

Type	Farge	Varenr.
CLASSIC	blå	KR-100-B
CLASSIC MANUELL Manuell oppreisningshjelp	blå	KR-101-B



Oppgi ønsket størrelse på brukerbelte ved bestilling.

Ståstativ CLASSIC ELEKTRISKÿ

Utstyr:

- 4 transporthjul med full parkeringsbrems
- Høydejusterbar oppreisningshjelp
- Bord med bukpolster
- Fotplate med hælklapper og tåremmer
- Høydejusterbart bord med gassdemping
- Kneputer som kan justeres i høyde og dybde
- 2 parallelle justerbare håndtak

Type	Farge	Varenr.
CLASSIC ELEKTRISK Elektrisk opptrekk med håndkontroll og sug/blås-styring	blå	KR-111-B



Oppgi ønsket størrelse på brukerbelte ved bestilling.



Positiv effekt ved å stå

Blodtrykk og blodsirkulasjon bedres

Skjelettet må ha trykk i lengderetningen for å danne ny beinsubstans og for å hindre osteoporose.

Bra for mage og tarmfunksjon

Lungefunksjon bedres. Ved sittende stilling blir lungene og andre indre organer sammentrykt

Psykisk viktig å komme i øyekontakt med andre, ikke bare "se opp" på andre sittende i en stol.

Avlastning for ryggen, som ofte blir belastet ved at en sitter i en stol hele dagen.

Muskeltrening (ben, sete, mage og rygg)

Trening av balanse

Aktiv stilling (stillingsendring)

Strekke ut leddene (smertelindring, kontrakturprofylakse)

Notater:



**HML HJELPEMIDDEL-
LEVERANDØREN AS**

Branderudveien 90
2015 Leirsund

T 63879004

F 63873246

firmapost@hml.no

Org.nr.: 971 581 417

www.hml.no

gode ideer i praksis



HML HJelpemiddel-leverandøren AS

Branderudveien 90, 2015 Leirsund

Tlf. 63870580, faks 63873246

E-post: firmapost@hml.no

Web: www.hml.no