



Etac Cross

Rullestolen med komfort,
funksjonalitet og gode kjøreegenskaper

 **etac**[®]
Mobility & Seating solutions

Etac Cross - komfort, funksjon og gode kjøreegenskaper



Å sitte funksjonelt og komfortabelt

Den unike 3A ryggen gir bedre plass til kroppens naturlige former, og støtter samtidig godt opp. Ryggen er enkelt innstillbar i høyde, dybde og form, dette gir brukeren enormt god komfort og sittestabilitet.



Kjøreegenskaper

Krysset i en allroundstol er avgjørende for hvor lettkjørt rullestolen er. Etac Cross dobbelt kryss og kopper som rammen hviler i, og i tillegg en ekstra avstiver mellom rammen og krysset. Disse tre faktorene gjør Cross til den stiveste sammenleggbare allroundrullestolen i Norge.



Aktivitetsnivå og selvstendighet

Etac Cross passer et bredt spekter av bruker aktiviteter. Rullestolen kan enkelt tilpasses både brukere som kjører selv og har et høyt aktivitetsnivå, og brukere som sitter i stolen gjennom hele dagen og har behov for god komfort.



Tilbehør

Etac Cross har et unikt tilbehørsprogram, som gjør at stolen kan tilpasses den enkelte brukers individuelle behov.

Se www.etac.no for oversikt over tilbehør.

Standard utførelse Cross

Ramme

Aluminium og stålrør.
Sammenleggbare, to rammelengder.

Bremser

Kneleddsbrems, høymontert.
Også på Cross med ledsagerbrems.

Kjørehåndtak

Høydejusterbare og avtagbare.

Rygg

Standard 40 cm, trinnløst justerbar
fra 30–45 cm

Ryggtrekk

Regulerbart med borrelås.
Ryggoverdrag i to-lags elastisk polyester.

Ryggvinkel hofte

Standard 2°, trinnløst justerbar -5 til +20°

3A rygg med ekstra lumbalvinkel

Monoangulær: fast 10°
Biangulær: standard 10°
trinnløst justerbar +/- 6°
Triangulær: standard 10°
trinnløst justerbar +/- 12°

Sete

Justerbart i høyde og vinkel, standard +2°

Setetrekk

Sort stoff.
Regulerbar setedybde 6 cm foran.
3A rygg: Ytterligere 6 cm regulerbar bak

Cambervinkel

Uten ledsagerbrems 2°
Med ledsagerbrems 0°

Drivhjul

24" drivhjul med hurtigkopling,
kompakte dekk, aluminium drivring

Svinghjul

6,5" allround (165x30 mm)

Framgaffel

Medium med stållaksel

Framgaffelfeste

Justerbar i høyde og vinkel

Benstøtter

Svingbare og avtagbare

Fotstøtte

Delte, oppfellbare fotplater,
regulerbare i høyde og dybde,
vinkeljusterbare

Armlener

Avtagbare, lengde 25 cm,
høydejusterbare

Maks brukervekt

125 kg / 150 kg

Etac Cross - mulighetenes rullestol

Cross kombinerer maksimal komfort med optimal funksjonalitet. Understellets unike stabilitet og stivhet gjør at Cross reagerer raskt i start og svinger. Både sete og rygg er regulerbart i høyde, vinkel og form. I kombinasjon med høyde-, dybde- og vinkelregulerbare fotstøtter gir det den stabilitet og komfort som er forutsetningen for mobilitet.



Gaffelfeste, høyde- og vinkelregulerbar. Bred utførelse.

Egenskaper

- Unike og enkle tilpasningsmuligheter
- God og funksjonell sittekomfort
- Lav rullemotstand
- Stabil og solid

Bruksområder

Etac Cross anbefales for personer som

- Har begrenset mobilitet
- Har behov for en funksjonell sittestilling
- Har behov for en komfortabel sittestilling
- Ønsker høy grad av selvstendighet
- Sitter i og er aktiv i stolen mange timer per dag

Mål og vekt Etac Cross og Etac Cross XL



Ramme	Setedybde	Setehøyde foran	Setehøyde bak	Ryggghøyde	Setebredde	Transport bredde	Maks brukervekt
kort	36–42 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	35–60 cm	32 / 22 ¹ cm	125 / 150 ² kg
lång	42–48 cm	38–51 cm	38–50 cm	30–45 cm	35–60 cm	32 / 22 ¹ cm	125 / 150 ² kg

Mål og vekt oppgitt for standard Cross modell. Avvik fra oppgitt mål og vekt kan være opp til +/- 2%.

¹ Transportbredde uten drivhjul er 22 cm.


² Fra og med setebredde 48cm maks brukervekt 150 kg.

Setedybden er målt fra ryggørret til seteputens forkant. Tenk på at setedybden øker når ryggtrekket slakkes.


Stoltype, modell	Setebredde	Vekt	HMS. art.nr.	Etac art.nr.	Cross 3A rygg HMS art.nr.	Cross 3A rygg Etac art.nr.
kort	35 cm	17,5 kg	003059	13120101	181043	27380
lang	35 cm	17,9 kg	003064	13120102	181043	27380
kort	38 cm	17,6 kg	003060	13120103	181044	27381
lang	38 cm	18,0 kg	003065	13120104	181044	27381
kort	40 cm	17,7 kg	003061	13120105	003061	27382
lang	40 cm	18,1 kg	003066	13120106	003061	27382
kort	43 cm	17,8 kg	003062	13120107	003062	27383
lang	43 cm	18,2 kg	003067	13120108	003062	27383
kort	45 cm	18,0 kg	003063	13120109	003068	27384
lang	45 cm	18,4 kg	003068	13120110	003068	27384
kort, XL	48 cm	18,6 kg	154721	13120113	181048	27385
lang, XL	48 cm	19,0 kg	154722	13120114	181048	27385
kort, XL	50 cm	18,5 kg	154723	13120111	181049	27386
lang, XL	50 cm	18,9 kg	154724	13120112	181049	27386
kort, XL	53 cm	19,0 kg	021484	13120115	181050	27387
lang, XL	53 cm	19,4 kg	021487	13120116	181050	27387
kort, XL	55 cm	19,1 kg	021485	13120117	181051	27388
lang, XL	55 cm	19,5 kg	021488	13120118	181051	27388
kort, XL	58 cm	19,3 kg	021486	13120119	181052	27389
lang, XL	58 cm	19,7 kg	021489	13120120	181052	27389
kort, XL	60 cm	19,4 kg	184656	13120121	181053	27390
lang, XL	60 cm	19,8 kg	184657	13120122	181053	27390




Rammefarger

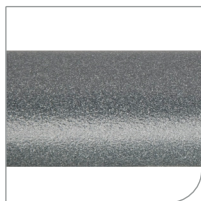


Mørk grå, matt -53 (leveres som standard)

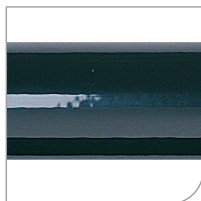


Sort -01

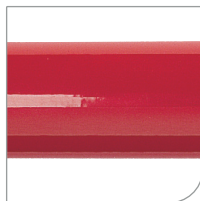


Rød -02

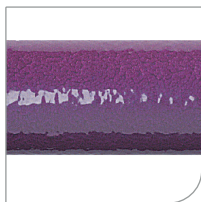


Plomme -34

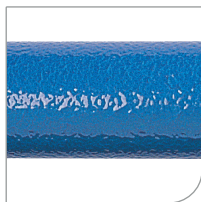

Blå -30

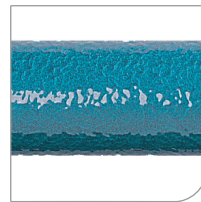

Sjøgrønn -33

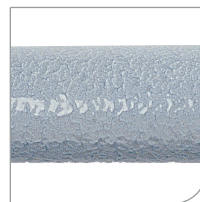

Grå -22

Etac AS

Postboks 249, 1501 Moss

Telefon 815 69 469

Faks 69 27 09 11

hovedkontor.norge@etac.com www.etac.no

 etac®