

# Stabilis Walker

Gåbordet Stabilis Walker er et hjelpemiddel i rehabiliteringen av pasienter. Det gir pasienten mulighet for trygg forflytning og stimulerer til økt bevegelse og økt sirkulasjon ved bruk av muskler.

- Tre forskjellige utførelser; med gassfjær, elektrisk og manuell
- Smal bunnramme
- Åpen konstruksjon
- Anatomisk utformet
- Solid og holdbart
- Enkelt å holde rent

Gåbordet har slitesterk overflate og er enkelt å rengjøre. Store og lett trillende hjul. De to bakerste hjulene er låsbare. Hjul med retningsstyring kan leveres som tilleggsutstyr.

Samtlige modeller har stillbare, skålformede underarmsstøtter med funksjonell innstilling.

Stabilis Walker tilbys i tre varianter; med gassfjær, elektrisk og manuell. Høydejusteringen på gassutgaven utføres med en justeringshendel plassert på topprammen slik at den er enkel å nå for så vel bruker som helsepersonell. Reguleringen av det elektriske gåbordet skjer via en håndkontroll. Det manuelle gåbordet justeres med en hendel som er plassert i front av gåbordet.

Gåbordene er CE-merket.  
De er testet og godkjent i hht. gjeldende standarder.

Gåbordet er produsert i Norge.



Gass



Elektrisk



Manuell

# Stabilis Walker


## Tilleggsutstyr



Håndtak, leddet  
Art. nr. 107-710855



Håndtak med el-kontroll  
Art. nr. 107-710863

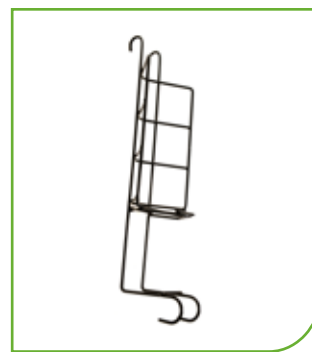

Oksygentank holder  
Art. nr. 107-710862



Infusjonsstativ  
Art. nr. 107-710858



Høydejustering til elektrisk gåbord  
Art. nr. 107-710818



Kurv  
Art. nr. 107-710859

## Tekniske data

Stabilis Walker	Gass	Manuell	Elektrisk
Høyde min/maks	88,6/129,7 cm	88/128 cm	92,8/128 cm
Pute bredde min/maks	62/81 cm	62/81 cm	62/81 cm
Lengde	79,5 cm	79,5 cm	79,5 cm
Vekt	14,7 kg	16,2 kg	20,6 kg
Maksimal brukervekt	150 kg	150 kg	150 kg
Min. snuradius bunnramme	100 cm	100 cm	100 cm
Bredde bunnramme (109-serien)	70 cm	70 cm	70 cm
Bredde bunnramme (110-serien)	80 cm	80 cm	80 cm
Innv. putemål min/maks	28,5/49 cm	28,5/49 cm	28,5/49 cm
Hjul	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm

## Artikkel nummer

Lev. art. nr.	Produkt
109-836	Stabilis Walker, std, manuell
109-838	Stabilis Walker, std, gass
109-845	Stabilis Walker, std, elektrisk
110-836	Stabilis Walker, bred, manuell
110-838	Stabilis Walker, bred, gass
110-845	Stabilis Walker, bred, elektrisk

Etac AS  
Postboks 249, 1501 Moss  
Telefon 815 69 469  
Faks 69 27 09 11  
hovedkontor.norge@etac.com www.etac.no

**etac**®

Mai 2013 Utgave 1