



riftonTRAM



- ✓ FORFLYTNING
- ✓ GÅTRENING
- ✓ SITTE TIL STÅ

ronda as
hjelpemidler


TRAM FUNKSJONER

NYHED



KROPSSTØTTESYSTEM

Rifton TRAM har et innovativt støttesystem, som sikrer brukeren med et enkelt håndgrep. Dette gjør at betjeningen hurtig og enkelt kan klargjøre for en sikker forflytning av en bruker.

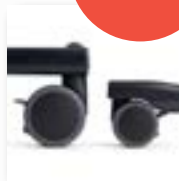


TRAM MED LAVT CHASSIS

Med 7,6 cm hjul-diameter og et lavere chassis kan Rifton TRAM kjøres under senger med en frihøyde på kun 10,5 cm.



INNEBYGGET VEKT INDIKATOR

Med innebygget vekt kan betjeningen enkelt veie en bruker under forflytning. Med vektindikator kan man også få avlest - og eller bestemme hvor mye bruker skal belaste sine føtter.

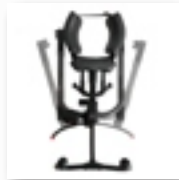

BENFORLENGERE

TRAM er kompakt med lav profil og kan lett passere en døråpning på 76 cm. Forflytning til og fra nye og breie kjørestoler gjøres lett ved å utvide benforlengerne. Låsbare forhjul gjør TRAM sikker og trygg.



FARGEKODE KLIPS

Betjeningen kan enkelt feste metalringene på de pasende klips. Klipsene har fargekode slik at man enkelt skal kunne notere hvilken tilpasning som brukes til den enkelte bruker.



TRINNLØS HEVER/TELESKOP

Den spesielle teleskoplift søyle - gir TRAM en lav profil, som igjen gir brukeren sikkerhet og verdighet med god oversikt og utsyn til betjeningen og omgivelsene. TRAM kan heves høyt nok til å støtte en gående bruker på 193 cm. Laveste mål på øvre kant av kropsstøtten er 70 cm (lav mod.) 77 (høy mod).



INNEBYGGET BRYTER FOR HEV/SENK

Hev og senk TRAM ved hjelp av en enkel knapp innebygget i det høyre styrehåndtag. NB. TRAM er ikke beregnet til å løfte en bruker fra gulvet. Til dette benyttes SoloLift.



FORFLYTNING

En av flere gode grunner til å innføre hjelpemidler i hjemmet, er vanskeligheter med toalettbesøk. TRAM gjør at forflytning til toalettet gjøres på en sikker og enkel måte med kun en hjelper. TRAM gir den perfekte sitte-til-stå løsning for brukeren som behøver hjelp for å komme opp og/eller støtte til å gå. TRAM er kompakt og fleksibel og dermed det ideelle hjelpemiddel i hjemmet.

GANGTRENING

TRAM er utstyrt med en behagelig gå-sal - sete og gir sikker støtte ved gange uten å kreve mer plass eller mer personale. Sete - fjerner brukers frykt for å falle, som igjen gir brukeren øket fokus på essensielle oppgaver, mens han/hun vedlikeholder eller oppøver evnen til å gå. Uansett om det er til daglig trening eller mere krevende - opptrening, så gjør TRAM's kombinerte - sitte-til-stå funksjon, og støtte til gangfunksjon, den til et viktig redskap i hjemmet og på institusjonen.

SITTE TIL STÅ

Evnen til å skifte mellom sittende og stående stilling er viktig for brukers uavhengighet og helbred. TRAMs gå-sal/sete gjør det lett for betjening å hjelpe en bruker med denne bevegelse - uansett brukers størrelse. Med TRAM er endring fra sittende til stående og tilbake igjen både sikker og enkel, selv med kun en betjening.

TILBEHØR TIL TRAM



riftonTRAM



TRAM-vekten gir mulighet for hjelperen å kunne veie brukeren under en rutineforflytning. Dette sparer en ekstra forflytning med henblikk på veiing. Vegten kan også vise under gange, hvor mye vekt brukeren selv bærer. Dette gir mulighet for å følge brukerens utvikling på dette felt.




Retningslås på hjulene gjør det mulig å kjøre TRAM gjennom en korridor uten trekk til siden. Låsene kan monteres på hvilket som helst hjul, flere hjul eller alle hjul. To låser anses for tilstrekkelig for å kjøre i rett linje. Låsen kan slås til eller fra, så manøvrering på trang plass alltid er mulig.



Underarmsstøtter gir ekstra støtte ved løft av bruker, som har liten kraft eller som må ha sine armer fastspendt. Støttene kan justeres i alle retninger og vinkler for å imøtekomme alle brukeres behov.

Dimensjoner	K305 small	K315 large
Pute	11 x 18 cm	13 x 22 cm
Justeringsinterval (albue til knyttet hånd)	20-32 cm	27 -41 cm

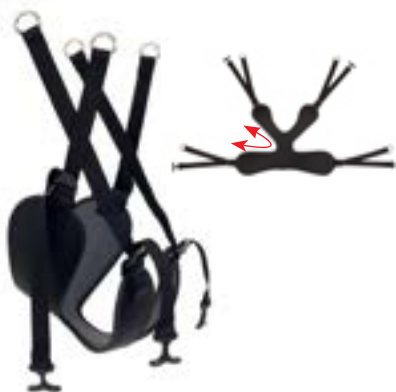

Gå-salen fås i tre størrelser og er beregnet til sitte-til-stå forflytninger og støtte gange. Hurtig montering ved å feste ringene til klipsene så fargekoderne passer. Merk at gå-salen passer brukeren best hvis selene er krysset, som på foto.

Brukermål	
Nøkkelmål for bruker: Halve lårets omkrets	
K306 small	10-20 cm
K316 medium	20-36 cm
K326 large	25-46 cm



Lårselene benyttes til sittende forflytning. De er maskinvaskbare for optimal hygiene, og det følger et sett med hver TRAM. Ekstra sett kan kjøpes, hvis det er et behov i forbindelse med vaske rutiner eller lignende. Selene er framstilt av vannavvisende coated nylon og er fargekodet for lett og feilfri montering.

SLIK BESTILLER MAN RIFTON TRAM

1) Velg model (standard eller lav model)

Med hver TRAM følger
to lårseler, et batteri, en batterilader,
en brukerveiledning og en tilbehørsveske.

2) Velg ytterligere tilbehør etter behov



Brukermåål (cm) K310 STD K320 LAV
Omkrets: 56-152 56-152

Brukers mål: Omkrets
Viktig: brukers vekt eller høyde må ikke
overstige henholdsvis 160 kg og 193 cm

Tram mål (cm)	K310 STD	K320 LAV
Lengde total:	116	samme
Bredde total:	70-102	samme
Høyde total:	110-147	samme
TRAM vekt:	32	samme
Snudiameter:	127	samme
Gulv til topp av chassis (passasje under møbler):	17,5	10,5
Min. høyde til brukers armhuler (gående/stående):	77	samme
Max. brukerhøyde (gående/stående):	193	samme
Max. arbeidsvekt:	160	samme

K310 Standard	NY! K320 Lav
HMI-nr. 84816	HMI-nr. 84896

PAKRÆVEDE DELE	VELG	VELG	
		K310	K320
Tram inkluderer to lårseler, et batteri, batterilader og Rifton tilbehørsveske	Tram med vøgt	<input type="checkbox"/> K301	<input type="checkbox"/> K321
	Tram uden vøgt	<input type="checkbox"/> K302	<input type="checkbox"/> K322
EI-kabel til batterilader	US standard Ikke Norge	<input type="checkbox"/> K303	<input type="checkbox"/> K303
	Europeisk standard	<input type="checkbox"/> K304	<input type="checkbox"/> K304
Underarmsstøtte (søet)	Small	<input type="checkbox"/> K305	<input type="checkbox"/> K305
	Large	<input type="checkbox"/> K315	<input type="checkbox"/> K315
Gå-sal (anbefales til gang og stå)	Small	<input type="checkbox"/> K306	<input type="checkbox"/> K306
	Medium	<input type="checkbox"/> K316	<input type="checkbox"/> K316
	Large	<input type="checkbox"/> K326	<input type="checkbox"/> K326
VALGFRI TILBEHØR	Ekstra batteri (anbefales til institusjons bruk)	<input type="checkbox"/> K307	<input type="checkbox"/> K307
	Ekstra lårseler	Enkelt	<input type="checkbox"/> K318
Par		<input type="checkbox"/> K308	<input type="checkbox"/> K308
Retningslås	Enkelt	<input type="checkbox"/> K309	<input type="checkbox"/> K323
	Par	<input type="checkbox"/> K319	<input type="checkbox"/> K324

ronda

Ronda AS

Randabergveien 308
4070 Randaberg

Tlf. 51 58 87 80
Mob. 91 57 20 71
Mail. post@ronda.no
www.ronda.no