

2020

BROSJYRE SENGER WI-BO



Wissner-bosserhoff

- ▶ Vi tilbyr et bredt utvalg av pleiesenger fra Wissner-bosserhoff
- ▶ Alle sengene er testet etter siste sengestandard
- ▶ Det er 15 års leveransegaranti på tilbehør og reservedeler
- ▶ Både senger og nattbord kan leveres med antibakteriell overflate ved bestilling på min. 20 stk
- ▶ Overflatene er 95 % sterile etter 180 minutter, dvs. større sikkerhet for både pasient og pleiere



■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

Functional elegance in nursing care



SALGSORGANISASJON

Tlf sentralbord: 38 14 48 00
Mail: hjelpemidler@varodd.no
www.varodd.no

Varodd Velferdsteknologi er en landsdekkende leverandør med et bredt sortiment av produkter til hjelpemiddelsentraler, kommuner, sykehjem og sykehus. Vi har vært leverandør av hjelpemidler til helse-Norge siden 1963 med mål om å gjøre hverdagen enklere!

SENGER MOVITA




Art.nr.	NAV Art.nr.	Beskrivelse
628000	232985	Pleieseng Movita 85 cm
628002		Pleieseng Movita 80 cm

- ▶ Standard farge bøk
- ▶ Integrert sengegrind som kan betjenes med en hånd
- ▶ Sengegrinden kan låses i tre forskjellige høyder
- ▶ Sengegrinden senkes under sengeflate som gjør inn- og utstigning enkel
- ▶ Sentralbrems med retningsstyring er standard
- ▶ Firedelt ergonomisk sengeflate
- ▶ Sengeflate kan forlenges til 220 cm
- ▶ Håndkontroll med sikkerhetsfunksjon
- ▶ 15 års leveransegaranti på tilbehør og reservedeler
- ▶ Kan leveres med ulike tresorter etter behov og ønske, se side 38

Mål og vekt

Lengde	218 cm	Madrassbredde Movita 80 cm	80 cm
Bredde	102 cm	Høyde sengeflate	38-82 cm
Bredde Movita 80 cm	97 cm	Løfteevne SWL	205 kg
Madrasslengde	200 cm	Brukervekt	170 kg
Madrassbredde	85 cm	Frihøyde over gulv	16 cm

Innebygget ryggtilbakeføring

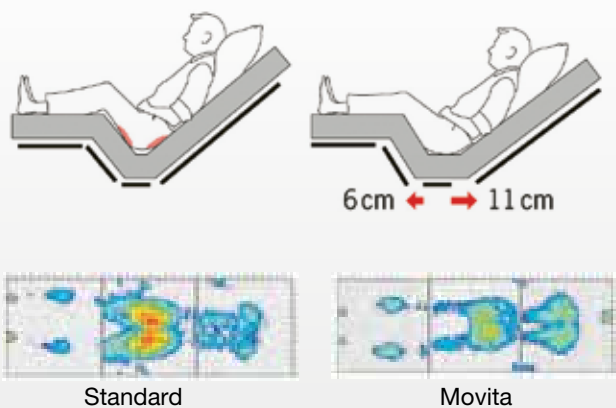

Movita har automatisk forlengelse av setedel når man regulerer hjerte Brettet i sittestilling slik at man får god sittekomfort og trykkfordeling.

Sentralbrems



Intelligent håndkontroll med sikkerhetsfunksjon (velg funksjon - aktiver).
Mulighet til å låse funksjonene.

Solide og pene gavler i bøk



SENGER SENTIDA 3



Art.nr.	NAV Art.nr.	Beskrivelse
628010	196524	Pleieseng Sentida 3 85 cm
628009	256389	Pleieseng Sentida 3 100 cm

- ▶ Standard farge memoriana
- ▶ Vertikaldelt sengegrind for større sikkerhet og lettere inn- og utstigning
- ▶ Sengegrind kan låses i tre nivå - maks høyde 40 cm
- ▶ Kan heves i begge ender (tiltes opp og ned)
- ▶ Firedelt ergonomisk sengeflate
- ▶ Større sikkerhet med fallforebyggende sengeflatehøyde på kun 25 cm
- ▶ Komfortabel og ryggbesparende pleie med sengeflatehøyde på inntil 80 cm
- ▶ Komfort - og liggesår forebyggende funksjoner
- ▶ Sengeflate kan forlenges til 220 cm
- ▶ 15 års leveransegaranti på tilbehør og reservedeler
- ▶ Kan leveres med ulike tresorter etter behov og ønske, se side 38

Mål og vekt

Lengde	216 cm	Madrassbredde Sentida 3 100	100 cm
Bredde	103 cm	Høyde sengeflate	25-80 kg
Bredde Sentida 3 100	116 cm	Løfteevne	225 kg
Madrasslengde	200 cm	Brukervekt	190 kg
Madrassbredde	85 cm		

Sikkerhet og komfort

Vertikaldelt sengegrind med fire høydenivåer

1

De vertikaldelte sengegrindene har en avrundet toppliste i tre, i nederste posisjon ligger grinden ca 10 cm under madrassens overflate. Det betyr enkel tilgang for pleiepersonalet som skal utøve sine daglige oppgaver som stell og pleie av pasienten eller for eks. bytte av sengetøy.

4 nivå av beskyttelse




Ikke behov for beskyttelse



4 fordeler



Ingen barrierer

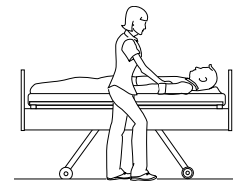

2


For sikkerhet om natten kan det være tilstrekkelig å kombinere lav posisjon av sengen med øvre del av sengegrinden i første høydenivå. Med denne "soft" løsningen unngås unødvendige hindringer for pasienten, samtidig som fallrisiko blir redusert.

Soft beskyttelse



Orientering

Frihet for pasienten

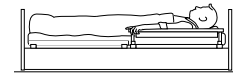

3


Med øvre del av sengegrinden i dette nivået, kan pasienten benytte grinden som støtte for å komme ut og inn av sengen. Høyde på sengeflate tilpasses pasientens kroppslengde.

3/4 beskyttelse



Mobilitet

Tilpasset pasientens kroppslengde

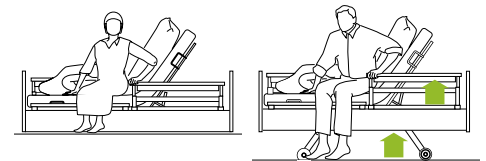

4

Med sengegrindene i øverste nivå oppnås maksimal sikkerhet for pasienten.


Full beskyttelse

For madrasshøyde fra 12 til 18 cm



Sikkerhet


Oppfyller krav til sikkerhet i ny standard IEC 60601-2-52

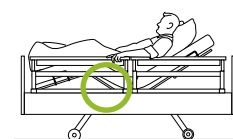

Sengeflate for trykksårforebygging

Når pasienten blir sengeliggende endres pleiebehovet. Endring av liggstilling er viktig for komfort samt for å forhindre liggesår.

Sentida sengen har en dynamisk sengeflate, med ryggtilbakeføring og automatisk forlengelse av setedel slik at man får god sittekomfort og trykkfordeling.

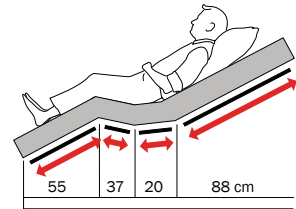

Komfort og forebygging

Komfortstilling eller forebyggende posisjon oppnås ved kun å trykke på en knapp. Økt komfort for beboer og forebygging av liggesår er til stor fordel for pasienten, samtidig reduseres belastningen for pleiepersonalet.

Komfortstilling

Den forhåndsprogrammerte komfortstillingen er praktisk for å se TV, lese, spise eller kommunisere med besøkende i øyehøyde. Å benytte personløfter er enkelt i denne posisjon. I tillegg gjør denne stillingen det lettere å puste, fordøyelsen og blodsirkulasjon forbedres.



Forebyggende

Gjennom Fowler-30° stilling med løfting av knærne, forebygges liggesår. Dette oppnås med en litt senket hodeposisjon kombinert med å løfte leggene for å avlaste hæler og ledd (f.eks med en pute plassert under leggene).



Pasient

- Brukervennlig konsept med klare symboler
- Forhåndsprogrammerte funksjoner for å unngå utilsiktede reguleringer
- Komfortstilling uten å forlate sengen



Pleiepersonalet

- 3-modus betjeningspanelet kan individuelt tilpasses den enkelte pasient
- Forhåndsprogrammerte automatiske funksjoner sparer tid




Vedlikehold/ teknologi

- Sengen har EPJ kabler som er av svært høy kvalitet, kabelbrudd og unødige kostnader unngås
- Betjeningspanel og elektronikk i ett, ikke behov for egen elektronikk


25 cm

for fall-forebygging og sikker posisjonering om natten

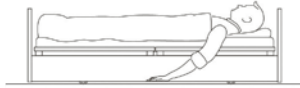


40 cm

for ergonomisk inn- og utstigning av seng i stolhøyde

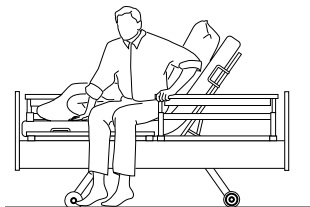

80 cm

for komfortabel og ryggbesparende pleie

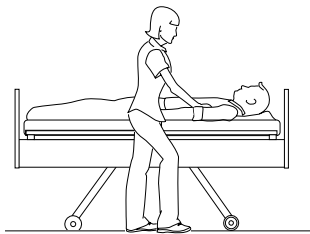

Pasient

- Pasientens sikkerhet og komfort ivaretas i alle posisjoner
- Pasienten kan forflytte seg selv fra sengen
- Innebygget sengeforlenger
- Redusert risiko ved å senke sengen til laveste nivå om natten
- Sengen stanser automatisk ved 40 cm høyde



Pleie

- Rask regulering til ønsket sengeflatehøyde
- Sikker og effektiv
- Redusert risiko for at pasient skal falle ut av sengen
- 80 cm høyde på sengeflate, korrekt arbeidsstilling for pleiepersonalet

Intelligent håndkontroll med automatiske og tidsbesparende funksjoner.

Håndkontrollen på Sentida har et ergonomisk design og en intuitiv oppbygging med store knapper. Intelligent håndkontroll med sikkerhetsfunksjon (velg funksjon og aktiver). Håndkontrollen er lett å betjene for både pasient og personale.



Håndkontroll med tydelige funksjoner

Integrert låsefunksjon

SENGER

SENTIDA 6 LE



Art.nr.	NAV Art.nr.	Beskrivelse
628008	232599	Pleieseng Sentida 6 LE 85 cm

- ▶ Standard farge bøk
- ▶ Vertikal delte sengegrinder for større sikkerhet, og lettere inn- og utstigning
- ▶ Sengegrinder kan låses i tre nivå, maks høyde 40 cm
- ▶ Sengeflatehøyde kun 28 cm
- ▶ Firedelt ergonomisk sengeflate
- ▶ Sengeflate kan forlenges til 220 cm
- ▶ Sentralbrems med retningsstyring er standard
- ▶ 15 års leveransegaranti på tilbehør og reservedeler
- ▶ Kan leveres med ulike tresorter etter behov og ønske, se side 38

Mål og vekt

Lengde	218 cm	Høyde sengeflate	28-80 cm
Bredde	102 cm	Løfteevne (SWL)	225 kg
Madrass-lengde	200 cm	Brukervekt	190 kg
Madrass-bredde	85 cm	Frihøyde over gulv	14 cm

Sikkerhet og komfort

Vertikaldelt sengegrind med fire høydenivåer

1

De vertikaldelte sengegrindene har en avrundet topplist i tre, i nederste posisjon ligger grinden ca 10 cm under madrassens overflate. Det betyr enkel tilgang for pleiepersonalet som skal utøve sine daglige oppgaver som stell og pleie av pasienten eller for eks. bytte av sengetøy.

4 nivå av beskyttelse




Ikke behov for beskyttelse



4 fordeler



Ingen barrierer

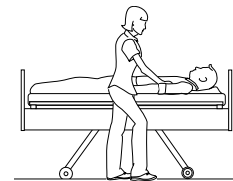


2

For sikkerhet om natten kan det være tilstrekkelig å kombinere lav posisjon av sengen med øvre del av sengegrinden i første høydenivå. Med denne "soft" løsningen unngås unødvendige hindringer for pasienten, samtidig som fallrisiko blir redusert.

Soft beskyttelse



Orientering
Frihet for pasienten

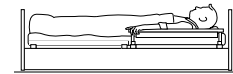


3

Med øvre del av sengegrinden i dette nivået, kan pasienten benytte grinden som støtte for å komme ut og inn av sengen. Høyde på sengeflate tilpasses pasientens kroppslengde.

3/4 beskyttelse



Mobilitet
Tilpasset pasientens kroppslengde

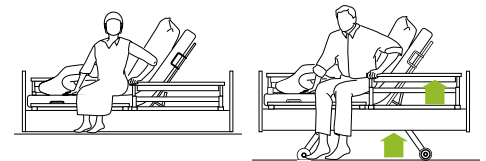


4

Med sengegrindene i øverste nivå oppnås maksimal sikkerhet for pasienten.

Full beskyttelse
For madrasshøyde fra 12 til 18 cm




Sikkerhet
Oppfyller krav til sikkerhet i ny standard IEC 60601-2-52

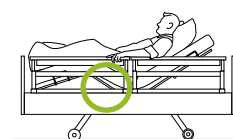

SENGER SENTIDA 6 LE

28 cm

for fall-forebygging og sikker posisjonering om natten

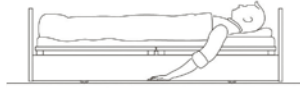


40 cm

for ergonomisk inn- og utstigning av seng i stolhøyde



80 cm

for komfortabel og ryggbesparende pleie

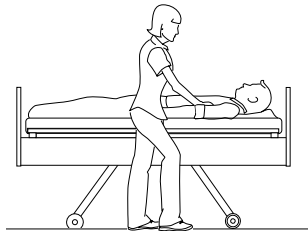

Pasient

- Pasientens sikkerhet og komfort ivaretas i alle posisjoner
- Pasienten kan forflytte seg selv fra sengen
- Innebygget sengeforlenger
- Redusert risiko ved å senke sengen til laveste nivå om natten

Pleie

- Rask regulering til ønsket sengeflatehøyde
- Sikker og effektiv
- Redusert risiko for at pasient skal falle ut av sengen

Intelligent håndkontroll med automatiske og tidsbesparende funksjoner

Håndkontrollen på Sentida har et ergonomisk design og en intuitiv oppbygging med store knapper. Intelligent håndkontroll med sikkerhetsfunksjon (velg funksjon og aktiver). Håndkontrollen er lett å betjene for både pasient og personale.

Fokus på sikkerhet

Håndkontrollen til Sentida er banebrytende når det gjelder pasientens sikkerhet. Den har en sikkerhetsfunksjonen hvor man velger funksjon for så å aktivere den valgte funksjon. Dette forebygger utilsiktet og potensielt farlig aktivering av sengens funksjoner.

I tillegg har håndkontrollen innebygget låsefunksjon hvor funksjoner kan låses.





SENGER SENTIDA 6



Art.nr.	NAV Art.nr.	Beskrivelse
628012	229408	Pleieseng Sentida 6
628013		Pleieseng Sentida 6 80 cm
628019		Pleieseng Sentida 6 100 cm

- ▶ Standard farge memoriana
- ▶ Vertikal delte sengegrinder for større sikkerhet, og lettere inn- og utstigning
- ▶ Sengegrinder kan låses i tre høyder, maks høyde 40 cm
- ▶ Kan heves i begge ender (tiltes opp og ned)
- ▶ Firedelt ergonomisk sengeflate
- ▶ Komfortabel og ryggbesparende pleie med sengeflatehøyde på inntil 80 cm
- ▶ Komfort- og liggesår-forebyggende funksjoner
- ▶ Sengeflate kan forlenges til 220 cm
- ▶ Sentralbrems med retningsstyring er standard
- ▶ 15 års leveransegaranti på tilbehør og reservedeler
- ▶ Kan leveres med ulike tresorter etter behov og ønske, se side 38

Mål og vekt

Lengde	218 cm	Madrassbredde Sentida 6 80	80 cm
Bredde	102 cm	Høyde sengeflate	28-80 cm
Bredde Sentida 6 80	97 cm	Løfteevne (SWL)	275 kg
Madrasslengde	200 cm	Brukervekt	240 kg
Madrassbredde	85 cm	Frihøyde over gulv	14 cm

Sikkerhet og komfort

Vertikaldelt sengegrind med fire høydenivåer

1

De vertikaldelte sengegrindene har en avrundet topplist i tre, i nederste posisjon ligger grinden ca 10 cm under madrassens overflate. Det betyr enkel tilgang for pleiepersonalet som skal utøve sine daglige oppgaver som stell og pleie av pasienten eller for eks. bytte av sengetøy.

4 nivå av beskyttelse




Ikke behov for beskyttelse



4 fordeler



Ingen barrierer

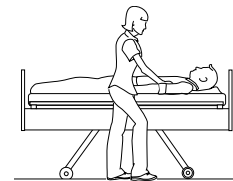

2


For sikkerhet om natten kan det være tilstrekkelig å kombinere lav posisjon av sengen med øvre del av sengegrinden i første høydenivå. Med denne "soft" løsningen unngås unødvendige hindringer for pasienten, samtidig som fallrisiko blir redusert.

Soft beskyttelse



Orientering

Frihet for pasienten

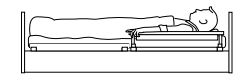

3


Med øvre del av sengegrinden i dette nivået, kan pasienten benytte grinden som støtte for å komme ut og inn av sengen. Høyde på sengeflate tilpasses pasientens kroppslengde.

3/4 beskyttelse



Mobilitet

Tilpasset pasientens kroppslengde

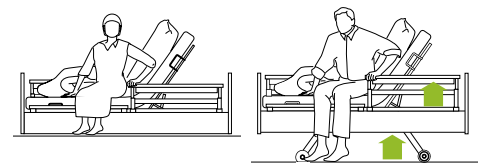

4

Med sengegrindene i øverste nivå oppnås maksimal sikkerhet for pasienten.


Full beskyttelse

For madrasshøyde fra 12 til 18 cm



Sikkerhet


Oppfyller krav til sikkerhet i ny standard IEC 60601-2-52

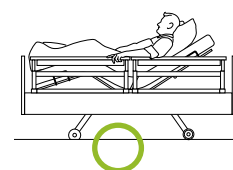

Sengeflate for trykksårforebygging

Når pasienten blir sengeliggende endres pleiebehovet. Endring av liggstilling er viktig for komfort samt for å forhindre liggesår.

Sentida sengen har en dynamisk sengeflate, med ryggtilbakeføring og automatisk forlengelse av setedel slik at man får god sittekomfort og trykkfordeling.

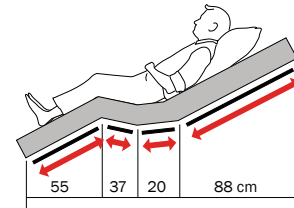

Komfort og forebygging

Komfortstilling eller forebyggende posisjon oppnås ved kun å trykke på en knapp. Økt komfort for beboer og forebygging av liggesår er til stor fordel for pasienten, samtidig reduseres belastningen for pleiepersonalet.

Komfortstilling

Den forhåndsprogrammerte komfortstillingen er praktisk for å se TV, lese, spise eller kommunisere med besøkende i øyehøyde. Å benytte personløfter er enkelt i denne posisjon. I tillegg gjør denne stillingen det lettere å puste, fordøyelsen og blodsirkulasjon forbedres.



Forebyggende

Gjennom Fowler-30° stilling med løfting av knærne, forebygges liggesår. Dette oppnås med en litt senket hodeposisjon kombinert med å løfte leggene for å avlaste hæler og ledd (f.eks med en pute plassert under leggene).



Pasient

- Brukervennlig konsept med klare symboler
- Forhåndsprogrammerte funksjoner for å unngå utilsiktede reguleringer
- Komfortstilling uten å forlate sengen

Pleiepersonalet

- 3-modus betjeningspanelet kan individuelt tilpasses den enkelte pasient
- Forhåndsprogrammerte automatiske funksjoner sparer tid

Vedlikehold/ teknologi

- Sengen har EPJ kabler som er av svært høy kvalitet, kabelbrudd og unødige kostnader unngås
- Betjeningspanel og elektronikk i ett, ikke behov for egen elektronikk


28 cm

for fall-forebygging og sikker posisjonering om natten




40 cm

for ergonomisk inn- og utstigning av seng i stolhøyde

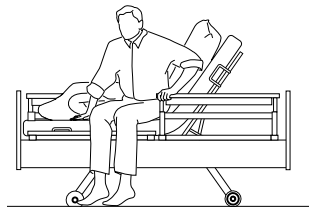

80 cm

for komfortabel og ryggbesparende pleie

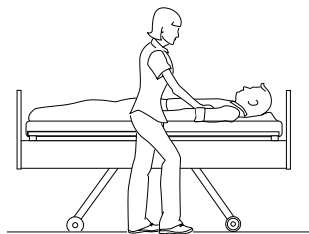

Pasient

- Pasientens sikkerhet og komfort ivaretas i alle posisjoner
- Pasienten kan forflytte seg selv fra sengen
- Innebygget sengeforlenger
- Redusert risiko ved å senke sengen til laveste nivå om natten
- Sengen stanser automatisk ved 41 cm høyde

Pleie

- Rask regulering til ønsket sengeflatehøyde
- Sikker og effektiv
- Redusert risiko for at pasient skal falle ut av sengen

Intelligent håndkontroll med automatiske og tidsbesparende funksjoner

Håndkontrollen på Sentida har et ergonomisk design og en intuitiv oppbygging med store knapper. Intelligent håndkontroll med sikkerhetsfunksjon (velg funksjon og aktiver). Håndkontrollen er lett å betjene for både pasient og personale.

Fokus på sikkerhet

Håndkontrollen til Sentida er banebrytende når det gjelder pasientens sikkerhet. Den har en sikkerhetsfunksjonen hvor man velger funksjon for så å aktivere den valgte funksjon. Dette forebygger utilsiktet og potensielt farlig aktivering av sengens funksjoner.

I tillegg har håndkontrollen innebygget låsefunksjon hvor noen eller alle funksjoner kan låses.



Håndkontroll med tydelige funksjoner

Integrert låsefunksjon

SENGER

SENTIDA 7-I | SENTIDA 7-I CONNECT



Art.nr.	Beskrivelse
628015	Pleieseng Sentida 7-I
628016	Pleieseng Sentida 7-I Connect



SENTIDA 7-I

- ▶ Integert pasientvekt
- ▶ 7" touch-panel til bruk for pleiepersonalet
- ▶ Håndkontroll med bakgrunnsbelysning
- ▶ Integert alarm for utstigning
- ▶ Mobi-Lift støttegrep med bryter for høyderregulering
- ▶ Håndkontroll med lys i display og innebygd lykt
- ▶ Batteri backup
- ▶ Trendelenburg leie (drenasjeleie)

SENTIDA 7-I CONNECT

- ▶ Integert pasientvekt
- ▶ Integrasjon av vekt og prøvetaking direkte til journalsystem
- ▶ Integert alarm for utstigning
- ▶ Integerte alarmer kan kobles opp til sykesignalanlegg
- ▶ 7" touch-panel til bruk for pleiepersonalet
- ▶ Håndkontroll med bakgrunnsbelysning
- ▶ Mobi-Lift støttegrep med bryter for høyderregulering
- ▶ Håndkontroll med lys i display og innebygd lykt
- ▶ Batteri backup

Mål og vekt

Lengde	218 cm	Høyde sengeflate	28-80 cm
Bredde	102 cm	Løfteevne (SWL)	250 kg
Madrass-lengde	200 cm	Brukervekt	215 kg
Madrass-bredde	85 cm	Frihøyde over gulv	15 cm

Pasientvekt

- ▶ Integret vekt forenkler hverdagen for pleiepersonalet
- ▶ Automatisk vektmåling forenkler dokumentasjon
- ▶ Ukentlig og månedlig oversikt gir kontroll over pasientens vekt og BMI
- ▶ Sender data til pasientjournal



Utstigning

- ▶ Fallforebyggende sengeflateforhøyde
- ▶ Alarmsignal til pleiepersonalet hvis pasient forlater sengen
- ▶ Fleksibelt timer for utløsning av alarm
- ▶ Integret nattlys som tennes automatisk når pasient går ut av sengen



Valgfrie alarmer utover alarm for utstigning

- ▶ Alarm hvis brems frigjøres
- ▶ Alarm hvis sengeflatehøyde reguleres
- ▶ Alarm hvis sengegrind reguleres



Fuktalarm

- ▶ Sensorer registrerer fuktighet i sengen
- ▶ Egnet for pasienter med lett inkontinens
- ▶ For bedre kontinens og større verdighet for pasienter



Mobi-Lift® for mer frihet

- ▶ Integret støttegrep med bryter for høyderegulering
- ▶ Pasient kan enkelt ta i bruk Mobi-Lift
- ▶ Avlaster pleiepersonalet

Point of Care - verktøy for personalet

- ▶ Sengen kommuniserer til pasientjournal
- ▶ All viktige pasientdata sendes til pasientjournal
- ▶ Avlaster pleiepersonalet
- ▶ Forebygger smitte



SENGER

CARISMA 300 XXL



Art.nr.	NAV Art.Nr.	Beskrivelse
628022	231185	Pleieseng Carisma 300 XXL 115 cm

- ▶ Standard farge bøk
- ▶ Integreerte sengegrinder
- ▶ God avstand mellom sengegrind og madrass når grind er nedfelt
- ▶ Firedelt ergonomisk sengeflate med forlengelse av setedel og ryggtilbakeføring
- ▶ Komfort og forebyggende stilling
- ▶ Sentralbrems med retningstyring er standard
- ▶ Håndkontroll med sikkerhetsfunksjon
- ▶ Batteri backup er standard
- ▶ 15 års leveransegaranti på tilbehør og reservedeler
- ▶ Kan leveres med ulike tresorter etter behov og ønske, se side 38


Mål og vekt

Lengde	216 cm	Høyde sengeflate	38-82 cm
Bredde	128 cm	Løfteevne (SWL)	300 kg
Madrass-lengde	205 cm	Brukervekt	265 kg
Madrass-bredde	115 cm	Frihøyde over gulv	16 cm

Sengeflate for trykksårforebygging

Når pasienten blir sengeliggende endres pleiebehovet. Endring av liggestilling er viktig for komfort samt for å forhindre liggesår.

Carisma sengen har en dynamisk sengeflate, med ryggtilbakeføring og automatisk forlengelse av setedel slik at man får god sittekomfort og trykkfordeling.

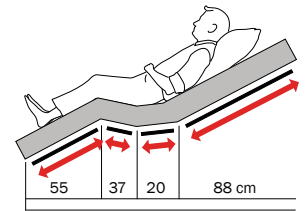

Komfort og forebygging

Komfortstilling eller forebyggende posisjon oppnås ved kun å trykke på en knapp. Økt komfort for beboer og forebygging av liggesår er til stor fordel for pasienten, samtidig reduseres belastningen for pleiepersonalet.

Komfortstilling

Den forhåndsprogrammerte komfortstillingen er praktisk for å se TV, lese, spise eller kommunisere med besøkende i øyehøyde. Å benytte personløfter er enkelt i denne posisjon. I tillegg gjør denne stillingen det lettere å puste, fordøyelsen og blodsirkulasjon forbedres.



Forebyggende

Gjennom Fowler-30° stilling med løfting av knærne, forebygges liggesår. Dette oppnås med en litt senket hodeposisjon kombinert med å løfte leggene for å avlaste hæler og ledd (f.eks med en pute plassert under leggene).



Håndkontroll med tydelige funksjoner



Integrert låsefunksjon

SENGER

KUNDETILPASSET DESIGN

Sengene kan leveres med kundetilpasset design, hvor man har mulighet til å velge farge, type gavler og kontrast-farge. Memoriana fargekombinasjoner er spesielt godt egnet til demente. Fargevalgene og utformingen av gavler gir sengene et hjemmelig og pent uttrykk.

Senger med kundetilpasset design leveres kun på bestilling og mot pristillegg.
Ta kontakt for mer informasjon.



Sentida med Memoriana-møbler, gavl type G, fargekombinasjon Havana cherry og kontrastfarge Cacao.



Sentida med gavltipe K og farge alder gold red.

Fargevalg



Lund birch



Beech nature



Beech tinted



Cherry



Lindberg oak



Havana cherry



Cottage Pine



Dark Acacia



Suomi Pinie grey

Fargekombinasjoner Memoriana



Lund birch/Havana cherry



Havana cherry/Cacao After eight



Suomi Pinie grey/Suomi Pine brown

Alternative farger
kan leveres ved
kjøp av minimum
12 senger



SafeLift er en ny generasjon håndkontroll som er svært intuitiv og enkel! Den har en nytviklet teknologi som gjør batteri eller strømtilkobling overflødig.



- ▶ Ingen kabel eller batteri
- ▶ Enkel installasjon uten verktøy
- ▶ Har automatisk nattlys
- ▶ Store uthevede knapper
- ▶ Fallforebyggende da den er kabelfri
- ▶ Plassering kan gjøres individuelt tilpasset den enkelte
- ▶ Passer på Wi-bo senger med vertikaldelte sengegrunder

SafeLift håndkontroll



Art.nr.	Beskrivelse
628175	Håndkontroll SafeLift

SENGER

MOVITA, SENTIDA OG CARISMA - TILBEHØR

Løftebøyle



Art.nr.	NAV Art.nr.	Beskrivelse
628100	184585	Løftebøyle WiBo
628106		Løftebøyle Carisma 300 XXL

Rotasjonstopp løftebøyle



Art.nr.
628105

Infusjonsstativ



Art.nr.	Beskrivelse
628108	Infusjonsstativ

Forlenger sengeflate 20 cm



Art.nr.	Beskrivelse
628146	Sengegrindforlenger, farge bøk
628147	Sengegrindforlenger, farge cacao
628148	Sengeflateforlenger 20 cm

Sengelampe for montering på sengeflate



Art.nr.	Beskrivelse
628110	Soluna 12 V halogen
628111	Soluna 12 V led

D-boks til sengelampe

Art.nr.	Beskrivelse
628115	For enklere tilkobling



Sengestige




Art.nr.	Beskrivelse
628120	Sengestige

Mobi Stick 2

Art.nr. Beskrivelse

628127 Mobi Stick 2

Ergonomisk utformet, gir stabilitet og sikkerhet. Kan felles ned.

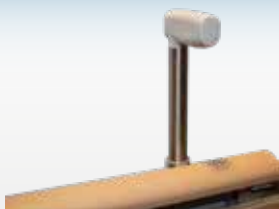

Holder for håndbetjening



Art.nr. NAV Art.nr. Beskrivelse

628130		Holder håndbetjening Estetica
628131	231743	Holder håndbetjening Movita/Sentida/Carisma
628135	231744	Adapter for holder vertikaldelt sengegrind
628136		Adapter for holder integrert sengegrind

Støttegrep



Art.nr. NAV Art.nr. Beskrivelse

628125	231745	Støttegrep
628126	231746	Holder støttegrep

Beskyttelsesnett vertikaldelt sengegrind



Art.nr. Beskrivelse

628144	Til hodeende
628145	Til fotende

Leveres i stk.

Overtrekk vertikaldelt sengegrind



Art.nr. Beskrivelse

628142	Til hodeende
628143	Til fotende

Leveres i stk.

Fallmatte 5 cm tykk



Art.nr.

628150

Overtrekk integrert sengegrind



Art.nr. Beskrivelse

628140 Til senger med integrert sengegrind

Leveres i stk.

Overtrekk gavli Movita/Sentida



Art.nr.

628138



SALGSORGANISASJON

Tlf sentralbord: 38 14 48 00
Mail: hjelpemidler@varodd.no
www.varodd.no

Varodd Velferdsteknologi er en landsdekkende leverandør med et bredt sortiment av produkter til hjelpemiddelsentraler, kommuner, sykehjem og sykehus. Vi har vært leverandør av hjelpemidler til helse-Norge siden 1963 med mål om å gjøre hverdagen enklere!



Miljøfyrtårn®

Rigedalen 41 • 4626 Kristiansand
Postboks 8343 • 4676 Kristiansand
Tlf 38 14 48 00 • www.varodd.no
Mail: hjelpemidler@varodd.no