



**Den nye, svært manøvrerbare og kompakte rullestolen:**  
*Invacare® Rea **Dahlia***

*Invacare Rea **Dahlia*** har alt, med smalt og moderne design, tiltfunksjon og enkle justeringer. For de som søker mobilitet med komfort og trykkavlastning, er denne stolen perfekt, både for passive og aktive brukere. **Dahlia** tilbys i to modeller, med 30° eller 45° setetilt, noe som forbedrer posisjoneringsmulighetene. *Invacare Rea **Dahlia*** er krysskompatibel med flere produktfamilier, blant annet **Flex3** setesystem.

\* Prisforhandlet:

- Post 7: Allround rullestol med fastramme, tilt og avtakbare benstøtter



### Optimal trykkavlastning

Versjonen med 45° setetilt gir mulighet for trykkavlastning på brukers mest sårbare områder i sittende stilling. Den unike tiltkonstruksjonen gjør det enkelt å endre stilling med lite muskelkraft.

### En ideell komfortstol til den mer aktive bruker

Versjonen med 30° setetilt er velegnet til den mer aktive brukeren som ønsker å "gå" stolen framover, eller har behov for direkte kontakt med gulvet for bedre kroppsstabilitet. Setehøyden kan komme ned til 32,5 cm, og muligheten for å selv tilte stolen lar brukeren enkelt endre posisjon selv.

### Fordeler ved *Dahlia* 30° og 45°:

- Enkel å manøvrere da drivhjulene sitter tett inntil kroppen
- Svært smal totalbredde
- Enkel å manøvrere ettersom drivhjulene trinnløst kan flyttes frem slik at tyngdepunktet endres til en mer aktiv stilling
- Det glidende balansepunktet gjør *Dahlia* svært sikker og stabil i alle tiltede posisjoner
- Tiltet kan enkelt endres med liten kraft
- Mye av tilbehøret er kompatibelt med Invacares øvrige rullestoler

## Egenskaper og muligheter



**Dahlia** 30° leveres med vinkeljusterbar velcrocrygg og polstret ryggoverdrag, høyderegulerbare kjørehåndtak samt 80° benstøtter.



**Dahlia** 30° kan leveres med brukerbetjent tilt, slik at brukeren selv kan tilte stolen og skifte sittestilling. Stolen kan konfigureres med en setehøyde helt ned til 32,5 cm slik at brukers føtter når bakken og kan brukes til å "gå" stolen frem.



**Dahlia** 30° Allround med tilt leveres med en enkel, justerbar velcrocrygg.



**Dahlia** 45° sikrer reell trykkavlastning for bekkenet ved at trykket flyttes over til ryggen, og lar brukeren hvile tilbakelent i stolen.



## Egenskaper og muligheter



**Dahlia** 30° og 45° har begge Dual Stability System (DSS) som sikrer vektforskyvning og kroppslengdekompensasjon. Dette minimerer shear og gjør stolen svært stabil.



Ved tilting av de første 10° på **Dahlia** 30° heves setekanten minimalt, slik at brukeren kan beholde føttene på gulvet.



De faste **Matrx**®-ryggene kan enkelt monteres på Dahlia, om det er behov for ekstra kroppsstøtte. **Matrx**® **Elite Dyp** har innebygd sidestøtte og **Matrx**® **Elite** gir lett sidestøtte som gir mulighet for mer aktiv bevegelse.



Det er mulig å benytte de fleste formstøpte setesystemer på **Dahlia**.



For en bredere rygg på en mindre seteplate, er breddeutvidelsesblokker tilgjengelig.



Utvid seteplaten for individuell støtte av setepute og/eller ben.



**Dahlia** gir mulighet for individuell justering av både setedybde og setebredde.



Totalbredden på **Dahlia** er ekstra smal. Det blir dermed lettere å ta seg rundt gjennom trange passasjer.



**Dahlia** kan utstyres med et trapperør som gjør det enklere å tippe stolen bakover for å komme over hindringer.



**Dahlia** 45° har en ekstra gassfjær som gjør det enkelt for hjelperen å heve stolen fra tiltet posisjon.



Balansepunktet kan flyttes trinnløst fram og tilbake for å optimere kjøreegenskapene.



Tippesikringene kan skyves vekk med foten. I utslått posisjon peker de 5° ut, slik at det er god gangplass til hjelperen.

## Tekniske data



Rea **Dahlia** 390-440/  
440-490/ 490-540  
16" (390-490/440-540/  
490-590 mm)



430 - 500 mm



30° : 330 - 500 mm  
45° : 350 - 500 mm



500 - 800 mm  
Uten setepute



250 - 320 mm



330 - 500 mm



30°: -1 - 30°  
45°: 0 - 45°



Rea **Dahlia** 0° - 30°



SB + 160 mm (16")  
SB + 180 mm (24")



30°: 825 - 1250 mm  
45°: 850 - 1250 mm



900 - 1180 mm



>35kg<sup>1</sup>



Maks. 135 kg



Transportvekt  
21/25 kg (SB 39 cm)<sup>1</sup>



Rea **Dahlia** 755 mm



Crash-testet  
ISO 7176-19



Maksimal helling for  
bruk av brems: 7°



Rea **Dahlia** tilfredsstillter ISO 7176-19 spesifikasjoner. Merk at det kan være særlige betingelser med hensyn til tilbehør. For detaljerte opplysninger om transport i buss eller bil sittende i rullestolen, vennligst se brukermanual. Denne finnes også på [www.invacare.no](http://www.invacare.no).

<sup>1/</sup> Totaltvekt ved 39 cm setebredde og med letteste konfigurasjon.

<sup>2/</sup> Komponenter kompatible med Invacare-familien

## Rammefarge



Svart

Toppnummer	HMS-nr.	Beskrivelse
1591262	226241	Dahlia sb39 sd45 sh45 svreg rygg vjust tilt
1591263	226242	Dahlia sb44 sd45 sh45 svreg rygg vjust tilt
1591264	226243	Dahlia sb49 sd45 sh45 svreg rygg vjust tilt

### Standard konfigurasjon Rea **Dahlia**:

- Regulerbar setetilt med gassfjær for vektfordeling
- Vinkeljusterbar rygg med velcro og polstret ryggoverdrag i Dartex
- Dybde - og høyderegulerbar nakkestøtte
- Uten setepute
- Bredde- og dybdejusterbart sete
- Vinkelfast benstøtte i 80°, inn - og utsvingbar.
- Dybde- og vinkeljusterbare fotplater med hælklapper
- Trinnløs justering av tyngdepunkt for aktiv posisjon
- Drivhjul 24" kompakte dekk
- Svinghjul 6" medium hard
- Bakenforliggende kjørehåndtak
- Høydejusterbare armlen med mykt langt polster, Ducktail.
- Løftepunkter er avmerket
- Toppesikringer 2 stk. innsvingbare
- Rammefarge: Sort

## Trekk



Black Dartex  
TR26



Black plush  
TR35





# rea | Azalea (A), Dahlia (D) Tilbehør



Invacare® Rea komfortrullestoler har et bredt utvalg av tilbehør som gir brukeren mulighet til å oppnå optimal støtte og sittestilling samt økt komfort. Tilbehøret kan brukes på de fleste Rea komfortmodeller, noe som gir terapeuter mulighet til å finne den modellen som passer brukeren best. Ved å tilby bedre støtte vil brukeren bli i stand til å delta i ønsket aktiviteter i en mer avslappet og behagelig sittestilling.

På de neste sidene referer vi til A eller D, som står for henholdsvis **Azalea** og **Dahlia**. En del av tilbehøret er også kompatibelt med Invacares allround og aktive rullestoler.

**Rygg**




**Flex3 ryggplate**

Gir en fast og stabil støtte kombinert med en ryggpute. Ryggplaten er individuelt høyde- og breddejusterbar. **(A) (D)**




**Flex 3 velcro rygg (standard på Azalea)**

Med borrelåsbånd som kan høyde- og breddejusteres samt vinkles og utvides. Kombineres med ryggoverdrag eller ryggpute. **(A) (D)**

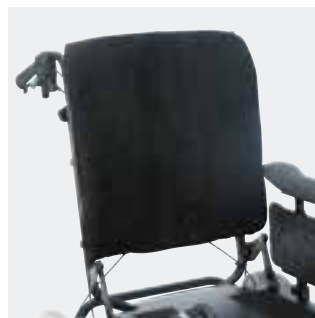

**Ryggoverdrag (standard på Azalea)**

Polstret overdrag til velcro rygg. **(A) (D)**

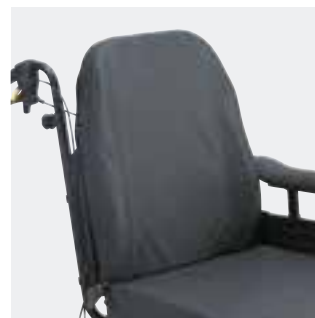

**Laguna ryggpute**

**Laguna** ryggpute gir en avslappet og komfortabel støtte takket være ryggens formede sider i skum. **(A) (D)**




**Mistral<sup>2</sup> ryggpute**

**Mistral<sup>2</sup>** ryggputen gir med sine ekstra store og stabile sidestøtter brukeren en optimal sittestilling med god støtte, og samtidig god plass til bevegelse av armene. **(A) (D)**



**Passad<sup>2</sup> ryggpute**

**Passad<sup>2</sup>** gir stabilitet og komfort og er spesielt velegnet for brukere med stort behov for støtte ved skuldre og bekken. **(A) (D)**

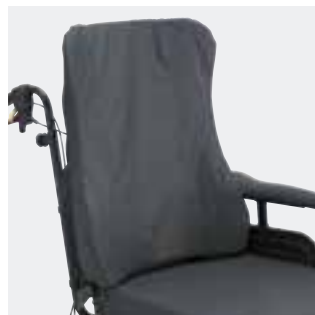


**Passad<sup>2</sup> ryggpute høy**

**Passad<sup>2</sup>** i en 100 mm høyere variant, designet for høye brukere. **(A) (D)**



**Vicair multifunksjonell**

Ryggpute oppdelt i separate kamre med trekantede luftputer (Soft Cells). For brukere som trenger ekstra posisjoneringmuligheter. **(A) (D)**

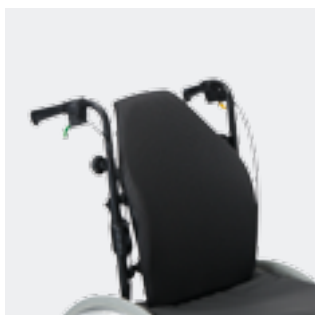

**Invacare<sup>®</sup> Matrix<sup>®</sup> Elite**

**Matrix Elite** har lett sidestøtte (80 mm dybde) med god klaring ved skuldre og hofter. Dette gir rom for bevegelse i overkroppen. Justerbar i dybde, høyde, vinkel og rotasjon. **(A) (D)**



**Invacare<sup>®</sup> Matrix<sup>®</sup> Elite dyp**

**Matrix Elite dyp** har høy og dyp sidestøtte (160 mm dybde) som gir god støtte for overkroppen samtidig som det er god klaring ved skulde og hofter. Justerbar i dybde, høyde, vinkel og rotasjon **(A) (D)**



**Invacare<sup>®</sup> Matrix<sup>®</sup> Elite TR**

**Elite TR** er designet til rullestol med sete- og/eller ryggtilt. Puten har et ekstra skumlag, som er svært mykt og som lar brukeren synke godt inn i puten og fordeler trykket over en større flate. Lett sidestøtte med god klaring ved skuldre og hofter. 75 mm dybde. Justerbar i dybde, høyde, vinkel og rotasjon. **(A) (D)**



**Invacare<sup>®</sup> Matrix<sup>®</sup> PB**

**Matrix Posture Back** har middels sidestøtte (130 mm dybde) og kraftig polstring for å gi postural støtte og høy komfort. **Matrix Posture Back**, dyp har mer sidestøtte (180 mm). Justerbar i dybde, høyde, vinkel og rotasjon. **(A) (D)**



## Sete - og ryggtilt



### Ledsagerstyrt setetilt og ryggregulering

Ryggen og hele seteenheten tiltes ved hjelp av gasspatron når utløserhåndtaket aktiveres. Posisjonen kan låses i ønsket vinkel. **(A) (D)**



### Sete- og ryggtilt, elektrisk

Ryggen og hele seteenheten tiltes elektrisk. Kan benyttes av både bruker og ledsager. Kan låses i ønsket vinkel på selvbetjening. **(A) (D)**

## Kjørehåndtak



### Kjørehåndtak

Høydejusterbare skyvehåndtak monteres med en stabiliserende ryggbøyle. **(D)**



### Kjørebøyle, vinkeljusterbar

Vinkeljusterbar bøyle som enkelt kan vinkles for å gi et behagelig grep for ledsager eller for å komme nærmere brukeren ved forflytninger. **(A) (D)**

Art. nr.:  
SP1563967 til sb 39cm  
SP1564551 til sb 44cm  
SP1561552 til sb 49cm

## Sete og seteputer



### Glidesete

Hjelper til rett posisjonering på setet. Utløses med en liten spak på høyre side. Forenkler inn- og utstigning i stolen. **(A)**

Art. nr. 1484576 Glideste 39  
HMS nr. 186569  
Art. nr. 1484577 Glideste 44  
HMS nr. 186570  
Art. nr. 1484578 Glideste 49  
HMS nr. 186571



### Floshape setepute

Konturformet 100 mm standardpute i lateks-skum. Tilpasser seg kroppens former og gir dermed god trykk-fordeling. Leveres både med plysj- og dartex-trekk. **(A) (D)**



### Mistral<sup>2</sup>

Pute med to lag for økt komfort. **(D)**




### Inkontinentsoverdrag

Detløseinkontinentsoverdraget passer til putene. Kan vaskes ved 60 grader. **(A) (D)**

Art. nr. 5253078-TR26, størrelse 39 cm  
HMS nr. 8689  
Art. nr. 5253079-TR26, størrelse 44 cm  
HMS nr. 8690  
Art. nr. 5253080-TR26, størrelse 49 cm  
HMS nr. 8691

## Benstøtter og fotplater

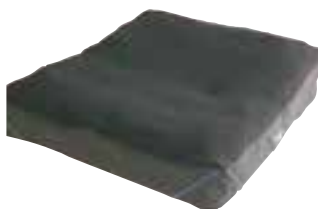

### Vicair<sup>®</sup> multifunksjonell

Sittepute bestående av separate kamre med trekantede luftputer (Soft Cells). For brukere som trenger ekstra posisjoneringsmuligheter og/eller har risiko for å utvikle trykksår. **(A) (D)**



### Vinkelregulerbare benstøtter med justerbare (alternativt faste) fotplater

Lengdekompenserende ved vinkling av benstøtten. **(A) (D)**



### 80° benstøtter

Benstøtter med justerbare (alternativt faste) fotplater og med sving inn/sving ut funksjon som aktiveres via håndtakets låsemekanisme. Kan benyttes av hjelper så vel som bruker. **(A) (D)**



### 90° benstøtte

Føttene kommer nærmere kroppen. Kan anvendes på rullestoler med små forhjul. **(A) (D)**

**Benstøtter og fotplater**



**Sentermontert benstøtte**  
Gir kompakt støtte for bena. Benstøtten er justerbar i høyde, dybde og vinkel. Oppfellbare fotplater som gjør forflytning enklere. **(A) (D)**  
Art. nr. 1484821  
HMS nr. 185425



**Amputasjonsbenstøtte**  
Gir brukeren perfekt støtte, er høyde-, vinkel- og dybdejusterbar. Med sving inn/sving ut funksjon. **(A) (D)**  
Art. nr. 1442990 (høyre)  
HMS nr. 185376  
Art. nr. 1442991 (venstre)  
HMS nr. 185377



**Gipsbenstøtte**  
Stabil 90° gipsbenstøtte med justerbare myke leggpåler og fotstøtte. **(A) (D)**  
Art. nr. 1435771 (venstre)  
Art. nr. 1435770 (høyre)

**Fotplate**



**Vinkeljusterbare fotplater (standard)**  
Fotplatene kan stilles inn i dybde, høyde og vinkel. **(A) (D)**



**Fotplateforlenger**  
Fotplateforlengeren gir mulighet for bedre støtte i dybden. **(A) (D)**  
Art. nr. SP5255297 (par) bredde 135 mm  
Art. nr. SP5255299 (par) bredde 160 mm



**Hel fotplate**  
Kan svinges opp til siden eller tas helt av sammen med den ene benstøtten. Vinkel- og dybdejusterbar. **(A) (D)**



**Polster til hel fotplate**  
Polster med tykkelse 12 mm, gjør fotplaten ekstra myk og behagelig. **(A) (D)**  
Art. nr.: SP1563959 (SB 39)  
SP1563962 (SB 44)  
SP1563963 (SB 49)



**Faste fotplater**  
Faste fotplater som kan forbli oppe når stolen foldes. **(A) (D)**



**Polster til delt fotplate**  
Polster med tykkelse 12 mm, til vinkel- og dybdejusterbare fotplater. Kan tas av for vask. **(A) (D)**  
Art. nr.: SP1563946



**Leggbeskytter**  
Myk og justerbar leggstøtte som kan erstatte leggstøtten på de vinkeljusterbare bestøttene eller kompletteres med de vinkelfaste. Til brukere som trenger en hel støtte bak fotplatene. **(A) (D)**  
Art. nr.: SP1563951



**Fotkasse**  
Fotkasse med polstrede sider. **(A)**  
Art. nr.: 1571749 til sb 39  
1571750 til sb 44  
1571751 til sb 49



## Armlen



### Formet armlen (standard) Ducktail

Komfortable og høydejusterbare armlen som er vinklet opp på bakenden for å gi ekstra støtte når rullestolen er tiltet bakover. **(A) (D)**



### Armlene komfort

Høydejusterbare og avtagbare armlener med bredere og lengre puter. **(A) (D)**



### Helpolstret armlene

Mykt armlene polstret på utsiden og innsiden av armlenet. **(A) (D)**



### Hemi armlen

Høyde-, dybde- og vinkeljusterbare for å gi optimal komfort for brukeren. **(A) (D)**



### Trekk til klesbeskytter

Skjuler klesbeskytteren. Dartex polstring og det myke fyllet gir økt komfort. **(A)**  
Art. nr. 1415453  
HMS nr. 166243



### Innleggspute til klesbeskytter

20 mm tykk pute som reduserer setebredde. Monteres på øverste del av klesbeskytteren slik at den ikke kommer i veien for seteputen. **(A) (D)**



### Klesbeskytter overdrag

Tykkelse 22 mm. Gjør klesbeskytteren mer komfortabel og reduserer sittebredden. Monteres med 2 stk. borrelåser som festes rundt klesbeskytter. **(A) (D)**  
Art. nr.: SP1563943

## Sete - og ryggvalg



### Abduksjonskile

Myk, oval abduksjonskile til plassering mellom knærne. Dybdejusterbar og avtagbar. **(A) (D)**



### Nakkestøtte høyderegulerbar

Harsammemonteringsbeslag som hovedstøtten. Konturformet for å gi god støtte til nakke og nederste del av hodet. **(A) (D)**



### Sidejusterbar hodestøtte (multi)

Vinkeljusterbare vinger på sidene. Dybde-, vinkel-, høyde- og sideveis justerbar. **(A) (D)**

## Sete - og ryggvalg



### Korsryggstøttepute

Plasser bak ryggtrekket/puten for å øke og forbedre formen på ryggstøtten.

(A) (D)

Art. nr. 5252527  
HMS nr. 027168



### Vaskbart trekk

For enklere vedlikehold. Til standard hodestøtte og sidejusterbar multi hodestøtte.

(A) (D)



### Hodestøtte med kinnstøtte

Ekstra kinnstøtte til den mer passive bruker. Har samme monteringsbeslag som standard hodestøtte.

(A) (D)

Art. nr. 1446560  
HMS nr. 029463



### Overgangstrekk

Dekker for et eventuelt mellomrom mellom ryggplate og sete.

(A)



### Kiler

Faste posjoneringskiler for å gi lett støtte under setepute eller bak ryggpute.

(A) (D)

Art. nr. 1513037



### Fast sidestøtte

Bredde- og dybdejusterbar samt avtagbar.

(A) (D)



### Sidestøtte multijusterbar

Mange innstillingsmuligheter gjør den lett å forme til den enkelte bruker. Finnes også i forlenget versjon som passer til velcro-ryggen.

(A) (D)



### Sidestøtte swing-away

Med utsvingbart beslag. Fåes både med fast- og multijusterbar pute.

(A) (D)



### Sidestøtte med armlenforlenger

Gir 50 mm høyere plassering av kroppsstøtten enn den enkle kroppsstøtten. Spesielt velegnet til høye brukere.

(A) (D)



### Selevest

Elastisk vest i str. small. Plasseres over sternum og gjerne i kombinasjon med hoftesele.

(Azalea Minor)



### Selefeste

Montering for selen. Mulig å plassere på hodestøtten.

(A) (D)

Art.nr 1559963

## Forhjulsoppheng og forhjul



### Hurtigkobling

Svinghjulet kan enkelt løsnes ved å trykke på knappen, slik at stolen blir enklere å transportere. (D)



### Enhåndsdrift

For brukere som bruker høyre eller venstre arm for å kjøre stolen. (D)



### Chassisforlenger

Flytter forhjul 50 mm fremover for økt stabilitet. (A)



### Svinghjul

Fås i størrelsene 5"-8" og i myke, massive og luftfylte dekktyper. (A) (D)

## Sikkerhet




### Drivringer

Fås i følgende materialer: aluminium som standard, rustfritt stål, skum, Black Grip eller plast som tilbehør. (A) (D)




### Eikerbeskytter

Monteres for å beskytte brukerens fingre. (A) (D)

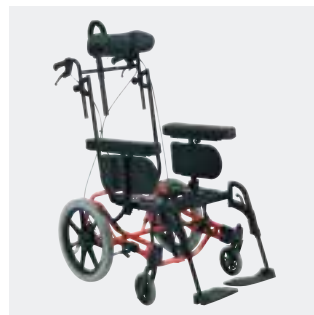

### Trommelbremses til 16"/20"/22"/24" drivhjul

Sikrer hjelperen/ledsageren kontroll over rullestolens bremses. (A) (D)

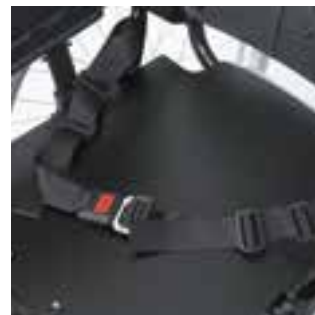

### Hoftebelte

Sikrer brukeren i rullestolen. (A) (D)

Art. nr. 1551066  
HMS nr. 138819

## Øvrige muligheter



### Reflekser

Øker synligheten av stolen i mørket. (A) (D)  
Art. nr. 5206655  
HMS nr. 186478



### Bord og tilhørende pute

Forbedret stabilitet og festemekanisme. Finnes i 3 størrelser som hver kan bredjusteres 10 cm utover. I tillegg er det kommet en pute som dekker hele bordplaten. (A) (D)

Art. nr. bord  
Medium (til sb. 39) SP1570748  
Stor (til sb. 44) SP1570749  
XL (til sb. 49) SP1570775



### Pute til bord

Art. nr.  
Medium (til sb. 39) SP1571269  
Stor (til sb. 44) SP1571270  
XL (til sb. 49) SP1571271  
(A) (D)



### Fingerskruer

Erstatter skruer på benstøtte og armlen. (A) (D)  
Art. nr. SP1484457





**Lås til bord**



**Swing-away-bord**

Forenkler forflytning inn- og ut av stolen. Det er også avtagbart.



**Innfestning av posisjoneringsbelter**

Som et supplement til det bakre standardfestet kan man montere et fremre feste til posisjoneringsbraketten for å få flere innfestningspunkter. **(A)**

Art. nr.: SP1563952

## Øvrige muligheter



**Vinkelmåler**

For å finne vinkelen til sete og rygg i forhold til basen.

**(A) (D)**

Art. nr.: SP1563954 (rygg)  
1561584 (sete)



**Krykkeholder**

Med plass til to krykker.

**(A) (D)**

Art. nr. SP1560811

## alber Hjelpemotorer



**Alber e-motion**

Diskret hjelpemotor styrt via drivringene. Gir brukeren ergonomiske fordeler og samtidig lang større frihet til å komme seg rundt.

Art. nr. 1490998\_24  
HMS nr. 161208



**Alber e-fix E35**

Konverterer en manuell rullestol til en lettevekts el-rullestol. **e-fix** demonteres lett og kan tas med i f.eks bagasjerommet på bilen.

Art. nr. 1566293  
HMS nr. 215765



**Alber scalamobil S35**

Bruk trapper på den enkle måten. Konverterer rullestolen til en mobil "trapp-rullestol".

Art. nr. 1520731  
HMS nr. 174014



**Alber scalacombi S36**

Inneholder integrert oppfellbart sete og rygg. Anvendes typisk av brukere som ikke har behov for en rullestol, men som har bruk for hjelp til å komme opp og ned trapper.

Art. nr. 1520417  
HMS nr. 174506



**Alber viamobil**

Gjør kjøreturen lettere og mer skånsom for hjelperen, og gir overskudd til lengre og mer behagelige turer for brukeren.

Art. nr. 1521003  
HMS nr. 176396