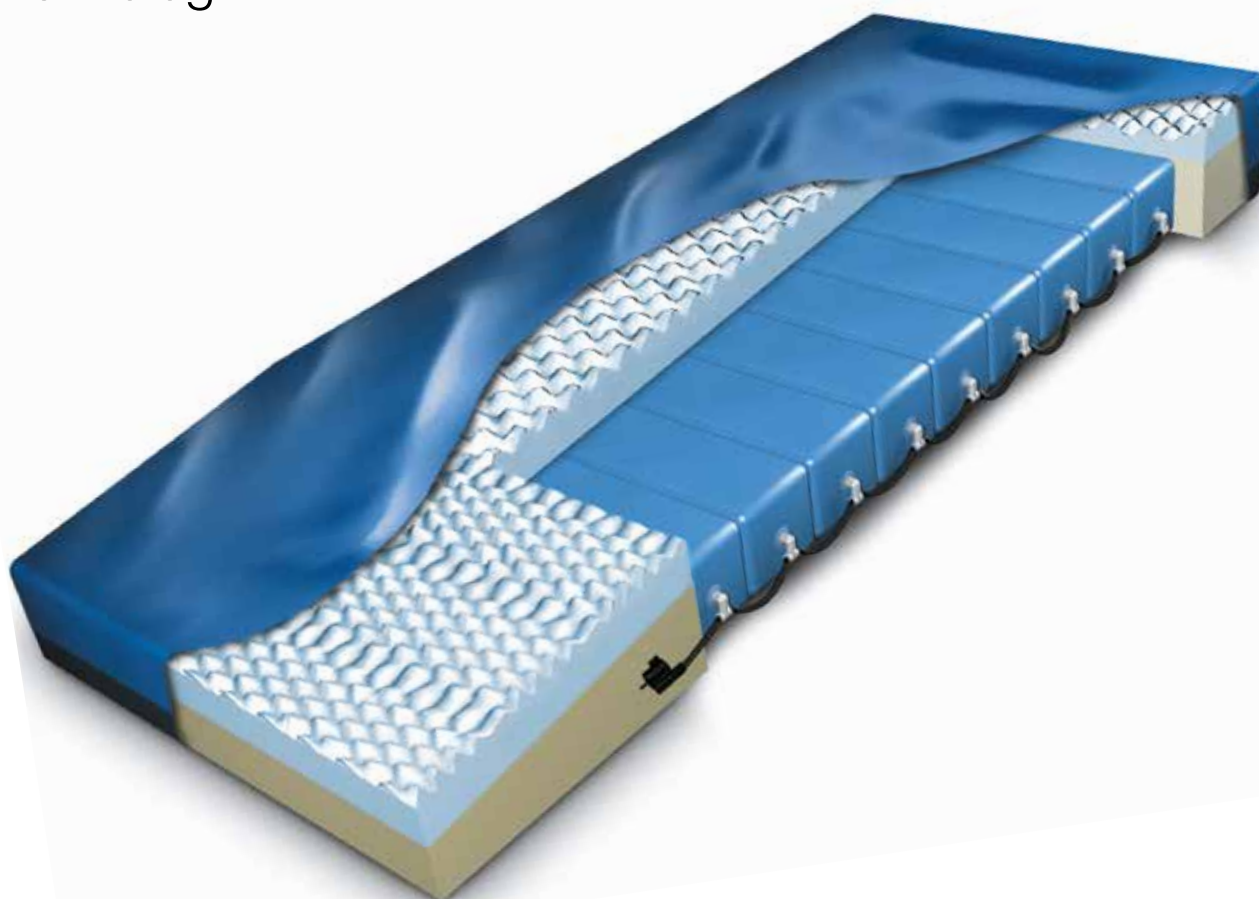

ATMOSAIR™

9000 MRS

GETINGE GROUP

Ikke-strømdrevet trykkavlastende
madrassystem med selvjusterende
teknologi.





SAT™-systemdesign



Funksjon	Fordel
Et trykksatt system som består av uavhengige, dynamiske luftkamre samt inntaks- og reguleringsventiler	Bidrar til å maksimere fordelingen av kroppsvekten og minimere trykket mot vevsoverflaten ved at det innvendige lufttrykket justeres som respons på kroppsbevegelser
9 horisontale luftsylindre	Sørger for trykkavlastning Støtter skuldre, seteparti og ben
Ikke-strømdrevet system	Gir uavbrutt behandling også under strømbrytning
Skrå helseksjon	Bidrar til å flytte vekten bort fra hælen og over til leggene og lårene
Fast kant	Fast kant gir setestøtte for pleier eller pasient
Hevede sidepolstringer (tilleggsutstyr)	Fungerer som en passiv påminnelse ved madrasskanten, og gjør det lettere for pasienten å komme seg ut av/ ned i sengen
Regulerbar lengde og bredde (tilleggsutstyr)	Sørger for at madrassen passer til en lang rekke sengerammer

A- og AR-modeller

Funksjon	Fordel
Alternierende trykk (AtmosAir™ 9000A og AtmosAir™ 9000AR)	Bidrar til bedre kapillær blodsirkulasjon
Sideveis rotasjon (AtmosAir™ 9000AR)	Bidrar til avlastning av trykkpunkter



Kvalitetsmaterialer

KVALITETSMATERIALER

Alternativer for madrassstrekk

TheraTex™ nylon: Et holdbart stoff med en blandet bakside av butylgummi og en lav overføringsfrekvens av fuktighet (hovedsakelig til bruk i travle områder med intensivbehandling).

eller

Recovery5™ flerveis strekk: Et materiale med strekk i flere retninger med høy overføringsfrekvens av fuktighet

Alternativer for madrassbunn

Et 340 g vinylmateriale som er egnet for bruk på sengerammer av springfjærtype.

eller

SoffTICK® antiskli: Et 280 g. sklisikkert materiale. (Hovedsakelig for bruk på sengerammer med glatt bunn.)

Individuelle case-studier har dokumentert redusert forekomst av trykksår og reduserte kostnader ved innkjøp og bruk av AtmosAir™ MRS som en del av et omfattende sårpleieprogram i institusjonen.*

Produktspesifikasjoner**

Lenge	190 cm • 213 cm ved 2,5 cm
Bredde	81 cm • 94 cm ved 1,3 cm
Dybde	18 cm
Tilleggsolstringer	5 cm høy med 46 cm utsparring
Antimikrobiell	Egenskaper i både trekket og skummet
Madrassgaranti	5 års erstatningsgaranti
Maksimal vekt, pasient	227 kg***

* Case-studiene er basert på funn ved enkeltinstitusjoner. Individuelle resultater kan variere. Studiene er tilgjengelige på forespørsel.

** Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

*** Kontakt rammeproduzenten for informasjon om rammekapasiteten.

Produktspesifikasjoner**

Brennbarhet: Alle madrassmaterialer oppfyller TB 117-standardene, og alle madrasser oppfyller USAs føderale standarder for antenning fra sigaretter. Tilleggsutstyret branntrekk sikrer samsvar med følgende standarder: 16CFR1633, ASTM E 1590, TB 129 og BFD IX-11

Luftpumpe (tilleggsutstyr)

Garanti	2 års erstatningsgaranti
Effekt	110V / 60 Hz
Utgangseffekt	8 liter per minutt
Syklustid	10 minutter
Vekt	2,3 kg

GETINGE GROUP



ArjoHuntleigh Norway AS

Olaf Helsets vei 5, N-0694, Norway, Tel: +47 22 08 00 50

MAQUET
GETINGE GROUP

ARJOHUNTLEIGH
GETINGE GROUP

GETINGE
GETINGE GROUP

www.getingegroup.com