



# KRYPTON

## DEN ULTIMATE QUICKIE



# DET ULTIMATE PROSJEKTET

Vi visste at det neste prosjektet ville kreve noe helt spesielt. Vårt oppdrag var å utvikle historiens beste Quickie rullestol, et nytt flaggskip som legemliggjør essensen i vår streben etter forbedring. Med den mest avanserte teknikken, det flotteste designet og det beste materialet, utviklet vi den ultimate Quickie. Vi utviklet Krypton.

Vi inngikk ikke kompromisser. Det var kun ett materiale vi kunne benytte for å oppnå den ytelse vi ønsket – karbonfiber fra luftfart-sindustrien. Resultatet er fenomenal stivhet i rammen og sylskarp manøvrering, pakket inn i en fullt justerbar manuell rullestol.





LETT I VEKT.  
**STIL.**  
YTELSE.

# BANEBRYTENDE KARBONRAMME

Vi konstruerte Krypton ved hjelp av den mest avanserte karbon-teknologien tilgjengelig og kan vise til et forbløffende forhold mellom styrke og vekt.

Resultatet er en ultralett rullestol kombinert med overlegen stivhet i rammen for ultrasponsiv kjøring.

Ta plass og du vil oppleve forskjellen...!

\*Veid konfigurasjon: sb36cm, sd40cm, med smale, rette klesbeskyttere i karbon, lettvekts sete- og ryggtrekk, superlettvekts kompaktbrems, karbonrygg uten kjørehåndtak, 24" Proton hjul og Schwalbe One dekk.



**6,2 kg**

***KRYPTON R***


Den letteste, fullt justerbare fastrammerullestolen, fra 6,2kg\*

**8,3 kg**

***KRYPTON F***

Verdens letteste sammenleggbare rullestol, fra 8,3kg\*



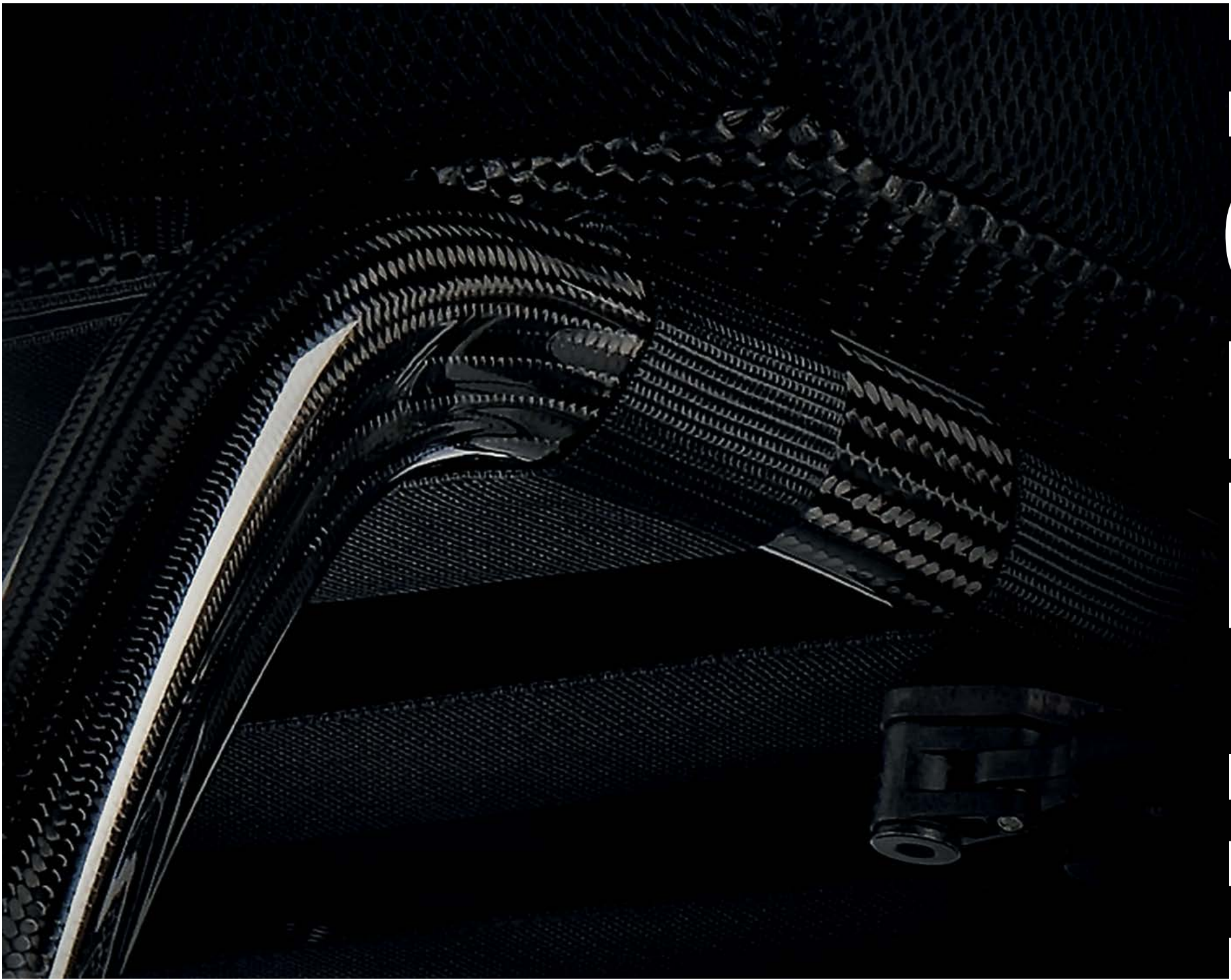

ATTENTION

# REVOLUSJONERENDE KONSTRUKSJON

Det finnes flere måter å lage karbonrør. Vi er den første rullestolprodusenten til å bruke patentert, innovativ og sømløs karbonfletteteknologi.

Den fullt automatiserte BRAID prosessen gjør det mulig å bygge den perfekte rammen – sterk der det trengs og lett der det er mulig, produsert i en presis og pålitelig automatisert prosess.

Det er det vi kaller ekspertise innen konstruksjon.



**1** Robotassistert fletting av karbonrørene til Kryptons rammerør

**2** Kvalitetssikring i prosessen

**3** Karbonrøret ferdigstilles

STERK





## UTVIKLET FOR Å BESTÅ OVER TID

Vi har ikke spart på innsatsen i forhold til å bevise påliteligheten til Krypton. Hver eneste del ble først godkjent etter at våre testingeniører var 100% fornøyd med kvaliteten.

Krypton er også testet under iskalde og stekende varme forhold (-20°C - 70°C).

Aldringstester har bekreftet rullestolens levetid, slik at vi er sikre på at Krypton virkelig består over tid.

I tillegg til å ha gjennomgått og bestått utførlige tester i egen regi, er Krypton selvfølgelig testet og godkjent i henhold til EN 12183:2014 ved et akkreditert testinstitutt.

# OG PÅLITTELIG



# TO RULLESTOLER - EN SJEL



# **KRYPTON R**

FENOMENAL STIVHET OG SYLSKARP  
MANØVRERING


Det er ikke kun det utsøkte materialet eller den kjente rammeprofilen, men også den atletiske og smidige følelsen av en fastrammerullestol. Trinnløst justerbart balansepunkt, finjustering av setehøyde foran og bak samt ryggvinkel bidrar til at Krypton R er laget for noe virkelig spesielt.

# **KRYPTON F**

DEN LETTESTE SAMMENLEGGBARE  
RULLESTOLEN NOENSINNE

Fra alle vinkler anses Krypton F å portrettere skjønnhet. Hjertet til Krypton F er det perfekt formede krysset som ligger tett under setet, knapt synlig, slik at inntrykket er minimalistisk og gir en følelse av en åpen ramme.



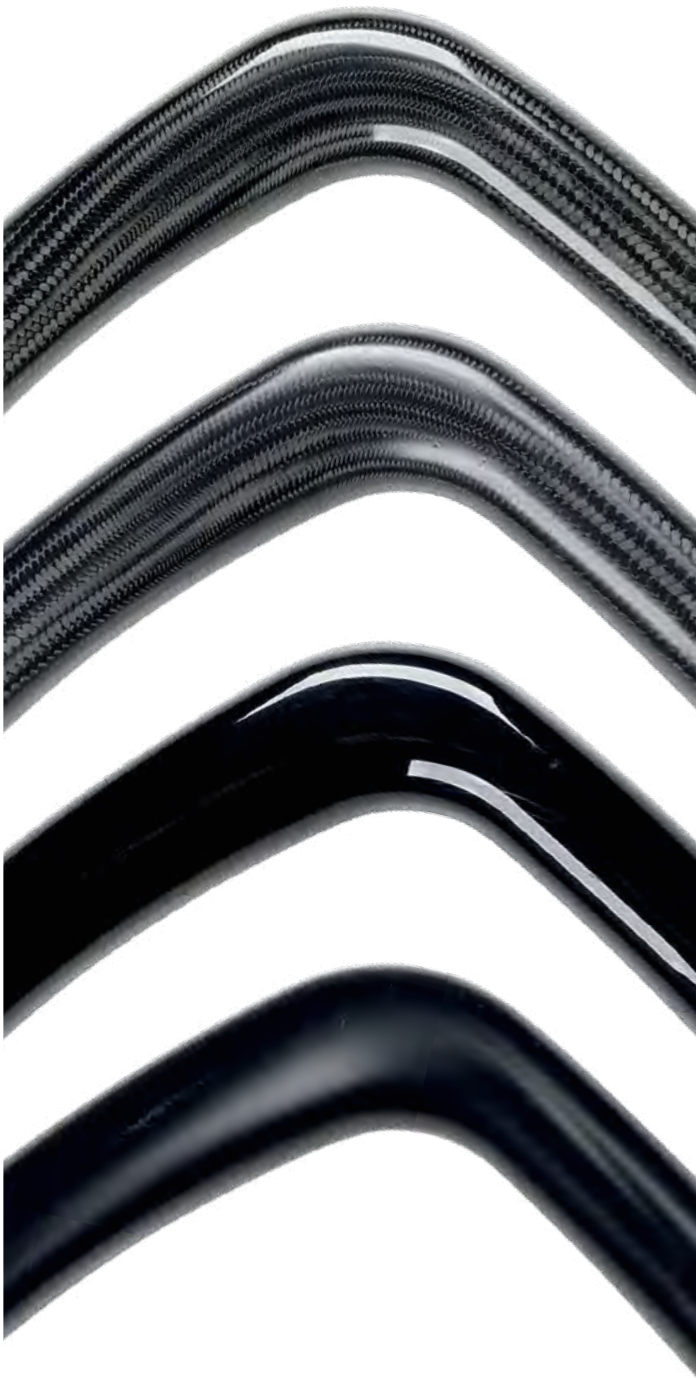

# UTSØKTE DETALJER

Å velge en Krypton er bare begynnelsen. Quickies muligheter for tilpassing til personlige ønsker gir deg en rullestol som du verdsetter og som definerer din egen stil.


## OVERFLATEBEHANDLING – VALGMULIGHETER

**Klarlakkert** – luksuriøs høyglanset klarlakk

**Mattlakkert** – en sofistisert og diskret tilnærming

**Sortlakkert** – sort overflate, matt eller høyglans

**Naturlig karbon** – uten overflatebehandling: minimalistisk, vektgevinst 100g. Utseende ligner mattlakkert.

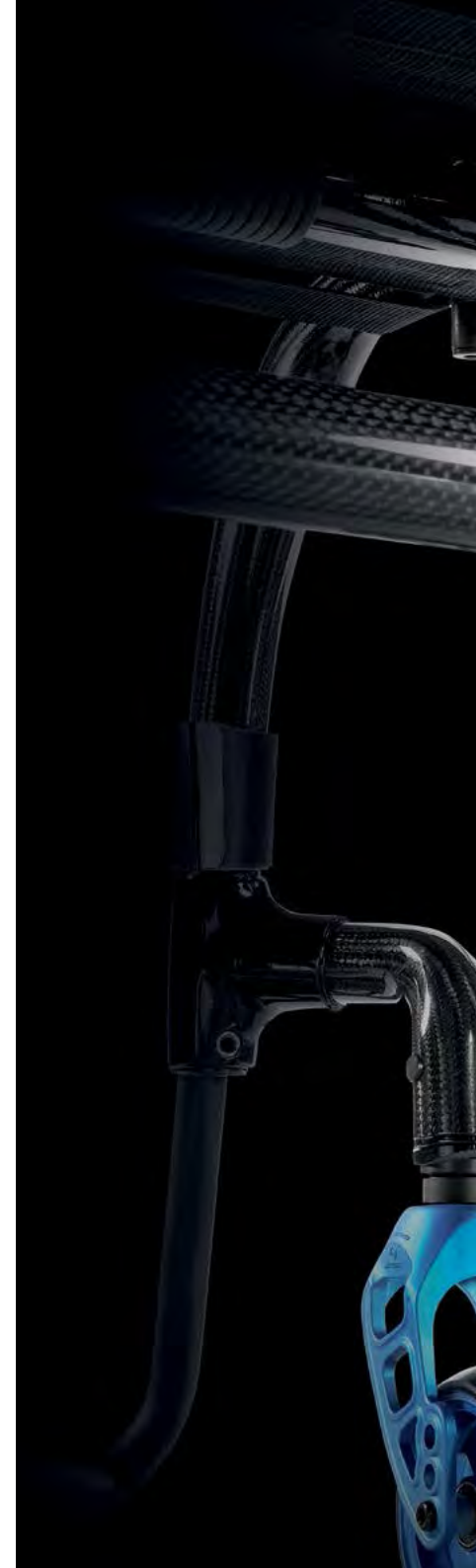



# TO POSISJONER FOR SVINGHJULENE

Smal og tilbaketrukket; ideell for trange omgivelser.

Bred og framtrukket; mer stabilitet i fronten.



## FARGEMULIGHETER

Det er fem ulike farger å velge mellom for svinghjulsgafler, hjul, ryggtrekk og merker.

# ALLSIDIG.

# STILIG.

# QUICKIE

FAMILIEN MED DE LETTESTE JUSTERBARE RULLESTOLENE

Vårt mål er å maksimere selvstendighet ved hjelp av innovative og pålitelige løsninger for å bidra til at du oppnår din ønsket livsstil.



SAMMENLEGGBAR

**XENON<sup>2</sup>** fra 8,8 kg



FASTRAMME

**HELIUM<sup>®</sup>** fra 6,8 kg



**KRYP**

# MANA

## **KRYPTON R**

*fra 6,2 kg*



SAMMENLEGGBAR



**TON F** *fra 8,3 kg*

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

	Krypton R – fastramme Karbonrullestol	Krypton F – Sammenleggbar Karbonrullestol
<b>Maksimal brukervekt</b>	125 kg	110 kg
<b>Rammeversjon</b>	Fastramme med åpen rammedesign	Sammenleggbar ramme med åpen rammedesign
<b>Rammemateriale</b>	Karbonfiber	Karbonfiber
<b>Setebredde</b>	320 - 460 mm (i 20 mm intervaller)	320 - 460 mm (i 20 mm intervaller)
<b>Setedybde</b>	340 - 480 mm (i 20 mm intervaller)	340 - 480 mm (i 20 mm intervaller)
<b>Setehøyde foran</b>	430 - 550 mm	430 - 550 mm
<b>Setehøyde bak</b>	380 - 500 mm	370 - 500 mm
<b>Rygg høyde</b>	250 - 450 mm	250 - 475 mm
<b>Ryggvinkel</b>	59° - 105°	75° - 103°
<b>Cambring</b>	0°/3°	0°/2°/4°
<b>Totalbredde // lengde // høyde</b>	760 mm // 930 mm // 950 mm	720 mm // 1075 mm // 950 mm
<b>Maksimal vendesirkel</b>	700 mm	700 mm
<b>Maksimal sikker helling</b>	7° (for bruk av parkeringsbrems)	7° (for bruk av parkeringsbrems)
<b>Svinghjul// Drivhjul</b>	3"/4"/5"/6" // 24"/25"	3"/4"/5"/6" // 24"/25"
<b>Rullestolens vekt</b>	fra 6,2 kg	fra 8,3 kg
<b>Transportvekt</b>	fra 3,65 kg	fra 5,8 kg
<b>Tyngste løse del</b>	Drivhjul 1,1 kg	Drivhjul 1,1 kg
<b>Avtagbare deler</b>	Drivhjul (kun for transport)	Drivhjul, benstøtter & klesbeskyttere (kun for transport)
<b>Rammefarger</b>	Natur; klarlakk høyglans eller matt, sort lakk høyglans eller matt	Natur; klarlakk høyglans eller matt, sort lakk høyglans eller matt
<b>Kollisjonstestet</b>	Ikke godkjent som sete i kjøretøy	
<b>Varetransport</b>	Sikre rullestolen i kjøretøyet (for eksempel bil eller fly)	
<b>Bruksområde</b>	For personer med redusert gangfunksjon (ungdom og voksne), som kjører selv eller kjøres av ledsager. Innendørs og utendørs bruk.	

Krypton er testet og godkjent i henhold til EN 12183:2014 ved et akkreditert testinstitutt.



## Sunrise Medical AS

Delitoppen 3  
1540 Vestby  
Tlf.: +47 66 96 38 00  
Faks: +47 66 96 38 80  
E-post: [post@sunrisemedical.no](mailto:post@sunrisemedical.no)  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)

Vi henviser til bestillingsskjemaet for flere spesifikasjoner, tilpasningsmuligheter og tilbehør. All informasjon kan endres uten varsel. Vennligst rådfør deg med Sunrise Medical AS ved spørsmål.

Dersom du har nedsatt syn er dette dokumentet tilgjengelig i pdf format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)

