




StimuLITE® Contoured Ekstra Myk er en trelags sittepute beregnet for personer med høy risiko for å utvikle trykksår. Puten kan også brukes med sår opp til og med sår grad 3 mens helbredelsesprosessen kan fortsette. Putens myke topplag av føyelig termoplastisk polyuretan (100%) med bikubestruktur (Honeycomb) gjør den særlig egnet for personer med ekstra følsom hud. Konstruksjonen gjør at puten er meget luftig å sitte på. Putens konturform er spesielt beregnet for para- og tetraplegikere med behov for en optimal sittestilling og trykkavlastning.

Puten er fremstilt av et avansert, medisinsk godkjent materiale og er naturlig antibakteriell, allergifri, hindrer soppdannelse og holder seg luktfri etter rengjøring. Puten veier bare ca. 1,5 kilo og kan vaskes i maskin 40-60° og tørkes i tørketrommel på lav varme i vaskeposen som følger med (se separat vaskeanvisning). StimuLITE® putene er punkterings sikre, har ingen ventiler, ingen pumpe, og ingen løse deler. Putens luftvolum eller konsistens endres ikke over tid eller ved skiftende temperatur. Puten leveres alltid komplett utstyrt og krever ingen tilleggskjøp for å oppnå optimal funksjon. StimuLITE® putene er konstruert med tanke på minimale servicekostnader og vedlikeholdsbehov. Det gir stor trygghet for brukere og forskrivere, og optimal kontroll med kostnader.

Maks. brukervekt 130 kg. Min. brukervekt 25 kg.

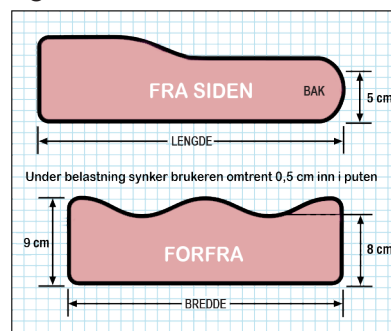


Total Pressure Management™

Hindrer Hudskjørhet

Hudskjørhet er oppmyking av hud forårsaket av kroppssvette eller utsondring av fuktighet fra kroppen. Økt hudmykhet eller hudskjørhet gir mindre motstandskraft mot trykk og kan forårsake sår. StimuLITE® puter består av sekskantede celler i bikubestruktur (honeycomb) som er perforert og tillater luftsirkulasjon og avleder fuktighet. Brukeren sitter på 93 % luft og 7 % materiale. StimuLITE® pustende trekk lufter ut fuktighet og holder huden tørr. Ventilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse for inkontinente brukere. Urinen renner gjennom puten og samles i inkontinensinnlegget som følger med, som plasseres inni trekket på undersiden av puten. På den måten ledes fuktighet og væske bort fra brukerens hud. Både puten og trekket tåler kontakt med urin og er enkel å rengjøre med vanlig såpe i en dusj, og skal klappes tørr.


Puster og fordamp fuktighet

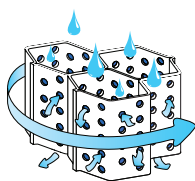

Komplett ventilasjonssystem

Trykkavlastning og sidestabilitet


StimuLITE® sitteputen Contoured Ekstra Myk Bredere Sittegrep består av tre lag med ulik hardhet, og reduserer trykk gjennom å fordele trykket fra følsomme områder. Det gjør at utstående setebein får samme trykk som nærliggende kroppsdeler. StimuLITE® sitteputer fordeler trykk fra sete- og lårknuter til mykdeler under lårene, og kan brukes med trykksår opptil sårgrad 3. En mykere lag beskytter ischial og haleben og minimerer risikoen for å sitte gjennom. Putens cellstruktur former seg etter kroppen og med sidestabilisatorer sine gir brukeren en god sitte stillning samtidig som den omfordeler trykk.

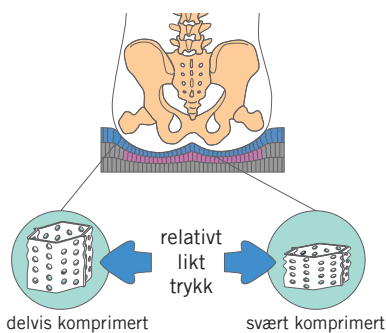

Fordeler trykk etter kroppsforn

Reduserer shear

Den laterale stivheten til cellene i StimuLITE® sitteputen avgjør sitteputens forskyvning (shear) og stabilitet. For mye stivhet øker skyvekraften mens for lite stivhet reduserer stabiliteten. Det øverste laget har en mindre lateral stivhet for å redusere skyvekraften mot huden. De to nederste lagene har større horisontal stivhet for å sikre optimal stabilitet. Putens stretchtrekk kombinert med det øverste laget gir en skånsom skyvekraft mot huden. Cellene i StimuLITE®s bikubestruktur er anisotrop, dvs at den har full bevegelighet i alle retninger og gir aldri absolutt "stopp". Når brukeren synker ned i puten, omslutes seteknuten av cellene som gjør at man "sitter stille", men likevel kan bevege seg uten å få "shear" i vevet. Shear oppstår når trykkavlastningen ikke er tilstrekkelig og friksjonen er for høy. Cellenes konstruksjon gjør at disse faktorene reduseres.

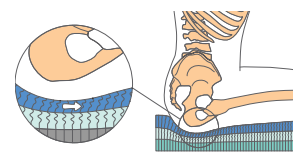

minimal skjærkraft mot vevene
Diffus lateral skyvekraft



Først velg størrelse, siden flat / rund bunn, slik at du kan finne din pute eller passende tilbehør i samme rad. Rund bunn anbefals for rullestol med hengekøye dypere enn 2,5 cm.

StimulITE® Contoured XS (Ekstra Myk)

Størrelse	Pute med flat bunn			Pute med avrundet bunn			Passer alla puter			
	Pute (*) Art. nr.	HMS nr.	Ekstra Cordura Trekk Art. nr.	Tillbehør: Ull trekk Art. nr.	HMS nr.	Ekstra Cordura trekk Art. nr.	Tillbehør: Ull trekk Art. nr.	HMS nr.	Ekstra Inkontinlegg	
									Art. nr.	HMS nr.
b36 d36 h8	CDXS1414	207683	WCOVCD1414	207545	CDXS1414S	COVCD1414S	WCOVCD1414S	207546	IN1414	207498
b36 d41 h8	CDXS1416	207685	WCOVCD1416	207547	CDXS1416S	COVCD1416S	WCOVCD1416S	207548	IN1414	207498
b36 d46 h8	CDXS1418	207687	WCOVCD1418	207549	CDXS1418S	COVCD1418S	WCOVCD1418S	207550	IN1414	207498
b36 d51 h8	CDXS1420	207689	WCOVCD1420	207551	CDXS1420S	COVCD1420S	WCOVCD1420S	207552	IN1414	207498
b38 d41 h8	CDXS1516	207691	WCOVCD1516	207553	CDXS1516S	COVCD1516S	WCOVCD1516S	207554	IN1616	207499
b38 d43 h8	CDXS1517	207693	WCOVCD1517	207555	CDXS1517S	COVCD1517S	WCOVCD1517S	207556	IN1616	207499
b38 d46 h8	CDXS1518	207695	WCOVCD1518	207557	CDXS1518S	COVCD1518S	WCOVCD1518S	207558	IN1618	207500
b38 d51 h8	CDXS1520	207697	WCOVCD1520	207559	CDXS1520S	COVCD1520S	WCOVCD1520S	207560	IN1618	207500
b41 d41 h8	CDXS1616	207699	WCOVCD1616	207561	CDXS1616S	COVCD1616S	WCOVCD1616S	207562	IN1616	207499
b41 d43 h8	CDXS1617	207701	WCOVCD1617	207563	CDXS1617S	COVCD1617S	WCOVCD1617S	207564	IN1616	207499
b41 d46 h8	CDXS1618	207703	WCOVCD1618	207565	CDXS1618S	COVCD1618S	WCOVCD1618S	207566	IN1618	207500
b41 d51 h8	CDXS1620	207705	WCOVCD1620	207567	CDXS1620S	COVCD1620S	WCOVCD1620S	207568	IN1618	207500
b43 d41 h8	CDXS1716	207707	WCOVCD1716	207569	CDXS1716S	COVCD1716S	WCOVCD1716S	207570	IN1616	207499
b43 d43 h8	CDXS1717	207709	WCOVCD1717	207571	CDXS1717S	COVCD1717S	WCOVCD1717S	207572	IN1616	207499
b43 d46 h8	CDXS1718	207711	WCOVCD1718	207573	CDXS1718S	COVCD1718S	WCOVCD1718S	207574	IN1618	207500
b43 d51 h8	CDXS1720	207713	WCOVCD1720	207575	CDXS1720S	COVCD1720S	WCOVCD1720S	207576	IN1618	207500
b46 d41 h8	CDXS1816	207715	WCOVCD1816	207577	CDXS1816S	COVCD1816S	WCOVCD1816S	207578	IN1816	207501
b46 d43 h8	CDXS1817	207717	WCOVCD1817	207579	CDXS1817S	COVCD1817S	WCOVCD1817S	207580	IN1816	207501
b46 d46 h8	CDXS1818	207719	WCOVCD1818	207581	CDXS1818S	COVCD1818S	WCOVCD1818S	207582	IN1818	207502
b46 d51 h8	CDXS1820	207721	WCOVCD1820	207583	CDXS1820S	COVCD1820S	WCOVCD1820S	207584	IN1818	207502
b51 d41 h8	CDXS2016	207723	WCOVCD2016	207585	CDXS2016S	COVCD2016S	WCOVCD2016S	207586	IN1816	207501
b51 d46 h8	CDXS2018	207725	WCOVCD2018	207587	CDXS2018S	COVCD2018S	WCOVCD2018S	207588	IN1818	207502
b51 d51 h8	CDXS2020	207727	WCOVCD2020	207589	CDXS2020S	COVCD2020S	WCOVCD2020S	207590	IN2020	207503

Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, ikke prisforhandlet med NAV

Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, ikke prisforhandlet med NAV

(*) Hver pute leveres med to Cordura trekk, en inkontinensinlegg og en vaskepåse

Tillbehør: Korsrygg støtte LSUPP (HMS nr. 207 513),

Kilistotte KIL3S (HMS nr: 207507, 36x27x3 cm) KIL3L (HMS nr: 207506, 41x27x3 cm), KIL5S (HMS nr: 207509, 36x27x5 cm), KIL5L (HMS nr: 207508, 41x27x5 cm)

Vanntett trekk (WPC1414 b36 d36 - WPC2020 b51 d51 HMS nr: 207506 - 207544)



GÖRAN SJÖDÉN REHABSHOP NORGE A/S

Postboks 157 1378 Nesbru

Tel: 48 50 32 97

email: ordre@rehabshop.com

www.rehabshop.as



Copyright, 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved.
U.S. Patent #5,180,619; U.S. Patent #5,444,881 and other
patents pending worldwide. Total Pressure Management
is a trademark and Stimulite and Supracor are registered
trademarks of Supracor Systems, Inc.