



StimuLITE®

CLASSIC BARIATRIC

TOTAL PRESSURE MANAGEMENT


max bruker vekt 360 kg



Perforert bikubestruktur for optimal luftsirkulasjon, for å hindre opphopning av fuktighet

Kan vaskes i maskin og tørkes i tørketrommel

Pustende trekk for beste mulig ventilasjon

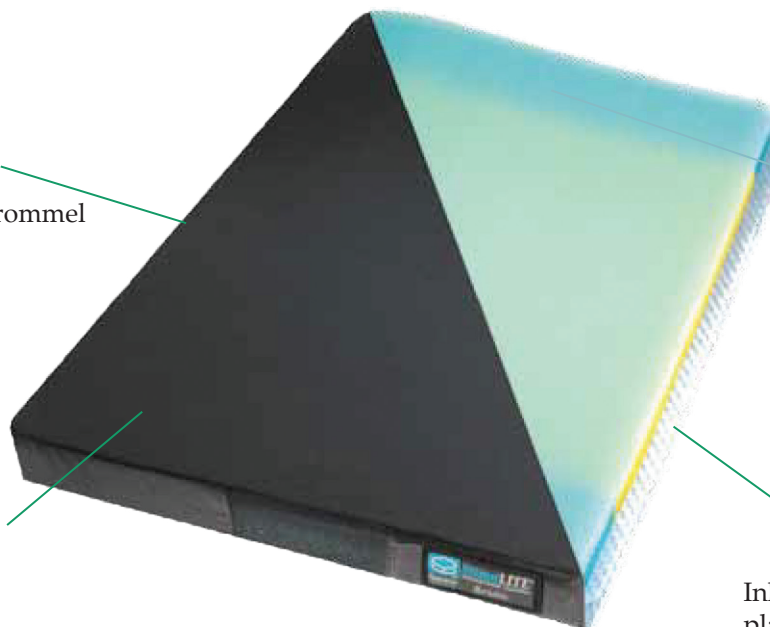

Inkontinens Innlegg plassert mellom puten og den ekstra vektbærende sjikt


LETT OG LUFTIG MED FREMRAGENDE KOMFORT

StimuLITE® Classic Bariatric puten er utviklet spesielt for ekstra tunge brukere med en maksimal vekt på ca 360 kg. StimuLITE® Classic Bariatric pute er også egnet for andre personer med høy decubitusrisiko med behov for en flat og meget stabil pute. StimuLITE® Classic Bariatric har svært lav vekt for hvor mye vekt det kan bære og gir optimal trykkavlastning og komfort. Putens vekt er lavere enn 3 kg, siden materialet (100% Thermoplastisk polyuretan) er veldig lett. Putens kjerne er laget av to solide lag med sekskantseller i bikubestruktur: Den fleksible, tolags toppen lar sittebensknuten synke ned i puten mens den støtter kroppen; den stive bunnelaget er veldig sterk og sikrer at selv svært tunge brukere ikke sitter gjennom. Cellestrukturen tilbyr individuell tilpasning og utforming, fordeler trykket og gir stabilitet. Som forsterkning er sterkere materiale arbeidet inn i sidene. Resultatet er en tilpasning av puten til kroppen, som fører til en jevn trykkfordeling og god stabilitet for brukeren.

ikke sine trykkavlastende egenskaper, hvis den er tørr eller fuktig, varm eller kald. Materialet er antibakterielle og hindrer utvikling av lukt under vanlig rengjøring. For brukere som svetter tungt eller ved inkontinens inkluderes en fuktoppsamlare som er plassert inn i puten mellom topp- og bunnelaget.

Putens ventilasjon- og dreneringsystem avleder væske fra kroppen og samles under puten. Brukerens hud unngår herved langvarig eksponering for fukt og holdes kjølig og tørt. Pute perforert cellekonstruksjon gjør at luften kan sirkulere og fuktigheten fordampes slik at overflaten er tørr. Brukeren forblir tørr og kjølig, selv mektig varme mennesker. En luftgjennomtrengelige trekk med åpninger rundt sider utfyller effektivt ventilasjonssystemet. Det unike ventilasjonssystemet reduserer risikoen for huden skjørhet og gir optimal kontroll av deres trykk.

Puten er lett å rengjøre og kan vaskes av med såpe eller i maskin, noe som letter for inkontinente personer. Både trekket og puten tåler kontakt med urin. Puten lufttørkes, gjerne stående med lagene vekt hverandre, alternativt i tørketrommel. På reise er det nok å klappe på tørr med et håndkle før videre bruk. Puten endrer

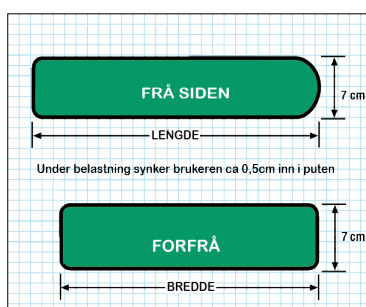

Valgfritt tilbehør inkluderer en liten pose som kan festes med borrelås på undersiden av puten, for nøkler, lommebok etc.






STIMULITE®: CLASSIC BARIATRIC SITTEPUTE



Total Pressure Management™

Hindrer hudskjørhet

Hudskjørhet er oppmyking av hud forårsaket av kroppssvette eller utsondring av fuktighet fra kroppen. Økt hudmykhet eller hudskjørhet gir mindre motstandskraft mot trykk og kan forårsake sår. StimuLITE® puter består av sekskantede celler i bikakestruktur (honeycomb) som er perforert og tillater luftsirkulasjon og avleder fuktighet. Brukeren sitter på 93 % luft og 7 % materiale. StimuLITE® pustende trekk lufter ut fuktighet og holder huden tørr. Ventilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse for inkontinente brukere. Urinen renner gjennom puten og samles i inkontinensinnlegget som følger med, som plasseres inni trekket på undersiden av puten. På den måten ledes fuktighet og væske bort fra brukerens hud. Både puten og trekket tåler kontakt med urin og er enkel å rengjøre med vanlig såpe i en dusj, og skal klappes tørr.

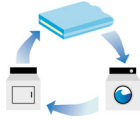


Puster og fordampes fuktighet



Komplett ventilasjonssystem

Trykkavlastning og sidestabilitet


StimuLITE® sitteputen Classic Bariatric består av tre lag med ulik hårdhet, og reduserer trykk gjennom å fordele trykket fra følsomme områder. Det gjør at utstående setebein får samme trykk som nærliggende kroppsdeler. StimuLITE® sitteputer fordeler trykk fra sete- og lårknuter till mykdeler under lårene, og kan brukes med trykksår opptil sårgrad 3. En mykere lag beskytter ischial og haleben og minimerer risikoen for å sitte gjennom. Putens cellstruktur former sig etter kroppen og med sidestabilisatorer sine gir brukeren en god sittestilling samtidig som den omfordeler trykk.

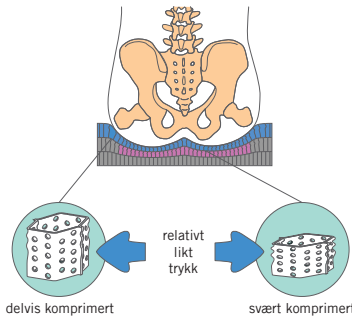

Fördeler trykk etter kroppsform

Reduserer shear

Den laterale stivheten til cellene i StimuLITE® sitteputen avgjør sitteputens forskyning (shear) og stabilitet. For mye stivhet øker skyvekraften mens for lite stivhet reduserer stabiliteten. To lag med forskjellig stivhet i StimuLITE® Classic Bariatric pute reduserer skjær uten å ofre stabiliteten. Det øvre lag har en mindre sideveis stivhet for å redusere skjærkraften mot huden. Den nedre lager har en større horisontalstivhet for optimal stabilitet. Putens stretchtrekk kombinert med det øverste laget gir en skånsom skyvekraft mot huden. Cellene i StimuLITE®s bikubestruktur er anisotrop, dvs at den har full bevegelighet i alle retninger og gir aldri absolutt "stopp". Når brukeren synker ned i puten, omslutes seteknuten av cellene som gjør at man "sitter stille", men likevel kan bevege seg uten å få "shear" i vevet. Shear oppstår når trykkavlastningen ikke er tilstrekkelig og friksjonen er for høy. Cellenes konstruksjon gjør at disse faktorene reduseres.

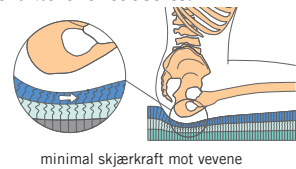

Diffus lateral skjvukraft

StimuLITE® Classic Bariatric Sitteputer

| Størrelse | Pute (*) | | Ekstra Cordura Trekk | | Tillbehør: Ull trekk | | Ekstra Inkoilegg | |
|------------|----------|---|----------------------|---|----------------------|---|------------------|---------|
| | Art. nr. | HMS nr. | Art. nr. | HMS nr. | Art. nr. | HMS nr. | Art. nr. | HMS nr. |
| b51 d46 h7 | CLBA2018 | Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen | COVCLBA2018 | Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen | WCOVCLBA2018 | Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen | IN1818 | 207502 |
| b51 d51 h7 | CLBA2020 | | COVCLBA2020 | | WCOVCLBA2020 | | IN2020 | 207503 |
| b56 d41 h7 | CLBA2216 | | COVCLBA2216 | | WCOVCLBA2216 | | IN1816 | 207501 |
| b56 d46 h7 | CLBA2218 | | COVCLBA2218 | | WCOVCLBA2218 | | IN1818 | 207502 |
| b56 d51 h7 | CLBA2220 | | COVCLBA2220 | | WCOVCLBA2220 | | IN2020 | 207503 |
| b56 d56 h7 | CLBA2222 | | COVCLBA2222 | | WCOVCLBA2222 | | IN2222 | 207504 |
| b56 d61 h7 | CLBA2224 | | COVCLBA2224 | | WCOVCLBA2224 | | IN2222 | 207504 |
| b61 d46 h7 | CLBA2418 | | COVCLBA2418 | | WCOVCLBA2418 | | IN2020 | 207503 |
| b61 d51 h7 | CLBA2420 | | COVCLBA2420 | | WCOVCLBA2420 | | IN2222 | 207504 |
| b61 d56 h7 | CLBA2422 | | COVCLBA2422 | | WCOVCLBA2422 | | IN2424 | 207505 |
| b61 d61 h7 | CLBA2424 | | COVCLBA2424 | | WCOVCLBA2424 | | IN2424 | 207505 |
| b65 d51 h7 | CLBA2620 | | COVCLBA2620 | | WCOVCLBA2620 | | IN2424 | 207505 |
| b65 d56 h7 | CLBA2622 | | COVCLBA2622 | | WCOVCLBA2622 | | IN2424 | 207505 |
| b71 d51 h7 | CLBA2820 | | COVCLBA2820 | | WCOVCLBA2820 | | IN2424 | 207505 |
| b71 d71 h7 | CLBA2828 | | COVCLBA2828 | | WCOVCLBA2828 | | IN2424 | 207505 |
| b76 d56 h7 | CLBA3022 | | COVCLBA3022 | | WCOVCLBA3022 | | IN2424 | 207505 |

(*) Hver pute leveres med to Cordura trekk, en inkontinensinnlegg og en vaskepås.
Andre størrelse kan spesialbestilles uten ekstra kostnad. Maks størrelse: CLBA3026 b76 d71 h7. Maks brukervekt 360 kg
Puten finns kun med plan bunn.



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Alle StimuLITE® sitteputer er branntestet og godkjent i henhold till ISO 7176-16, NS-EN 1021:2006, NS-EN 597:2015 og CE-merket.



SVENSK MILJÖBAS



GÖRAN SJÖDÉN REHABSHOP NORGE AS

Postboks 157 1378 Nesbru

Tel: +(47) 48 50 32 97

email: ordre@rehabshop.com

www.rehabshop.as

Goran Sjøden's Norge AS