


SLIMLINE™ SITTEPUTE


LUFTIG KOMFORT OG MASKINVASKBAR TRYKKAVLASTNING

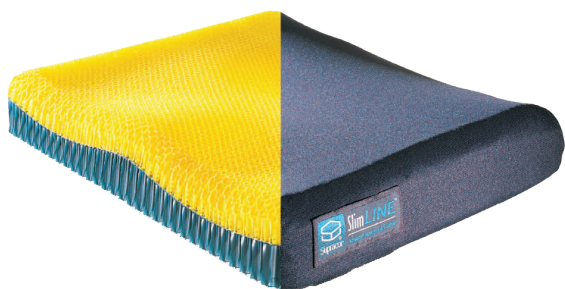

StimuLITE® Slimline™ Standard pute er beregnet for personer med følelse eller lav risiko for å utvikle trykksår. StimuLITE® Slimline gir optimal komfort og lite vedlikehold. Et unikt ventilasjonssystem og lav vekt gjør det ideelt for aktive rullestolsbruk. Puten er laget av sekskandceller i bikubestruktur (Honeycomb), en cellestruktur som er myk, fleksibel, pustende og samsvarer med kroppen (anisotropisk). StimuLITE® Slimline™ består av åpne og perforerte celler i to lag som er bundet sammen. Den unike cellestruktur fordeler vekten jevnt og støttes opptak (punkt trykk) som utjevner trykk og forhindrer skade på vev. For å redusere skjær og friksjon, flytte celleveggene under kroppens bevegelser. Cellvegger er perforert for å tillate luft å sirkulere og fuktighets utsvevende, som motvirker hudens skjørhet og holder huden kjølig og tørr.

Lårstøtte, ben skillelinjen og putens sittegropp formar sig etter kroppen for optimal komfort og støtte. StimuLITE® Slimline™ kan vaskes i maskin og tørkes i tørketrommel. Puten er laget av termoplastisk polyuretan – et medisinsk godkjent produkt uten allergener eller miljømessig stressende tilsetningsstoffer, bakterie- og luktavvisende ved regelmessig renhold. For brukere som er inkontinent medfølger en fuktoppsamlere, som er plassert inne i trekket – under puten! – Noe som betyr at væsken strømmer gjennom puten og holder huden tørr. StimuLITE® Slimline™ tilbyr optimal trykk forebyggende egenskaper, og i tillegg muligheten til maskinvask, noe som gjør StimuLITE® Slimline™ pute til den moderne løsningen for å forebygge trykksår.

Maks. brukervekt 130 kg. Min. brukervekt 25 kg.

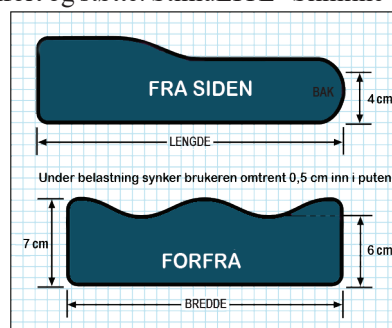


Total Pressure Management™

Hindrer Hudskjørhet

Hudskjørhet er oppmyking av hud forårsaket av kroppssvette eller utsondring av fuktighet fra kroppen. Økt hudmykhet eller hudskjørhet gir mindre motstandskraft mot trykk og kan forårsake sår. StimuLITE® puter består av sekskantede celler i bikakestruktur (honeycomb) som er perforert og tillater luftsirkulasjon og avleder fuktighet. Brukeren sitter på 93 % luft og 7 % materiale. StimuLITE® pustende trekk lufter ut fuktighet og holder huden tørr. Ventilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse for inkontinente brukere. Urinen renner gjennom puten og samles i inkontinensinnlegget som følger med, som plasseres inni trekket på undersiden av puten. På den måten ledes fuktighet og væske bort fra brukerens hud. Både puten og trekket tåler kontakt med urin og er enkel å rengjøre med vanlig såpe i en dusj, og skal klappes tørr.


Puster og fordamp fuktighet

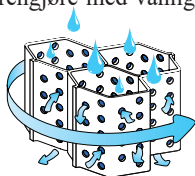

Komplett ventilasjonssystem

Trykkavlastning og sidestabilitet


StimuLITE® sitteputen Slimline™ består av tre lag med ulik hardhet, og redusere trykk gjennom å fordele trykket fra følsomme områder. Det gjør at utstående setebein får samme trykk som nærliggende kroppsdel. StimuLITE® sitteputer fordeler trykk fra sete- og lårknuter til mykdeler under lårene, og kan brukes med trykksår opptil sårgrad 3. En mykere lag beskytter ischial og haleben og minimerer risikoen for å sitte gjennom. Putens cellstruktur former seg etter kroppen og med sidestabilisatorer sine gir brukeren en god sitte stilling samtidig som den omfordeler trykk.

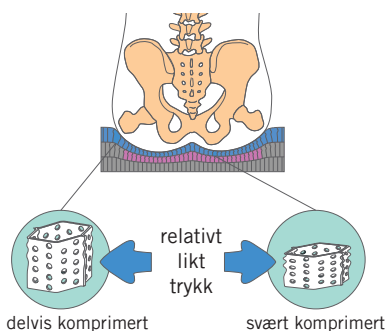

Fordeler trykk etter kroppsform

Reduserer shear

Den laterale stivheten til cellene i StimuLITE® sitteputen avgjør sitteputens forskyvning (shear) og stabilitet. For mye stivhet øker skyvekraften mens for lite stivhet reduserer stabiliteten. Det øverste laget har en mindre lateral stivhet for å redusere skyvekraften mot huden. De to nederste lagene har større horisontal stivhet for å sikre optimal stabilitet. Putens stretchtrekk kombinert med det øverste laget gir en skånsom skyvekraft mot huden. Cellene i StimuLITE®s bikubestruktur er anisotrop, dvs at den har full bevegelighet i alle retninger og gir aldri absolutt "stopp". Når brukeren synker ned i puten, omslutes seteknuten av cellene som gjør at man "sitter stille", men likevel kan bevege seg uten å få "shear" i vevet. Shear oppstår når trykkavlastningen ikke er tilstrekkelig og friksjonen er for høy. Cellenes konstruksjon gjør at disse faktorene reduseres.

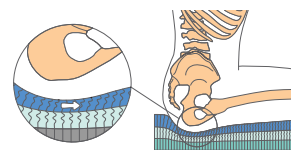

minimal skjærkraft mot venene

Diffus lateral skyvekraft



STIMULITE®: SLIMLINE™ SITTEPUTE



Først velg størrelse, siden flat / rund bunn, slik at du kan finne din pute eller passende tilbehør i samme rad. Rund bunn anbefals for rullestol med hengekoye dypere enn 2,5 cm.

StimulITE® Slimline™ Ekstra Myk

Størrelse	Pute med flat bunn				Pute med avrundet bunn				Passer alla puter	
	Pute (*)		Tilbehør: Ull trekk		Pute (*)		Tilbehør: Ull trekk		Ekstra Inkontinlegg	
	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.
b36 d36 h8	SM1414	207729	WCOVSM1414	207637	SM1414S	207730	WCOVSM1414S	207638	IN1414	207498
b36 d41 h8	SM1416	207731	WCOVSM1416	207639	SM1416S	207732	WCOVSM1416S	207640	IN1414	207498
b36 d46 h8	SM1418	207733	WCOVSM1418	207641	SM1418S	207734	WCOVSM1418S	207642	IN1414	207498
b36 d51 h8	SM1420	207735	WCOVSM1420	207643	SM1420S	207736	WCOVSM1420S	207644	IN1414	207498
b38 d41 h8	SM1516	207737	WCOVSM1516	207645	SM1516S	207738	WCOVSM1516S	207646	IN1616	207499
b38 d43 h8	SM1517	207739	WCOVSM1517	207647	SM1517S	207740	WCOVSM1517S	207648	IN1616	207499
b38 d46 h8	SM1518	207741	WCOVSM1518	207649	SM1518S	207742	WCOVSM1518S	207650	IN1618	207500
b38 d51 h8	SM1520	207743	WCOVSM1520	207651	SM1520S	207744	WCOVSM1520S	207652	IN1618	207500
b41 d41 h8	SM1616	207745	WCOVSM1616	207653	SM1616S	207746	WCOVSM1616S	207654	IN1616	207499
b41 d43 h8	SM1617	207747	WCOVSM1617	207655	SM1617S	207748	WCOVSM1617S	207656	IN1616	207499
b41 d46 h8	SM1618	207749	WCOVSM1618	207657	SM1618S	207750	WCOVSM1618S	207658	IN1618	207500
b41 d51 h8	SM1620	207751	WCOVSM1620	207659	SM1620S	207752	WCOVSM1620S	207660	IN1618	207500
b43 d41 h8	SM1716	207753	WCOVSM1716	207661	SM1716S	207754	WCOVSM1716S	207662	IN1616	207499
b43 d43 h8	SM1717	207755	WCOVSM1717	207663	SM1717S	207756	WCOVSM1717S	207664	IN1616	207499
b43 d46 h8	SM1718	207757	WCOVSM1718	207665	SM1718S	207758	WCOVSM1718S	207666	IN1618	207500
b43 d51 h8	SM1720	207759	WCOVSM1720	207667	SM1720S	207760	WCOVSM1720S	207668	IN1618	207500
b46 d41 h8	SM1816	207761	WCOVSM1816	207669	SM1816S	207762	WCOVSM1816S	207670	IN1816	207501
b46 d43 h8	SM1817	207763	WCOVSM1817	207671	SM1817S	207764	WCOVSM1817S	207672	IN1816	207501
b46 d46 h8	SM1818	207765	WCOVSM1818	207673	SM1818S	207766	WCOVSM1818S	207674	IN1818	207502
b46 d51 h8	SM1820	207767	WCOVSM1820	207675	SM1820S	207768	WCOVSM1820S	207676	IN1818	207502
b51 d41 h8	SM2016	207769	WCOVSM2016	207677	SM2016S	207770	WCOVSM2016S	207678	IN1816	207501
b51 d46 h8	SM2018	207771	WCOVSM2018	207679	SM2018S	207772	WCOVSM2018S	207680	IN1818	207502
b51 d51 h8	SM2020	207773	WCOVSM2020	207681	SM2020S	207774	WCOVSM2020S	207682	IN2020	207503

Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikelen er ikke prisforhandlet med NAV

Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikelen er ikke prisforhandlet med NAV

(*) Hver pute leveres med to Cordura trekk, en inkontinensinnlegg og en vaskepåse

Tilbehør: Korsrygg støtte LSUPP (HMS nr. 207 513),

Kilistøtte KIL3S (HMS nr: 207507, 36x27x3 cm) KIL3L (HMS nr: 207506, 41x27x3 cm), KIL5S (HMS nr: 207509, 36x27x5 cm), KIL5L (HMS nr: 207508, 41x27x5 cm)

Vanntett trekk (WPC1414 b36 d36 - WPC2020 b51 d51 HMS nr: 207506 - 207541)



GÖRAN SJÖDÉN REHABSHOP NORGE A/S

Postboks 157 1378 Nesbru

Tel: 48 50 32 97

email: ordre@rehabshop.com

www.rehabshop.as



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619; U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.