


StimuLITE® Sport setepute er utviklet spesielt for rollestol sport og tilsvarende gjeldende regelverk. StimuLITE® Sports Dyna er også egnet for andre formål, for folk med mindre decubitusrisiko. StimuLITE® Sports pute er veldig enkelt, med optimal trykkavlastning og komfort. To ulike faste lag av bikakestruktur tillater sittbenknøllarna synke ned i puten. Resultatet er en tilpasning av puten til kroppen, som fører til en jevn trykkfordeling og stabilitet. Som gevinsten er fastere pute sidene. Putens vekt er under 1,5 kg, som materiale (100% Thermoplastisk polyuretan). Materialet er antibakterielle og avviser lukt under vanlig rengjøring. Puten leveres med to spesiell glidevennlige

trekk som tillater brukeren full bevegelsesfrihet i rollestolen under sport. Passer også utmerket for brukere som trenger ekstra hjelp med transfer inn og ut av stolen.

Puten og trekket vaskes i maskin og tørkes i tørketrommel. For inkontinente brukere medfølger et fuktoppsamlare som plasseres under puten inne i trekket. Både trekket og puten tåler kontakt med urin.

Hovedårsaken til trykksår problemet oppstår er trykk, syvekraft og fuktighet som gjør huden skjør. StimuLITE® Sports pute reduserer trykkbelastning, reduserer skjærkrefter og friksjon oppstår og forsvinner det samler seg fuktighet som hindrer mykning av huden. De perforerte bikubestrukturen fremmer luft sirkulasjon og avleder fuktighet. En luftgjennomtrengelige trekk med åpninger rundt sider kompletterer putens effektive ventilasjonssystemet.

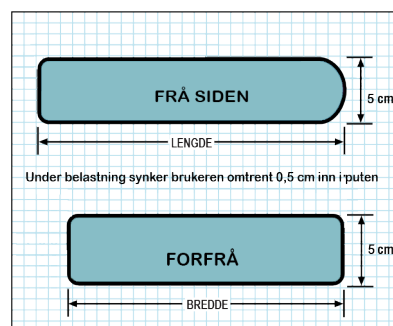

Total Pressure Management™


Hindrer Hudskjørhet

Hudskjørhet er oppmyking av hud forårsaket av kroppssvette eller utsondring av fuktighet fra kroppen. Økt hudmykhet eller hudskjørhet gir mindre motstandskraft mot trykk og kan forårsake sår.

StimuLITE® puter består av sekskantede celler i bikakestruktur (honeycomb) som er perforert og tillater luft sirkulasjon og avleder fuktighet. Brukeren sitter på 93 % luft og 7 % materiale. StimuLITE® pustende trekk lufter ut fuktighet og holder huden tørr. Ventilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse for inkontinente brukere. Urinen renner gjennom puten og samles i inkontinensinnlegget som følger med, som plasseres inni trekket på undersiden av puten. På den måten ledes fuktighet og væske bort fra brukerens hud. Både puten og trekket tåler kontakt med urin og er enkel å rengjøre med vanlig såpe i en dusj, og skal klappes tørr.





Puster og fordamp fuktighet

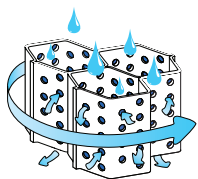

Komplett ventilasjonssystem

Trykkavlastning og sidestabilitet


StimuLITE® sitteputen Sport består av to lag med ulik hardhet, og redusere trykk gjennom å fordele trykket fra følsomme områder. Det gjør at utstående setebein får samme trykk som nærliggende kroppsdeler. StimuLITE Sport sitteputer fordele trykk fra sete- og lårknuter til mykdel under lårene, og kan brukes kan anvendes som et forebyggende tiltak mot trykksår og fuktskader. En mykere lag beskytter ischial og haleben og minimerer risikoen for å sitte gjennom. Putens cellstruktur former seg etter kroppen og med sidestabilisatorer sine gir brukeren en god sitte stilling samtidig som den omfordeler trykk.

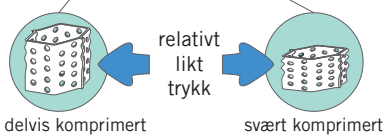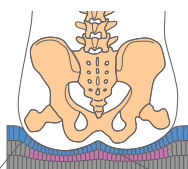

Fordeler trykk etter kroppens form

Reduserer shear

Den laterale stivheten til cellene i StimuLITE® sitteputen avgjør sitteputens forskyvning (shear) og stabilitet. For mye stivhet øker skyvekraften mens for lite stivhet reduserer stabiliteten. Det øverste laget har en mindre lateral stivhet for å redusere skyvekraften mot huden. De to nederste lagene har større horisontal stivhet for å sikre optimal stabilitet. Putens stretchtrekk kombinert med det øverste laget gir en skånsom skyvekraft mot huden. Cellene i StimuLITEs bikubestruktur er anisotrop, dvs at den har full bevegelighet i alle retninger og gir aldri absolutt "stopp". Når brukeren synker ned i puten, omslutes seteknuten av cellene som gjør at man "sitter stille", men likevel kan bevege seg uten å få "shear" i vevet. Shear oppstår når trykkavlastningen ikke er tilstrekkelig og friksjonen er for høy. Cellenes konstruksjon gjør at disse faktorene reduseres.

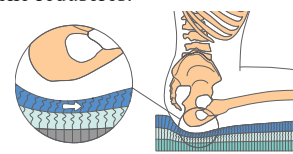

minimal skjærkraft mot venene
Diffus lateral skyvekraft





Først velg størrelse, siden flat / rund bunn, slik at du kan finne din pute eller passende tilbehør i samme rad. StimuLITE® Sport sitteputen tilverkes ikke med rund bunn men er fleksibel nok til å bli brukt sammen med lettere hengekøye sete

StimuLITE® SPORT Sittepute

Disse størrelse har vi på lager. Andre størrelse kan spesialbestilles uten ekstra kostnad, men med leveringstid ca 4 uker.
Maks størrelse som kan tillverkes er SP2020 (b51 d51 h5)

Størrelse	Pute med flat bunn						Passer alla puter	
	Pute (*)		Ekstra Cordura Trekk		Tillbehør: Ull trekk		Ekstra Inkoinlegg	
	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS.nr
b36 d36 h5	SP1414	Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikkeln er ikke prisforhandlet med NAV	COVSP1414	Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikkeln er ikke prisforhandlet med NAV	WCOVSP1414	Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikkeln er ikke prisforhandlet med NAV	IN1414	207498
b36 d41 h5	SP1416		COVSP1416		WCOVSP1416		IN1414	207498
b36 d46 h5	SP1418		COVSP1418		WCOVSP1418		IN1414	207498
b36 d51 h5	SP1420		COVSP1420		WCOVSP1420		IN1414	207498
b38 d41 h5	SP1516		COVSP1516		WCOVSP1516		IN1616	207499
b38 d43 h5	SP1517		COVSP1517		WCOVSP1517		IN1616	207499
b38 d46 h5	SP1518		COVSP1518		WCOVSP1518		IN1618	207500
b38 d51 h5	SP1520		COVSP1520		WCOVSP1520		IN1618	207500
b41 d41 h5	SP1616		COVSP1616		WCOVSP1616		IN1616	207499
b41 d43 h5	SP1617		COVSP1617		WCOVSP1617		IN1616	207499
b41 d46 h5	SP1618		COVSP1618		WCOVSP1618		IN1618	207500
b41 d51 h5	SP1620		COVSP1620		WCOVSP1620		IN1618	207500
b43 d41 h5	SP1716		COVSP1716		WCOVSP1716		IN1616	207499
b43 d43 h5	SP1717		COVSP1717		WCOVSP1717		IN1616	207499
b43 d46 h5	SP1718		COVSP1718		WCOVSP1718		IN1618	207500
b43 d51 h5	SP1720		COVSP1720		WCOVSP1720		IN1618	207500
b46 d41 h5	SP1816		COVSP1816		WCOVSP1816		IN1816	207501
b46 d43 h5	SP1817		COVSP1817		WCOVSP1817		IN1816	207501
b46 d46 h5	SP1818		COVSP1818		WCOVSP1818		IN1818	207502
b46 d51 h5	SP1820		COVSP1820		WCOVSP1820		IN1818	207502
b51 d41 h5	SP2016	COVSP2016	WCOVSP2016	IN1816	207501			
b51 d46 h5	SP2018	COVSP2018	WCOVSP2018	IN1818	207502			
b51 d51 h5	SP2020	COVSP2020	WCOVSP2020	IN2020	207503			

(*) Hver pute leveres med to Skyvvetrekk, en inkontinensinnlegg og en vaskepåse

Tillbehør: Korsrygg støtte LSUPP (HMS nr. 207 513),

Kilstøtte KIL3S (HMS nr: 207507, 36x27x3 cm) KIL3L (HMS nr: 207506, 41x27x3 cm), KIL5S (HMS nr: 207509, 36x27x5 cm), KIL5L (HMS nr: 207508, 41x27x5 cm)

Vannrett trekk (WPC1414 b36 d36 - WPC2020 b51 d51 HMS nr: 207506 - 207541)



Alle StimuLITE® produkter er branntestet og godkjent i henhold til ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006, NS-EN 597:2015 og CE-merket.

