




StimuLITE®


CORBEE® SITTEPUTE FOR BARN

VASKBAR OG LETT BARNPUTE MED MAXIMAL KOMFORT

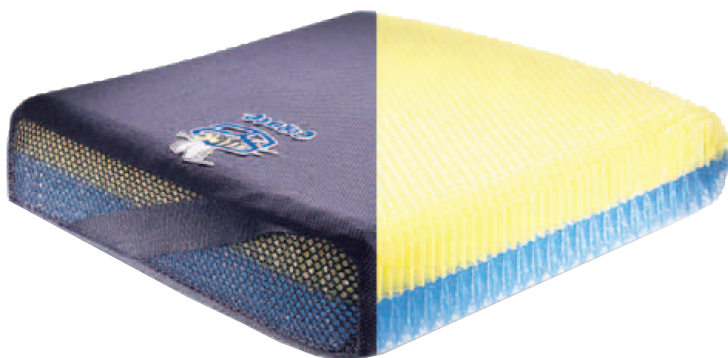

StimuLITE® Honeycomb barnpute Corbee® er en kjølig, tørt og behagelig – og vaskbar – endelig en pute som både foreldre og barn elsker. Denne lette og nyttige pute er ideelt for rekreasjon og daglig bruk, og både puten og trekket kan lett vaskes i maskin og tørkes i tørketrommel. StimuLITE® Corbee® barn pute er designet for ytelse og komfort og gir maksimal trykkavlastning for brukere opp til 50 kg. Den er basert på velprøvde egenskaper av mykt og fleksibelt materiale som tilpasser seg kroppens form. Honeycombs naturlige evne til å gi enda vektfordeling, gjenvinne sin opprinnelige form og demping gir maksimal trykkavlastning og bidrar til å hindre skade på

vev. Innovative StimuLITE® Corbee® barn pute ikke bare redusere trykk og skjærkraft til et minimum, men også fuktighet, noe som ellers kan føre til hud skjørhet. Putens unike ventilasjonssystem – perforert "honeycomb" (honeycomb) og luft gjennomtrengelig trekk med sidenet – gjør at luften kan sirkulere og fuktigheten fordampe og holder barna kjølig og tørr selv i varmt og fuktig klima. Puten veier 1/2 – 1 kg, avhengig av størrelse, og er laget av termoplastisk uretan – et medisinsk materiale som hindrer forekomst av sopp, bakterier og lukt. Ren hud er sunn hud og med puten antibakterielle egenskaper sammen med behagelig vaskemaskinen er lett å holde godt hud hygiene. For barn med inkontinens medfølger en fuktoppsamlare som plasseres under puten på innsiden av trekket. Væsken dreneres gjennom puten og huden holdes tørr. StimuLITE® Corbee® barn pute beskytter barn mot trykksår, skjær og hud skjørhet og gir maksimal trykkavlastning.

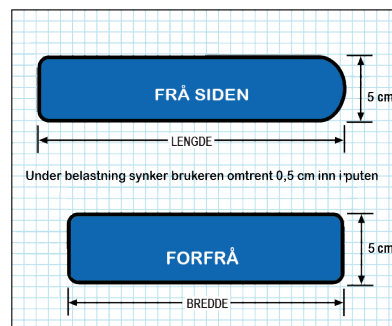


Total Pressure Management™

Hindrer Hudskjørhet

Hudskjørhet er oppmyking av hud forårsaket av kroppsvette eller utsondring av fuktighet fra kroppen. Økt hudmykhet eller hudskjørhet gir mindre motstandskraft mot trykk og kan forårsake sår.

StimuLITE® puter består av sekskantede celler i bikakstruktur (honeycomb) som er perforert og tillater luftsirkulasjon og avleder fuktighet. Brukeren sitter på 93 % luft og 7 % materiale. StimuLITE® pustende trekk lufter ut fuktighet og holder huden tørr. Ventilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse for inkontinente brukere. Urinen renner gjennom puten og samles i inkontinensinnlegget som følger med, som plasseres inni trekket på undersiden av puten. På den måten ledes fuktighet og væske bort fra brukerens hud. Både puten og trekket tåler kontakt med urin og er enkel å rengjøre med vanlig såpe i en dusj, og skal klappes tørr.

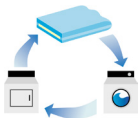


Puster og fordamp fuktighet



Komplett ventilasjonssystem

Trykkavlastning og sidestabilitet


StimuLITE® sitteputen Corbee® består av to lag med ulik hardhet, og redusere trykk gjennom å fordele trykket fra følsomme områder. Det gjør at utstående setebein får samme trykk som nærliggende kroppsdel. StimuLITE® Corbee® sitteputen fordeler trykk fra sete- og lårknuter til mykdelene under lårene, og kan brukes og anvendes som et forebyggende tiltak mot trykksår og fuktskader. En mykere lag beskytter ischial og haleben og minimerer risikoen for å sitte gjennom. Putens cellstruktur former seg etter kroppen og med sidestabilisatorer sine gir brukeren en god sitte stilling samtidig som den omfordeler trykk.

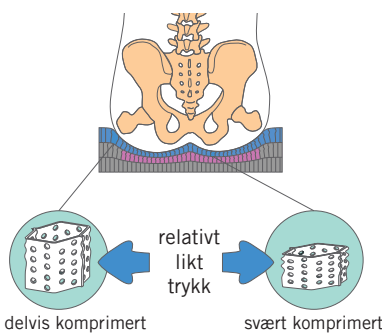

Fordeler trykk etter kroppsform

Reduserer shear

Den laterale stivheten til cellene i StimuLITE® sitteputen avgjør sitteputens forskyvning (shear) og stabilitet. For mye stivhet øker skyvekraften mens for lite stivhet reduserer stabiliteten. Det øverste laget har en mindre lateral stivhet for å redusere skyvekraften mot huden. De to nederste lagene har større horisontal stivhet for å sikre optimal stabilitet. Putens stretchtrekk kombinert med det øverste laget gir en skånsom skyvekraft mot huden. Cellene i StimuLITE®s bikubestruktur er anisotrop, dvs at den har full bevegelighet i alle retninger og gir aldri absolutt "stopp". Når brukeren synker ned i puten, omslutes seteknuten av cellene som gjør at man "sitter stille", men likevel kan bevege seg uten å få "shear" i vevet. Shear oppstår når trykkavlastningen ikke er tilstrekkelig og friksjonen er for høy. Cellenes konstruksjon gjør at disse faktorene reduseres.

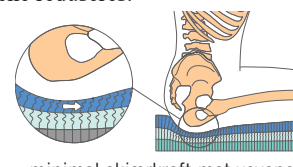

Diffus lateral skyvekraft



GÖRAN SJÖDÉN REHABSHOP NORGE A/S

Postboks 157 1378 NESBRU, Besøksadresse: Vogellund 31 1394 NESBRU

Tel: 48 50 32 97

email: ordre@rehabshop.com www.rehabshop.as





Først velg størrelse, siden flat / rund bunn, slik at du kan finne din pute eller passende tilbehør i samme rad. StimuLITE® Corbee® sitteputen tilverkes med prund bunn for rullestol med hengekøye sete

STIMULITE®: CORBEE® SITTEPUTE FOR BARN

StimuLITE® Corbee® Sittepute for Barn

Disse størrelse har vi på lager. Andre størrelse kan spesialbestilles uten ekstra kostnad, men med leveringstid ca 4 uker. Maks størrelse som kan tilverkes er PD1616 (b41 d41 h5) med plan bunn, PD1416S (b36 d41 h5) med avrundet bunn

Størrelse	Pute med flat bunn						Passer alla puter	
	Pute (*)		Ekstra Cordura Trekk		Tillbehør: Ull trekk		Ekstra Inkoinlegg	
	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS.nr
b26 d26 h5	PD1010	(\$)	COVPD1010	(\$)	WCOVPD1010	(\$)	IN1010	207496
b31 d31 h5	PD1212	(\$)	COVPD1212	(\$)	WCOVPD1212	(\$)	IN1212	207497
b31 d36 h5	PD1214	(\$)	COVPD1214	(\$)	WCOVPD1214	(\$)	IN1212	207497
b36 d36 h5	PD1414	(\$)	COVPD1414	(\$)	WCOVPD1414	(\$)	IN1414	207498
b36 d41 h5	PD1416	(\$)	COVPD1416	(\$)	WCOVPD1416	(\$)	IN1414	207498
b41 d41 h5	PD1616	(\$)	COVPD1616	(\$)	WCOVPD1616	(\$)	IN1616	207499

Størrelse	Pute med avrundet bunn						Passer alla puter	
	Pute (*)		Ekstra Cordura Trekk		Tillbehør: Ull trekk		Ekstra Inkoinlegg	
	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.
b26 d26 h5	PD1010S	(\$)	COVPD1010S	(\$)	WCOVPD1010S	(\$)	IN1010	207496
b31 d31 h5	PD1212S	(\$)	COVPD1212S	(\$)	WCOVPD1212S	(\$)	IN1212	207497
b31 d36 h5	PD1214S	(\$)	COVPD1214S	(\$)	WCOVPD1214S	(\$)	IN1212	207497
b36 d36 h5	PD1414S	(\$)	COVPD1414S	(\$)	WCOVPD1414S	(\$)	IN1414	207498
b36 d41 h5	PD1416S	(\$)	COVPD1416S	(\$)	WCOVPD1416S	(\$)	IN1414	207498

(*) Hver pute leveres med to Cordura trekk, en inkontinensinnlegg og en vaskepåse

(\$) Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikeln er ikke prisforhandlet med NAV

Tillbehør: Korsrygg støtte LSUPP (HMS nr. 207 513),

Kilstøtte KIL3S (HMS nr: 207507, 36x27x3 cm) KIL3L (HMS nr: 207506, 41x27x3 cm), KIL5S (HMS nr:

207509, 36x27x5 cm), KIL5L (HMS nr: 207508, 41x27x5 cm)

Vanntett trekk (WPC1414 b36 d36 - WPC2020 b51 d51 HMS nr: 207506 - 207541)

Litrapid Media AB Göteborg 2014/04 212324 Miljømerket trykksak 341 834 PD/NO 2017/01



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Alle StimuLITE® produkter er branntestet og godkjent i henhold til ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006, NS-EN 597:2015 og CE-merket.



GÖRAN SJÖDÉN REHABSHOP NORGE A/S
Postboks 157 1378 Nesbru
Tel: +(47) 48 50 32 97
email: ordre@rehabshop.com
www.rehabshop.as