

Moduloppbygd sittesystem med gode støttemuligheter for unge og voksne

Med Zitzi Sharky Pro har vi muligheten til å oppnå en optimal sittestilling tilpasset den enkelte.

En god korsryggstøtte og en integrert sittegrep minsker sjansen for å skli frem i setet og fremmer postural kontroll. En slik kontroll av kroppens balanse gir bedre forutsetninger for hodekontroll og øker mulighetene for aktivitet og deltakelse. Sittedelen optimaliseres etter brukerens behov. Zitzi Sharky Pro kan tilpasses benlengdeforskjell og windswept-stilling gjennom individuell justering av setedybde og abduksjon/ adduksjon.

Seteenheten kan justeres hele 10 cm i dybden, for å oppnå en mest mulig optimal sittestilling. Dette gir samtidig brukeren mulighet til å vokse med stolen.

Zitzi Sharky Pro har Flex-rygg som tillater en dynamisk sittestilling og bryter spasmer. Dette er hensiktsmessig for å gi bevegelsesfrihet, variasjon og en beroligende effekt ved ekstensjonsspastisitet. Ryggen har justerbar hoftevinkel, hvilket bryter spastisiteten, samtidig som Flex-ryggen fanger opp kraften og beholder posisjonen i sittende.

Justerbare bolstøtter sammen med bekkenstøtter gir mulighet for 3-punktstøtte og en god posisjonering av bolen. Dette reduserer risikoen for feilstillinger samtidig som det tilrettelegger for aktivitet. Ryggen er justerbar i høyde og bredde. Rygghøyde og bolstøtter kan reguleres med bruker i stolen.

Zitzi Sharky Pro tar størrelsesmessig over der Zitzi Delfi Pro slutter, og gir mulighet til å oppnå en optimal sittestilling også i voksen alder.

Standardutstyr:

- + Rygg og sete med justerbar setefremmeder
- + Grått/svart trekk (opplys hvis annen farge ønskes)
- + Gassylinder med flex (gir flexfunksjon til ryggdel)
- + Hoftebelte Pro
- + Zitzi Sharky Pro armstøtte fast
- + Zitzi Sharky Pro hodestøtte
- + Zitzi Sharky Pro fotstøtte delt
- + Zitzi adaptersystem Pro
- + Kjørebøyle svart festet på rygg
- + Umbracønøkkel 4 mm

Zitzi Sharky Pro

HMS nr.	Art.nr	Beskrivelse
238743	153361	Zitzi Sharky Pro str. 1
238744	153362	Zitzi Sharky Pro str. 2



Zitzi Sharky Pro 1
Zitzi Flipper Pro Flex understell



Zitzi Sharky Pro 1
Zitzi Flipper Pro 3 el understell



Zitzi Sharky Pro 2
Zitzi Flipper Pro Flex understell



Standard farge

153032

Utvalgt tilbehør – se bestillingsskjema for mer

HMS nr.	Art. nr.	Beskrivelse
238725	153320	Bolstøtte str. 1 fast, høyre
238726	153321	Bolstøtte str. 1 fast, venstre
238727	153322	Bolstøtte str.2 fast, høyre
238728	153323	Bolstøtte str.2 fast, venstre
238729	153324	Bolstøtte forsterket fast str. 1 høyre svart
238730	153325	Bolstøtte forsterket fast str. 1 venstre svart
238731	153326	Bolstøtte forsterket fast str. 2 høyre svart
238732	153327	Bolstøtte forsterket fast str. 2 venstre svart
238733	153328	Bolstøtte utsvingbar str. 1 høyre svart
238734	153329	Bolstøtte utsvingbar str. 1 venstre svart
238735	153330	Bolstøtte utsvingbar str. 2 høyre svart
238736	153331	Bolstøtte utsvingbar str. 2 venstre svart
140781	77013	Pro Mini str. L inkl. vannrettstag
210093	770162	Pro Heads Up str. M lang inkl. vannrettstag
163993	374003	Sternum vest Pro str. M
239382	374004	Sternum vest Pro str. L



Utvalgt tilbehør



Bolstøtte, høyre og venstre
153320-153323




Pro Mini



Pro Heads Up



Sternumvest

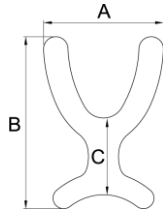

Sternum	A	B	C
XS	20 cm	26 cm	9 cm
S	21 cm	31 cm	14 cm
M	25 cm	37 cm	17 cm
L	33 cm	50 cm	20 cm

Tekniske data

Zitzi Sharky Pro	str.1	str.2
Zitzi Sharky Pro	Str. 1	Str. 2
Kroppslengde	150 - 180 cm	170 - 195 cm
Setebredde	36/39/42 cm	43/46/49 cm
Setedybde	37 - 47 cm	45 - 55 cm
Axillehøyde	35 - 50 cm	40 - 55 cm
Rygg høyde	67 cm	77 cm
Dybde bolstøtte	21 cm	25 cm
Mellom bolstøtter	27 - 35 cm	30 - 38 cm
Windswept	9°	9°
Hofte vinkel	-10 til 25°	-10 til 25°
Abduksjon/adduksjon	+18/-9°	+18/-9°
Vekt*	14 kg	15 kg
Max brukervekt	130 kg	130 kg

*vekt sete/rygg/bolstøtte

Valg av understell

Sittesystem	Zitzi Flipper Pro			Flipper Pro Flex	Zitzi Guppy		Zitzi Seabass Pro		
	Str. 1	Str. 2	Str. 3		Str. 1	Str. 2	Str. 1	Str. 2	Str. 3
Zitzi Sharky Pro str. 1			X	X					X ²
Zitzi Sharky Pro str. 2			X	X					X ²

X² avhenger av hjulstørrelse