



WHEEL-DRIVE



QUICKIE SOPUR ROK zippie JAY Breezy STERLING GEMINO



WHEELDRIVE

DRIVAGGREGAT MED MANUELL STYRING POST 28


// LETTFATTELIG BRYTERPANEL:

Av-på bryter og fartsmodus er plassert lett tilgjengelig.



// TA AV/PÅ ELLER BYTTE HJUL MED ENKLE GREP:

Med snap-on hjulhåndtak er det enkelt å ta av hjulet og eventuelt bytte til originalhjul.

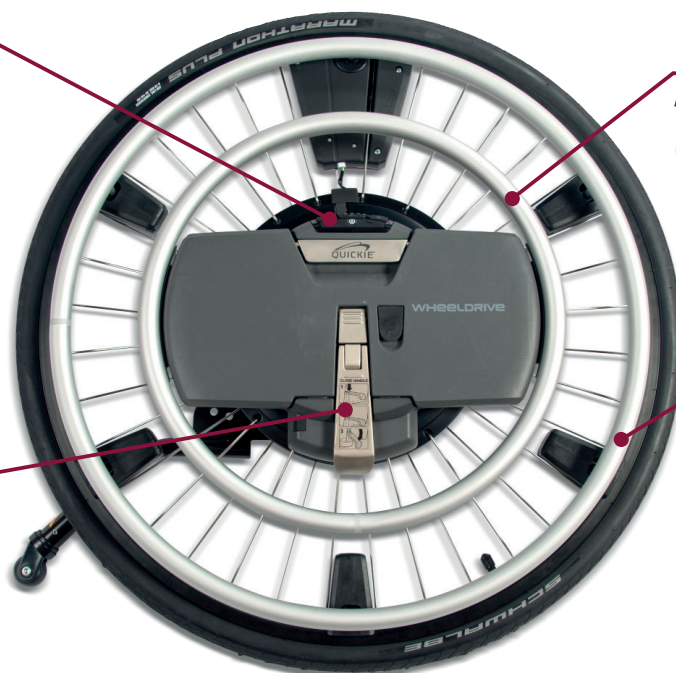

// DRIVING FOR MOTOR:

Rullestolen fungerer som en elektrisk rullestol med kontinuerlig drift.

// DRIVING FOR KRAFTFORSTERKER:

Gir drivhjelp i tillegg til egen armkraft. Aktiverer ryggesperre i motbakke

DET BESTE FRA MOTORISERTE HJUL OG HJELPEMOTOR!

- Enkel betjening
- Ryggesperre i motbakke
- Hjelp til å holde stabil fart i nedoverbakker
- Enkelt på reise. Batteriet kan medbringes som håndbagasje på fly
- Rask opplading, 2 timer
- Justerbare kjøreprogram, fart, førlighet, akselerasjon
- Passer alle manuelle rullestoler



TEKNISKE SPESIFIKASJONER WHEELDRIVE

Maksimum kroppsvekt	130 kg	Maksimum hastighet framover med hjelpedrivning	6 km/t
Ekstra totalbredde sammenlignet med manuelle hjul	43 mm	Maksimum hastighet framover med motordrivning	10
Vekt batterier (stk.)	1,8 kg	Rekkevidde (ISO 7176-4) hjelpedrivning*	20
Totalvekt inklusiv batteri (ett hjul)	11,5 kg	Rekkevidde (ISO 7176-4) motordrivning*	12
Transportvekt uten batteri (ett hjul)	9,7 kg	Hindertagning (utendørs), ved rygging	50
Hjuldiameter	24 tommer	Ladetid (fulladet), ca.	2

*Den faktiske rekkevidden er avhengig av mange faktorer, blant annet brukervekt, kjøreprogram, vær og føreforhold, batterienes og dekkenes tilstand osv.

- Kraftforsterker eller kontinuerlig drift - WheelDrive har et unikt dobbelt drivringkonsept. Den store drivringen gir kraftassistanse og gjør rullestolen lettere å kjøre. Brukeren kan velge mellom tre innstillinger for krafttilførsel. Betjening av liten drivring gir brukeren kontinuerlig drift og tre hastighetsvalg. Ingen håndkraft er nødvendig. Det er lett å bytte mellom bruk av drivringene, slik at brukeren alltid vil få riktig drivhjelp etter dagsform og behov.
- Mer frihet og uavhengighet - WheelDrive bistår ved lengre turer, i motbakke eller når hindringer skal forseres og gir enklere manøvrering i trange rom og på vanskelig underlag. Batterier skiftes på noen sekunder av bruker selv, og med et ekstra batterisett kan turen doubles. WheelDrive er enkel å ta av når rullestolen skal slås sammen for transport.

PÅ ALLE TYPER RULLESTOLER



- Enkel å montere på alle typer rullestoler
- Opprettholder stolens konfigurasjon med hensyn til balansepunkt
- Raskt og enkelt å bytte mellom Wheeldrive og rullestolens originalhjul
- Monteres uten bruk av ekstrakomponenter montert på stolen

NYTT SERVICE OG PROGRAMMERINGSVERKTØY



- PowerTalk 2 - PC basert verktøy for blant annet tilpassing av hjulets kjøreegenskaper



// **BATTERIET TAS ENKELT UT FOR FLYTRANSPORT:** Med et enkelt grep kan batteriene tas av og pakkes separat for flytransport. Ekstra batteri doubler rekkevidden



// **TRANSPORTTREKK:** Beskytter hjulene og reduserer risiko for transportskader



SUNRISE MEDICAL KONTAKTINFORMASJON



Østfold, Buskerud

Stine Bukholm Tel. 93470066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo, Akershus

Paul Ullerlien Tel. 90958355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 99104450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Per Rune Molteberg Tel. 99095204
per.molteberg@sunrisemedical.no

Hedmark, Oppland

Arnfinn Hellerud Tel. 91889260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 90136817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold, Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 90918570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Aust-Agder, Vest-Agder

Karl Rasmussen Tel. 97578003
karl.rasmussen@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 91775110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Hordaland

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Sogn og Fjordane

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Sør-Trøndelag

Bjørn Tore Grande Tel. 91707330
bjorn.t.grande@sunrisemedical.no

Nord-Trøndelag

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Troms, Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

All informasjon kan endres uten varsel. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
F: +47 66 96 38 80

E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no