



Etac Swift Mobil-2

Dusch- och toalettstolar

 **etac**[®]



Vi presenterar Swift Mobil-2-familjen

Dusch- och toalettstolarna Etac Swift Mobil-2 är enkla att hantera och underlättar såväl förflyttning av patienter som transport till och från badrummet. De är utformade för att göra livet lite enklare för de personer som använder dem. Vi förstår vad som är viktigt för vårdare och brukare eftersom vi frågar dem. Tack vare att vi lyssnar på våra kunder förstår vi hur viktigt det är med sådant som åtkomlighet, anpassningsmöjligheter, värdighet och bekvämlighet.



Förenklar åtkomligheten

Majoriteten av vårdarna anser att bristen på åtkomlighet är en utmaning under hygienvårdsrutiner och kräver ofta ansträngande arbetsställningar. För att förenkla åtkomligheten är sitsen på Swift Mobil-2 öppen baktill och har fritt utrymme på båda sidorna. Justeringen kan verka liten, men den kommer att göra hygienvårdsrutinerna snabbare och göra dem mer värdiga för alla.

Produktflexibilitet och bekvämlighet

Alla Swift Mobil-2-modeller har en generös maximal brukarvikt på 160 kg och kan enkelt anpassas till mindre eller större brukare med olika tillstånd och behov. Stolarna kan justeras på många sätt och har ett stort antal tillbehör för att ge bättre komfort och stabilitet. Några få små justeringar kan göra stor skillnad för brukarens säkerhet och välbefinnande samt för vårdarnas arbetssituation.

Upptäck fördelarna

En serie funktionella och flexibla mobila dusch- och toalettstolar, utformade för att underlätta hygienvård för både vårdare och brukare. Swift Mobil-2 finns i tre olika modeller: en dusch- och toalettstol av standardtyp, en modell med sitslutning och en modell med 24" drivhjul.

Multijusterbart huvudstöd

Utformat för att ge högsta komfort och flexibilitet och kan justeras för att passa flera brukares behov.

Skönt ryggstöd

Justerbart och snabbtorkande
Stabil passform med dubbla fästen runt körbygeln.

Bekväm åtkomlighet

Sits med öppning baktill, urtag framtill och fritt utrymme på båda sidorna.

Höjdregerbar

Enkel att reglera till olika fasta sitshöjder utan att använda verktyg.



Etac Swift Mobil-2



Etac Swift Mobil 24"-2

Flexibla armstöd

Justerbara i höjd- eller sidled.

"Etac Easy-Clean"

En unik yta speciellt utvecklad för Etac och som har en perfekt balans mellan friktion och renlighet, antihalk- och hygienegenskaper!

Ergonomiska fotplattor

De mjukt välvda fotplattorna ger stöd för vrist och fotvalv, skapar komfort, stabilitet och avspänning.



Etac Swift Mobil Tilt-2



Etac Swift Mobil Tilt-2

Swift Mobil Tilt-2 är utformad med hänsyn till både vårdarens och brukarens behov. Den hanterar alla de utmaningar som vårdgivare möts av i sitt dagliga arbete och ger den bekvämlighet och säkerhet som brukaren behöver för att känna sig trygg.

Unik sitslutningsfunktion

Swift Mobil Tilt-2 har en unik lutningsfunktion som ger brukaren ökad trygghet och vårdaren en ergonomisk arbetsställning. Lutningsfunktionen på +5° till -35° kan manövreras från stolens båda sidor. Detta gör att vårdaren kan lugna brukaren under lutningsprocessen.

Åtkomlighet och bekvämlighet

Tack vare utmärkt åtkomlighet runt sitsområdet blir hygienvårdsrutinerna enklare för vårdaren och kan utföras på ett värdigt sätt för brukaren. För känsliga brukare finns det extra mjuka sittdynor. Det mjuka och snabbtorkande ryggstödet och de välvda fotplattorna på Swift Mobil-2 ökar brukarens bekvämlighet ytterligare.

Passar många brukare

Dusch- och toalettstolen kan anpassas och passar därmed många brukare med olika behov och storlek. Den har en generös maximal brukarvikt på 160 kg som standard, och höjden från sits till golv kan ändras (50–65 cm). Armstöden kan justeras i höjd- och sidled, och de svängbara fotplattorna kan justeras på höjden och finns även i en kortare variant.



Etac Swift Mobil Tilt-2

Art.nr

Swift Mobil Tilt-2, monterad
Swift Mobil Tilt-2, inkl bäckengejder

80229410
80229412

Standard: Huvudstöd, ryggstöd, sits, armstöd, fotplattor och fyra låsbara hjul

Vikt
20,4 kg

Mått
Totalbredd: 57/56/64 cm
Bredd mellan armstöden: 42/48/54 cm

Material
Chassi: pulverlackerat stål

Sits/armstöd: PP
Ryggstöd: polyester/kardborre
Fotstöd: PP
Hjul: polyamid/TPE, låsbara, kullagrade



Rengör/desinficera produkten med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel och med ett pH-värde mellan 5 och 9 eller med 70 % desinfektionssprit. Produkten tål rengöring i kabinetttdiskdesinfektor i 85 °C i 3 minuter. Max brukarvikt: 160 kg



Funktioner



Sits med öppning baktill

Ger åtkomlighet för vårdaren och bekvämlighet för brukaren. Den unika ytan är speciellt utvecklad för Etac och har en perfekt balans mellan friktion och renlighet, antihalk- och hygienegenskaper!



Unik och säker lutningsfunktion

Kan manövreras från stolens båda sidor, vilket ger en bra arbetsställning för vårdaren och lugnar brukaren under lutningsprocessen.



Justerbara armstöd som standard

Enkla att anpassa efter olika brukares behov. Justerbara både i höjd- och sidled, +/-6 cm i vardera riktning.



Multijusterbart huvudstöd

Huvudstödet är utformat för att ge högsta komfort och flexibilitet och kan justeras för att passa flera brukares behov.





Tillbehör – för alla modeller

(Se tvättinstruktioner på sidan 14)



Mjuk komfortsits, 4 cm öppning baktill

80209519
Ergonomiskt formad med skön mjukhet som ger god avlastning och bekvämt stöd. Försedd med ett urtag framtill.
Material: polyuretan



Mjuk komfortsits, 2 cm öppning baktill

80209518 Utformad med god mjukhet och runda former för bästa komfort. Försedd med ett urtag framtill.
Material: polyuretan



Mjuk komfortsits, 4 cm

Liten öppning 15 cm: 80209507
Stor öppning 18 cm: 80209506
Ergonomiskt formad, mjuk komfortsits med urtag framtill. Höjd 4 cm vid lägsta punkt.
Material: polyuretan.



Mjuk komfortsits, 2 cm

Öppning 18 cm: 80209306
Formad, mjuk komfortsits med urtag framtill. Höjd 2 cm vid lägsta punkt. Material: polyuretan.



Sitslock

80209434
Ett bekvämt sitslock när man vill täcka hygienöppningen. Kan användas i duschen. Höjd 2 cm.
Material: polyuretan.



Mjuk dyna med standardöppning

80209065
Skumdyna med överdrag av vattenavvisande material. Höjd 2 cm. Material: polyeter/vävplast.



Mjuk dyna med oval öppning

80209067
Skumdyna med överdrag av vattenavvisande material. Höjd 4 cm.
Material: polyeter/vävplast.




ROHO® Protect-dyna

80209245
Luftdyna med enkla kammare och utmärkta tryckavlastande egenskaper. Används för dem som är extra tryckkänsliga. Bredd urtag: 21 cm.
Material: neopren



Huvudstöd

80209447
Multijusterbart huvudstöd med formad kudde. Reglerbart i höjd-, djup- och sidled samt i vinkel. Kompletterat med fäste.
Material: Kudde: polyuretan
Stag: rostfritt stål

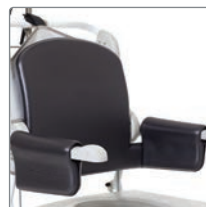

Komfortskal

80209455
Mjukrygga med integrerade armstödsdynor. Komfortskalet ger ett varmt mjukt stöd samtidigt som greppytan på armstöden lämnas fritt.
Material: PE.



Bålstöd /sidostöd

80209509
Fixerar bålen i stolen så att brukaren sitter bättre och känner sig tryggare.
Material: polyestertyg, kardborre, PE.



XL-rygg

80209454
Erbjuder bättre plats för rygg och axlar för större brukare. Ökar bredden mellan armstöden med 6 cm till 48/54/60 cm. (XL-rygg passar inte till Swift Mobil Tilt-2)
Material: polyester, pulverlackerat stål, rostfritt stål, PP



Tillbehör – för alla modeller


(Se tvättinstruktioner på sidan 14)



Mjuk ryggdyna

80209448

Erbjuder brukaren värme och mjukhet. Används innanför armstöden vilket gör det möjligt att fälla upp armstöden och skapa tillgänglighet vid sidoförflyttning. Material: PE.

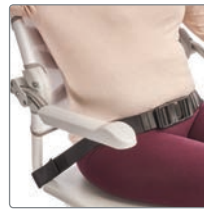

Höftbälte

80209440

Enkelt att justera med plastspänne. Fixeras runt ryggrören i bakkant med kardborreband. Material: polyester



Armstödsdyna

80209508

Används för att skapa mjukhet runt armstöden. Ger ett varmt, mjukt underlag som stöd för armarna och lämnar greppytan fri för trygg uppresning. Säljs i par. Material: PE.



Brösthälte

80209442

Enkelt att justera och som fästes runt banden till rygglädseln. Rekommenderas att användas tillsammans med höftbälte. Material: polyester



Armstöd Hemiplegi

80209035

Erbjuder ett stöd för underarmen med dess skålade form. Försedd med ett mjukt värmereflekterande material utvändigt. Passar både höger och vänster armstöd. Material: PE



Bäcken med lock

Bäcken med lock och handtag: 80209255
Unik invändig form som bryter strålen och minskar stänk. Locket har ett handtag som låser vid bäckenet och gör att innehållet säkras från spill. Material: PP



Armstödslås

80209445


En låstapp som används när man vill ha möjlighet att låsa armstödet i nedfällt eller uppfällt läge. Material: rostfritt stål.



Bäcken

Bäcken utan lock 80209254

Lock med handtag 80209256
Unik invändig form som bryter strålen och minskar stänk. Material: PP

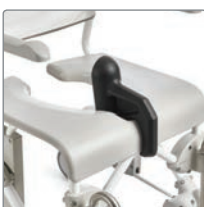

Stänkskydd

80209430

Ett mjukt skydd mot urinstänk framåt. Fästs över sitsens främre urtag och kan enkelt tas bort. Material: polyuretan



Bäckengejder

80209257

Passar både Etacs bäcken eller traditionella sjukhusbäcken. Används tillsammans med gejderfästen som beställs separat. Material: PP



Tvärslå

60,5 cm 80303034

66,5 cm 80209452


Ett tryggt stöd att hålla sig i eller som kan användas som ett kryststöd. Fästs runt armstöden. Material: aluminium, PE.



Gejderfäste

80209435

Monteras fast under sitsen för att kunna använda bäckengejder. Monteras med skruvmejsel. Komplettsats. Material: polyamid

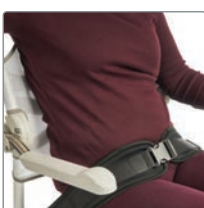

Höft-/brösthälte med klädsel

80209524

Tvådelat bälte för positionering som kan användas antingen som höft- eller bröstbälte. Justerbart med tre spännen med en längd på 65 till 130 cm. Materialet är bekvämt och snabbtorkande och ger ett stabilt stöd vid positionering.



Låg upphängning av bäcken/hink

80209259

Används när man vill ha bäckenet/hinken lägre placerat under sitsen. Monteras tillsammans med bäcken- alt. hinkgejderna. Sänker bäcken-/hinkgejderna 6 cm. Material: PP.

Tillbehör – för alla modeller

(Se tvättinstruktioner på sidan 14)



Hinkgejder

80209258

Används som hållare till bäcken/hinkar eller bäcken med högre kanter. Används tillsammans med gejderfästen som beställs separat.

Material: PP.



Hink med handtag och lock

80209265

Traditionell hink som används tillsammans med hinkgejder.

Material: PP



Tippskydd Swift Mobil Tilt-2

Tippskydd till Swift Mobil Tilt-2: 80209459

Ger ett skydd från att stolen tippas bakåt. Ökar tryggheten om tyngdpunkten ligger långt bak.

Material: PP och aluminium



Tippskydd Swift Mobil-2

Tippskydd inklusive fäste: 80209439

Tippskydd exklusive fäste: 80209438

Ger ett skydd från att stolen tippas bakåt.

Material: PP och aluminium



Tramprör

80209449

Underlättar förflyttning över t.ex. trösklar eller ramper. Säljes komplett med fäste.

Material: PP och aluminium



Kort benstöd komplett

80209520

Ett kort benstöd med fotplatta som kan svängas åt sidan. Kan justeras 12,5 cm och ger en fotstödshöjd på 24 – 36,5 cm. Fotplattan har en rundad form. Säljes i par.

Material: rostfritt stål och PP



Fotstöd med fällbara fotplattor

80209446

Justerbar för de som behöver en mer öppen fotvinkel. Kan förses med hälband.

Säljes i par.

Material: rostfritt stål och PP.



Ben- och vadstöd

80209437

Vinkelställbart stöd för benet som kan användas både för höger och vänster ben. Erbjuder fyra fasta vinkellägen. Säljes per styck. Material: rostfritt stål och ABS-plast



Fotplatta för ben- och vadstöd

80209443

Sats med separat fotplatta att montera tillsammans med ben- och vadstöd.

Material: ABS-plast



Amputationsbenstöd

80209510

Justerbart i höjd och reglerbart i längd och vinkel. Kan användas både till höger eller vänster sida. Är brukaren amputerad rekommenderar vi att man använder tippskydd.

Material: rostfritt stål och polyuretan



Hälband

80209432

Monteras på fotplattorna. Hindrar fötterna att glida bakåt. Längden kan justeras.

Säljes i par.

Material: polyester



24-tums drivhjulssats

80209436

24-tums drivhjul med massiva däck och inbyggda tippskydd. Monteras enkelt. Inklusive fäste och broms.

Material: polyamid, rostfritt stål, polyuretan, aluminium



Tvättinstruktioner

Mjuk komfortsits och sitslock, huvudstöd, armstödslås, stänkskydd, bäcken, bäckengejder, gejderfäste, lågt monteringsfäste, hinkgejder, hink, tippskydd, trampor, fotplattor, ben- och vadstöd, amputationsbenstöd, 24-tums drivhjulssats



Ryggklädsel, höft-/brösthälsa med klädsel, höftbälte, bröstbälte, hälbånd



Mjuka dynor, komfortskal, mjuk ryggdyna, armstödsdyna, armstöd
Hemiplegi, tvärså



ROHO® Protect



Förklaring av tvättsymboler



Maskintvätt – max tvättemperatur 60 °C



Produkten tål rengöring i kabinetttdiskdesinfektor i max. 85 °C i 3 minuter.



Avtorkning – produkten kan torkas av med en rengöringsduk




Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 6–9 eller med 70 % desinfektionssprit.



Tål ej kemtvätt

Mått

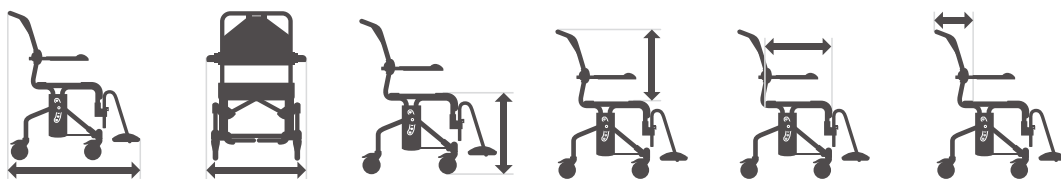

Modell	Längd	Bredd	Sitshöjd	Rygghöjd	Sitsdjup	Ryggstödsdjup
Swift Mobil-2	93 cm	57/58/64 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5 cm	21 cm
Swift Mobil-2 XL	93 cm	58/64/70 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5 cm	21 cm
Swift Mobil 24"-2	106 cm	72 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5 cm	21 cm
Swift Mobil Tilt-2	104 cm	57/58/64 cm	50 / 65 cm	55 cm	46,5 cm	25 cm



Modell	Sitsbredd	Armstödshöjd	Armstöd till armstöd	Fotstödshöjd	Höjd
Swift Mobil-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	34 / 46,5 cm	95–110 cm
Swift Mobil-2 XL	50 cm	22/25/28 cm	48/54/60 cm	34 / 46,5 cm	95–110 cm
Swift Mobil 24"-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	34 / 46,5 cm	95–110 cm
Swift Mobil Tilt-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	34 / 46,5 cm	100–115 cm





“Vi vill att människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor, oavsett sina fysiska förutsättningar.”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se


Skapar möjligheter