

P-pod

– sittemøbel for aktivitet og hvile




P-pod gir muligheter til enkelt å posisjonere barn og ungdom. Den gir store støtteflater og omslutter kroppen. Ved å tilte setet kan en tilpasse posisjonen til aktivitet eller avslapping.

P-pod kan tilpasses alle kropper enten de er symmetriske eller usymmetriske, slappe eller spastiske, korte eller lange, smale eller brede.

P-pod har svært lav vekt som gjør den lett å flytte med seg rundt.

Fargevalg

P-pod kan leveres med trekk i en rekke ulike farger. Trekkene er avtagbare og vaskes enkelt i maskin.

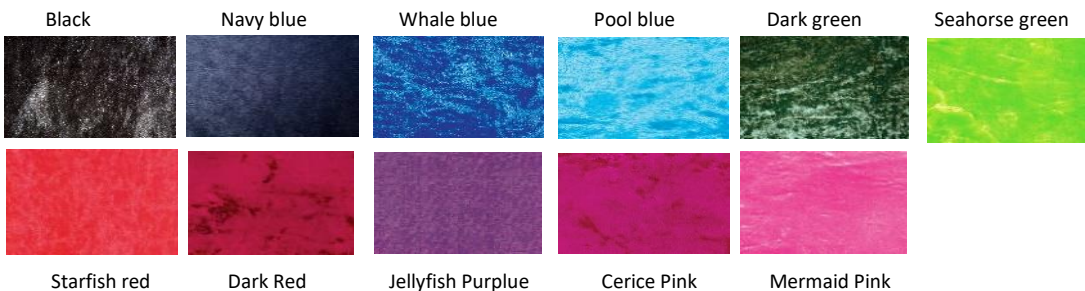

Tilbehør

Forskjellig tilbehør kan benyttes ut ifra behov, med tanke på både komfort og tilrettelegging for aktivitet.



Nakkestøtte, 3 kammer

Bord på fanget

Frittstående bord

Mobil base

Fotstøtte


Aktivitetsbøyle

Tekniske spesifikasjoner – P-pod:

P-pod symmetrisk											
Type mål: mm/Størrelse	1	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7
Hoftebredde	240	260	270	290	310	340	340	380	380	420	430
Brystvidde	200	230	230	250	270	290	290	330	330	370	370
Sittedybde	190	220	250	310	310	340	340	370	380	420	470
Sete - axille	230	280	290	290	310	310	380	380	410	410	410
Skulderhøyde/rygg lengde	280	330	380	380	390	390	470	470	510	510	620
Hodehøyde	420	480	530	530	600	600	660	660	730	730	800

P-pod asymmetrisk	blir laget etter kroppsfasongen til bruker og er individuelt utformet
--------------------------	---

Siden Ppod har innebygd nakkestøtte vil **skulderhøyde/rygg lengde** være det mest avgjørende målet for å velge en Ppod som barnet passer oppi. Dersom rygg lengden tilsvarer en Ppod-størrelse som ser vid ut for barnet kan Ppod bygges inn med sideinnlegg for å likevel sikre den gode, kroppsnære passformen.

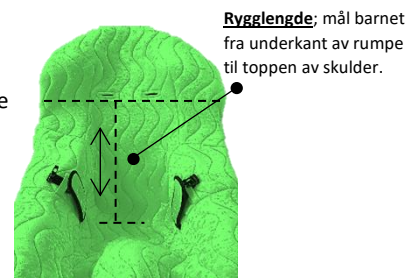

Tekniske spesifikasjoner – tilbehør:

Størrelse på tilbehør: som hovedregel velges disse tilbehørss

	MÅL I MM	SMALL	MEDIUM	LARGE	XTRA - LARGE
FRITTSTÅENDE BORD	Høyde	630-750	710-940	710-940	
	Bredde	525	645	750	
	Borddybde	545	600	660	
BORD PÅ FANGET	Bredde	500		650	
	Dybde	380		500	
AKTIVITETSØYLE	Bredde	770	770		
	Dybde	980	980		
	Høyde	790-1120	790-1500		
FOTSTØTTE	Dybde	300		320	
	Bredde	450		500	
MOBIL BASE	Høyde	170		170	
	Lengde	1030	1120	1225	1325
	Bredde	580	680	680	680
	Høyde	1060	1070	1070	1070

Ppod str. 1, 2 og 2,5: SMALL

Ppod str. 3, 3,5 og 4: MEDIUM

Ppod str. 4,5, 5, 5,5 og 6: LARGE/X-LARGE

Der tilbehøret ikke finnes i alle størrelser velges den som er nærmest i størrelse.



Måleskjema til Ppod

Mål i sittende evt. liggende stilling

Type mål		Hvordan måle	Kommentar	Målt verdi
SB	Setebredde	Fra ytterkant til ytterkant på hofte	Tvers over bekkenet	mm
BV	Brystvidde	Fra armhule til armhule	Tvers over brystet	mm
SD	Setedybde	Fra bak rumpa til knehasen	Brukers hofte og kne i 90 graders vinkel	mm
LL	Legglengde	Fra innsiden av knehasen til underkant av hæl	Brukers kne og ankel i 90 graders vinkel	mm
AH	Armhulehøyde	Fra under rumpa til axillen/armhulen	Brukers hofte og kne i 90 graders vinkel	mm
RL, SH	Rygg lengde, skulderhøyde	Fra under rumpa til overkant av skulder	I liggende: trekk ned skulder, press opp mot sitteknute. I sittende stilling hjelper tyngdekraften til med dette.	mm
RL, OH	Rygg lengde, over hodet	Fra under rumpa til toppen av hodet	I liggende: trekk ned skulder, press opp mot sitteknute. I sittende stilling hjelper tyngdekraften til med dette.	mm

P-pod symmetrisk		Ppod-størrelser med mål oppgitt i mm										
Type mål		1	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7
SB	Setebredde	240	260	270	290	310	340	340	380	380	420	430
BV	Brystvidde	200	230	230	250	270	290	290	330	330	370	370
SD	Sittedybde	190	220	250	310	310	340	340	370	380	420	470
AH	Armhulehøyde	230	280	290	290	310	310	380	380	410	410	410
RL, SH	Rygg lengde, skulderhøyde	280	330	380	380	390	390	470	470	510	510	620
RL, OH	Rygg lengde, over hodet	420	480	530	530	600	600	660	660	730	730	800

Kontakt oss gjerne ved spørsmål om produktet, ønske om utprøving eller dersom vi kan hjelpe til med noe annet!

Aslaug Marie Ringstad

Partner/Ergoterapeut
92 81 21 90
am@inpo.no

Kontaktperson for
Troms

Mikal Bjåen

Partner/Fysioterapeut
45 63 79 13
mikal@inpo.no

Kontaktperson for
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Finnmark

Marianne Løvstad

Salgssjef/Fysioterapeut
90 27 84 75
marianne@inpo.no

Kontaktperson for
Viken
Innlandet

Silja Ingeborg Hetland

Fagkonsulent/Fysioterapeut
93 20 51 35
silja@inpo.no

Kontaktperson for
Oslo
Vestfold og Telemark
Agder

Line Strand

Fagkonsulent/Fysioterapeut
99 42 00 24
line@inpo.no

Kontaktperson for
Vestland
Rogaland

