

NUAGE PLS



TRE FORSKJELLIGE KONFIGURASJONER

Nuage PLS leveres i tre ulike modeller, alle i kontrakt med NAV

- Nuage PLS – omslutter og støtter hele kroppen, voksne.
- Nuage PLS Active – omslutter og støtter sitteflaten og baksiden av ryggen, voksne.
- Nuage PLS Active XS – omslutter og støtter sitteflaten og baksiden av ryggen, ungdom og små voksne.



Nuage PLS

En komplett sitteløsning som tilbyr maksimal støtte fra topp til tå. Optimal komfort.

Art.nr. NPLS-NO , HMS art. nr. 294023

- Setebredde: 38 – 55 cm
- Setedybde: 40 – 55 cm
- Maks. brukervekt: 120 kg

Nuage PLS Active

Et sete som enkelt lar seg forlenge med hel leggstøtte (tilbehør) for støtte til hele kroppen. Kombinerer god komfort med maksimal fleksibilitet. Ideell for personer med stram hamstrings.

Art.nr. NPLSA-NO, HMS art. nr. 294021

- Setebredde: 38 – 55 cm
- Setedybde: 40 – 55 cm
- Maks. brukervekt: 120 kg

Hvem passer Nuage PLS til?

Nuage PLS er utviklet for passive personer som har begrensede eller ingen muligheter til å endre posisjon selv, eller opplever mye smerter ved sittende. Setesystemet følger personens individuelle kroppsfasong og gir komfortabel støtte i den foretrukne stillingen. De omfattende posisjoneringsmulighetene bidrar til en sitteløsning som gir optimalt støtte ut fra personens muligheter og behov, for eksempel bekkenskjevhet, kyfose eller benlengdeforskjell.

Nuage PLS på rullestolunderstell gir muligheter for en optimal løsning som kombinerer presis tilpassing, komfort og gode kjøreegenskaper.



Nuage PLS Active XS

Et sete for ungdom og mindre voksne. Enkel å forlenge med hel leggstøtte (tilbehør). Kombinerer god komfort med maksimal fleksibilitet.

Art.nr. NPLSAXS-NO, HMS art. nr. 294022

- Setebredde: 30 – 40 cm
- Setedybde: 40 – 50 cm
- Maks. brukervekt: 80 kg

Nuage PLS på ulike understell

Nuage PLS monteres på lbis rullestolunderstell og gir dermed de beste justeringsmuligheter og kjøreegenskaper i en og samme enhet. Ved spesifikke behov kan setet monteres på andre understell.



Nuage PLS Active montert på den elektriske rullestolen Puma 40.

POSISJONERING OG KOMFORT

Nuage PLS – svært komfortabelt setesystem med muligheter for god støtte til den passive rullestolbrukeren.

Ved å velge Nuage PLS, velger du maksimal fleksibilitet. Setet gir store muligheter for posisjonering og gode muligheter til justeringer ved endring i behov eller gjenbruk. Nuage PLS setesystemet monteres på rullestolunderstell for en komplett sitteløsning.



Ser du etter maksimal støtte og komfort i sittende stilling? Nuage PLS er utviklet med fokus på passive personer med behov for støtte, stabilitet, kroppsavgrensning og komfort.

Tilpassings- og gjenbruksvennlig

De ulike mulighetene i Nuage, sammen med stort tilbehørsortiment, gir gode muligheter for å tilpasse setet til et stort spekter av personer. Setet kan enkelt endres for å møte de spesifikke, og i noen tilfeller endrede, behovene til den enkelte. For å gjøre det enda enklere å tilpasse og gjenbruke Nuage PLS, benytter vi samme type trekomponenter og kun ett monteringsbeslag for hele setesystemet, sammen med nøye utvalgte tilbehør.

Fyllet i alle puter til Nuage PLS er laget av spagettiformet pinkumlatex som holdes sammen av multifibre. Det betyr at man uten problemer kan styre og tilpasse mengden fyll i putene via de ulike kamrene. Ønsker man selv å benytte en annen type fyll er dette også en mulighet.



Spagettiformet pinkumlatex

Omfattende posisjoneringsmuligheter

Setet og ryggen består begge av todelte treskall med justerbare stropper mellom. Både treskallene og stroppene kan monteres i ulike posisjoner slik at Nugae PLS kan tilpasses asymmetrisk i tillegg til i høyde, dybde og bredde. Dette gir mulighet til å tilpasse setet til personer med for eksempel kyfose, ulik benlengde, rotasjoner eller bekkenskjevhet. Med Nuage PLS kan du oppnå en komfortabel og individuelt tilpasset sittestilling til de aller fleste.



Asymmetrisk, justerbare stropper for individuell tilpassing.



Støtteputer i forkant kan fjernes ved behov for å senke låret.



Breddejustering av rygg.



Vinkling av de innebygde sidestøttene.



Justeringspunktene for understellet er intuitive og merket med skala for enklere og mer nøyaktig justering.



Bred hodestøtte med leddet feste gir god støtte og stabilitet.



Hodestøttefestet har memoryfunksjon som sikrer samme posisjon etter demontering.

TILBEHØR

Benstøtter



Hel leggstøtte

Armlener



P-formede armlenepads, 12 cm brede
(Standard på PLS -serien)

Hodestøtter




Hodestøtte
(Standard på PLS og PLS Active)

Bamboo terry trekk

Bamboo terry trekk er lettere, mykere og føles luftigere. Trekkene er også absorberende.



Til hele Nuage PLS setesystem

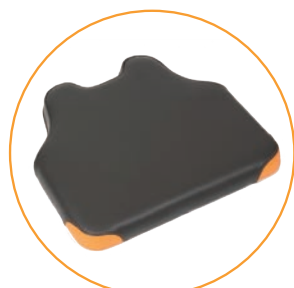

Fotplate
(Standard på PLS og PLS Active)



P-formede armlenepads
16 cm brede



Hodestøtte liten
(Standard på PLS Active XS)



Trekk til fleksible armlener



Fotplate liten
(Standard på PLS Active XS)



Fleksible armlener




Hodestøtte dråpeformet



Trekk til hodestøtte og
hodestøtte liten

Bord

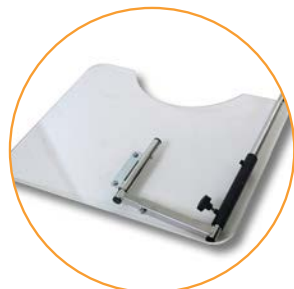

Transparent bord for aktiviteter,
støtte og avlastning.

Inkontinenstrekk



Inkontinenstrekk beskytter
stolputen.

Abduksjonspute



Alle Nuage PLS modellene kan leveres med
abduksjonsputer for posisjonering av ben.



Drivaggregat



Drivaggregat gjør det enklere å ta Nuage PLS ut på tur. Her er Nuage PLS vist med Empulse R20.

SPESIFIKASJONER

	Nuage PLS	Nuage PLS Active	Nuage PLS Active XS
Varenr.:	NPLS-NO	NPLSA-NO	NPLSAX-NO
HMS art.nr.:	294023	294021	294022
Maks. brukervekt:	120 kg	120 kg	80 kg
Setebredde:	38 – 55 cm	38 – 55 cm	30 - 40 cm
Setedybde:	40 – 55 cm	40 – 55 cm	40 - 50cm
Rygghøyde:	55 cm	55 cm	45 cm

Materialer

Trekk: Dartex

Fyll: Spaghetiformet fyll, fremstilt av multifibre og Pinskumlatex

Skall: Formstøpt, laminert bøketre med borrelås

Nuage PLS modellene er krasjtestet og godjent som passasjerseater i bil i henhold til ISO 7176-19

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.