



øvrebø rehab



Halvmåne 8A + bananpute 1 +
t-pute 60B + firkantpute 7A

Lasal posisjoneringsputer

Putene for alle



Bananpute 1A + bananpute 1 + firkantpute 7A



Halvmåne 8 + halvmåne 8A + t-pute 60B

Lasal posisjoneringsputer former seg godt etter kroppen og gir stabil og god støtte, uten å gi etter. Det spesielle fyllmaterialet, samme med putetrekk og overtrekk, gjør at puten raskt tilpasser seg til brukers kroppsform.

Fyllmaterialet i en tradisjonell pute er i varierende grad fjærende og gir derfor lett etter ved belastning. Ed tradisjonell pute sklir også lett unna og må legges tilbake. Brukeren får derfor ikke den hvile og avlastning som var meningen, og det blir merarbeid for personalet.

Lasalputene har unike egenskaper sammenlignet med vanlige puter og dyner. For ergo- og fysioterapeuter kan putene være et effektivt hjelpemiddel for å ivareta brukerens behov for 24 timers posisjonering. Tilpasning etter brukers utvikling kan lett gjøres fortløpende, ofte uten å måtte bytte puter.



Halvmåne 8 + trekantpute 2A + firkantpute 7



Halvmåne 8 + trekantpute 2C



Nakkepute 9B + trekantpute 2c + firkantpute 7C



T-pute 60 B

Lasalputene passer både til voksne og barn.

Et stort antall puter i ulike former og størrelser byr på ubegrensede muligheter til posisjonering, avlastning, terapi og hvile.

Mange av modellene er også egnet til å brukes i flere ulike situasjoner. Puter man bruker i sittende kan ofte også brukes ved posisjonering i seng. Det store modell utvalget gjør at Lasalputene kan kombineres og tilpasses de fleste behov innen posisjonering og stabilisering.

Lasalputen vil kunne gi god og behagelig støtte ved mange utfordringer man møter i arbeid med eldre og funksjonshemmede. Som alternativ til rullestolbord kan Lasalputene gi en god anatomisk understøtte for armer og hender. Ved demens vil noen brukere kunne oppleve ro og velvære ved hjelp av Lasalputene, samtidig som armer og hender kommer bort fra kroppen for å lette sirkulasjon og pust.



Nakkepute 9B + bananpute 1A + t-pute 60A
+ firkantpute 7A + basispute 42



Omfavner 10A



Lasal T-puter

Brukes som abduksjonspute mellom benene eller som støtte under knærne og på utsiden av knærne. T-puten brukes også ved mageleie hvor puten hever overkroppen til brukeren og gir mulighet for mer bevegelsesfrihet.



Lasal trekantputer

Trekantputen er en forholdsvis fast pute som brukes til å stabilisere langs kroppen i sittende eller liggende stilling, eller som fyll i sengen.

Avhengig av størrelsen kan trekantputen også brukes som støtte under knærne, langs bena eller under føttene.



Lasal Bananputer

Brukes til leiring i hvilesituasjoner eller i forbindelse med trening og terapeutiske øvelser.

Putene skaper ro og trygghet hos brukeren fordi de omkranser store deler av kroppen.



Lasal sitte- og avlastningsputer

Avlastningsputen er kileformede med runde hjørner. Kan brukes for å bygge høyde eller mellom knærne. Sitteputene er større puter med kileform som kan brukes ved balansetrening både for barn og voksne. Kan formes til en hvilestol til et lite barn og for et større barn blir det et stabilt mageleie der de kan rette ut ryggen og lette pusten.



Lasal halvmåneputer

Brukes som støtte bak nakke og skuldre for en bruker med kyfose, fleksibel og stabil støtte for bol og armer som erstatning for rullestolsbord.

Liten halvmåne fungerer som en stabil bolstøtte og fyller ut der det trengs litt ekstra støtte.



Lasal hode-/nakkeputer

Nakkekravene gir støtte både bak hode/nakke og på sidene.

Stor og liten nakkepute brukes til støtte av hode og nakke, men kan også brukes til å leiring og armstøtte for små barn.

U-fornet nakkestøtte er en tynn pute som er lett å forme rundt hals og nakke.



Lasal firkantputer

Firkantputen er en allroundpute som brukes i mange situasjoner.

Stabilisering av armer eller ben ved at puten former seg etter kroppen og underlaget.

De mindre putene fyller ut tomrom mot ryggstøtte eller seng. De større støtter og stabiliserer mellom eller under ben i rygg- eller sideliggende, under føtter, mageleie for små barn...




Lasal Basisputer

Basisputen er utviklet til brukere med behov for ekstra støtte og stabilisering i hverdagen. Putens kjeGLEformede fasong og fylldighet omkranser og stabiliserer brukeren i både sittende, halvsittende og liggende stilling.



Puten former seg etter brukeren og "låser" seg i formen, det gjør det mulig å røre på seg ut å gli ut av posisjon. Det er derfor viktig at basisputen ikke er for stor for brukerne.

Basisputene kan med fordel komplettere sittestillingen ved hjelp av andre Lasalputer.


Artikkelnummer og måltegninger:

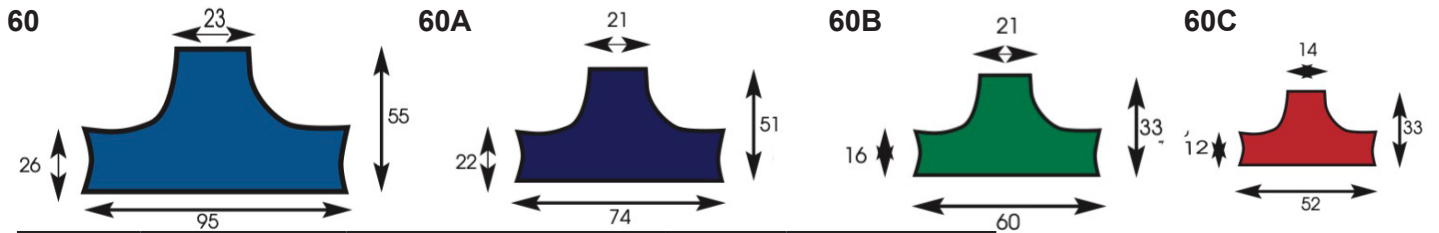


Hj.m.nr	Art.nr	Beskrivelse	Hj.m.nr Trekk	Art.nr Trekk
156857	0305-6001-120	Lasal T-pute 60 m/trekk	163508	0305-6001-020
034677	0305-6011-120	Lasal T-pute 60A m/trekk	156149	0305-6011-020
034537	0305-6021-120	Lasal T-pute 60B m/trekk	147549	0305-6021-020
034676	0305-6031-120	Lasal T-pute 60C m/trekk	144147	0305-6031-020
060097	0305-6041-120	Lasal T-pute 60D m/trekk	141118	0305-6041-020

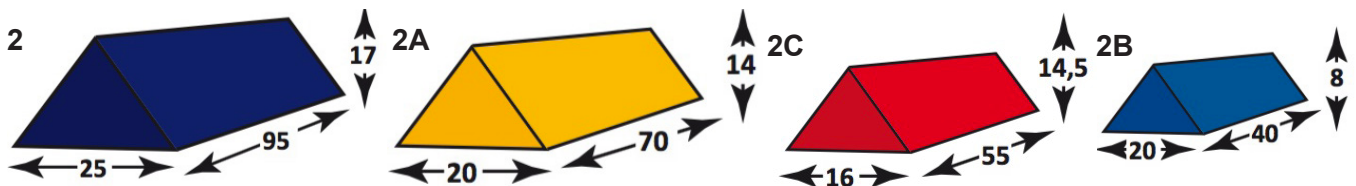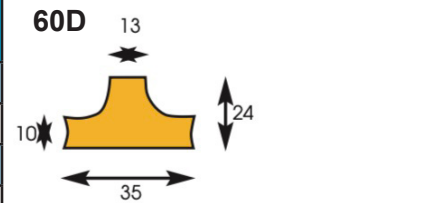


060054	0305-201-120	Lasal Trekantpute 2 m/trekk	155117	0305-201-020
034026	0305-211-120	Lasal Trekantpute 2A m/trekk	156860	0305-211-020
031850	0305-221-120	Lasal Trekantpute 2B m/trekk	149390	0305-221-020
163596	0305-231-120	Lasal Trekantpute 2C m/trekk	169963	0305-231-020

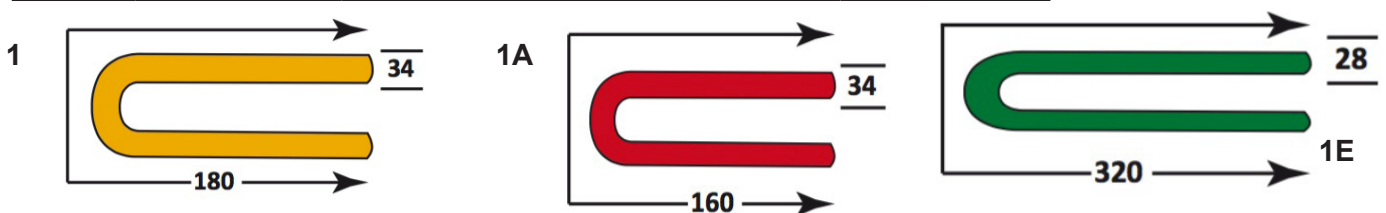


100863	0305-101-120	Lasal Bananpute 1 m/trekk	034679	0305-101-020
048691	0305-111-120	Lasal Bananpute 1A m/trekk	144229	0305-111-020
059941	0305-151-120	Lasal Bananpute 1E m/trekk	162329	0305-151-020

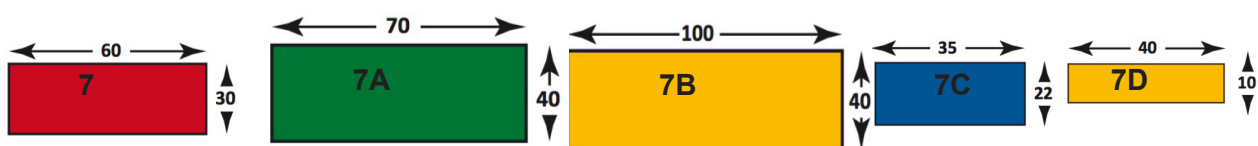


059625	0305-701-120	Lasal Firkantpute 7 m/trekk	147548	0305-701-020
059907	0305-711-120	Lasal Firkantpute 7A m/trekk	145366	0305-711-020
063832	0305-721-120	Lasal Firkantpute 7B m/trekk	149213	0305-721-020
034878	0305-731-120	Lasal Firkantpute 7C m/trekk	158098	0305-731-020
060086	0305-741-120	Lasal Firkantpute 7D m/trekk	145367	0305-741-000

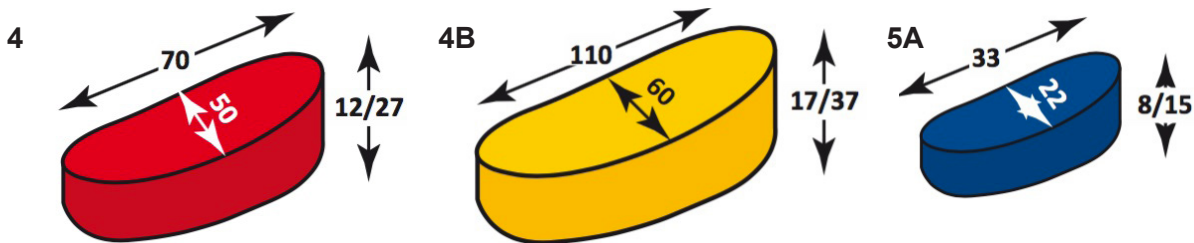


Hj.m.nr	Art.nr	Beskrivelse	Hj.m.nr Trekk	Art.nr Trekk
034226	0305-401-120	Lasal høy sittepute 4 m/trekk	034679	0305-401-020
048634	0305-421-120	Lasal lang sittepute 4B m/trekk	166754	0305-421-020
069635	0305-511-120	Lasal Avlastningspute 5A m/trekk		0305-511-020

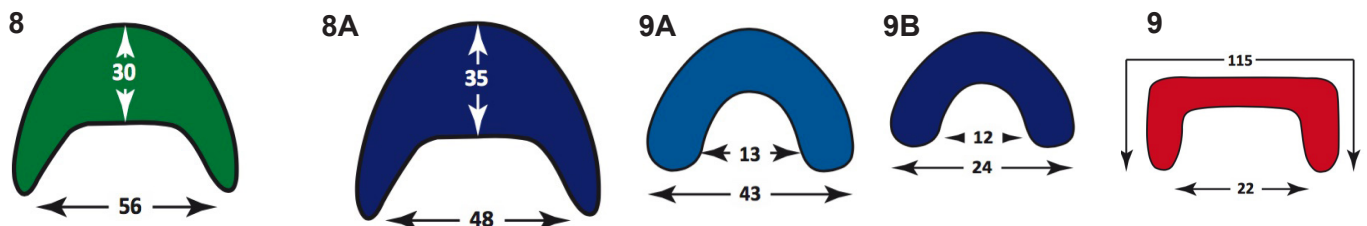

043743	0305-801-120	Lasal Halvmånepte 8 m/trekk	034623	0305-801-020
034560	0305-811-120	Lasal Halvmånepute 8A m/trekk	034625	0305-811-020
034252	0305-911-120	Lasal Nakkepute 9A m/trekk	141115	0305-911-020
134519	0305-921-120	Lasal Nakkepute 9B m/trekk	134520	0305-921-020
048524	0305-901-120	Lasal U-formet nakkepute 9 m/trekk	141118	0305-901-020

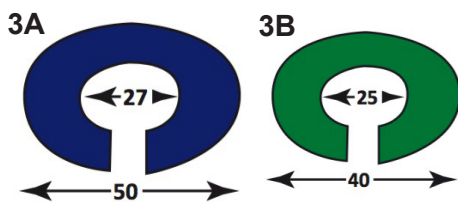


064025	0305-311-120	Lasal Nakkekrave 3A m/trekk	148539	0305-311-020
034631	0305-321-120	Lasal Nakkekrave 3B m/trekk	140784	0305-321-020
069492	0317-3201-120	Lasal Basispute 32 m/trekk	069492	0317-3201-020
048718	0317-4201-120	Lasal Basispute 42 m/trekk	145202	0317-4201-020
054829	0317-5201-120	Lasal Basispute 52 m/trekk	194977	0317-5201-020

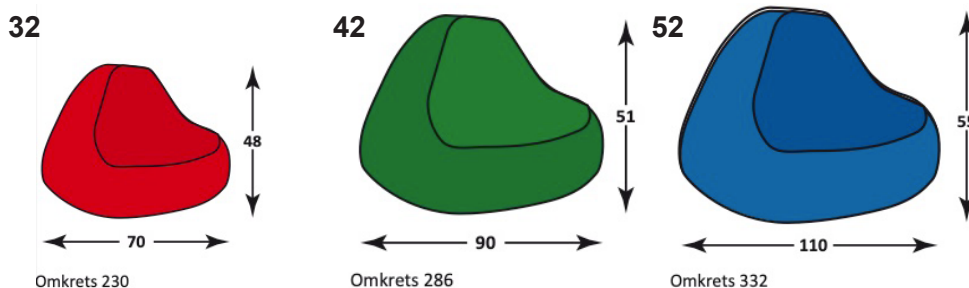


Produktfakta:

Fyllmateriale	Ekspanderende polystyrenkuler.
Puteoverflate	PU-belagt flammehemmende polyestertekstil. Mugg- og soppresistent.
Putetrekk	100% Øko-tex perlebomull. Antibakterielt behandlet.
Hygienetrekk	PU-behandlet flammehemmende polyestertekstil. Mugg- og soppresistent.
Rengjøring	Bomullstrekk vaskes på 60 grader og kan tørkes i tørketrommelen. Hygienetrekk vaskes på 95 grader og kan tørkes i tørketrommelen. Putene desinfiseres eller tørkes av med mildt såpevann.
Oppbevaring	Må ikke oppbevares i direkte sollys eller utsettes for kraftig fukt eller lukt.

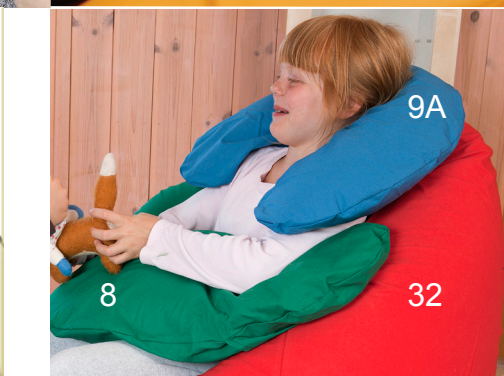

Hode og nakkeputer

Puter fylt med polysterenkuler for stabil støtte av hode og nakke

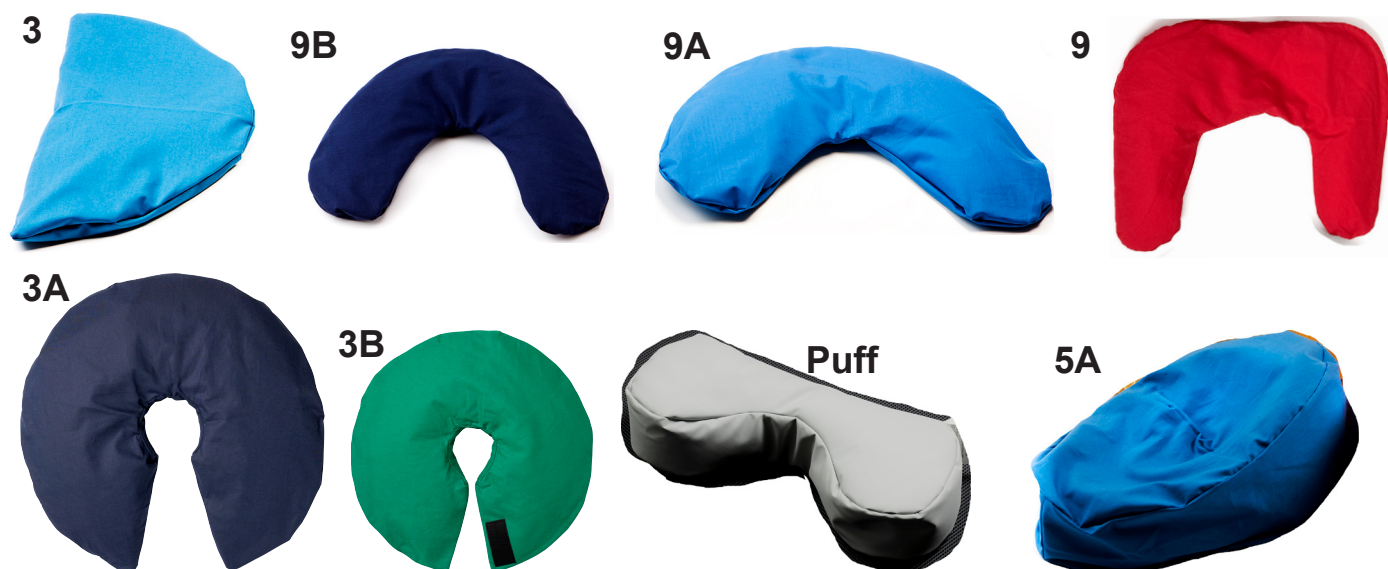

Hj.m.nr	Art.nr	Beskrivelse	Hj.m.nr Trek	Art.nr Trek
063544	0305-301-120	Lasal Halvmånepute 3 m/trekk	155164	0305-301-020
034252	0305-911-120	Lasal Nakkepute 9A m/trekk	141115	0305-911-020
134519	0305-921-120	Lasal Nakkepute 9B m/trekk	134520	0305-921-020
048524	0305-901-120	Lasal U-format nakkepute 9 m/trekk	141118	0305-901-020
064025	0305-311-120	Lasal Nakkekrave 3A m/trekk	148539	0305-311-020
034631	0305-321-120	Lasal Nakkekrave 3B m/trekk	140784	0305-321-020
265960	056-T90	Nakkepuff m/trekk		056-T9T
253509	0305-511-120	Hodestøtte asymmetrisk 5A m/trekk		0305-511-020