




DECUBITUSTERAPI-SITTDYNA

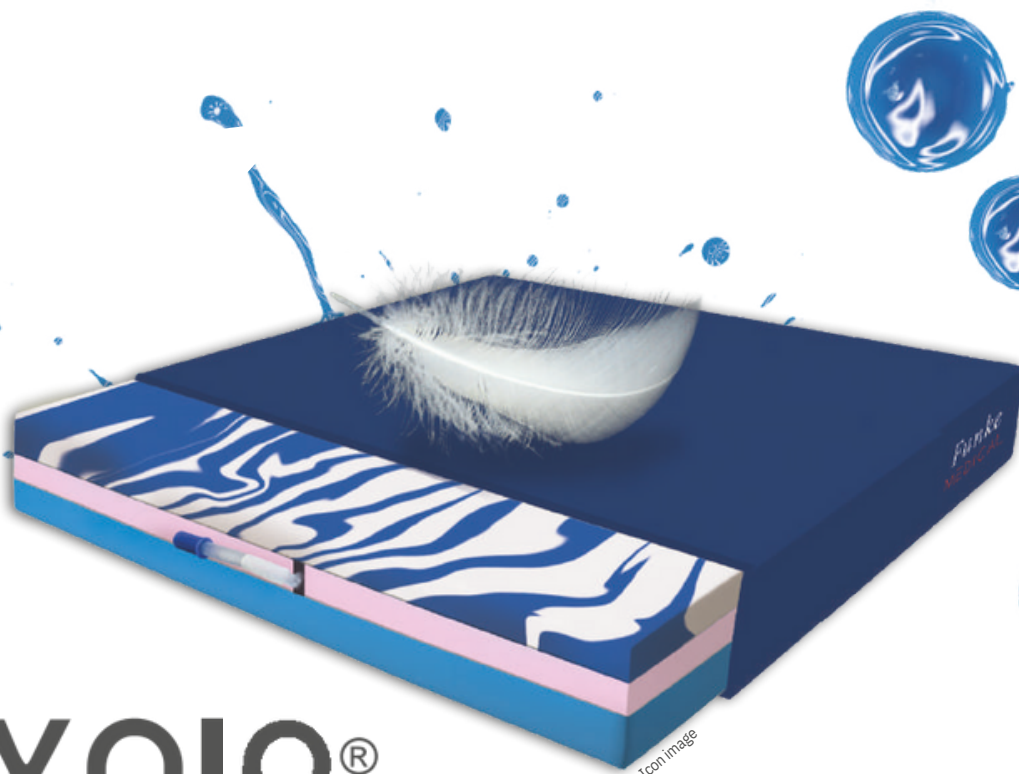

XAIR[®]
HYBRID

- SITTDYNA MED LUFTCELLER -
FÖR AKTIVA RULLSTOLSANVÄNDARE

Din återförsäljare:



Palliance AB
www.palliance.se
kundservice@palliance.se
+46 8 28 75 00
Vasa Kyrkogata 1
411 27 Göteborg



A. Breuer
Annabel Breuer
Landslagsspelare
-Rullstolsbasket-

2010: Silver Världsmästerskapet (Birmingham, GB)
2011: Guld Europamästerskapet (Nazareth, IL)
2012: Guld Sommar-Paralympics (London, GB)
2013: Silver Europamästerskapet (Frankfurt, DE)
2014: Silver Världsmästerskapet (Toronto, CA)
2015: Guld Europamästerskapet (Worcester, GB)
2016: Silver Sommar-Paralympics (Rio de Janeiro, BR)
2017: Silver Europamästerskapet (Tenerife, ES)
2018: Brons Världsmästerskapet (Hamburg, DE)
2019: Brons Europamästerskapet (Rotterdam, NL)






Decubitusterapi-sittdyna med luftceller för aktiva rullstolsanvändare



*2

- Autoklaverbar enligt RKI*1 riktlinjer
- Användbar för smärterapi
- Upp till klass 4 (Seiler / EPUAP)
- Väldigt hög risk (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

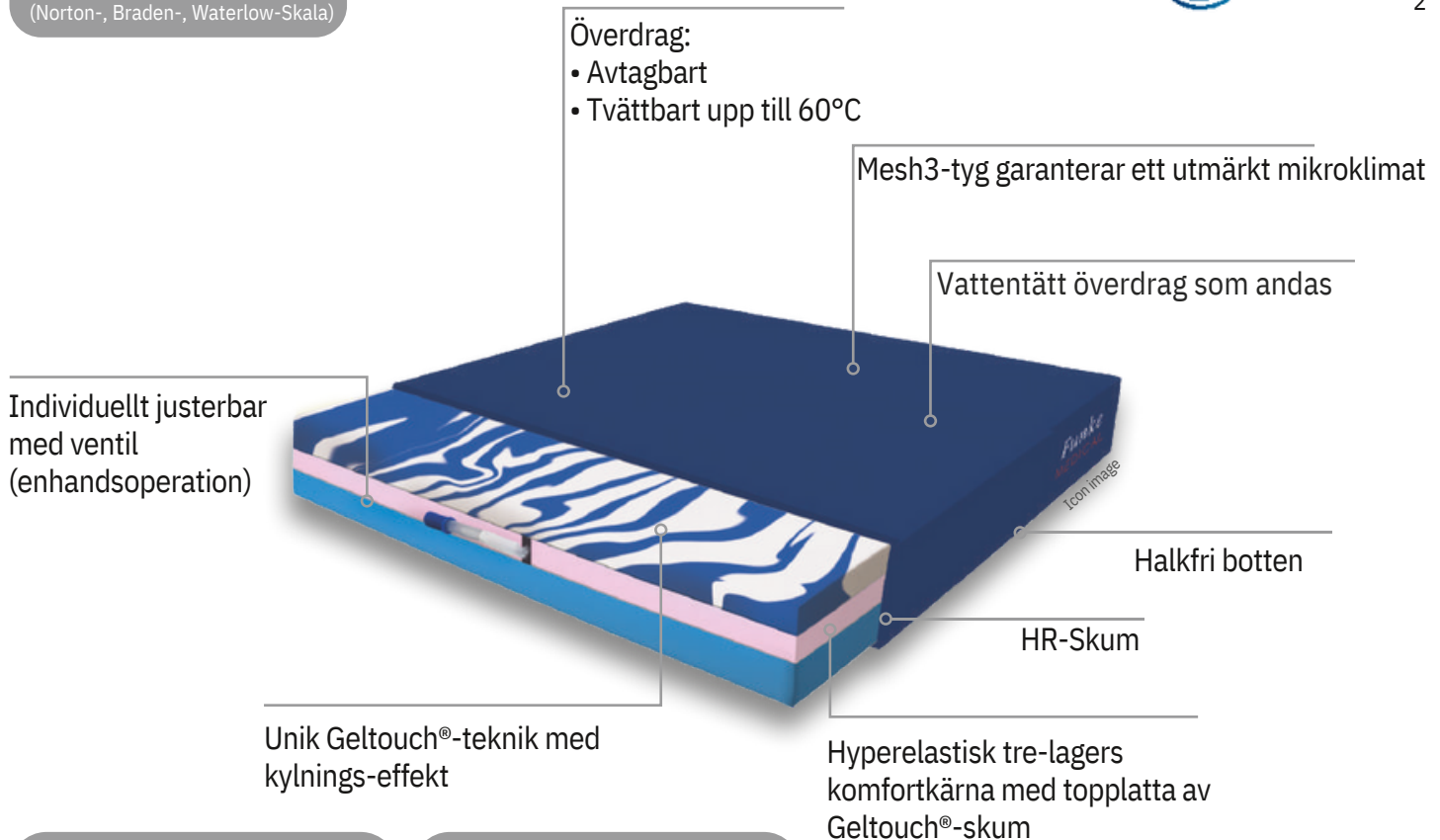

Storlek i cm:	Artikelnr.
Bredd x Längd x Höjd	
38 x 40 x 8	XAIR3840
40 x 40 x 8	XAIR4040
40 x 42 x 8	XAIR4042
41 x 46 x 8	XAIR4146
42 x 40 x 8	XAIR4240
42 x 42 x 8	XAIR4242
42 x 44 x 8	XAIR4244
42 x 46 x 8	XAIR4246
42 x 52 x 8	XAIR4252
45 x 42 x 8	XAIR4542

Storlek i cm:	Artikelnr.
Bredd x Längd x Höjd	
45 x 44 x 8	XAIR4544
45 x 46 x 8	XAIR4546
46 x 51 x 8	XAIR4651
48 x 42 x 8	XAIR4842
48 x 44 x 8	XAIR4844
48 x 46 x 8	XAIR4846
50 x 42 x 8	XAIR5042
51 x 44 x 8	XAIR5144
51 x 46 x 8	XAIR5146
52 x 52 x 8	XAIR5252



Andas genom öppna celler av Geltouch®-skum + HR-skum + viskosskum.	Autoklaverbar.	Överdragsmaterialet är virus- och bakteriesäkert, enligt ASTM 1670 + 1671.	Vattentät med andningsförmåga.	Optimerad tryckavlastning.	Bi-elastiskt överdrag för att minimera förskjutningskrafter.	CE märkning MDR 2017/745.	Underhållsfri.	Flamskydd DIN EN 597 (I+II) CRIB 5.	Patientvikt: 0 – 200 kg.	Väldigt lätt.

*1 Robert-Koch-Institute (RKI) är en del av det federala hälsoministeriet i Tyskland och ansvarar för förebyggande och kontroll av sjukdomar.
*2 Garanti gäller för funktionella egenskaper hos dynans kärna (pro-rata-garanti)!



-SITTDYNA MED LUFTCELLER-
För aktiva rullstolsanvändare!




Handtag för enkel hantering

Mjukt skyddsöverdrag med kardborrefäste



1

Lyft skyddsöverdraget.

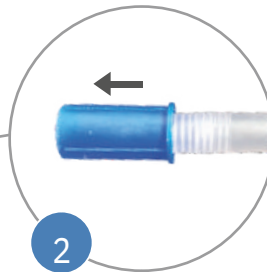

2

Öppna ventilen genom att dra i det blå låset och vänta ca. 30 sekunder, tills luftcellerna har blåsts upp automatiskt.
(Ventillocket kan inte ramla av.)




3

Stäng ventillocket genom att trycka in det blå locket.



4

Lägg sittdynan på rullstolen eller sätet.
(Handtaget ska peka framåt och pilarna ska peka uppåt.)
Sitt på sittdynan.

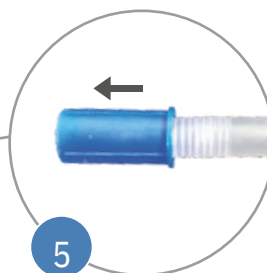

5


Öppna försiktigt ventilen igen tills den perfekta sittkomforten uppnås.



6

Stäng ventilen och skyddsöverdraget.


-SITTDYNA MED LUFTCELLER-
För aktiva rullstolsanvändare!

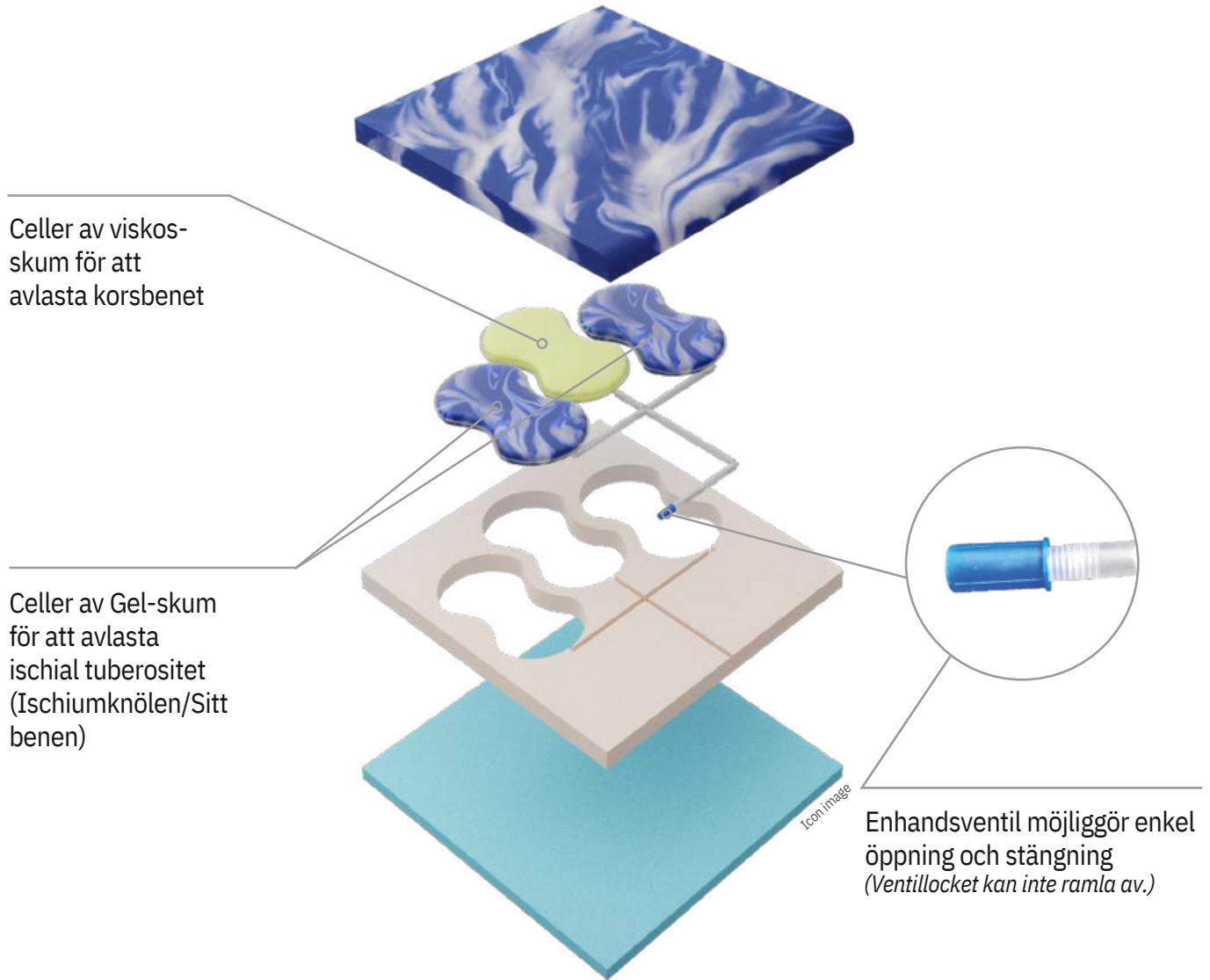

Celler av viskos-
skum för att
avlasta korsbenet

Celler av Gel-skum
för att avlasta
ischial tuberositet
(Ischiumknölen/Sitt
benen)

Enhandsventil möjliggör enkel
öppning och stängning
(Ventillocket kan inte ramla av.)

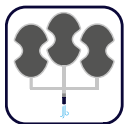

3-kammar-sittdyna som ger
optimal tryckavlastning



Individuellt justerbar för
perfekt sittkomfort



Ingen pump eller andra
verktyg behövs.



Snabb och enkel
anpassning till yttre
tryckförhållanden



Ingen risk för fel tack vare
självuppblåsande FOAM-
INCELL-TEKNIK



Väldigt lätt - 70 % lägre vikt än
konventionella sittdynor med
luftceller